

novani

LIFT PRO

novani

BEAR MINI



Gebruikshandleiding



novani
BEAR MINI



Gebruikshandleiding

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Door de instructies nauwkeurig te volgen, voorkomt u schade aan het product en verkleint u het risico op persoonlijk letsel. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties en/of letsel. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



Afgeraden in de volgende situaties

1. Zwangere vrouwen, minderjarigen onder de 18 jaar, niet gebruiken.
2. Gebruik dit niet bij patiënten met hartziekten of diabetes, of bij mensen met een pacemaker, interne defibrillator, zenuwstimulator, insulinepomp en andere elektronische instrumenten;
3. Gebruik geen metalen implantaten (zoals een metalen spiraaltje) binnen het toepassingsgebied;
4. Gebruik dit niet als u kanker heeft, vermoeden van kanker of precancereuze laesies, vooral huidprecancereuze naevi (carnivore naevi);
5. Ernstige gelijktijdige ziekten zoals hartziekte, epilepsie, AIDS en schade aan het immuunsysteem niet gebruiken;
6. Gebruik dit niet als er huidaandoeningen zijn zoals zweren, psoriasis, eczeem, uitslag, terugkerende herpes simplex, enz.;
7. Gebruik dit niet als u een litteken, slecht genezende wond of kwetsbare huid heeft;
8. Laserhuidverjonging, chemische peeling en wondgenezing, vermijd gebruik of gebruik na volledige genezing, als er meer medische problemen zijn, raadpleeg een arts;
9. Binnen het toepassingsgebied van gebruik, tijdelijke fillers (hyaluronzuur, waterlichte naald, proteïnedraad) en permanente fillers (prothese neusvergroting en kinvergroting) zijn meer dan drie maanden geïmplantéerd en kunnen worden gebruikt na overleg met uw arts;
10. Gebruik dit niet voor mensen met metaallergie;
11. Gebruik dit niet voor mensen met gevoelige huid;
12. Stop bij gebruik onmiddellijk in geval van ongemak.

Onderhoud en service

1. Bescherm het instrument tegen vocht. Reinig het instrument niet in de vaatwasser of magnetron. Voorkom dat er water in de USB-poort en oplaadpoort komt.
2. Trek de stekker van het instrument uit voordat u het schoonmaakt.
3. Gebruik geen scherpe of corrosieve, vluchtige oplosmiddelen.
4. U kunt een zachte doek of make-up watten gebruiken die nat, supergekoeld of lauwwarm is.
5. Was het instrument niet direct met water, omdat dit waterschade aan het instrument zal veroorzaken.

Afgeraden in de volgende situaties

1. Zwangere vrouwen, minderjarigen onder de 18 jaar, niet gebruiken.
2. Gebruik dit niet bij patiënten met hartziekten of diabetes, of bij mensen met een pacemaker, interne defibrillator, zenuwstimulator, insulinepomp en andere elektronische instrumenten;
3. Gebruik geen metalen implantaten (zoals een metalen spiraaltje) binnen het toepassingsgebied;
4. Gebruik dit niet als u kanker heeft, vermoeden van kanker of precancereuze laesies, vooral huidprecancereuze naevi (carnivore naevi);
5. Ernstige gelijktijdige ziekten zoals hartziekte, epilepsie, AIDS en schade aan het immuunsysteem niet gebruiken;
6. Gebruik dit niet als er huidaandoeningen zijn zoals zweren, psoriasis, eczeem, uitslag, terugkerende herpes simplex, enz.;
7. Gebruik dit niet als u een litteken, slecht genezende wond of kwetsbare huid heeft;
8. Laserhuidverjonging, chemische peeling en wondgenezing, vermijd gebruik of gebruik na volledige genezing, als er meer medische problemen zijn, raadpleeg een arts;
9. Binnen het toepassingsgebied van gebruik, tijdelijke fillers (hyaluronzuur, waterlichte naald, proteïnedraad) en permanente fillers (prothese neusvergroting en kinvergroting) zijn meer dan drie maanden geïmplantéerd en kunnen worden gebruikt na overleg met uw arts;
10. Gebruik dit niet voor mensen met metaallergie;
11. Gebruik dit niet voor mensen met gevoelige huid;
12. Stop bij gebruik onmiddellijk in geval van ongemak.

Onderhoud en service

1. Bescherm het instrument tegen vocht. Reinig het instrument niet in de vaatwasser of magnetron. Voorkom dat er water in de USB-poort en oplaadpoort komt.
2. Trek de stekker van het instrument uit voordat u het schoonmaakt.
3. Gebruik geen scherpe of corrosieve, vluchtige oplosmiddelen.
4. U kunt een zachte doek of make-up watten gebruiken die nat, supergekoeld of lauwwarm is.
5. Was het instrument niet direct met water, omdat dit waterschade aan het instrument zal veroorzaken.

Afgeraden in de volgende situaties

1. Zwangere vrouwen, minderjarigen onder de 18 jaar, niet gebruiken.
2. Gebruik dit niet bij patiënten met hartziekten of diabetes, of bij mensen met een pacemaker, interne defibrillator, zenuwstimulator, insulinepomp en andere elektronische instrumenten;
3. Gebruik geen metalen implantaten (zoals een metalen spiraaltje) binnen het toepassingsgebied;
4. Gebruik dit niet als u kanker heeft, vermoeden van kanker of precancereuze laesies, vooral huidprecancereuze naevi (carnivore naevi);
5. Ernstige gelijktijdige ziekten zoals hartziekte, epilepsie, AIDS en schade aan het immuunsysteem niet gebruiken;
6. Gebruik dit niet als er huidaandoeningen zijn zoals zweren, psoriasis, eczeem, uitslag, terugkerende herpes simplex, enz.;
7. Gebruik dit niet als u een litteken, slecht genezende wond of kwetsbare huid heeft;
8. Laserhuidverjonging, chemische peeling en wondgenezing, vermijd gebruik of gebruik na volledige genezing, als er meer medische problemen zijn, raadpleeg een arts;
9. Binnen het toepassingsgebied van gebruik, tijdelijke fillers (hyaluronzuur, waterlichte naald, proteïnedraad) en permanente fillers (prothese neusvergroting en kinvergroting) zijn meer dan drie maanden geïmplantéerd en kunnen worden gebruikt na overleg met uw arts;
10. Gebruik dit niet voor mensen met metaallergie;
11. Gebruik dit niet voor mensen met gevoelige huid;
12. Stop bij gebruik onmiddellijk in geval van ongemak.

Onderhoud en service

1. Bescherm het instrument tegen vocht. Reinig het instrument niet in de vaatwasser of magnetron. Voorkom dat er water in de USB-poort en oplaadpoort komt.
2. Trek de stekker van het instrument uit voordat u het schoonmaakt.
3. Gebruik geen scherpe of corrosieve, vluchtige oplosmiddelen.
4. U kunt een zachte doek of make-up watten gebruiken die nat, supergekoeld of lauwwarm is.
5. Was het instrument niet direct met water, omdat dit waterschade aan het instrument zal veroorzaken.

Omschrijving van onderdelen

- 1. Aan/uit-knop en sterktebediening omhoog/omlaag
 - 2. Microstroombehandelingskoppen
 - 3. USB-interface
-
- A. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
 - B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te zetten.
 - C. Druk op de aan/uit-knop om de gewenste intensiteit te selecteren. De Bear Pro is voorzien van 5 intensiteitsstanden.
 - D. Dubbele piepjes bij het verplaatsen naar een nieuwe positie op de huid.
 - E. Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, verschijnen er 2 lichtjes om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen.



Gebruiksstappen

Stap 1: Reinig uw huid met een olievrije reiniger en breng een serum aan op het gewenste gebied of zorg ervoor dat uw huid vochtig is, anders zul je geen schokken voelen.

Stap 2: Zet de Bear Pro aan en kies de gewenste intensiteit.

Stap 3: Glijd met de Bear Pro over uw hals, kaaklijn, wangen en voorhoofd.

Stap 4: Gebruik de Bear Pro 1x per dag gedurende 5-15 minuten en voer de behandeling een paar keer per week uit. Na 60 dagen zal je huid er stevig uitzien en pigmentatie en rimpels zullen aanzienlijk verminderd worden.

***Opmerking:** Als u tijdens de behandeling een tintelend gevoel krijgt, kunt u gewoon meer serum aanbrengen.

Tips voor gebruik



1. Masseer vanaf de kin naar de jukbeenderen in een opwaartse beweging.
2. Masseer in een opwaartse beweging van de jukbeenderen tot aan de uiteinde van uw ogen.
3. Masseer in een opwaartse beweging vanaf uw hals tot aan de kin.
4. Masseer uw voorhoofd van beneden naar boven.

Productspecificaties

Type: Novani Bear mini

Voltage: 2.4V

Output voltage: 5V

Product afmeting: 57mm*52mm*24mm

Power: 0.15W

Netto gewicht: 45 gr.

Batterij capaciteit: 3.7V/170mAh

Inhoud verpakking: Novani Bear Mini, USB-oplaadkabel, opbergzakje, reinigingsdoekje, gebruikshandleiding.

Oplaadtijd: 1.5 uur

Gebruikstijd: 3 uur

Beschikt over 3 verschillende standen

Stand 1 Current gear: 270 μ A

Stand 2 Current gear: 340 μ A

Stand 3 Current gear: 390 μ A

De eenheden zijn microampère. Een Microampère is gelijk aan 10-6 A. Ofwel 0,000 001 ampère.

novani
LIFT PRO



Gebruikshandleiding

Functie Introductie

7 Kleuren Huidverjongingsapparaat voor Gezicht & Nek is een compact handapparaat voor de behandeling van rimpels over het hele gezicht. Het combineert 7 kleuren LED-licht, vibratie en verwarming om rimpels en andere huidproblemen aan te pakken.

(A) Vibratie

Het bevat 3 massage standen met verschillende energieniveaus. De CLEAN-modus kan de poriën reinigen en je huid schoon en stralend houden; De EMS-modus kan je huid ontspannen, helpt je huidverzorgingsproducten op te nemen en vermindert fijne lijntjes en rimpels; De HOT-modus kan de verslachte huid verstevigen en je huid verjongen.



(B) Verwarming

45±5°C constante temperatuur tijdens de behandeling bevordert de opname van huidverzorgingsproducten. De juiste temperatuur maakt huidverzorging ook comfortabeler.

(C) 7 Kleur LED-licht

GROEN LICHT (525nm) Anti-veroudering & bevordert collageenproductie

ROOD LICHT (630nm) Verzacht rimpels en fijne lijntjes

BLAUW LICHT (415nm) Kalmeert ontstekingen en gevoelige huid

PAARS LICHT (390nm) Bevordert lymfedrainage

GEEL LICHT (590nm) Vermindert roodheid en gezwollen haarvaten

CYAN LICHT (490nm) Vermindert huidspanning

WIT LICHT (mix) Ontspannt de huid & versnelt de groei en genezing van huidcellen



Productspecificaties







Gebruiksstappen

- Stap 1: Na het wassen van je gezicht, breng je je favoriete huidverzorgingsproducten gelijkmatig aan op je gezicht.
- Stap 2: Druk de aan/uit-knop 2 seconden in om het apparaat in te schakelen.
- Stap 3: Druk op de knop om de lichtmodus en massagemodus te selecteren volgens je behoeften.
- Stap 4: Plaats het massagehoofd tegen je huid en masseer van onder naar boven.
- Stap 5: Druk de aan/uit-knop 2 seconden in om het apparaat na gebruik uit te schakelen.

Opmerkingen

- Dit apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- Het massagehoofd moet tegen de huid van de gebruiker worden gehouden voordat het begint te trillen.
- Als er gedurende één minuut geen handeling wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch uit.

Tips voor gebruik

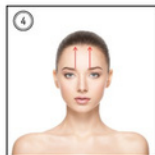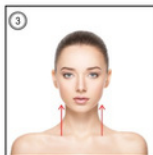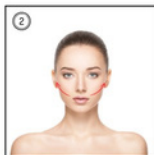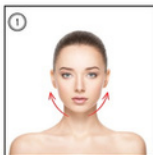

1. Masseer vanaf de kin naar de jukbeenderen in een opwaartse beweging.
2. Masseer in een opwaartse beweging van de jukbeenderen tot aan de uiteinde van uw ogen.
3. Masseer in een opwaartse beweging vanaf uw hals tot aan de kin.
4. Masseer uw voorhoofd van beneden naar boven.

Veiligheidsmaatregelen

1. Het is over het algemeen niet raadzaam voor mensen die een gezichtsoperatie hebben ondergaan, een onderhuidse metalen implantaat hebben en degenen die zwanger zijn om dit product te gebruiken.
2. Veeg de massagekop na gebruik af met tissues of doek. Was niet met water.
3. Plaats niet in de badkamer of andere vochtige plaatsen, omdat het gemakkelijk is om kortsluiting te veroorzaken.
4. Gebruik geen bijtende oplossing (alcohol, bananenolie, benzine, nagellakremover, enz.) om het apparaat af te vegen, wat kan leiden tot scheuren, verkleuring van componenten en het falen van het product of de anderen.
5. Elke modus kan slechts één keer per dag worden gebruikt, en het wordt aanbevolen dat drie modi achtereenvolgens één keer per dag worden gebruikt.

Productspecificaties

Productnaam: Novani ProLift Huidverjongingsapparaat

Oplaadspanning: 5V

Nominaal vermogen: 2,5W

Oplaadstroom: 1A

Batterijmodel nr.: 602535

Batterijcapaciteit: 500mAh

Oplaadtijd: 2 uur

Gebruikstijd: 4 uur

Productafmetingen: 133*78*31 mm

***Het apparaat schakelt na 4 minuten over op de standby-modus en schakelt automatisch uit na 1 minuut inactiviteit.**