



Gefeliciteerd met de aankoop van uw professionele elektrische eeltverwijderaar

Wij adviseren u deze handleiding zorgvuldig te lezen, voordat u de eeltverwijderaar gebruikt.

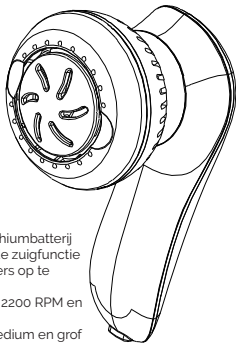

5V DC
USB-oplading Lithiumbatterij
Heeft ingebouwde zuigfunctie om de huidschilfers op te vangen
Twee snelheden: 2200 RPM en 2500 RPM
Drie vijlen: fijn, medium en grof

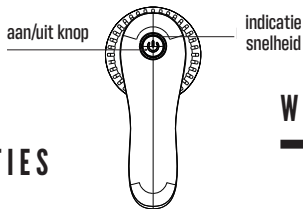


INSTRUCTIES

Kies een van de drie vijlen en bevestig deze simpelweg op het apparaat (zie afbeelding 1). Druk kort op de aan/uit knop. Wanneer het indicatorlicht rood is, begint de vijl op ultra-hoge snelheid te draaien.

Als je nog een keer op de aan/uitknop drukt springt de indicator op groen en de vijl draait nu op hogesnelheid. Voel zelf aan wat het fijnste is.

Als je de eeltverwijderaar uit wilt zetten, druk dan op de aan/uit knop en het apparaat schakelt vanzelf uit.

WAT ZIT EROP EN ERAAN?

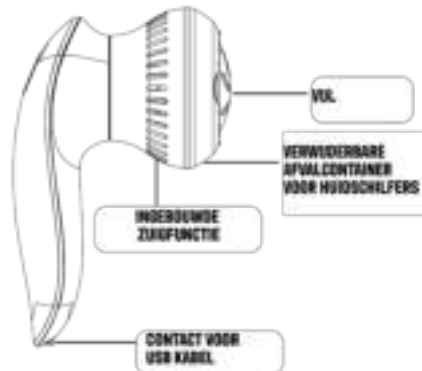

PRODUCTINFORMATIE


Je houdt het apparaat simpelweg een paar seconden lichtjes tegen de droge, harde huid en het wordt meteen op een veilige manier gladgestreken. De druk moet niet ongemakkelijk voelen, verminder anders de druk.

Bij huidklachten kunt u de snelheid aanpassen en kies voor de juiste vijl. Blijven de klachten, dan kunt u beter stoppen met het gebruik.

Laadt het apparaat op tijd op.


Maak na gebruik de container direct leeg.

De romp is niet waterdicht.

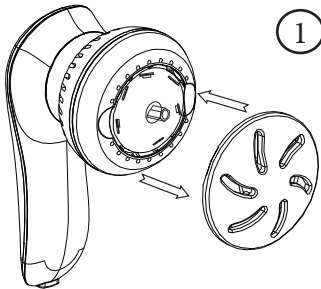

DE VIJL PLAATSEN

Als de eeltverwijderaar uit is, bevestig dan een van de vijlen op de kop van het apparaat. Het klikt als het ware gewoon vast.

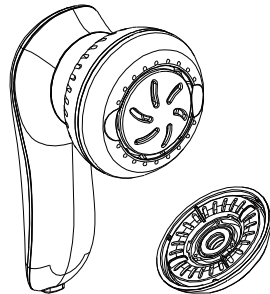

REINIGING

Verwijder de vijl door tegen de klok in te draaien, gebruik de meegeleverde schoonmaakborstel om de huidschilfers aan de binnenkant te verwijderen. Maak de vijl onder de kraan schoon en droog af. Sluit het apparaat af en ruim het op.