

## Meet object- / kamertemperatuur

1. Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld.
2. Houd  $\frac{M}{\text{M}}$  3 seconden ingedrukt tot "M" wordt weergegeven
3. Richt de thermometer op het object dat u wilt meten of de lucht en hou een afstand van 0-3m tussen de sonde en het te meten object.
4. Druk "SCAN" knop in en u krijgt de meting.




## Hoe mute ik de thermometer?

1. Laat de thermometer aan
2. Hou de volumeknop " $\frac{M}{\text{M}}$ " 3 seconden lang ingedrukt om te veranderen van modus.



## Hoe geheugen checken (35 metingen)?

1. Laat de thermometer aan
2. Druk kort op " $\frac{M}{\text{M}}$ " om naar de geheugenmodus te gaan.
3. Druk nogmaals op deze knop om de 35 geheugensets te controleren. Als er geen waarde is, dan wordt "M" weergegeven

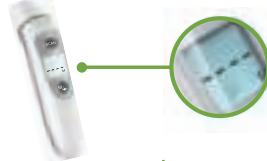


## Hoe verander ik °C/°F ?

1. Open het batterijdeksel
2. Gebruik de schakelaar om te veranderen van °C naar °F




## Gebruiksaanwijzing Infrarood Thermometer

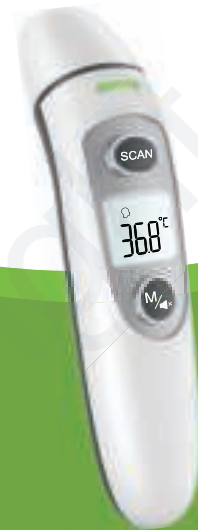

## Let op

- \*Als het wenkbrauwgebied bedekt is met haar, zweet of vuil, maak het gebied dan vooraf schoon en neem het in meting na 20 minuten.
- \*Zorg er altijd voor dat de gebruiker en de thermometer voorafgaand aan de meting ten minste 30 minuten in dezelfde ruimte zijn geweest.
- \*Reinig de gehoorgang voordat u de temperatuur meet.
- \*Kinderen van 1 jaar tot volwassenen: trek het oor naar achteren en omhoog om ervoor te zorgen dat de gehoorgang recht is, richt op het trommelvlies.

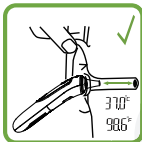

\*De temperatuurwaarde gemeten door het voorhoofd kan verschillen van de waarde gemeten op het gehoor, dat is redelijk.

\*Maak na het meten van de oortemperatuur de sensor van de temperatuursonde op tijd schoon en let op het gebruik van een magere wattenstaafje om schoon te maken, als het moeilijk schoon te maken is, dop het in een beetje alcohol om schoon te maken. Na het schoonmaken meer dan 15 min laten staan voor gebruik. **De sonde is niet waterdicht, laat de vloeistof niet in de sonde doordringen.**



## Meet de temperatuur via het voorhoofd



1. Plaats de sonde van de thermometer in het midden van het voorhoofd, houd contact, houd de knop "SCAN" ingedrukt en scan het voorhoofd.



2. Laat dan de knop los, de pieptoon is te horen, u kunt nu de waarde aflezen.

## Meet de temperatuur via het oor



Verwijder het sondekopje



Trek het oor naar achteren en omhoog, plaats de sonde goed in de gehoorgang.



Druk op de "SCAN" knop