




SHOPLACE

GEBRUIKSAANWIJZING

Face Lift Huidverjongingsapparaat

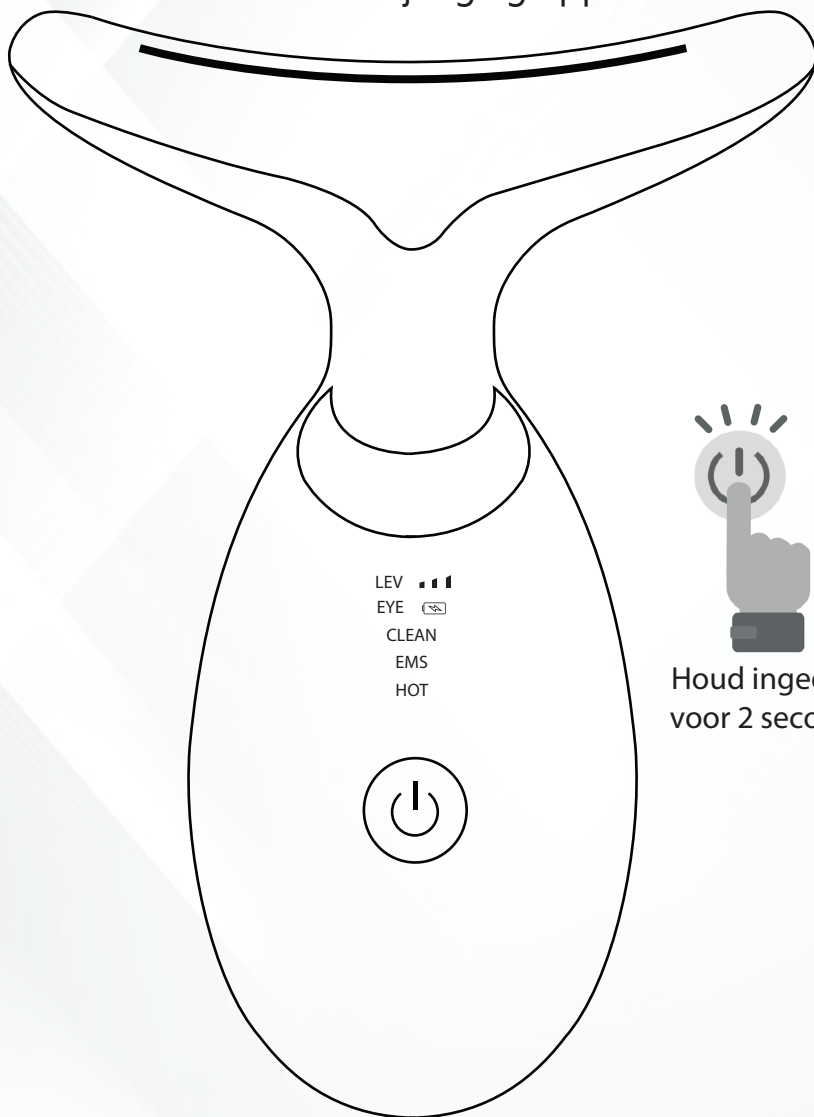

Houd ingedrukt
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C

RoHS CE FC

Inhoud

- 1. Introductie
 - 1.1. Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
 - 1.2. Ontvangen van het product
 - 1.3. Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. LED Lichttherapie
- 5. Gebruiksaanwijzingen
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Face Lift Huidverjongingsapparaat zorgvuldig door en bewaar deze goed. Volg de veiligheidsinstructies om het product veilig te gebruiken. Heb je vragen over het product of iets anders? Neem dan contact met ons op via: ✉support@shoplace.nl
- Het Shoplace Face Lift Huidverjongingsapparaat is ontworpen om de verslachte huid te verstevigen, huidveroudering te verminderen en de algehele huidconditie te verbeteren. Het helpt bij het verminderen van rimpels, fijne lijntjes en tekenen van vermoeidheid in het gezicht. Het apparaat beschikt over twee LED-standen (rood en blauw), die elk een specifiek effect op de huid hebben.
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig. Druk kort op de aan/uit-knop om het in te schakelen; het apparaat start automatisch in de eerste stand. De indicatoren tonen welke behandeling actief is. Dankzij de intelligente touchfunctie werkt het apparaat alleen wanneer het in contact komt met de gezichtshuid.
- De verwarmende massagekop geeft hoogfrequente trillingen af die bijdragen aan de verzorging en verbetering van de huid op lange termijn. Gebruik het apparaat 2 à 3 keer per week als onderdeel van je wekelijkse gezichtsverzorging en om te genieten van een ontspannende massage. Het Shoplace Face Lift Huidverjongingsapparaat is effectief, pijnloos en eenvoudig in gebruik.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Face Lift Huidverjongingsapparaat

- Als dit de eerste keer is dat je het Face Lift Huidverjongingsapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te lezen. Let goed op de mogelijke gevolgen en risico's die kunnen ontstaan bij misbruik van het apparaat. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke en/of mentale beperking.
- Gebruik het Face Lift Huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven.
- Het Face Lift Huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade en/of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie van het Face Lift Huidverjongingsapparaat.
- Het Face Lift Huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere en droge plek wordt opgeladen en houd het regelmatig in de gaten.
- Het Face Lift Huidverjongingsapparaat kan alleen droog of vochtig worden gebruikt. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met olie, serum en/of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat niet onder stromend water wordt gehouden of erin wordt ondergedompeld.

- Gebruik en bewaar het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het huidverjongingsapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
 - De tepels
 - De lippen
 - De oren
 - De penis en balzak
 - De vagina

Ontvangen van het product


1.2

- Controleer de inhoud van het pakket bij ontvangst. Lijkt het apparaat beschadigd of ontbreken er onderdelen, neem dan contact met ons op en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace Face Lift Huidverjongingsapparaat
- **Accessoires:**
 - 1x Beschermingskap
 - 1x USB-oplaadkabel
 - 1x Shoplace opbergzak
 - 1x Handleiding

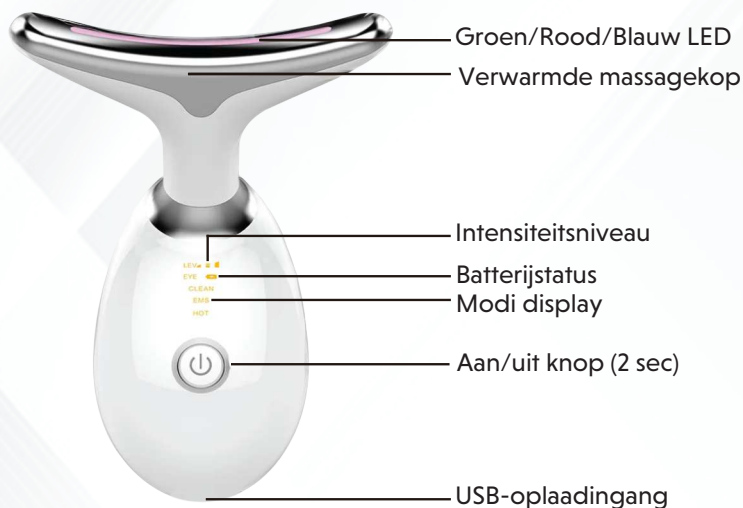

Grootte	120 x 89 x 47 mm
Gewicht	105 gram
Materiaal	ABS
Kleur	Wit
Batterij	Lithium 500mAh 3.7V
Aantal LED-standen	3: Rood - Blauw - Groen
Gebruiksduur	60 minuten
Oplaadtijd	120 minuten
Invoerspanning	USB Micro DC 5V
Temperatuur	42-45°C
Vibratie frequentie	7000/min

Aanbevelingen

- Zet het Face Lift Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit-knop kort in te drukken.
- Reinig het Face Lift Huidverjongingsapparaat na elk gebruik met een licht vochtige doek. Volg de reinigingsinstructies in sectie 6.
- Druk het Face Lift Huidverjongingsapparaat niet te hard op de huid om rode of geïrriteerde plekken te voorkomen.
- Gebruik het Face Lift Huidverjongingsapparaat pas wanneer het volledig is opgeladen, na 60 minuten opladen.
- Gebruik het Face Lift Huidverjongingsapparaat niet wanneer het is aangesloten op de USB-oplaadkabel. Trek de kabel voor gebruik los.
- Lees deze handleiding goed door voor je eerste behandeling om te ontdekken welke LED-lichttherapie stand je kunt gebruiken.
- Plaats het Face Lift Huidverjongingsapparaat in een hoek van 45 graden op de huid voor het beste resultaat.
- Neem een warme douche en/of ontspan jezelf om optimaal gebruik te maken van het apparaat.
- Gebruik het Face Lift Huidverjongingsapparaat ook in combinatie met olie, serum en/of crème.
- Het Face Lift Huidverjongingsapparaat activeert pas wanneer het direct op de gezichtshuid wordt geplaatst

● - Rood LED-stand

De rode LED-stand vermindert rimpels en gezichtslijnen, herstelt beschadigde huid en bevordert een stralende uitstraling.

● - Blauw LED-stand

De blauwe LED-stand verfijnt grove poriën, verstevigt een slappe huid en zorgt voor een verjongde uitstraling.

● - Groen LED-stand

De groene LED-stand bevordert de microcirculatie van de lymfe en bloed, vermindert huidzwellingen en kalmeert de huid.

Gebruiksaanwijzingen

5

1. Zet het Face Lift Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit-knop kort in te drukken. Het apparaat gaat automatisch naar de eerste stand. Druk eenmalig om naar de tweede of derde stand te schakelen.
2. Reinig je nek en breng een olie, serum of crème aan op het te behandelen gebied.
3. Maak op- en neerwaartse bewegingen rond je nek om de olie, serum of crème goed in te masseren.
4. Masseer de nek gedurende 30 tot 60 seconden.
5. Breng een vochtinbrengende crème aan op je wangen of voorhoofd.
6. Masseer de crème in door schuinwaartse bewegingen op je wangen te maken, of op- en neerwaartse bewegingen op je voorhoofd.
7. Het wordt aanbevolen om gemiddeld 5 minuten te besteden aan het behandelen van zowel je nek als gezicht.

- Berg het Face Lift Huidverjongingsapparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats het daarna naar een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig het Face Lift Huidverjongingsapparaat na ieder gebruik. Het apparaat mag niet met water schoongemaakt worden, maar alleen met een licht vochtige doek.
- **Stappenplan reinigen:**
 1. Zet het Face Lift Huidverjongingsapparaat uit.
 2. Verwijder eventueel de opbergkap en/of USB-kabel uit het apparaat.
 3. Reinig het Face Lift Huidverjongingsapparaat met een licht vochtige doek. Wrijf er voorzichtig overheen en voorkom dat er gebruiksafdrukken achterblijven.
 4. Zorg dat het apparaat niet met water of andere vloeistoffen wordt schoongemaakt.
 5. Reinig de overige delen van het apparaat met de licht vochtige doek om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
 6. Berg het apparaat op in de meegeleverde opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar support@shoplace.nl*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie moet binnen 1 jaar na de aankoopdatum ingeroepen worden.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging door vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging door oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat veroorzaakt door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van vloeibare middelen.
- Beschadiging door gebruik op verboden of sterk afgeraden plekken.
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen aan het lichaam wanneer de klant het Face Lift Huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.