



Elektrische Bamboo Tandenborstel

Handleiding



Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen	2
Algemene Informatie	5
Opbergen en opladen van de tandenborstel	6
Oplaad instructies.....	6
Onderhoudsinstructies	6
Tandenborstel in gebruik nemen	7
Poetstijd	7
Beschrijving van de Functies.....	7
Productspecificatie.....	8
Mededeling ter bescherming van het milieu.....	8

Bedankt voor het kiezen van onze **BAMBRUSH Elektrische Bamboe Tandeborstel**.

Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door optimaal gebruik te maken van onze tandenborstel. Wij geloven dat deze tandenborstel u en uw gezin enorm veel gemak en comfort zal brengen in het leven.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als je tijdens het gebruik problemen ondervindt, neem dan gerust contact op met ons op.

Gebruikte iconen



Dit pictogram wordt gebruikt voor:

- Potentieel gevaar voor ernstig of erger letsel.
- Kans op letsel.
- Waarschuwingen voor mogelijk ernstig of erger letsel.



Dit pictogram wordt gebruikt voor handelingen die gebruikers niet zouden moeten doen.



Dit pictogram wordt gebruikt om de gebruikers eraan te herinneren welke stappen ze moeten uitvoeren om de veiligheid te waarborgen.

Volg alle veiligheidsmaatregelen om het risico op defecten, schokken, verwondingen, brand, overlijden en schade aan de tandenborstel of je eigendommen te verminderen.



BELANGRIJK:



Controleer de volledige tandenborstel/snoer regelmatig op schade. Een beschadigde of niet functionerende tandenborstel moet niet langer gebruikt worden. Indien de tandenborstel/snoer niet meer werkt, neem dan contact op met de verkoper. Wijzig of repareer de tandenborstel niet. Dit kan brand, een elektrische schok of verwondingen veroorzaken.



Deze tandenborstel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 3 jaar. De tandenborstel kan gebruikt worden door kinderen, door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking, of door personen zonder ervaring of kennis wanneer zij de tandenborstel onder toezicht en op een veilige manier kunnen gebruiken of instructies hebben ontvangen over het gebruik van de tandenborstel op een veilige manier en op de hoogte zijn van eventuele risico's door gebruik van de tandenborstel.



Het reinigen en onderhoud mag niet door kinderen gebeuren.



Kinderen mogen niet met de tandenborstel spelen.



Gebruik deze tandenborstel alleen waarvoor hij gebruikt dient te worden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik geen accessoires die niet door de producent aanbevolen worden. Gebruik enkel de oplader die met de tandenborstel geleverd werd.



WAARSCHUWING:



Plaats de oplader niet in water of vloeistof of op een plaats waar deze in het bad of in de wastafel kan vallen. Haal de oplader nooit uit het water wanneer deze erin is gevallen.



Deze tandenborstel bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Het toestel niet openen en demonteren. Gelieve voor het recyclen van de batterij het volledige toestel weg te gooien volgens de lokale milieuwetgeving. Door het handvat te openen wordt de tandenborstel onbruikbaar en vervalt de garantie.



Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact houdt u altijd de stekker vast, nooit het snoer. Raak de stekker niet aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.



Wanneer u onder behandeling bent voor dentale zorg, raadpleeg uw tandarts voor gebruik van deze tandenborstel.



Deze tandenborstel is een persoonlijk verzorgingsapparaat en is niet bedoeld door meerdere patiënten in een tandartsenpraktijk of instituut.



Voorkom dat de opzetborstel kapot gaat en kleine deeltjes produceert die kunnen leiden tot stikken of de tanden kunnen beschadigen:



Zorg bij elk gebruik ervoor dat de opzetborstel goed past. Stop met het gebruik van de tandenborstel als de opzetborstel niet meer goed past. Gebruik de tandenborstel nooit zonder opzetborstel.



Als het handvat van de tandenborstel is gevallen, dient de opzetborstel voor het volgende gebruik te worden vervangen, ook als er geen zichtbare schade is.



Vervang de opzetborstel elke 3 maanden of sneller indien de borstelkop versleten is.



Maak de opzetborstel na elk gebruik goed schoon. Goed schoonmaken zorgt ervoor dat de tandenborstel veilig en langdurig functioneel kan worden gebruikt.



Voorzichtig:



Demonteer de tandenborstel niet, tenzij hij buiten gebruik is. Dit kan brand, schokken of letsel veroorzaken.



Een ongeluk of letsel kan gebeuren als kinderen of baby's de tandenborstel gebruiken en de onderdelen inslikken.

**Voorzichtig:**

Als je de tandenborstel lange tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Of het zal ervoor zorgen dat de isolatieprestaties verslechteren en dit kan resulteren in elektrische schokken of brand.

**Voorzichtig:**


Druk de borstelkop niet te lang tegen de tanden of het tandvlees. Plaats de plastic onderdelen van de tandenborstel of de opzetborstel niet rechtstreeks op de tanden, omdat dit uw tanden en tandvlees kan beschadigen.



Deel de borstelkop niet met familieleden of anderen, omdat dit een infectie of ontsteking kan veroorzaken.



Plaats geen metalen voorwerpen, zoals munten of paperclips tussen de borstelkop en het lichaam van de tandenborstel.

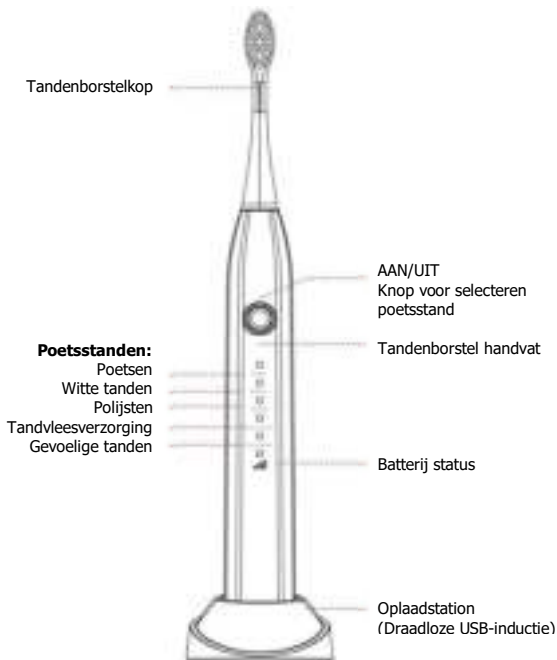

Opbergen en opladen van de tandenborstel

1. Je moet de tandenborstel volledig opladen voor zowel het eerste gebruik (nieuw gekocht) en ook als je hem 3 maanden of langer niet hebt gebruikt.
2. De geschikte gebruikstemperatuur ligt tussen 5 en 35°C. Als de temperatuur hoger of lager is, kan de oplader niet goed of helemaal niet opladen.
3. Het is normaal dat de temperatuur van de tandenborstel stijgt tijdens gebruik en tijdens het opladen.
4. Het oplaadstation is niet waterdicht. Spoel het oplaadstation niet af met water om storingen tijdens het opladen te voorkomen.

Oplaad instructies

1. **Oplaadtijd:** De oplaadtijd is ongeveer 7 uur.
2. **Oplaadstatus:** Nadat je de tandenborstel op de oplader hebt gezet zullen de LED lampjes 3x van beneden naar boven knipperen, daarna zal de oplaad indicator oranje gaan knipperen. Zolang de oplader oranje knippert wordt de tandenborstel opgeladen.
3. **Waarschuwing voor bijna lege batterij:** Als je op de AAN/UIT-knop drukt en het oranje licht gaat knipperen, dan is de batterij bijna leeg. Na ongeveer 2 seconden knipperen, zal het lichtje weer uitgaan.

Onderhoudsinstructies



Reinig de borstelkop:

Reinig de borstelkop en borstelharen na gebruik en laat deze op natuurlijke wijze drogen.

Trek niet aan de borstelharen, omdat deze hierdoor vervormd zullen worden, waardoor de borstelharen gaan afvallen.



Reinigen van de tandenborstelhouder:

Spoel af met water en laat het op natuurlijke wijze drogen.

Gebruik geen water met een temperatuur hoger dan 40°C en gebruik geen zure vloeistoffen voor het reinigen.



Wisselen van de borstelkop:

De tandarts adviseert om de borstelkop elke drie maanden te vervangen.

Tandenborstel in gebruik nemen



Plaats de borstelkop voorzichtig op de tandenborstel. Na het plaatsen blijft er een kleine opening zichtbaar die nodig is voor het gebruik van de trilfunctie.



De borstelharen en het tandvles moeten een hoek van 45 graden vormen. Beweeg langzaam tijdens het gebruik.



Breng de benodigde hoeveelheid tandpasta aan op de borstel.



Pak het handvat voorzichtig vast terwijl je het langzaam met cirkelvormige bewegingen beweegt. Forceer de tandenborstel niet en schrob er niet mee.



Maak de borstel nat voordat je hem in de mond stopt. Druk 0,5 sec op de schakelaar en kies de geschikte modus.



Spoel je mond goed met water na het poetsen.

Poetstijd



Tandartsen raden aan om minimaal 2 x per dag minimaal 2 minuten te poetsen. Tijdens het poetsen voel je na iedere 30 seconden een korte stop. Dit is om je eraan te herinneren dat je de vier secties in jouw mond even lang moet behandelen om de beste reinigingsresultaten te bereiken.

Beschrijving van de Functies



2 minuten timer



3 weken poetsen zonder opladen



Afspoelen van het volledig lichaam



Inductie opladen



5 poetsstanden



Tynex-borstelharen

1. Geheugenfunctie: De tandenborstelchip onthoudt de laatste poetsmodus en start met deze poetsmodus de volgende keer dat hij wordt ingeschakeld.
2. Druk op de AAN/UIT knop om de tandenborstel aan te zetten. Druk vervolgens nogmaals op de AAN/UIT knop om een andere poetsstand te kiezen.
3. Tijdens het poetsen zal de tandenborstel om de 30 seconden even kort stoppen als indicatie om het volgende gedeelte van het gebit te gaan poetsen.
4. Na 2 minuten zal de tandenborstel automatisch uit gaan.

Poetsstanden:

- **Clean:** Voor dagelijkse gebitsreiniging.
- **White:** Ideaal voor een gezonde glimlach en tandplak verwijdering.
- **Polish:** Polijst en maakt de tanden witter met een lagere trillingsfrequentie.
- **Gum Care:** Voor gevoelige tanden, zacht voor tanden en tandvlees.
- **Sensitive:** Geschikt voor licht gevoelige tanden en tandvlees.

Productspecificatie

Productnaam:	BAMBRUSH Elektrische Bamboe Tandeborstel
Nominale spanning:	3,7 V
Nominaal vermogen:	1,8 W
Oplaadspanning:	DC 5V 500mA
Nominaal Oplaadvermogen:	2,5W
Trillingsfrequentie:	basis (laag) 31000 keer/min $\pm 10\%$; 38000 keer/min $\pm 10\%$
Waterdichtheid:	IPX8
Batterij:	Wanneer de batterij volledig opgeladen is en je 2x per dag 2 minuten poetst hoef je de batterij pas na 3 weken weer op te laden.

Mededeling ter bescherming van het milieu



Li-ion

Deze tandenborstel bevat oplaadbare batterijen en/of recycleerbaar elektrisch afval. Om het milieu te beschermen, gooi de tandenborstel niet weg bij het huishoudelijk afval. U kunt uw tandenborstel inleveren bij een goedgekeurd recyclingpunt in overeenstemming met lokale regelgeving.