

beurer

MG 18

NL



NL **Mini-massager**
Gebruikshandleiding



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



NEDERLANDS

1. Reglementair gebruik

Het instrument is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door ondeskundig of lichtzinnig gebruik ontstaan is.

Dit apparaat is bestemd voor de massage van afzonderlijke lichaamsdelen van het menselijk lichaam. Gebruik het massageapparaat niet, wanneer één of meer van de volgende waarschuwingen op u van toepassing is.

WAARSCHUWINGA

Gebruik het massageapparaat

- niet bij kinderen,
- niet bij ziekelijke veranderingen of verwonding aan het te masseren lichaamsgebied (bijvoorbeeld verbranding, open wonden, littekens, huiduitslag of ander letsel),
- niet bij aandoeningen aan de bloedsomloop of hoofdpijn,
- niet op het hoofd, botten (bijvoorbeeld gewrichten, ruggengraat) of andere gevoelige plekken op het lichaam,
- niet na operaties,
- niet tijdens de zwangerschap,
- niet na inname van medicijnen of alcohol (beperkt waarnemingsvermogen),
- niet bij het bedienen van machines,
- alleen uitwendig.

Dit apparaat is niet bestemd voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of een gebrek

aan ervaring en/of aan kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon. Er dient op gelet te worden, dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Het gebruik van dit apparaat vervangt niet een bezoek aan en behandeling door een arts.

Raadpleeg voor het gebruik van het massageapparaat uw dokter,

- wanneer u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen draagt,
- bij pijn met onbekende oorzaak,
- indien u niet zeker weet, of het apparaat voor u geschikt is.

Aanwijzing

De massage dient te allen tijde als aangenaam en ontspannend te worden ervaren. Breek de massage af of wijzig uw positie of de persdruk, indien u de massage als pijnlijk of onaangenaam ervaart.

2. Veiligheidsvoorschriften


WAARSCHUWINGA

- Stel vóór gebruik vast of het apparaat en de accessoires geen zichtbare schade vertonen. Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet en neem contact op met uw dealer of met de vermelde klanten service.
- Gebruik geen hulpstukken, die niet door de fabrikant geadviseerd werden resp. als hulpstuk werden aangeboden.
- Open of repareer het apparaat in geen geval, anders kan een foutloze werking niet meer worden gegarandeerd. Bij het niet naleven van de aanwijzingen vervalt de garantie. Wendt u zich voor reparaties tot de klantenservice van Beurer of tot een geautoriseerde handelaar.

3. Bediening

Batterijen plaatsen resp. vervangen:

- Draai het deksel van het batterijvak tegen de klok in open.
- Plaats conform de markering drie alkaline- of normale batterijen van het type AAA in het batterijvak. Let hierbij absoluut op de juiste richting van de batterijpolen!
- Plaats het deksel van het batterijvak terug op het batterijvak. Zorg er hierbij absoluut voor dat het deksel juist wordt aangebracht!

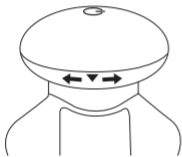

⏻ aan / uit

Tips voor de omgang met batterijen

Zorg ervoor dat batterijen niet in de handen van kinderen terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond nemen en inslikken. Dit kan tot ernstige schade aan de gezondheid leiden. In dit geval onmiddellijk een arts opzoeken!

- Normale batterijen mogen niet opgeladen, verhit of in open vuur worden geworpen (explosiegevaar!).
- Vervang alle batterijen altijd tegelijk en gebruik batterijen van hetzelfde type en gebruik geen accu's.
- Uitlopende batterijen kunnen schade aan het toestel veroorzaken. Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, neem de batterijen dan uit het batterijvak.
- Gebruik geen accu's!

4. Apparaat reinigen en onderhouden

Uw masseerapparaat is onderhoudsvrij. Alleen de buitenbehuizing dient regelmatig te worden gereinigd. Verwijder voor het reinigen de batterijen uit het batterijvak.

Reinig uw mini-massage-apparaat voorzichtig en alleen met een licht vochtige doek.

- Gebruik geen reinigings- of oplosmiddel.
- Houd het apparaat in geen geval onder water, omdat anders vloeistofbinnen kan dringen en het apparaat beschadigt.

5. Verwijdering

Verwijder het toestel conform het Besluit Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten 2002/96/EC – WEEE (“Waste Electrical and Electronic Equipment”). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde instanties voor afvalverwijdering.



De gebruikte, volkomen lege batterijen en accu's moeten via de speciaal aangegeven inzamelbakken, de inzamelpunten voor gevaarlijk afval of via de elektriciteitshandelaar worden verwijderd. U bent wettelijk verplicht de batterijen te verwijderen.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen die schadelijke stoffen bevatten: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.

