
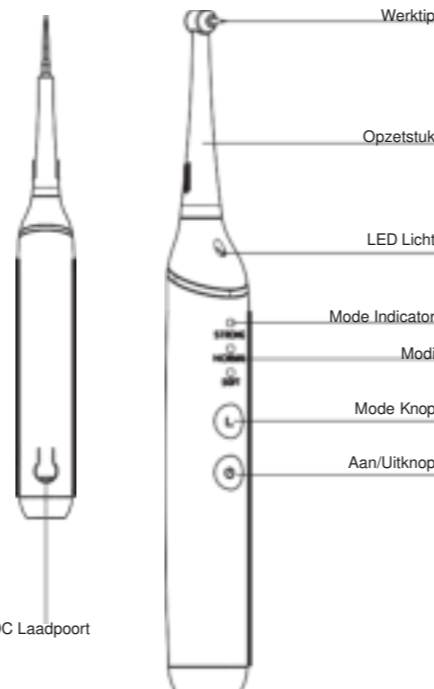






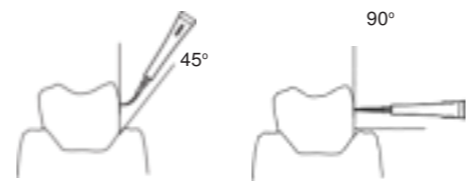




Gebruiksaanwijzing		Product Overzicht		Het opzetstuk verwisselen
<p align="center">BOME</p>  <p align="center">Tandsteenverwijderaar</p>	<p><i>Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.</i></p> <p align="center">Product Introductie</p> <p>Het apparaat maakt gebruik van hoogfrequente trillingen om tandsteen, rookvlekken, thee- en koffieplekken en meer effectief van tanden te verwijderen, waardoor uw schone en gezonde tanden weer terug komen. Het apparaat is uitgerust met 3 reinigingskoppen, voor zowel schoonmaken als polijsten. De 3 reinigingsmodi voldoen aan verschillende behoeften van verschillende gebruikers. Bovendien maken het compacte ontwerp en de intuïtieve bediening het apparaat tot een perfect mondverzorgingsinstrument voor thuisgebruik.</p> <p align="center">Voorzorgsmaatregelen</p> <ol style="list-style-type: none"> Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Buiten bereik van kinderen houden om letsel te voorkomen. Dompel de behuizing van het apparaat niet onder in water. Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Niet in vuur werpen, opladen, gebruiken of achterlaten in een omgeving met hoge temperaturen. Raak de werktip niet aan terwijl het apparaat is ingeschakeld. Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is. 		 <p>Voor de reiniging van het tandoppervlak</p> <p>Voor de reiniging tussen tanden en kiezen</p> <p>Voor de verwijdering van verkleuringen en tandplak</p> <p align="center">Opladen</p> <ol style="list-style-type: none"> Als de batterij bijna leeg is, knippen de 3 modusindicatoren groen. Verbind het apparaat met een 5V / 1A-adapter (niet meegeleverd) via de DC-laadkabel. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact. De 3 modusindicatoren knippen groen tijdens het opladen en gaan automatisch uit zodra het opladen is voltooid. 	<p align="center">Het opzetstuk verwisselen</p>  <p>Koppelen: Maak een hoek van ongeveer 45° tussen de werkpunt en de voorkant van het apparaat, druk de reinigingskop naar beneden en draai dan tegen de klok in totdat deze stopt. <i>Opmerking: Raak de werktip niet aan om letsel te voorkomen.</i></p> <p>Ontkoppelen: Draai met de klok mee om het opzetstuk te verwijderen.</p>

Aan de slag				Specificaties
<p align="center">Aan de slag</p>  <p>1. Kies en monteer het gewenste opzetstuk.</p>  <p>2. Reinig de werktip met stromend water of alcohol.</p>	 <p>3. Druk op de aan / uitknop om het apparaat in te schakelen. Het LED-lampje gaat automatisch aan. De standaardmodus is de zachte modus.</p>  <p>4. Druk op de Mode-knop om een modus te kiezen. Er zijn 3 modi: zachte modus, normale modus en sterke modus. <i>Opmerking: gebruik om te beginnen de zachte modus.</i></p>	 <p>5. Kijk in een spiegel en breng de werktip aan op het benodigde deel van uw tanden om tandsteen of vlek te verwijderen. <i>Opmerking: bij het verwijderen van tandsteen is het beter om een hoek van 45° aan te houden tussen de werkpunt en de tanden; Bij het verwijderen van vlekken en polijsten is het beter om een hoek van 90° aan te houden. Druk tijdens het gebruik niet te hard op het opzetstuk.</i></p>  <p>5. Druk na gebruik op de aan / uitknop om het apparaat uit te schakelen. Het LED-lampje gaat automatisch uit. Spoel uw mond met schoon water.</p>	 <p>7. Spoel het opzetstuk af onder water. Veeg het apparaat droog of wacht tot het aan de lucht is gedroogd en bewaar het apparaat vervolgens op een schone plaats.</p> <ol style="list-style-type: none"> Spoel de behuizing van het apparaat af of veeg het af met een natte doek als er vuil op het oppervlak zit. Bewaar het apparaat op een koele plaats. Vermijd direct zonlicht of hoge temperaturen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Om de levensduur te behouden, dient u het apparaat elke 3 maanden op te laden als u het lange tijd niet gebruikt. Probeer nooit zelf het apparaat te openen of te repareren. Als er een storing optreedt of deze niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice. 	<p align="center">Specificaties</p> <p>Naam: BOME tandsteenverwijderaar</p> <p>Batterijcapaciteit: 250 mAh</p> <p>Oplaadmodus: DC- lader</p> <p>Werkspanning: 3,7 - 4,2 V</p> <p>Nominale stroom: 130 mA max.</p> <p>Waterproof rating: IPX6</p> <p>Bewaartemperatuur: -10° C tot 40° C</p>