


BINTOI

Draagbare waterflosser

Instructie Gids

F500

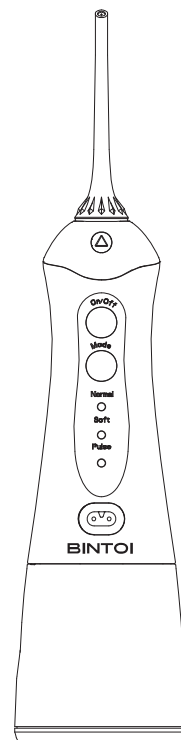

Welkom! Door de BINTOI waterflosser te kiezen, bent u op weg naar gezonder tandvlees en een gezondere glimlach!

Gids voor Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Lekkage tussen de mondstuk uiteinden en de regelknop voor de richting	Pakking in de mondstuk basis is gebroken of onjuiste installatie van het mondstuk	Zorg ervoor dat het mondstuk erin wordt gestoken of vraag om nazorg bij de naverkoop dienst.
Reservoir lekt	Pakking gebroken of onjuiste installatie	Vervang de afdichtring, neem contact op met de leverancier voor onderhoud of installeer volgens de instructies
Onvoldoende druk	Laag vermogen	Volledig opladen
Start niet	Laag vermogen	Volledig opladen
Geen waterstroom	Filter is verstopt	Maak het filter schoon



Als bovenstaande methoden niet werken, neem dan contact op met de verkoper of het aangewezen naverkoop servicepunt.

Specificaties:


- ◆ Vermogen: 5w
- ◆ Reservoir lekt: 10 oz / 300ml
- ◆ Drukgebied: 30~100psi
- ◆ Hartslag: 1400~1800 times/min
- ◆ Modi: normal, soft, pulse
- ◆ Accu: 1400mAh lithium battery

Inhoud

Inhoud	01
Productbeschrijving en accessoires	02
Aan De Slag	03
Gebruiksaanwijzing	04
Aanbevolen Techniek	05
Reservoir Verwijderen en Reinigen	06
Onderhoud en Verwijdering van De Batterij	07
Gids voor Probleemoplossing	08

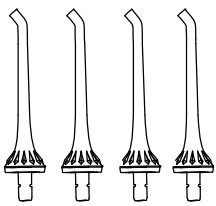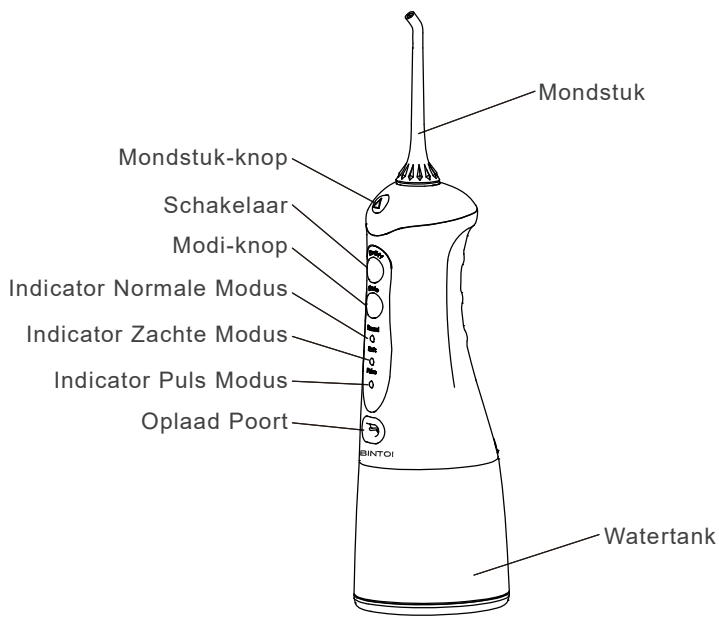

Opzetstukken x 4

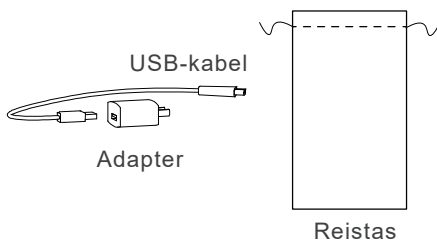

Onderhoud van de batterij


1. Laad voor het eerste gebruik 4 uur op totdat deze volledig is opgeladen.
2. Steek de USB-kabel in het laadcontact en schakel de stroom in.
3. Als de waterflosser gedurende lange tijd moet worden bewaard, laad deze dan 4 uur op voordat u deze opbergt.
4. Om de levensduur van de batterijen te maximaliseren, dient u pas op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.

Verwijdering van de batterij


Het apparaat bevat een lithiumbatterij. Recycle het apparaat aan het einde van de levensduur van de batterij bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum volgens de plaatselijke voorschriften. De batterij is niet vervangbaar.

Na gebruik

Schakel het apparaat uit. Giet alle vloeistof weg die in het reservoir is achtergebleven.

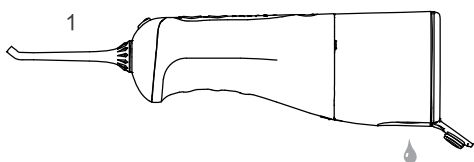

Zoals weergegeven in afbeelding 2, houdt u de behuizing van de eenheid vast, grijpt u met de andere hand de watertank, zoals weergegeven in afbeelding 3, draait u tegen de klok in om hem naar beneden te trekken en de watertank te verwijderen.

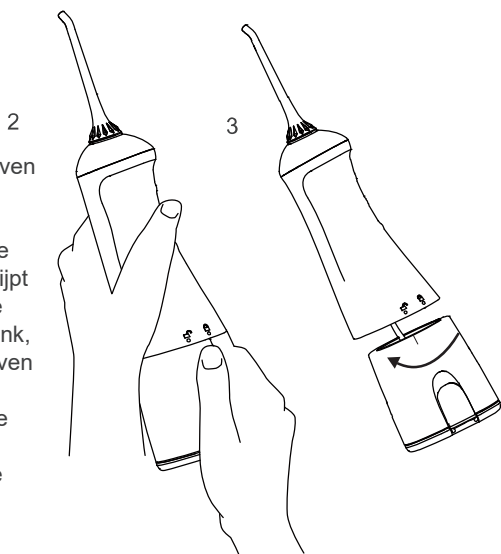


Begin Eraan

Belangrijk! Schakel de Waterflosser uit en laad hem 4 uur op voor het eerste gebruik. Sluit het snoer aan op een standaard stopcontact. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.




Mondstukken Plaatsen en Verwijderen

Steek het mondstuk in het midden van de waterflosser totdat u een klik hoort.

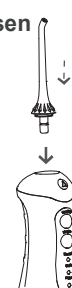

Met het waterreservoir naar boven, open het deksel en vul het vervolgens met water. Opmerking: zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is tijdens het vullen van de tank.

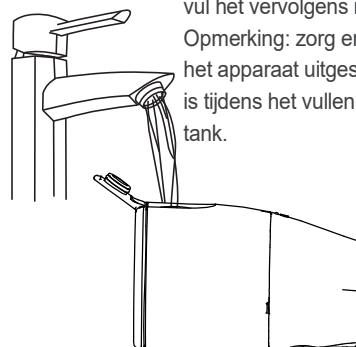

Verwijder het mondstuk van het handvat, druk op de knop voor het uitwerpen van mondstuk en trek het vervolgens van het handvat.




Gebruiksaanwijzing

- ◆ Dit product heeft een geheugenfunctie. De modus is hetzelfde als vóór het afsluiten van de laatste keer.
- ◆ Druk op de modustoets om te wisselen tussen: Normaal, Zacht, Puls.
- ◆ Zelfs als het is uitgeschakeld, is de moduswijziging beschikbaar. U kunt uw eigen favoriete modus kiezen en vervolgens opstarten.
- ◆ Als een modus langer dan 120 seconden duurt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- ◆ Druk langer dan 3 seconden op de modusknop om het batterijvermogen weer te geven.
- ◆ Tijdens het opladen knipperen de drie lampjes achter elkaar. Als alle 3 de lampjes branden, is het apparaat volledig opgeladen.
- ◆ In gebruik geven de drie knipperende lampjes aan dat de batterij leeg is. Laad snel op.
- ◆ Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- ◆ Draai aan het mondstuk om de stroomrichting te wijzigen.



Gebruiksaanwijzing

Leun laag over de gootsteen en plaats het mondstuk in de mond. Richt de punt op de tanden en schakel het apparaat in.

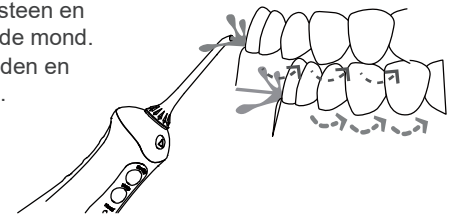

Richt de straalstroom in een hoek van 90 graden op uw tandvleesrand. Sluit de lippen iets om spatten te voorkomen, maar laat het water vrij uit de mond in de gootsteen stromen. Voor het beste resultaat begint u bij de kies (achterste kiezen) naar de voortanden. Schuif het mondstuk langs de tandvleesrand en stop een tijdje tussen de tanden. Blijf het doen totdat alle omliggende gebieden en openingen in de tanden zijn schoongemaakt.

