




SHOPLACE

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Face Lift Huidverjongingsapparaat

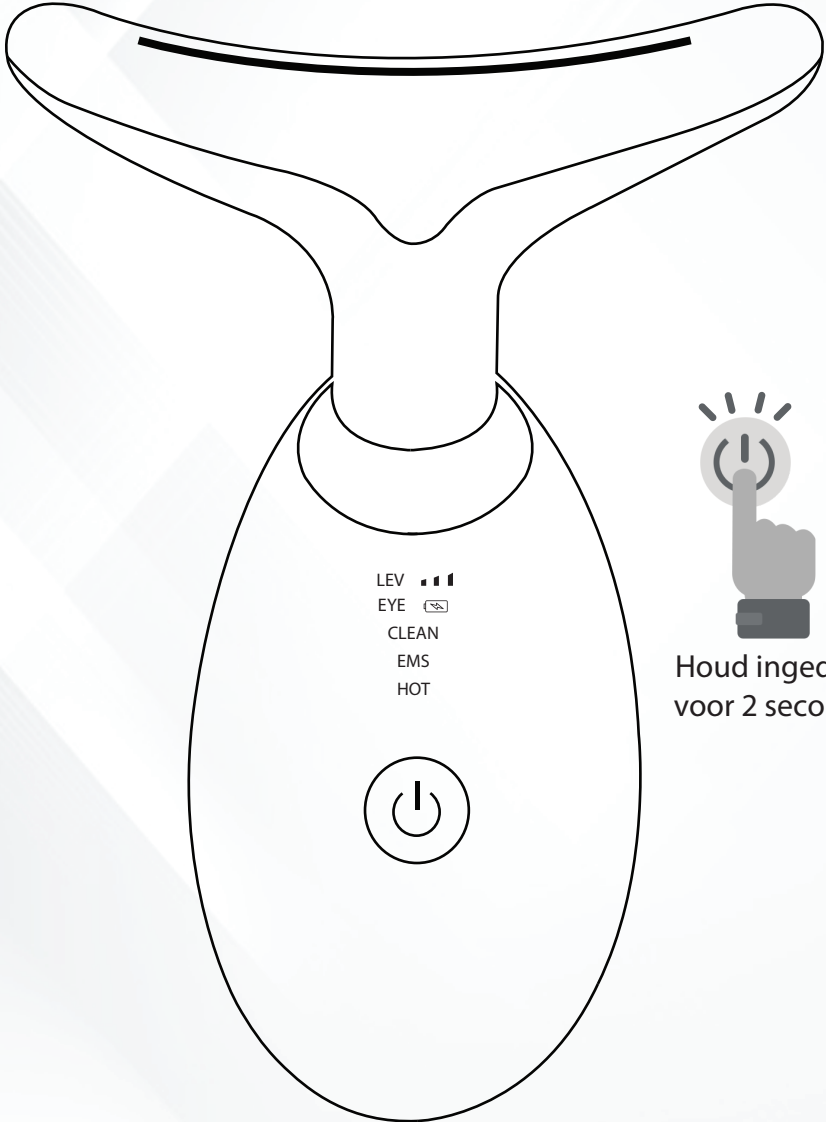

Houd ingedrukt  
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C

RoHS CE FC

# Inhoud

- 1. Introductie
  - .1 Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
  - .2 Ontvangen van het product
  - .3 Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Behandelmethoden
- 5. Gebruiksaanwijzingen
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Face Lift Huidverjongingsapparaat aandachtig door en bewaar deze goed. Volg en lees de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van het product. Mocht je nog vragen hebben over het product of iets anders, neem dan contact met ons op via  : support@shoplace.nl
- De Shoplace Face Lift Huidverjongingsapparaat kan gebruikt worden voor het versterken van een verslapte huid, huidverjonging, verminderen van rimpels, zichtbare gezichtslijnen en gezichtsvermoeidheid. Het apparaat beschikt over 2 LED-standen (blauw en rood) met ieder een ander resultaat voor de huid.
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig en kan aangezet worden door de **aan/uit knop voor korte duur in te drukken**. De Face Lift Huidverjongingsapparaat gaat automatisch naar de 1e stand. De indicatoren geven aan welke behandeling is geselecteerd. Met de intelligente touchfunctie begint het apparaat pas met werken wanneer het in aanraking komt met je gezichtshuid.
- De verwarmende massagekop brengt hoogfrequente trillingen die ervoor zorgen dat de huid op den duur wordt verzorgd en verbeterd. Gebruik het 2 á 3x per week voor je wekelijkse gezichtsverzorging -en verwarmende massage om van te genieten. De Shoplace Face Lift Huidverjongingsapparaat is effectief, pijnloos en eenvoudig te gebruiken.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Face Lift Huidverjongingsapparaat

- Als dit de eerste keer is dat je de Face Lift Huidverjongingsapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies aandachtig door te lezen. Let op de consequenties -en de risico's die ontstaan bij misbruik van de Face Lift Huidverjongingsapparaat. Dit kan leiden tot persoonlijke letsel -en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking.
- Gebruik de Face Lift Huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- De Face Lift Huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan het Face Lift Huidverjongingsapparaat.
- De Face Lift Huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere -en droge plek opgeladen wordt en houd regelmatig zicht.
- De Face Lift Huidverjongingsapparaat kan alleen droog/vochtig gebruikt worden. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met een olie, serum -en of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat **NIET** onder stromend water of hierin onderdompelt wordt.

- Gebruik en bewaar de Face Lift Huidverjongingsapparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de Face Lift Huidverjongingsapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
  - De tepels
  - De lippen
  - De oren
  - De penis en balzak
  - De vagina

## Ontvangen van het product


1.2

- Controleer de inhoud van het pakket wanneer je de zending ontvangt. Neem contact op met ons, indien er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met ons en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace Face Lift Huidverjongingsapparaat
- **Accessoires:**
  - 1x Beschermingskap
  - 1x USB-oplaadkabel
  - 1x Shoplace opbergzak
  - 1x Handleiding

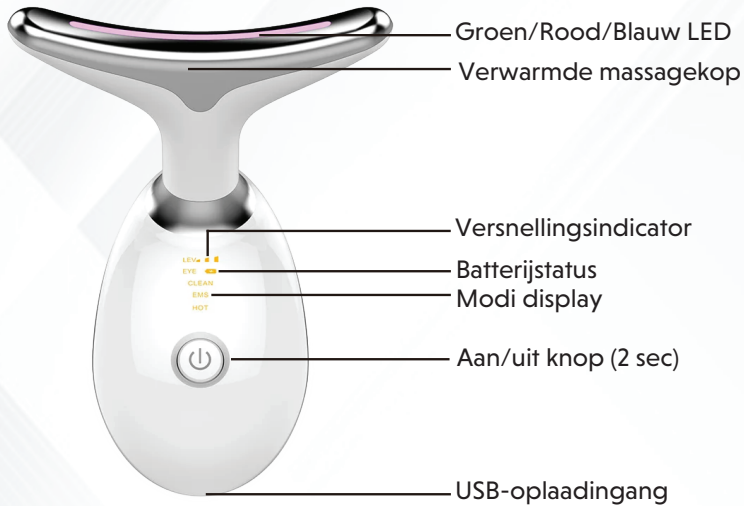

Grootte	120 x 89 x 47 mm
Gewicht	105 gram
Materiaal	ABS
Kleur	Wit
Batterij	Lithium 500mAh 3.7V
Aantal LED-standen	3: Rood - Blauw - Groen
Gebruiksduur	60 minuten
Oplaadtijd	120 minuten
Invoerspanning	USB Micro DC 5V
Temperatuur	42-45°C
Vibratie frequentie	7000/min

## Aanbevelingen

- Zet de Face Lift Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken.
- Reinig de Face Lift Huidverjongingsapparaat met een licht vochtig doek na ieder gebruik. Volg de reinigingsinstructies onder sectie 6.
- Druk de Face Lift Huidverjongingsapparaat niet te hard op de huid om een rood -en of geïrriteerd plek achter te laten.
- Gebruik de Face Lift Huidverjongingsapparaat wanneer deze volledig is opgeladen voor 60 minuten.
- Gebruik de Face Lift Huidverjongingsapparaat niet wanneer deze is aangesloten aan de USB-oplaadkabel. Trek dit voor gebruik los.
- Lees voor je eerste behandeling goed deze handleiding door om erachter te komen welke LED-stand behandeling je kan gaan gebruiken.
- Plaats de Face Lift Huidverjongingsapparaat op een hoek van 45-graden op de huid om het beste resultaat te krijgen.
- Neem een warme douche -en of ontspan jezelf om goed gebruikt te maken van het apparaat.
- Gebruik de Face Lift Huidverjongingsapparaat ook in combinatie met olie, serum -en of een crème.
- De Face Lift Huidverjongingsapparaat begint pas met werking wanneer deze dicht op de gezichtshuid wordt geplaatst.

### ● - Rood LED-stand

De rode LED-stand vermindert rimpels, gezichtslijnen, herstelt beschadigde huid en zorgt voor een betere uitstraling.

### ● - Blauw LED-stand

De blauwe LED-stand verfijnt grove poriën, verstrakt een slappe huid en verjongt de huid.

### ● - Groen LED-stand

De groene LED-stand bevordert de microcirculatie van lymfe, bloedcirculatie van de huid, vermindert huidzwellingen en kalmeert de huid.

## Gebruiksaanwijzingen

1. Zet de Face Lift Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken. Het apparaat gaat aan in de 1e stand. Hierna is een eenmalige klik nodig om de 2e -en of 3e stand te bereiken.
2. Reinig je nek en breng een olie, serum -en of crème aan rondom het te behandelen gebied.
3. Maak op één neerwaartse bewegingen rond de nek om het olie, serum -en of crème goed in te brengen.
4. Masseer rondom de nek gedurende 30-60 seconden.
5. Breng een vocht inbrengende crème aan op je wangen of voorhoofd.
6. Masseer de crème in door schuinwaartse bewegingen te maken over je wangen –of op één neerwaartse bewegingen bij je voorhoofd.
7. Het wordt aanbevolen om zo'n gemiddeld 5 minuten de nek –en het gezicht te behandelen.



- Berg de Face Lift Huidverjongingsapparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats en berg het hierna op een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig de Face Lift Huidverjongingsapparaat na ieder gebruik. Het apparaat dient **NIET** met water schoongemaakt te worden, maar met een licht vochtig doek.

### – **Stappenplan reinigen:**

1. Zet de Face Lift Huidverjongingsapparaat uit.
2. Verwijder eventueel de opbergkap -en of USB-kabel uit het apparaat
3. Reinig de Face Lift Huidverjongingsapparaat met een licht vochtig doek. Wrijf eroverheen en probeer geen gebruiksafdrukken achter te laten.
4. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** schoongemaakt wordt met water -en of een andere oplossing.
5. Reinig de overige gebieden van het apparaat met het licht vochtig doek om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
6. Berg het apparaat op met de kap in de opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar [support@shoplace.nl](mailto:support@shoplace.nl)*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging ontstaan bij vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant de Face Lift Huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.