




SHOPLACE

GEBRUIKSAANWIJZING

Kaaklijn Huidverjongingsapparaat

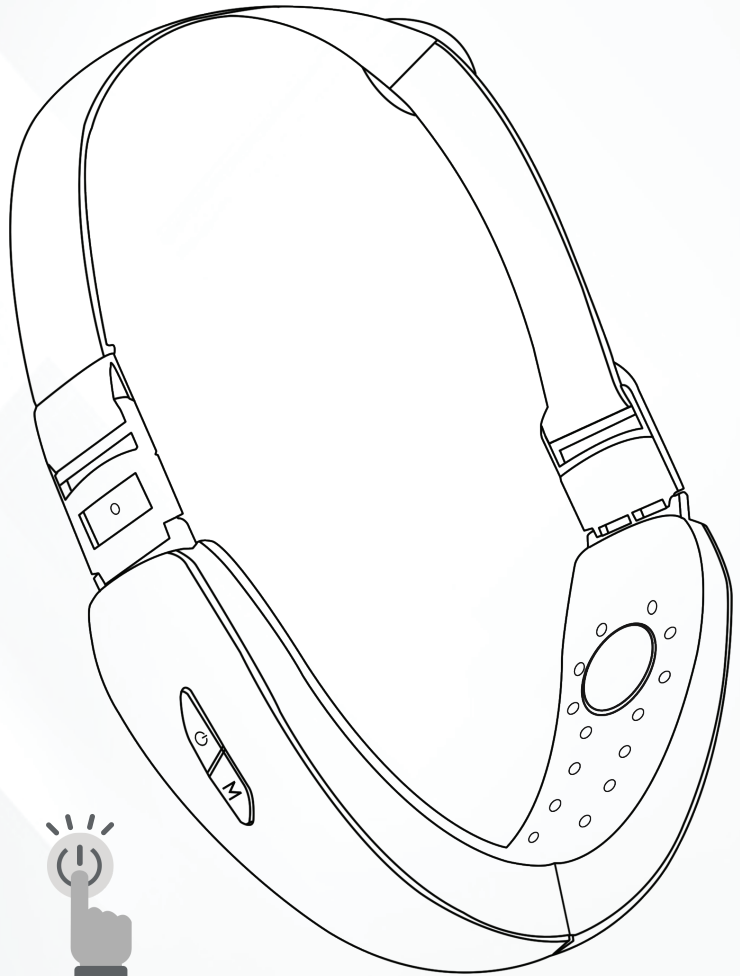

Houd ingedrukt
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C

RoHS CE FC

Inhoud

- 1. Introductie
 - .1 Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
 - .2 Ontvangen van het product
 - .3 Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Behandelmethoden
 - .1 LED Behandelmethoden
- 5. Gebruiksaanwijzingen
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Kaaklijn Huidverjongingsapparaat aandachtig door en bewaar deze goed. Volg en lees de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van het product. Mocht je nog vragen hebben over het product of iets anders, neem dan contact met ons op via  : support@shoplace.nl
- De Shoplace Kaaklijn Huidverjongingsapparaat kan gebruikt worden voor het versterken van een verslachte kaaklijn, verbeteren van de gezichtsvorm, verminderen van een dubbele kin/onderkin, huidverjonging, zichtbare gezichtslijnen en gezichtsvermoeidheid. Het apparaat beschikt over 2 LED-standen (blauw en rood) en 6 behandelingen met ieder een ander resultaat voor de kaaklijn. De sterkte van de behandelingen kan aangepast worden met 6 intensiteitsniveaus.
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig en kan aangezet worden door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken. De Kaaklijn Huidverjongingsapparaat gaat automatisch naar de 1e stand. Met de afstandbediening is het mogelijk om de stand te veranderen met een eenmalige knop op de M. De indicatoren geven aan welke behandeling is geselecteerd en wat de bijhorende intensiteitsniveau is. Dit laatste kan gewijzigd worden met het staafdiagram knop.
- De verwarmende elementen brengen hoog- en laag frequente trillingen die ervoor zorgen dat de kaaklijn en gezichtsvorm op den duur wordt versterkt en verbeterd. Gebruik het 4 á 5x per week om effectief de kaaklijn te verslanken en versterken. De verwarmende massage laat je kaaklijn spieren ontspannen en genieten. De Shoplace Kaaklijn Huidverjongingsapparaat is effectief, pijnloos en eenvoudig te gebruiken.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat

- Als dit de eerste keer is dat je de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies aandachtig door te lezen. Let op de consequenties -en de risico's die ontstaan bij misbruik van de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat. Dit kan leiden tot persoonlijke letsel -en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking.
- Gebruik de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- De Kaaklijn Huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat.
- De Kaaklijn Huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere -en droge plek opgeladen wordt en houd regelmatig zicht.
- De Kaaklijn Huidverjongingsapparaat kan alleen droog/vochtig gebruikt worden. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met een olie, serum -en of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat **NIET** onder stromend water of hierin onderdompelt wordt.

- Gebruik en bewaar de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
 - De lippen
 - De oren

Ontvangen van het product

1.2

- Controleer de inhoud van het pakket wanneer je de zending ontvangt. Neem contact op met ons, indien er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met ons en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace Kaaklijn Huidverjongingsapparaat
- **Accessoires:**
- 1x Gezichtsband
- 1x Afstandsbediening
- 1x USB-oplaadkabel
- 1x Shoplace opbergzak
- 1x Handleiding



Grootte	178 x 106 x 49 mm
Gewicht	172 gram
Materiaal en kleur	ABS en Nylon, Wit
Batterij	Lithium 400mAh 3.7V
Aantal LED-standen	2: Rood - Blauw
Aantal behandelingen en niveaus	6
Gebruiksduur	60 minuten
Oplaadtijd	120 minuten
Invoerspanning	USB Micro DC 5V
Temperatuur	42-45°C
Vibratie frequentie	3500/min

Aanbevelingen

- Reinig de KaaklijnHuidverjongingsapparaat met een licht vochtig doek na ieder gebruik. Volg de reinigingsinstructies onder sectie 6.
- Druk de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat niet te hard op de huid om een rood -en of geïrriteerd plek achter te laten.
- Gebruik de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat wanneer deze volledig is opgeladen voor 120 minuten.
- Gebruik de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat niet wanneer deze is aangesloten aan de USB-oplaadkabel. Trek dit voor gebruik los.
- Lees voor je eerste behandeling goed deze handleiding door om erachter te komen welke LED-stand behandeling je kan gaan gebruiken.
- Plaats de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat correct op de kaaklijn om het beste resultaat te krijgen.
- Neem een warme douche -en of ontspan jezelf om goed gebruik te maken van het apparaat.
- Gebruik de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat ook in combinatie met olie, serum -en of een crème.

– **Compacte gezichtscontouren:**

Deze behandeling wordt gebruikt om de gezichtscontouren te verbeteren en verstrakken. De behandeling maakt gebruik van EMS Pulsgolven en Blauw LED.

– **V-gezichtsvorming:**

Deze behandeling wordt gebruikt om de gezichtsvorm te verbeteren naar een V-vorm. De behandeling maakt gebruik van EMS Pulsgolven.

– **Magnetische therapie (Laagfrequent trillingen):**

Deze behandeling wordt gebruikt om laagfrequente trillingen in de vorm van EMS Pulsgolven naar de gezichtsspieren te sturen. De behandeling maakt gebruik van EMS en Rood LED.

– **Huidreiniging en anti-zwelling:**

Deze behandeling wordt gebruikt voor het hygiënisch en gezond te houden van de huid en het voorkomen van huidzwellingen. De behandeling maakt gebruik van EMS, heating en Rood LED.

– **Anti-acné:**

Deze behandeling wordt gebruikt voor het verminderen van acné en gezichtslijnen. De behandeling maakt gebruik van Rood LED.

– **Huidverjonging:**

Deze behandeling wordt gebruikt voor het verjongen en verstevigen van de kaaklijn. De behandeling maakt gebruik van EMS en Rood LED.

● - Rood LED-stand

De rode LED-stand herstelt een beschadigde kaaklijn, bevordert bloedcirculatie, verstrakt de huid en verbetert de huidelasticiteit voor een betere uitstraling.

● - Blauw LED-stand

De blauwe LED-stand verfijnt grove poriën, vermindert rimpels en gezichtslijnen en verjongt de huid.

Gebruiksaanwijzingen

5

1. Zet de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken op de band. Het apparaat gaat aan in de 1e stand. Hierna is een eenmalige klik nodig om de volgende standen en intensiteitsniveaus te bereiken. Dit kun je bedienen met de meegeleverde afstandbediening.
2. Reinig je Kaaklijn en breng een olie, serum -en of crème aan rondom het te behandelen gebied.
3. Plaats de Kaaklijn huidverjongingsapparaat op de juiste plek en zorg dat deze strak wordt gezet middels de gezichtsband.
4. Kies de gewenste behandeling en intensiteitsniveau middels de afstandbediening.
5. De behandeling duurt in totaal 15 minuten en herhaal dit meerdere malen per week.
6. Reinig het apparaat na gebruik met een licht vochtig doek en berg het netjes op.

- Berg de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats en berg het hierna op een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat na ieder gebruik. Het apparaat dient **NIET** met water schoongemaakt te worden, maar met een licht vochtig doek.

– Stappenplan reinigen:

1. Zet de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat uit.
2. Verwijder eventueel de opbergkap -en of USB-kabel uit het apparaat
3. Reinig de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat met een licht vochtig doek. Wrijf eroverheen en probeer geen gebruiksafdrukken achter te laten.
4. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** schoongemaakt wordt met water -en of een andere oplossing.
5. Reinig de overige gebieden van het apparaat met het licht vochtig doek om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
6. Berg het apparaat op in een opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar support@shoplace.nl*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging ontstaan bij vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.