

Calmenta

Infrarood Saunadeken C100



CE

Beste lezer,

Bedankt voor het aanschaffen van de Calmenta infrarood saunadeken.

Perfect voor op reis of thuis. Onze infrarood saunadekens verhogen de thermische energie van het lichaam en bevorderen een tijdelijke toename van de bloedstroom. De saunadeken vermindert gewrichts- en spierpijn, verbetert huidklachten en ontgift het lichaam.

Terwijl u zich ontspant in de rustgevende, maar stimulerende warmte, zorgt infrarood voor een opbeurend gevoel. Het resultaat? Totale ontspanning en een gezond lichaam. Ervaar de positieve effecten op uw lichaam en geest.

Voordelen:

- Verlicht spier- en gewrichtspijn
- Bevordert bloedcirculatie
- Bevordert het verminderen van huidklachten en -aandoeningen
- Bevordert genezing
- Verlicht stress en bevordert de nachtrust
- Ontgift/detox

Controleer eerst bij uw huisarts of het gebruik van de Calmenta infrarood saunadeken in uw geval medisch gezien zinvol en toegestaan is.

Inhoudsopgave

1. Productbeschrijving	pag. 4
2. Inhoud	pag. 4
3. Belangrijke veiligheidsinstructies	pag. 4-5
4. Gebruik van de deken	pag. 6-8
5. Bediening	pag. 7-8
6. Na gebruik	pag. 9
7. Garantie en service	pag. 10
8. Specificaties	pag. 11

1. PRODUCTBESCHRIJVING

De Calmenta infrarood saunadeken is ontwikkeld voor een behandeling met ver-infraroodtechnologie om een diepe, doordringende warmte te bieden die het lichaam verwarmt. Hierdoor verbetert de bloedsomloop, wat resulteert in een sneller herstel van het lichaam en de vermindering van vele klachten. De deken levert rustgevend en effectieve infraroodstralen aan het lichaam die een breed scala aan voordelen kunnen bieden, zoals beschreven.

2. INHOUD

Let op bij het uitpakken dat de verpakking de volgende onderdelen bevat:

- Handleiding
- Infrarood saunadeken
- Bedieningspaneel
- Afstandsbediening
- Adapter

3. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Raadpleeg voor gebruik altijd uw huisarts als u een medische of andere aandoening heeft, zoals:

- Huidziekte, brandwonden of roodheid
- Overgevoeligheid voor temperatuur
- Hartziekte van ziekte
- Gebroken botten
- Misselijk, hoofdpijn of andere symptomen
- Recent geopereerd
- Abnormale bloeddruk
- Zwanger of borstvoeding
- Anhidrose
- Kanker of andere kwaadaardige aandoeningen
- Metalen of andere lichaamsimplantaten

⚠ Waarschuwing ⚠

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te verminderen. Verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot oververhitting, persoonlijk brandletsel en/of materiële schade.

Zorg ervoor dat u alle instructies zorgvuldig leest voordat u dit verwarmde product gebruikt.

- Plaats het bedieningspaneel niet op de buitenkant van de deken wanneer deze in gebruik is.
- Als u het snoer om het bedieningspaneel wikkelt, kan het snoer beschadigd raken.
- Draag geen metalen sieraden of andere producten bij het gebruik van de deken.
- Gebruik dit verwarmde product niet met pijnstillende crèmes, smeersels of zalfpreparaten. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met smeersels, zalven of balsems die warmte producerende ingrediënten bevatten.
- Gebruik dit apparaat niet bij baby's.
- Laat slapende, mensen met een handicap of bewusteloze personen het apparaat niet gebruiken.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact, wanneer het product niet in gebruik is.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
- Vouw de deken niet op als deze heet is, aan het opwarmen of afkoelen is. De deken en het materiaal kan dan beschadigen.
- Onderzoek het product, de kabel en het bedieningspaneel voor elk gebruik op tekenen van slijtage of schade. Als een onjuiste werking, slijtage of schade wordt waargenomen, stop dan met het gebruik van de deken en stuur een e-mail naar de verkoper of de klantenservice van Calmenta.
- Probeer het apparaat niet zelf te wijzigen of te repareren. Zijn er beschadigingen of werkt het apparaat niet of niet naar behoren, neem dan zo snel mogelijk contact met de verkoper op of de klantenservice van Calmenta.

⚠ Voor gebruik lezen ⚠

4. GEBRUIK VAN DE DEKEN

Tijd en graden

We raden aan om 30 minuten op 65 graden te beginnen. Naarmate u eraan gewend raakt, verhoog/verlaag dan de temperatuur/tijd totdat u de perfecte comfort- en zweetervaring hebt gevonden.

Het duurt ongeveer 10 minuten voordat de deken de gewenste temperatuur heeft bereikt.

Het kan 4 tot 5 sessies duren voordat uw lichaam zich aanpast aan het infrarood en echt begint te zweten, dus wees geduldig. Geef uw lichaam de tijd om los te laten.

Blijf gehydrateerd en zorg ervoor dat u voldoende water drinkt voor, tijdens en na een behandeling met de Calmenta infraroodsauna dekens.

Extra tip: voor degenen die van lekker warm houden, probeer de deken te gebruiken met een handdoek om je schouders/nek om de infraroodwarmte binnen te houden.

Wat draag ik?

Het is belangrijk om uw persoonlijke en optimale kledingervaring te vinden. Bij hogere temperaturen wordt aanbevolen om comfortabele, ademende kleding te dragen om de huid te bedekken. Veel klanten houden echter ook van korte broeken en sporttopjes/beha/t-shorts. Zoek uit wat voor u het prettigst is. Uw voeten moeten bedekt zijn met sokken.

Overweeg een handdoek in de deken en plaats de handdoek onder het lichaam voor extra demping en comfort. Zorg ervoor dat de handdoek ook het kussen bedek in verband met het zweten.


Waar gebruik ik de infrarood saunadeken?

De saunadeken kan op elke hittebestendige ondergrond worden geplaatst, zoals een bed of bank. Overweeg om de saunadeken op de grond te leggen op een yoga-/fitnessmat. We raden aan om een handdoek onder de deken te leggen voor extra comfort.

⚠️ Vouw de deken nooit op als deze heet of aan het opwarmen is, anders kan de deken beschadigd raken. Bij het opwarmen en afkoelen moet de deken plat en open worden neergelegd.

5. BEDIENING



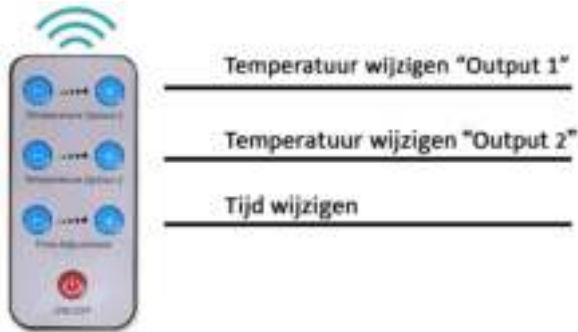

Sluit het uiteinde van het bedieningspaneel aan op de ontvangende poort aan de voet van de deken. Zorg ervoor dat beide verbindingen stevig vastzitten. Sluit de stekker van het bedieningspaneel aan op een standaard stopcontact. Zorg ervoor dat de deken is aangesloten op het bedieningspaneel voordat u de stroom aansluit.

⚠ Wees voorzichtig als u voelt dat een deel van uw lichaam te warm wordt. Als u de sessie op enig moment moet stoppen, drukt u op de 'S/P-knop' op het bedieningspaneel.

Bedieningspaneel

1. Druk op de aan/uit-schakelaar om het bedieningspaneel te activeren.
2. De 'Instellingen'-knop wordt gebruikt om de duur in te stellen van de temperatuur en timer. De timer is standaard ingesteld op 30 minuten. Minder minuten instellen? Dit is niet mogelijk.

De timer instellen? Druk op de 'Instellingen'-knop totdat het getal op de timerdisplay knippert. Vanaf nu kan u met de pijltjes de gewenste tijd instellen.

De temperatuur instellen? Druk op de 'Instellingen'-knop totdat het getal op de temperatuurdrukknop knippert. Vanaf nu kan u met de pijltjes de gewenste temperatuur instellen.

3. Alles ingesteld?
Druk op de 'S/P'-knop om de saunasessie te starten. Knippert de punt naast het getal op de timerdisplay? Dit betekent dat de saunasessie begonnen is.
4. Druk ook op de 'S/P'-knop om de sessie op elk moment te stoppen. Door op de 'Power'-knop achterop het bedieningspaneel te drukken wordt het bedieningspaneel definitief uitgeschakeld.
5. Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de kabel loskoppelt van de deken.

Opslagtip: Houd het bedieningspaneel-eenheid vast aan de deken en bewaar het bedieningspaneel in de deken wanneer u deze opvouwt.

⚠ LET OP! Plaats het bedieningspaneel niet boven op de deken wanneer deze in gebruik is. Het bedieningspaneel kan hierdoor oververhit kan raken.

6. NA GEBRUIK

⚠ Haal de stekker na gebruik altijd uit het stopcontact.

Voorzichtigheid

Na gebruik zal de deken heet zijn. Laat de deken open om volledig af te koelen. Niet opvouwen en opbergen voordat de deken is afgekoeld. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een beschadigde deken.

Reiniging en opslag

Gebruik een zachte doek of handdoek om eventueel achtergebleven zweet te absorberen. Gebruik een niet-bijtende reiniger of een niet-bijtende reinigingsdoek.

⚠ Gebruik geen sterke bijtende reiniger of alcohol om de saunadeken schoon te maken.

Opslagtips

- Bewaar het product in een koele, droge plaats.
- Plaats geen voorwerpen op de saunadeken.
- Dompel deze saunadeken niet onder in water. Zorg ervoor dat de deken niet nat wordt.
- Niet in de was doen of chemisch reinigen.
- Bewaar het product niet in een vochtige omgeving.
- Houd het bedieningspaneel aangesloten op de deken voor opslag. Dit zal slijtage op de lange termijn helpen verminderen.

7. GARANTIE INFORMATIE

Calmenta infrarood saunadeken 1 jaar beperkte garantie vanaf de aankoopdatum.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper:

- Een kopie van de factuur/aankoopbon bezit.
- Als het product in originele staat is.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn:

- Slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product.
- Met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren).
- Producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Calmenta geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn.
- Schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaan.
- Producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn.
- Gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheid bepalingen bestaan).

Neem contact met ons op via info@calmenta.nl als er problemen zijn met uw deken.

8. SPECIFICATIES

Productnaam:	Infrarood saunadeken
Verwarmingszones:	2-zones
Temperatuur:	35°C~75°C
Vrijlating:	9~16um
Nominaal vermogen:	600W
Spanning:	110V-220V 50Hz/60Hz
Materiaal:	PU
Maat deken:	180x80cm
Pakketgrootte:	49x42x25 cm
Brutogewicht machine:	7,7 kg