

# Generatie 4

Nieuwe motor. Diepere massage. Verbeterde accu.

Je bent een stap dichterbij het verbeteren van jouw bewegingsvrijheid, het voorkomen en genezen van pijntjes en een verbeterde versie van jezelf te worden.

Of je nu een topsporter bent die zijn of haar prestaties wil verbeteren, een weekendwarrior die simpelweg wat extra herstel wil na zijn zondagse voetbalwedstrijd of iemand met een kantoorbaan die zijn of haar postuur wil verbeteren.

De SANBO Massage Gun Gen-4 is ontworpen om jou te helpen al deze persoonlijke doelen te behalen.



**SANBO**

## QUICK START

# Pijnvrij bewegen eenvoudig gemaakt

1

### Zet het apparaat aan


Zet de SANBO Massage Gun aan en uit door de knop aan de onderkant op ON te zetten.

Het lampje rondom de accu gaat branden. Zet de massage gun aan door de middelste knop op het scherm van de massage gun in te gouden

2

### Kies de juiste stand


Schakel tussen 30 verschillende snelheidsstanden door op de + en - knoppen op de achterkant van de SANBO Massage Gun te klikken.

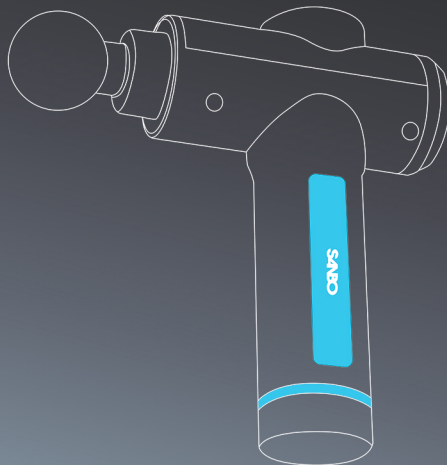

**SANBO**


### 3 Kies het juiste opzetstuk

Kies het juiste opzetstuk voor het type massage. Het opzetstuk "duw" je in de massage gun. Bij het vervangen van opzetstuk mag er hard getrokken worden.

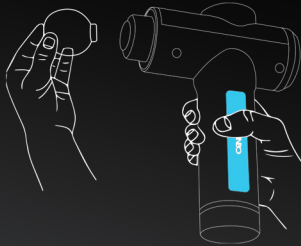

### 4 Snelheid aanpassen

Kies de gewenste snelheid door de + en - knoppen in te drukken.

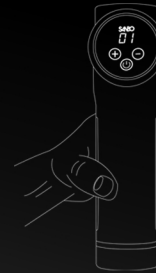

### 5 Opladen


Gebruik alleen de meegeleverde SANBO oplader om garantie te blijven behouden. De Massage Gun heeft op het scherm een indicatie van het batterij %.



### 6 Nazorg

Gebruik een vochtige, schone doek en veeg de Massage Gun en de opzetstukken schoon.

Zorg er voor dat het apparaat uit staat en de oplader niet is aangesloten.

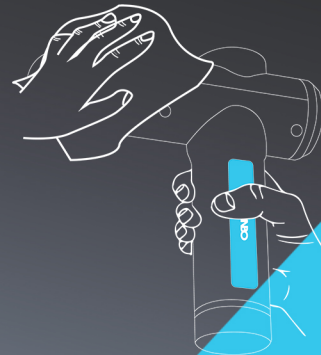

# Opzetstukken



## Round Ball

Perfect te gebruiken voor grote en kleine spiergroepen.



## Air Plug

Geschikt voor alle spiergroepen. Perfect om kennis te maken met massage.



## Y - Fork

Geschikt voor de rug, biceps, kuiten achillespees en enkels.



## Bullet

Het opzetstuk om “deep tissue” massage mee na te bootsen. Masseer knopen op de meest nauwkeurige manier uit jouw spieren.



## Dampener

Geschikt om klopmassage toe te passen. Gebruik dit opzetstuk vooral op de grotere spiergroepen.



## Finger

Mimic massage van een echte therapeut met het Finger opzetstuk. Iets minder intensief dan het Bullet opzetstuk.



## Flat head

Geschikt voor moeilijk bereikbare plekken. Kan toegepast worden om oppervlakkig maar ook diep te masseren.



## Thiead

Geschikt voor de ledenmaten. Perfect te gebruiken door zijn ronding.

SANBO App

# De massage gids in jouw broekzak

Krijg begeleiding bij jouw  
massage.

Lees over informatie m.b.t.  
percussiotherapie en de  
verschillende opzetstukken.



SANBO Care

Een team die klaar  
zit speciaal  
voor jou!



Neem contact op met ons team als er iets onduidelijk is of er vragen zijn over het product.



## Opslag

Bewaar de SANBO Massage Gun op een droge, schone plaats. Bewaar het apparaat niet bij extreem hoge of lage temperaturen.

## Afvoer / Recycling

Denk aan het milieu en draag bij aan een schonere wereld door je SANBO Massage Gun aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huishoudafval te gooien, maar te recyclen. Dit kan bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor batterijen en oplaadbare batterijen. Tot nu toe is dit volledig gratis!

## Service en Garantie

Als je service nodig hebt of informatie over je SANBO-product, aarzel dan niet en stuur een e-mail naar [info@sanbo.nl](mailto:info@sanbo.nl) of bel 0800 3336669.

Jouw SANBO-product wordt geleverd met een standaard fabrieksgarantie van 1 jaar. De klant moet een aankoopbewijs kunnen voorleggen, en de garantie moet worden geclaimd binnen een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Let op dat de garantie geldt niet bij: schade door onjuist gebruik of reparatie; slijtageonderdelen; voor defecten die de klant al wist op het moment van aankoop; voor defecten door eigen schuld van de klant; voor schades veroorzaakt door derden.

## Disclaimer

Onder voorbehoud van wijzigingen; specificaties kunnen worden gewijzigd zonder opgaaf van redenen.

# Inhoud verpakking

-SANBO Massage Gun Gen - 4 EAN 8720828027301

Bijgevoegde accessoires

- 8x opzetstuk
- 1x EU-adapter
- 1x Opbergkoffer
- 1x Handleiding

## Product Eigenschappen

<b>Afmeting</b>	25,2 x 7 x 26,9 CM
<b>Gewicht</b>	850 gr
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Voeding - Vermogen - Voltage</b>	100 - 240V - 50/60Hz - Max 1.5A
<b>Type batterij</b>	Lithium-Ion 2500 mAh
<b>Batterijduur</b>	2-3 uur
<b>Snelheid</b>	30 snelheidsstanden
<b>Geluid</b>	30 - 45 dB