



ENVIGANTE

## JEUGDIG • STRALEND

De Envigante Microcurrent Huidverjongingsapparaat biedt vijf instelbare behandelingsinstellingen die vijf verschillende drukniveaus bieden die de groei van collageen stimuleren. Het tilt de gezichtscontour op, vermindert rimpels en fijne lijntjes, terwijl het de huidskleur van het gezicht verheldert. Kan worden gebruikt met je favoriete huidverzorgingsproducten voor maximale resultaten van een jeugdige stralende uitstraling. Werkt ideaal voor het gezichtsgebied.

ENVIGANTE

MICROCURRENT  
HUIDVERJONGINGS-  
APPARAAT

### VOORDELEN:

- HERSTELT COLLAGEEN
- VERHELDERT DE HUIDSKLEUR
- VERMINDEERT RIMPELS
- VERSTEVGT DE GEZICHTSCONTOUR



RICHT ZICH OP  
VOORHOOFD/  
WENKBRAUWEN/  
WANGEN/KAAKLIJN/  
NEK



Voor de meeste  
huidtypes



Verhoogt de opname van  
huidverzorgings-  
producte



Anti-Rimpels en  
Huidversteving




Actveert de Groei  
van Collageen



Vormt de Huid  
van het Gezicht

### GEbruik VAN DE MASSAGER:

1. Was je gezicht met warm water en een milde gezichtsreiniger voordat je deze massager gebruikt.
2. De massager kan helpen om huidcrèmes beter te laten absorberen. Breng lichtjes je favoriete huidverzorgingsproduct aan over je gezicht.
3. Om te activeren, druk op de Aan/Uit-knop. Om de huidige intensiteit te selecteren, druk je opnieuw op de Aan/Uit-knop totdat je het gewenste niveau hebt bereikt.
4. Er zijn 5 niveaus van stroomintensiteit. Deze worden aangegeven op het LED-scherm. Houd er rekening mee dat deze massager een lage frequentie stroom gebruikt en sommige gebruikers mogelijk geen sensatie ervaren wanneer het op het gezicht of lichaam wordt aangebracht.
5. Raak voorzichtig met de massager het gebied van je gezicht aan dat je wilt masseren. Elke beweging van de massager mag niet langer duren dan 5 seconden. Er klinkt een signaaltoon om aan te geven dat er 5 seconden zijn verstreken.
6. Bij het aanbrengen van de massager, zorg ervoor dat beide contactpunten voor stroomstimulatie in contact zijn met je huid voor maximaal profijt van deze massager.
7. Om uit te schakelen, houd de Aan/Uit-knop ingedrukt.

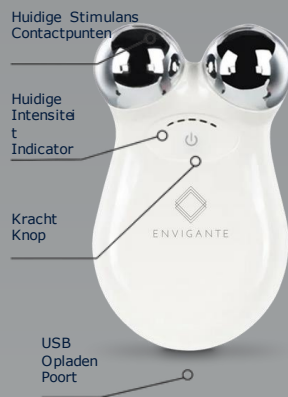

### ZORG EN ONDERHOUD:

1. Zorg ervoor dat de massager is uitgeschakeld na elk gebruik en wanneer je gaat schoonmaken.
2. Veeg de massager grondig schoon met een licht vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, omdat dit de massager kan beschadigen.
3. Dompel niet onder in water.
4. Wees voorzichtig tijdens het schoonmaken om de onderdelen niet te beschadigen. Stop met gebruik als er schade aan het apparaat is.
5. Plaats de massager in een droge, geventileerde ruimte wanneer deze niet in gebruik is.



ENVIGANTE



ENVIGANTE

### AANVULLENDE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN:

Lees de handleiding van de massager voordat je deze gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Voor het eerste gebruik van deze massager, laad deze gedurende 24 uur op. Steek het einde van de oplaadkabel in de poort van het product. Steek het USB-einde in een USB-poort van een computer of een geschikte AC-wandadapter. Het rode LED-lampje knippert tijdens het opladen. Zodra deze volledig is opgeladen, blijven alle 5 blauwe LED-lampjes branden. Wanneer de batterij bijna leeg is, is ongeveer 2 uur oplaadtijd nodig om de batterij volledig op te laden.

Deze massager heeft 5 niveaus van lage frequentie stroomintensiteit. Elk niveau wordt aangegeven door een blauw LED-licht.

Je kunt dit product ook op andere lichaamsdelen gebruiken, zoals armen, taille, heupen, dijen en kuiten.

Dit product is niet waterbestendig, dompel het niet onder in water.

Bewaar het product bij niet-gebruik op een droge en geventileerde plaats. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.

Om de langdurige prestaties van de massager te waarborgen, laat geen resten van huidverzorgingsproducten zich ophopen. Reinig de massager grondig na elk gebruik.

Dit is geen speelgoed. Dit product mag alleen worden gebruikt door personen ouder dan 18 jaar. Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mogen deze massager niet gebruiken, tenzij ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de toepassing en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.

Bewaar alsjeblieft met zorg en buiten het bereik van kinderen.

Manipuleer alsjeblieft niet met interne onderdelen. Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in de eenheid en het openen van het product zal de garantie ongeldig maken.

Probeer het product niet zelf te repareren. Neem contact met ons op als het product service nodig heeft.

Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

De technische specificaties van dit product en de inhoud van de gebruikershandleiding kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

CE Documentatie is te downloaden via bol.com.