

**VULPES BEAUTYCARE**

**PLASMA PEN PRO**

**HANDLEIDING**

# INHOUD

<b>1. Waarschuwingen vooraf</b>	<b>3</b>
<b>2. Soorten plekjes &amp; hoe te verwijderen</b>	<b>4</b>
<b>3. Productuiterlijk &amp; functiebenamingen</b>	<b>5</b>
<b>4. Soorten plekjes, naaldgebruik &amp; levels</b>	<b>6</b>
<b>5. Gebruikersmethode</b>	<b>7</b>
<b>6. Service &amp; garantie</b>	<b>8</b>

## WAARSCHUWINGEN VOORAF

1. Buiten bereik van kinderen bewaren.

2. Voor pijngevoelige patiënten wordt aangeraden om een arts te raadplegen voor gebruik.

Hierbij adviseren wij een wenkbrauwstabiliserende crème, voordat je de pen gaat gebruiken. Dek dit vervolgens af met folie en veeg de crème na 15 a 30 minuten af en verwijder het plekje vervolgens met de pen.

3. Voor nieuwe gebruikers wordt aanbevolen om de pen te testen op de bovenkant van je hand, om te kijken hoe gevoelig je voor de plasma pen bent.

4. Ontkorsting van plekjes komt over het algemeen na 4 tot 10 dagen voor en het is normaal wanneer er tijdelijk pigment te zien is op de huid.

Om verergerde pigmentatie te voorkomen, vermijd dan blootstelling aan een felle zon gedurende minimaal 3 maanden.

5. Eet geen pittig eten, drink geen alcohol en neem geen aspirine of soortgelijke medicijnen binnen een week na de behandeling.

6. Doe geen vergaande inspanningen binnen een week na het verwijderen van de plekjes of sproeten.

7. Zorg dat het plekje niet in aanraking komt met water na de behandeling, maar zorg eerst dat je met een droge doek rondom het plekje hebt geveegd, maar vermijd hierbij het behandelplekje zelf.

8. Indien nodig raden we je aan om contact op te nemen met je huisarts.

9. Ga niet aan de korstjes zitten plukken ondanks het kan gaan jeuken. Dit kan wondjes veroorzaken en de huid schaden. Laat je lichaam zelf het werk doen door het de tijd te geven en de huid vanuit zichzelf te laten helen.

# SOORTEN PLEKJES & HOE TE VERWIJDEREN

## Vlek verwijderen

Voor het verwijderen van de vlek, plaats de plasma pen lichtjes op de plek, veeg voorzichtig heen en weer, je kunt nu duidelijk zien dat de granulatie weg zal branden en eraf zal vallen.

Voor een kleine vlek heb je maar een behandeling nodig

Voor een donkere vlek wordt aangeraden om dit in 2-3 behandelingen te doen.

Hou je zo stil mogelijk tijdens het gebruik, om verwondingen en uitschieters te voorkomen.

Dit kan ook littekens veroorzaken, let hier dus goed op!

## Verwijderen en aanstippen van de vlek

Let bij het verwijderen van vlekken op de maten van moedervlekken, sommige moedervlekken groeien op de huidoppervlak, terwijl andere ondiep liggen.

Doorboor het oppervlak van de vlekken niet tegelijk, het is beter om in een klein gebied te branden, voor de plek, vermijd de behandelplek van de vlek na de behandeling om de kans op een verwonding te voorkomen.

We raden je aan om 2-3 dagen na je behandeling, de huid in te smeren met voedende crème

**Let op:** stop met het gebruik van verdovingscrème als de wond ontstoken is.

## Granulatie verwijderen

Raak de granulatie lichtjes aan met de pen om de afgeleide granulatiecellen te verbranden.

De granulatie zal er binnen een week af vallen.

Kleine granulatieplekken hebben slechts een behandeling nodig, waarbij grotere oppervlaktes meer behandelingen nodig hebben.

## Tattoo's verwijderen

Normaal gesproken is het oppervlak van een tattoo vrij groot en moet je voor een grove naald kiezen.


De manier waarop je een tattoo verwijderd is vrijwel hetzelfde als de manier waarop je vlekjes en plekjes verwijderd.

Het wordt voor de veiligheid en effectiviteit van de behandeling aangeraden om grote oppervlaktes in meerdere keren te behandelen (groter dan 3cm)

Bij ernstige ontstekingen, raden we je aan om direct een arts te raadplegen.

**Opmerking:** We raden je aan om alleen kleine tattoo's te verwijderen met de plasma pen, voor grotere tattoo's raden we je aan om een afspraak te maken bij een professioneel persoon of in het ziekenhuis.

# PRODUCTUITERLIJK & FUNCTIEBENAMINGEN

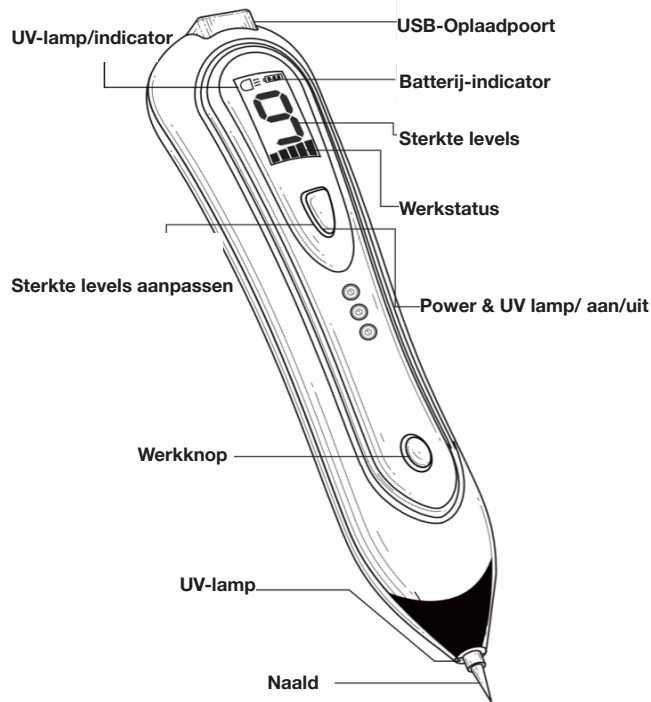

## Koolstofionisatietechnologie:

Dankzij slimme koolstofionisatietechnologie, kun je met de plasma pen, veilig en effectief sproeten, moedervlekken en andere plekjes behandelen, zonder dat je een pijnlijk of ongemakkelijk gevoel ervaart of je last krijgt van vervelende schokken.

## Geavanceerde UV-lamp:

De UV-lamp op de plasma pen helpt bij het desinfecteren en zorgt voor een veel veiligere en efficiëntere manier van het verwijderen van moedervlekken en andere plekjes, zonder pijn of bloedingen tijdens en na de behandeling.

Dankzij de UV-lamp is de behandeling een zeer snel en effectief proces.

## 2 verschillende naalden:

Als de moedervlekken en sproeten relatief groot zijn, kun je als alternatief grove en fijne naalden gebruiken, om deze zo beter te kunnen behandelen.

Fijne naald (voor eenmalig gebruik): van toepassing op:

relatief kleine moedervlekken en sproeten.

De fijne naald wordt gekenmerkt met een langzame verwijderingssnelheid en een relatief schoon verwijderingseffect.

De grove naald (voor meerdere behandelingen): van toepassing op:

Grotere moedervlekken of granulatieplekken. De grove naald wordt gekenmerkt door de snelle verwijderingssnelheid, breng na het verwijderen van de grote vlekken de kleine naalden weer aan, om de resterende kleine plekjes te verwijderen.

# SOORTEN PLEKJES, NAALDGEBRUIK & LEVELS



Aanbevolen levels: 1-4



Hangende  
plekjes




Vetbultjes



Sproeten



Ouderdomsvlekken

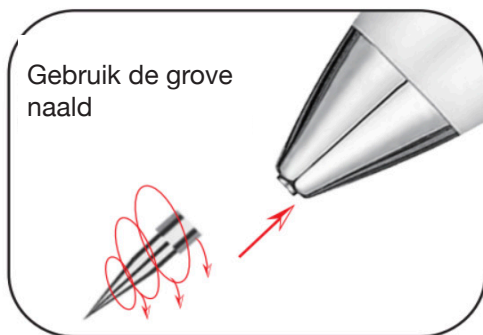

Aanbevolen levels: 5-8



Wratten



Verruca




Grote moedervlekken &  
sproeten



Tattoo's

## GEBRUIKERSMETHODE

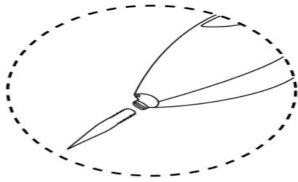


1. Kies de juiste naald en installeer deze op de pen.

2. Druk lang op de AAN / UIT-knop voor ongeveer 2s om de plasma pen aan te zetten.




Het LCD-scherm zal nu oplichten nadat de stroom is ingeschakeld.

3. Je kunt het behandelgebied desinfecteren doormiddel van de UV lamp.

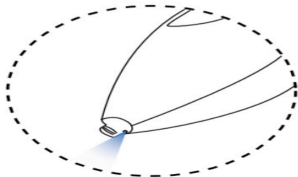


Om het UV-licht in- en uit te schakelen tijdens gebruik, druk dan 2x op de AAN/UIT-knop achterelkaar, het pictogram bovenaan in de linkerhoek licht nu op, wat aangeeft dat het UV lampje werkt.

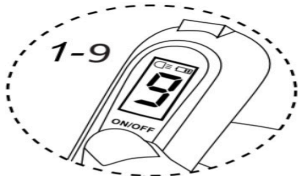


4. Klik na het opstarten op de AAN/UIT-knop om het snelheidsniveau te wijzigen.

5. Houd de OUT-knop ingedrukt om de plasma pen te starten.

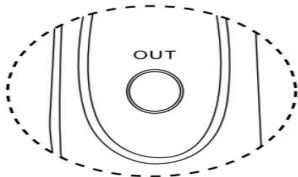

Op het LCD-scherm wordt de elektrische ionenoutput weergegeven en het pictogram knippert om aan te geven dat de output van het elektrische ion normaal is.

Laat de knop los om het apparaat te laten stoppen met werken.

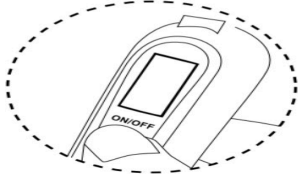

6. Druk na gebruik 3 seconden op de aan / uit-knop om de plasma pen uit te schakelen.

## SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes BeautyCare® Plasma pen PRO.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product. Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar [vulpesshipment@gmail.com](mailto:vulpesshipment@gmail.com) wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.