

# VITA | VÈR

**Gebruikershandleiding**

# Inhoudsopgave

<b>Wat is rood lichttherapie?</b>	<hr/>	<b>3</b>
<b>Wat is het verschil tussen rood en nabij-infrarood licht?</b>	<hr/>	<b>4</b>
<b>Vershil in golflengten tussen de X-Series en Y-Series</b>	<hr/>	<b>4</b>
<b>Wat zijn de voordelen?</b>	<hr/>	<b>5</b>
<b>VITAVÈ Essential GO</b>	<hr/>	<b>6</b>
<b>VITAVÈ X-Series</b>	<hr/>	<b>11</b>
<b>VITAVÈ Y-Series</b>	<hr/>	<b>19</b>
<b>Veelgestelde vragen</b>	<hr/>	<b>29</b>
<b>Veiligheidsinstructies, Waarschuwingen en disclaimer</b>	<hr/>	<b>30</b>
<b>Onderhoud en garantie</b>	<hr/>	<b>31</b>

# Wat is rood lichttherapie?

Rood lichttherapie, ook bekend als photobiomodulatie (PBM) omvat het gebruik van zowel rood als nabij-infrarood licht op specifieke golflengten van natuurlijk licht. Dit zijn de specifieke golflengten waarvan is aangetoond dat ze het grootste effect hebben op het menselijk lichaam.


In Nederland groeit rood lichttherapie momenteel enorm onder huidklinieken, schoonheidsspecialisten, sportscholen en bij de mensen thuis. Dit komt doordat inmiddels ruim 5000 wetenschappelijke studies de voordelen ervan hebben bewezen en het sinds een aantal jaar pas toegankelijk is geworden voor thuisgebruik.

Kort gezegd, het rood en nabij-infrarood licht wordt geabsorbeerd in ons lichaam en verbetert de gezondheid en functie van onze cellen zonder negatieve effecten of UV-stralen. Dit zorgt onder anderen voor de productie van ATP (energie), collageen (eiwit) en een bevordering van de bloedsomloop.

Voordelen als huidverjonging, vermindering van huidklachten als acné, eczeem en psoriasis, meer energie, betere slaap, spier- en wondgenezing, vermindering van ontstekingen en gewrichtspijn en meer kunnen hiervan het gevolg zijn.




## Wat is het verschil tussen rood en nabij-infrarood licht?

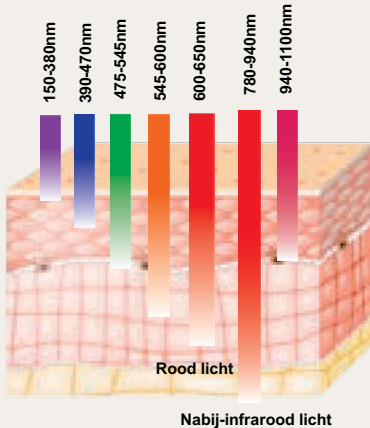

Alle lampen van VITAVÈR maken gebruik van zowel rood als nabij-infrarood licht. Rood licht dringt alleen door het huidoppervlak en wordt daarom veel gebruikt voor huidverzorging. Het rode licht bevordert onder andere de bloedcirculatie en brengt voedingsstoffen en zuurstof naar het huidoppervlak. Ook draagt het bij aan de productie van collageen en elastine. Deze twee eiwitten zijn verantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van huid, haar, nagels, botten, ligamenten (bindweefselbanden) en pezen.

Het nabij-infrarood heeft een langere golflengte en dringt dieper door in het lichaam. Dit zorgt ervoor dat naast de dermis en onderhuidse huidlagen ook de spieren, gewrichten, zenuwen en organen de energie van het nabij-infrarood licht absorberen. Dit brengt positieve effecten met zich mee zoals huidverjonging, meer energie (verbeterde sportprestaties), bevordering van spierherstel, snellere wondgenezing, betere slaapkwaliteit, vermindering in klachten van ontstekingen, minder pijn aan gewrichten en meer.

## Wat is het verschil tussen de verschillende golflengten?

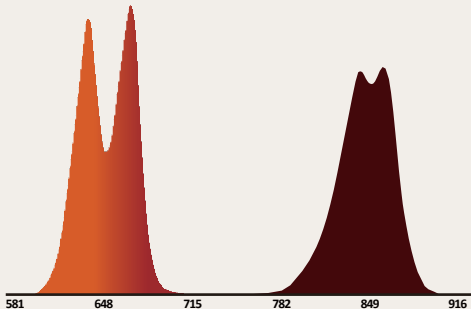

De X-serie maken gebruik van de twee golflengten 660nm en 850nm. Dit zijn de welbekende en meest gebruikte golflengten in de industrie van rood lichttherapie

Door de golflengten 630nm (rood) en 830nm (nabij-infrarood) toe te voegen maakt de Y-serie gebruik van 4 golflengten tegelijk. Naast dat de verschillende golflengtes een versterkend effect hebben op elkaar, hebben ze een verschillende absorptie diepte in het lichaam (langere golflengtes gaan dieper dan kortere). Deze combinatie zorgt voor bewezen sterke en positieve effecten en dus superieure resultaten

# Wat zijn de voordelen?

## Ontstekingen, gewrichtspijn en wondgenezing

- Vermindering klachten/symptomen bij een ontsteking
- Vermindering pijn aan gewrichten
- Versnelde wondgenezing

## Sportprestaties en herstel

- Verbeterde sportprestaties (meer energie, meer uithoudingsvermogen)
- Voorkomen en/of verminderen van klachten van overbelasting, blessures en ontstekingen
- Sneller herstel van het lichaam na training
- Toename in spiergroei en spierkracht na training

## Slaap optimalisatie

- Makkelijker in slaap komen
- Kwalitatief betere en langere slaap
- Energieker wakker worden

## Huidgezondheid, anti-aging en Acné

- Bevordering in aanmaak van collageen en elastine
- Haar, nagels, pezen en botten worden sterker en soepeler
- Huidverjonging (vermindering van fijne lijntjes, rimpels, uitgezakte wangen, ingevallen ogen etc.)
- Vermindering en/of tegengaan van huidklachten (acné, eczeem, psoriasis etc.)

## Mentale en cognitieve scherpte

- Verhoogde concentratie
- Verhoogde cognitieve prestaties

## Energie

- Vermindering klachten futloosheid en lusteloosheid
- Verhoging van mentale en fysieke gezondheid (meer energie, meer uithoudingsvermogen, meer motivatie en verhoogde productiviteit)

## Geestelijke gezondheid en depressie

- Vermindering klachten futloosheid en lusteloosheid
- Verhoging van mentale en fysieke gezondheid (meer energie, meer uithoudingsvermogen, meer motivatie en verhoogde productiviteit)
- Makkelijker in slaap vallen, kwalitatief betere en langere slaap, energieker wakker worden
- Mentale en cognitieve scherpte

VITA|VÈR

# VITAVÈR Essential GO



# Korte introductie

1. De VITAVÈR Essential GO is een draagbare en oplaadbare led-therapielamp met ingebouwde batterij. Dit maakt mogelijk dat u de lamp gemakkelijk mee kunt nemen en overal en altijd van uw lichttherapie kunt genieten.
2. De lamp beschikt over 15 5w Dualchip LED's. Deze Dualchip LED's worden ook bij de grotere lampen gebruikt, en verzekeren u van het maximaal haalbare resultaat.
3. De lamp wordt opgeladen via een USB-oplader. Eenmaal volledig opgeladen, kunt u 4 uur lang genieten van de lamp.
4. De lamp straalt 150mw/cm<sup>2</sup> uit in twee verschillende golflengten 660nm en 850nm. Dit zijn de wetenschappelijk bewezen golflengten van natuurlijk licht waarvan is aangetoond dat ze het grootste effect op het lichaam hebben.
5. De lamp is gemaakt van aluminium dus bij lang gebruik kan de lamp warm worden. Dit is normaal en niet gevaarlijk. De efficiënte warmteafvoer zorgt ervoor dat de lamp niet overhit kan raken.
6. De lamp heeft een standaard sloomstart functie, wat inhoudt dat de lamp na het aanzetten langzaam naar de normale helderheid gaat. Deze functie is geïntegreerd om te voorkomen dat u pijnlijke ogen krijgt door de snelle en felle flits bij het aanzetten van de lamp.

# Specificaties

Model	VITAVÈR Essential GO
Aantal LED's	15
Bestraling (10cm)	150 mW/cm <sup>2</sup>
Golflengten	660nm : 850nm= 7:8
Stralingshoek	30 Graden
Batterij capaciteit	8000 mAh
Afmetingen	15cm x 8cm x 3cm
Gewicht	0.45 KG
Garantie	1 jaar




# Inhoud


Inhoud	
1x VITAVÈR Essential GO	1x Gebruikershandleiding
1x USB adapter	1x Beschermbril
1x Opbergtasje	1x USB oplaadraad
1x Opberghoes	




# Hoe gebruikt u de VITAVÈR Essential GO

## **Begin uw behandeling:**

1: Om het apparaat aan of uit te zetten, houd de powerknop  5 seconden ingedrukt.

2: Klik op de knop R/NIR  om te kiezen tussen de golflengten en de lamp in te stellen naar uw specifieke wensen. Het LCD scherm in het midden geeft aan welke golflengten aan staan.

3: Kies tussen de drie behandelmethoden door te klikken op de R/NIR  knop. Het LCD scherm geeft de behandelmethode weer.

L1: 660nm – 850nm: Zowel rood als nabij-infrarood licht

L2: 660nm: Alleen rood licht

L3: 850nm: Alleen nabij-infrarood licht


4: Tijdsduur: Vanaf het moment dat het apparaat aan wordt gezet, gaat direct 10 min in. Wanneer de 10 min om is, zal de lamp automatisch uitschakelen.

5. Batterij: Er bevinden zich vier lichtgevende bolletjes onder het LCD scherm, die de hoeveelheid batterij weergeven.  
25%/50%/75%/100%



# VITAVÈR X-Series

- X-Advanced

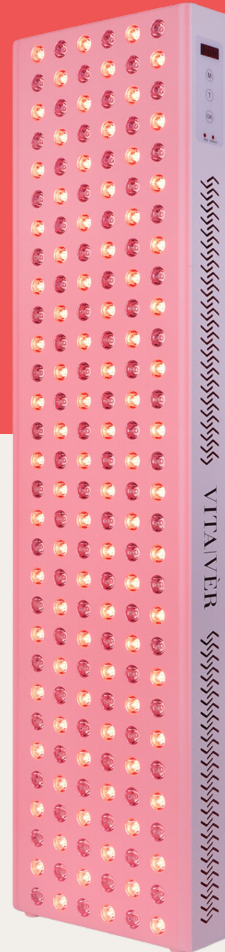

# VITAVÈR X-Series


De VITAVÈR X-serie, een krachtig apparaat dat meer dan 140mw/cm<sup>2</sup> licht op uw lichaam schijnt in twee verschillende golflengten: 660 nanometer en 850 nanometer. Zoals u misschien al heeft gelezen, zijn dit wetenschappelijk bewezen golflengten van natuurlijk licht waarvan is aangetoond dat ze het grootste effect hebben op het menselijk lichaam.

De VITAVÈR X-Series zijn geavanceerde lampen die zijn uitgerust met een led-therapielichtstelsel met een 5W dual-chip lichtbron.

De VITAVÈR X-Serie bevat een volledig digitale bediening met een ingebouwde timer. Ook hebben ze een koppelfunctie die de mogelijkheid biedt om meerdere apparaten met elkaar te verbinden om gerichte behandeling en volledige lichaamsbehandeling te creëren voor uw specifieke behoeften.

# Specificaties, Stralingssterkte en bereik

Model	X-Advanced
Kracht	900W
Aantal LED's	180
Golflengten	630nm:660nm=1:1
Stralingshoek	60 Graden
Afmetingen	910x235x65mm
Bestraling (10cm)	>135mw/cm2
Levensduur	10.000 uur
Koelings-ventilatoren	5
EMF uitstoot	0.0μT @ 10cm
Gewicht	9KG
Garantie	2 Jaar
Het beste voor	Volledige lichaamsbehandeling

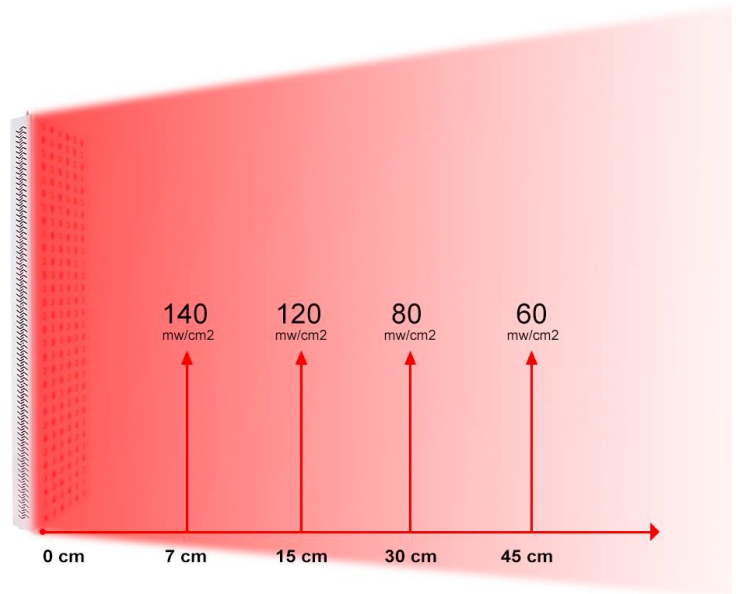

# Inhoud X-Series

① VITAVÈR X-Advanced

② Veiligheidsbril

③ Deurhanger

④ Stroomkabel

⑤ Patchkabel

⑥ Verstelbaar katrolsysteem

⑦ Tandem schroef

⑧ Hangkabel

⑨ Koppelkabel

⑩ Gebruikershandleiding

2



3



4



5



6



7



8




9




10



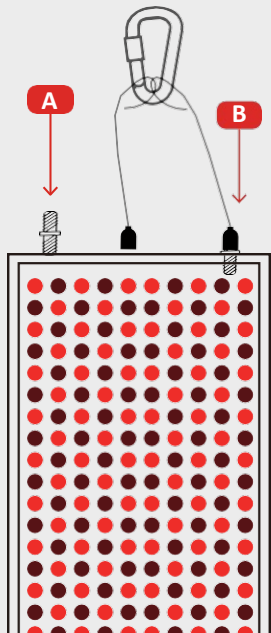


## Stap 1

Bevestig de ophangmaterialen. Schroef de draadstangen in de bovenkant van uw lamp. Schroef vervolgens de kabelsteunen aan de bovenkant van de palen met schroefdraad. Als u meerdere lampen wilt koppelen, zie dan de volgende instructies

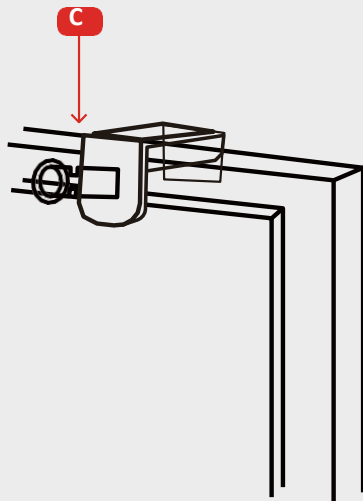


## Stap 2

Bevestig deurhaak: Hang de deurhaak aan elke standaardformaat deur. Indien twee haken, herhaal dan het proces.

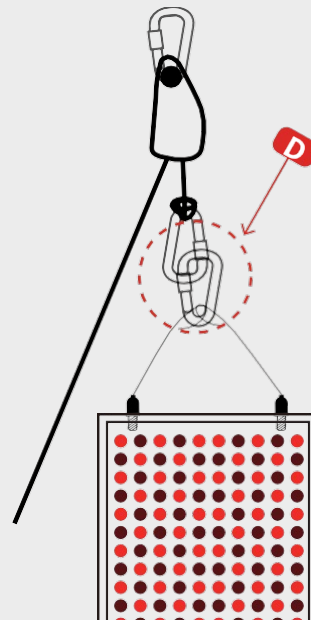

## Stap 3

Sluit hangkabels aan: Hang de deurhaak aan de bovenkant van de deur. Verbind de kabelsteunen met de klikverbinding. Vervolgens hangt u het andere uiteinde van de kabel direct aan de deurhaak. De hoogte van uw therapielamp aanpassen. Met de klikverbinding en de bijgevoegde kabelklem kunt u de hoogte van uw

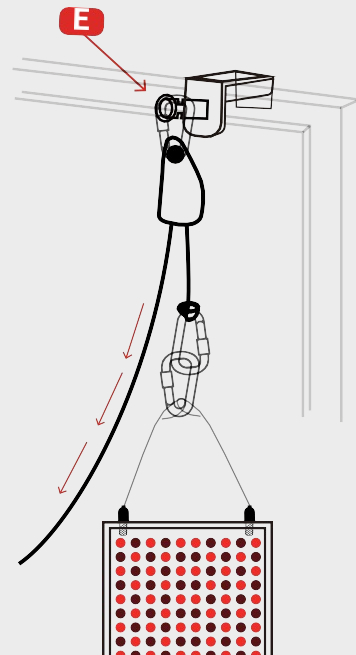


## Stap 4

Om uw lamp te verhogen, trekt u aan de verstel kabel terwijl u met uw andere hand de onderkant van uw lamp ondersteunt. Om uw lamp te verlagen, drukt u op de hendel op de kabelbox. Houd bij het verlagen de lamp vast!

# Het apparaat aansluiten


## Stap 1: Aansluiten van de stroomkabels

Stop de aansluiting van de kabel in het apparaat en stop het andere uiteinde in een stroompunt. Om meerdere apparaten met elkaar te koppelen gebruikt u het extra draad, hierdoor wordt de stroom door beide apparaten geleid.

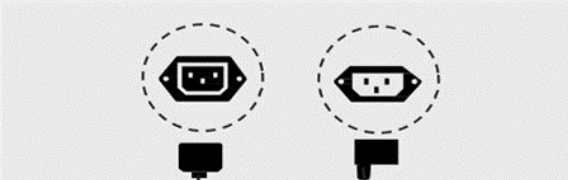


## Stap 2: De schakelaars

Als u het apparaat aan wilt zetten, zet u de rode knop om. Om meerdere apparaten met elkaar te koppelen, zet de zwarte knop op ON.

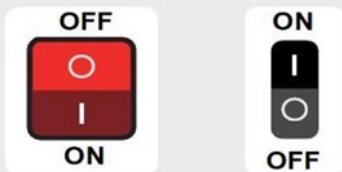


## Stap 3: Samenvoegen van stroom kabels

Stop het ene uiteinde van de kabel in het apparaat en het andere uiteinde in het stopcontact. Sla deze stap over als u maar één apparaat gebruikt.

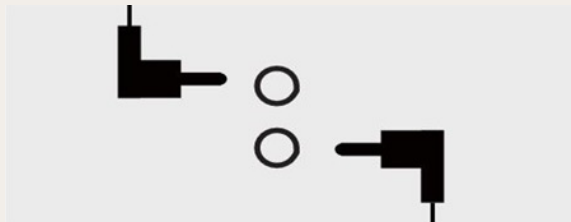


## Stap 4: Afkoelen

Aan het einde van uw sessie zullen de ventilatoren nog even doordraaien om het apparaat weer helemaal af te laten koelen.

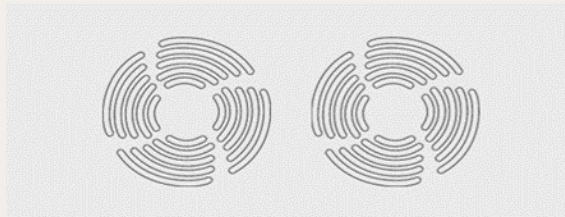




# Meerdere X-Series koppelen

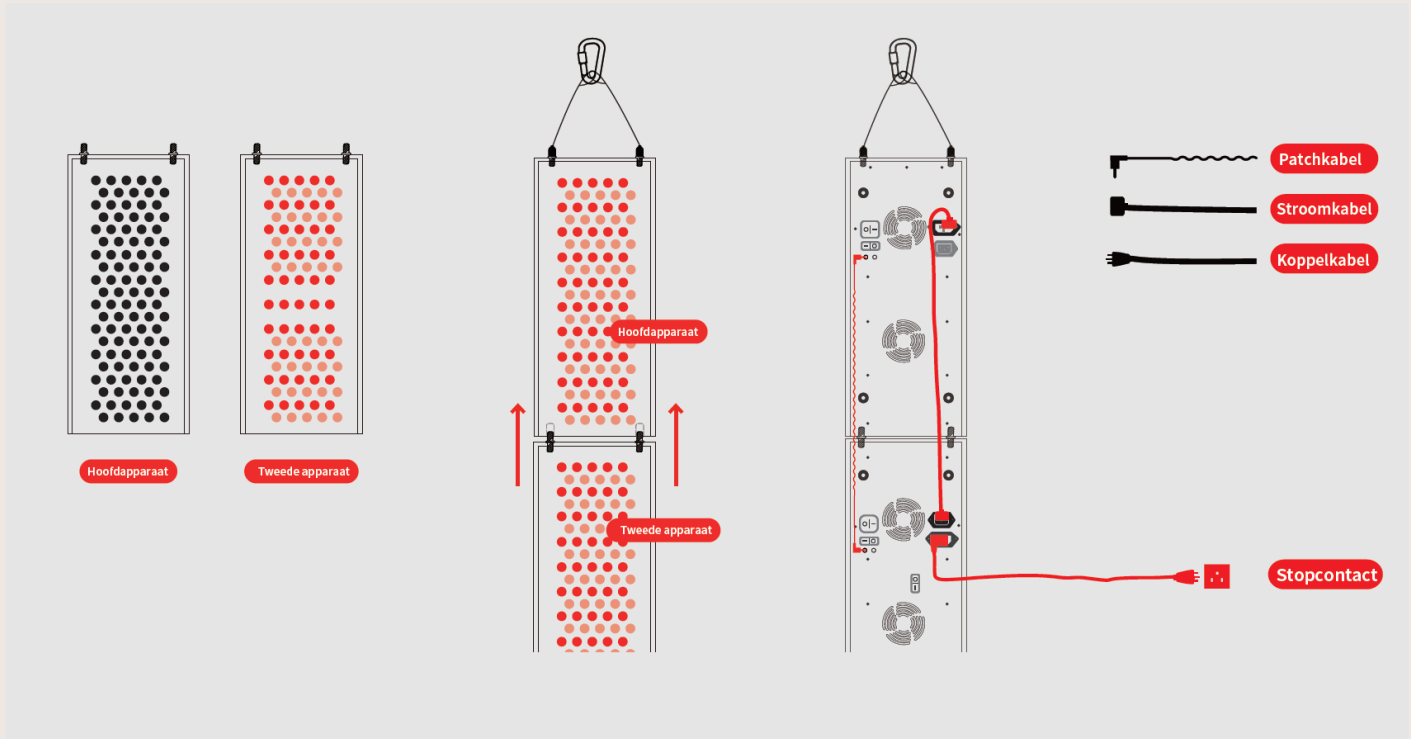


## Het instellen van de timer

U kunt de timer instellen door op de 'T' te drukken. Dit gaat per 1 min tot maximaal 20 min. Als de timer op de gewenste tijd staat drukt u op 'OK', het apparaat zal de sessie beginnen.

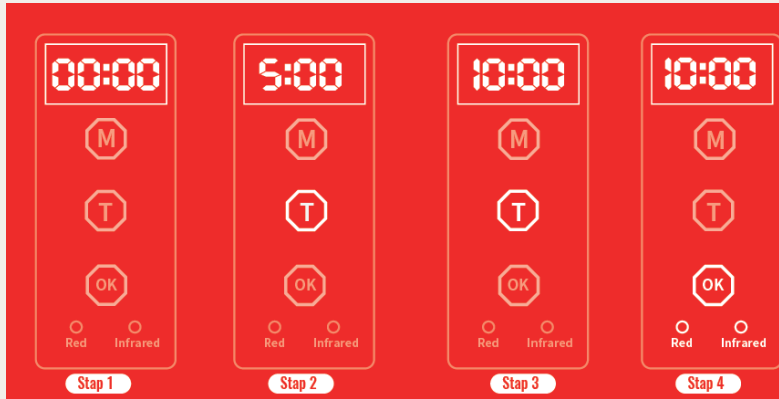

## Het instellen van het model


Druk op de 'M' knop om de verschillende lichtinstellingen te bedienen. Als u alleen roodlicht wilt, zorg er dan voor dat alleen de 'R' zichtbaar is. Als u alleen nabij-infrarood licht wilt, zorg dan dat alleen de 'I' zichtbaar is. Als u beide lichten aan wilt hebben zorg dan dat de 'R' en 'I' allebei in het scherm zichtbaar zijn. Als u meerdere apparaten aan elkaar koppelt hoeft u dit alleen maar op het primaire apparaat in te stellen. Druk op 'OK' om de sessie te beginnen.

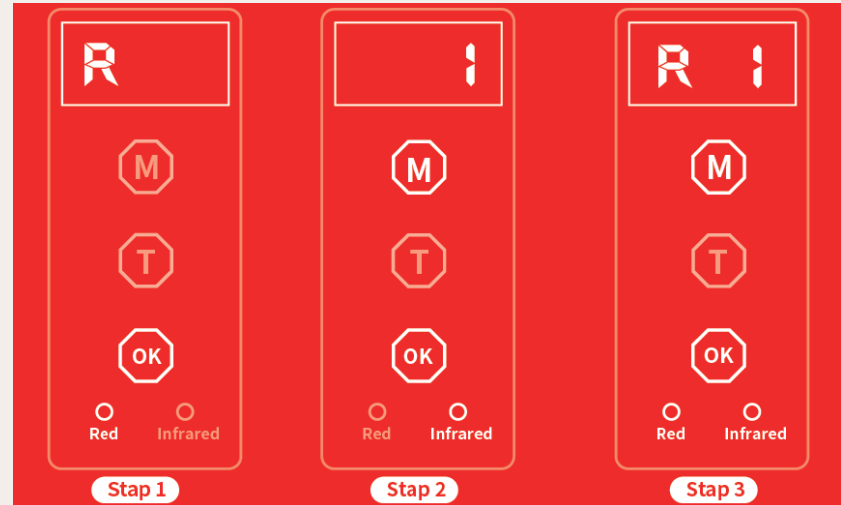

# VITAVÈR Y-Series

● Y-Light

● Y-Elite

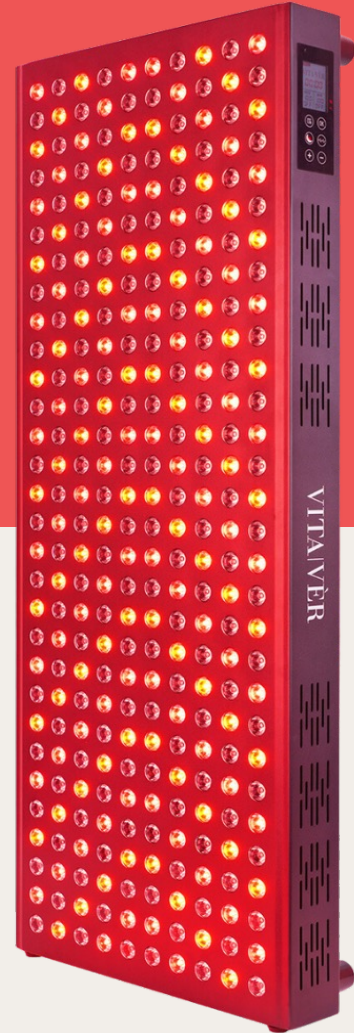

# VITAVÈR Y-Series

De VITAVÈR Y-Serie, het krachtigste en meest geavanceerde apparaat dat meer dan 160mw/cm<sup>2</sup> licht levert aan uw lichaam in 4 verschillende golflengten: 630 & 660 & 830 & 850 nanometer. Zoals u misschien al heeft gelezen, zijn dit wetenschappelijk bewezen golflengten van natuurlijk licht waarvan is aangetoond dat ze het grootste effect hebben op het menselijk lichaam.


De Y-Serie heeft een led-therapielichtstelsel, dat is uitgerust met een 5W dual-chip lichtbron en is het meest geavanceerde en hightech model van VITAVÈR. De timer- en koppelfunctie kennen we van de X-series. De Y-series introduceren aan u de helderheidsfunctie, slaapmodus, pulsfunctie en herstelmodus!

Neem de tijd om deze handleiding te lezen zodat u precies weet hoe u veilig en effectief kan genieten van de voordelen die kunnen worden verkregen door het gebruik van dagelijkse rood- en nabij-infraroodlichttherapie.


# Y-Series specificaties

Model	Y-Light	Y-Elite
Kracht	300W	1500W
Aantal LED's	60	300
Golflengten	630nm:660nm:830nm:850nm=1:1:1:1	630nm:660nm:830nm:850nm=1:1:1:1
Stralingshoek	60 Graden	60 Graden
Afmetingen	340x204x65mm	890x337x65mm
Bestraling (10cm)	>155mw/cm2	>175mw/cm2
Levensduur	10.000 uur	10.000 uur
Koelings-ventilatoren	1	4
EMF- uitstoot	0.0µT @10cm	0.0µT @ 10cm
Gewicht	4KG	12KG
Garantie	2 Jaar	2 Jaar
Het beste voor	Gerichte behandeling	Volledige lichaamsbehandeling


# Stralingssterkte & bereik

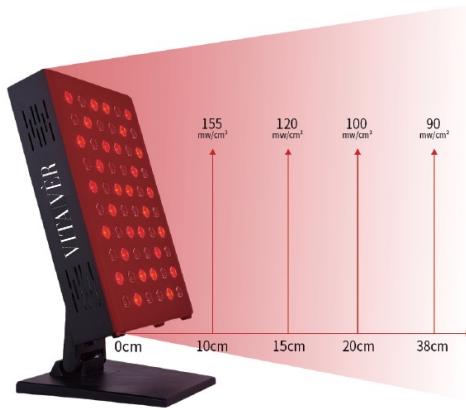

Y-Light

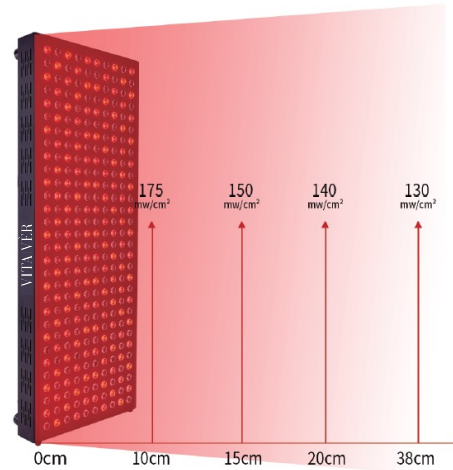

Y-Elite

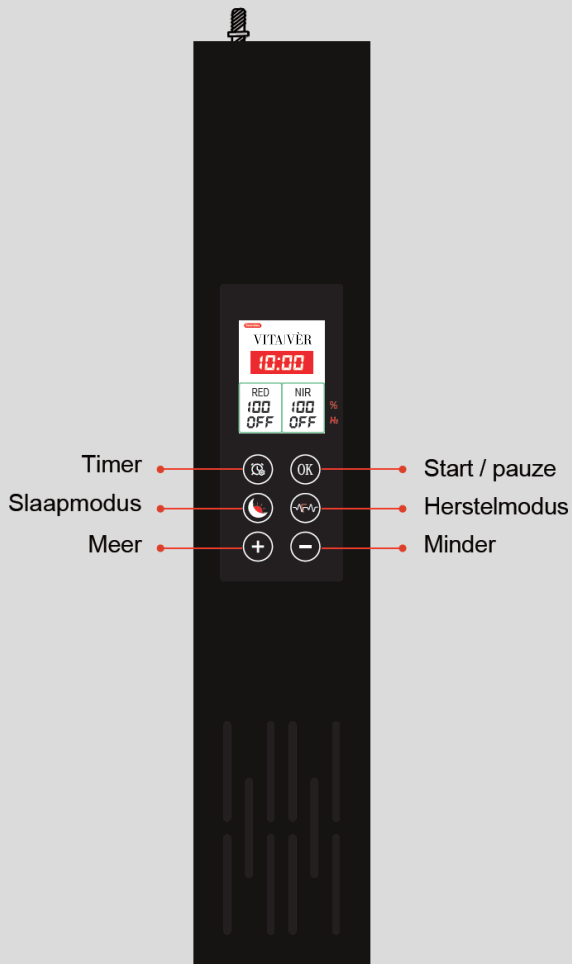

Timer: Stel de gewenste tijd in (1 tot 20 min), druk Timer 3 seconden in om te kiezen tussen koppelmodus of solo-modus (Houd ingedrukt om de host in te stellen voor de koppelfunctie)



Lichtmodus en slaapmodus: Kies Red (rood licht) en/of NIR (nabij-infrarood licht), en pas met + en – de lichtsterkte aan tussen 25%, 50%, 75% of 100%. (25% is optimaal voor slaapmodus)



Herstelmodus: Kies Red of NIR, +- stel in op gepulseerd licht 0 – 999hz (NIR op 10hz is optimaal voor herstelmodus)



Start / pauze



Meer tijd, hogere lichtsterkte, puls frequentie



Minder tijd, lagere lichtsterkte, puls frequentie



Primary/Secondary: Om meerdere lampen te koppelen (Druk de timerknop 3 seconden in)

Offline: Solo mode

Tijd 1 tot 20 minuten

Percentage van de lichtsterkte

Aan of uit  
Pulsfrequentie hertz

# VITAVÈR Y-Light



2



3



4



5



① VITAVÈR Y-Light

② Veiligheidsbril

③ Stroomkabel


④ Koppelkabel

⑤ Gebruikershandleiding




## Step 1

Trek de bovenkant naar u toe om het standaard uit te klappen, duw hem vervolgens stevig omhoog en draai hem rechtsonder.

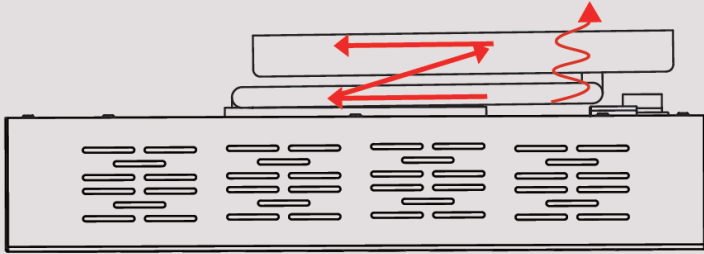


## Step 3

Druk de rode knop om en kijk op het display

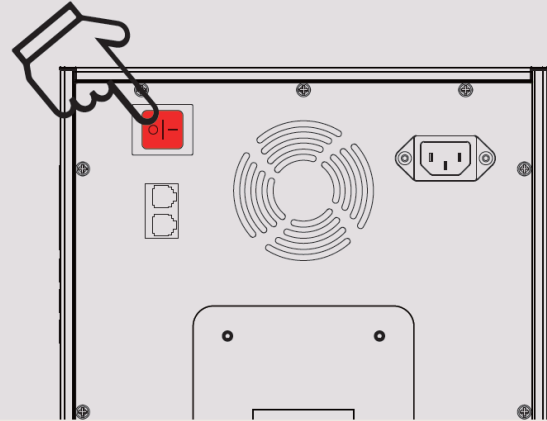


## Step 2


Stop de stroomkabel in het apparaat

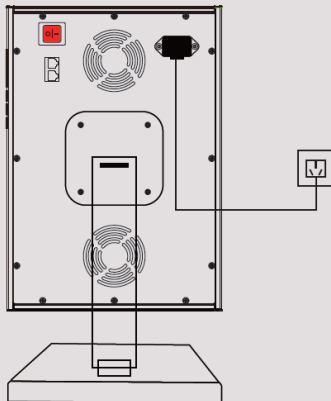

## Step 4

Stel het apparaat in naar eigen behoeften

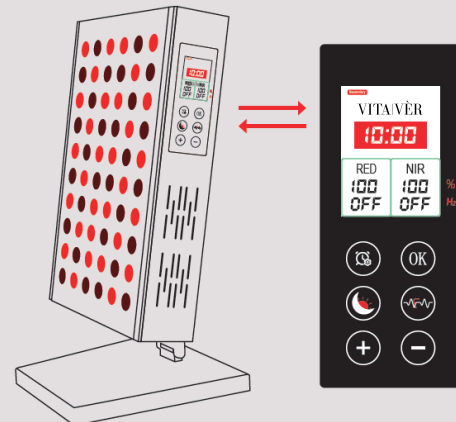

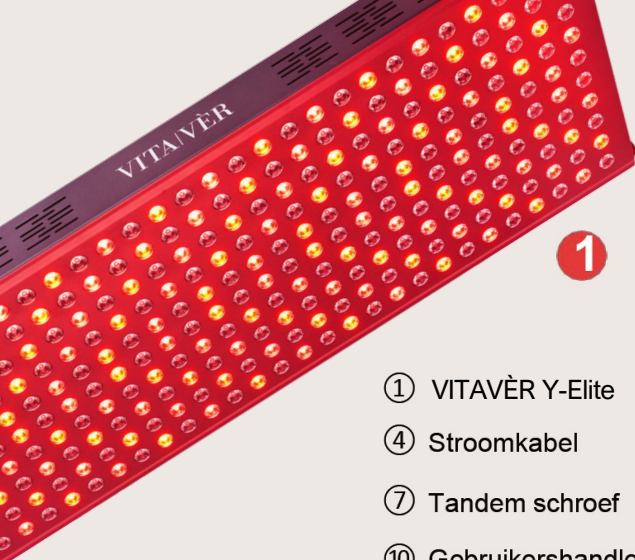

1

# VITAVÈR Y-Elite

- ① VITAVÈR Y-Elite
- ② Veiligheidsbril
- ③ Deurhanger
- ④ Stroomkabel
- ⑤ Patchkabel
- ⑥ Verstelbaar katrolsysteem
- ⑦ Tandem schroef
- ⑧ Hangkabel
- ⑨ Koppelkabel
- ⑩ Gebruikershandleiding

2



3



4



5



6



7



8




9




10



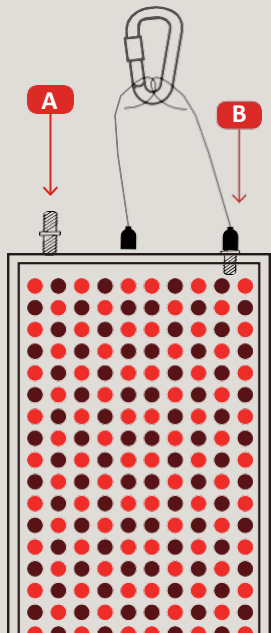


## Stap 1

Bevestig de ophangmaterialen. Schroef de draadstangen in de bovenkant van uw lamp. Schroef vervolgens de kabelsteunen aan de bovenkant van de palen met schroefdraad. Als u meerdere lichtlampen wilt koppelen, zie dan de volgende instructies

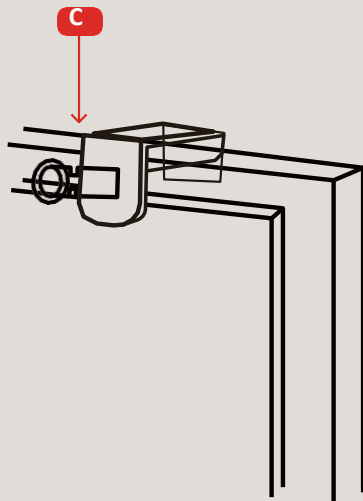


## Stap 2

Bevestig deurhaak: Hang de deurhaak aan elke standaardformaat deur. Indien twee haken, herhaal dan het proces.

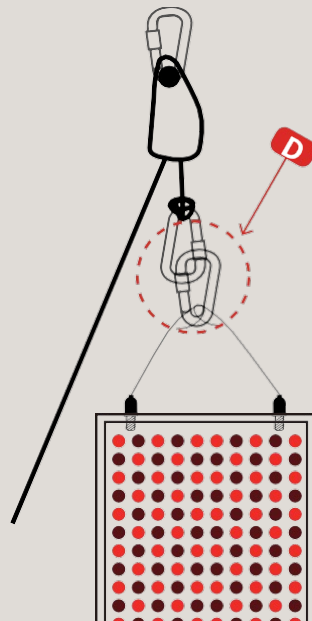

## Stap 3


Sluit hangkabels aan: Hang de deurhaak aan de bovenkant van de deur. Verbind de kabelsteunen met de klikverbinding. Vervolgens hangt u het andere uiteinde van de kabel direct aan de deurhaak. De hoogte van uw therapielamp aanpassen. Met de klikverbinding en de bijgevoegde kabelklem kunt u de hoogte van uw lamp aanpassen.

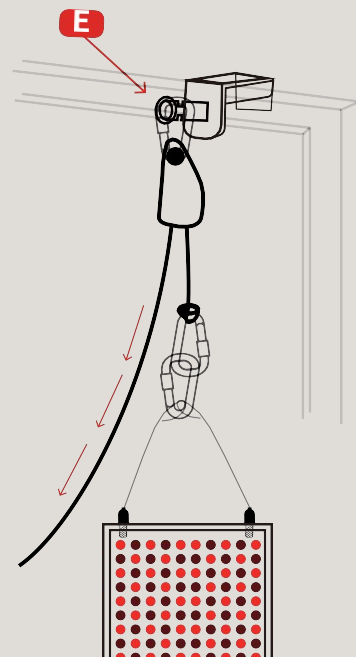

## Stap 4


Om uw lamp te verhogen, trekt u aan de verstel kabel terwijl u met uw andere hand de onderkant van uw lamp ondersteunt. Om uw lamp te verlagen, drukt u op de hendel op de kabelbox. Houd bij het verlagen de lamp vast!

# Meerdere Y-Series koppelen

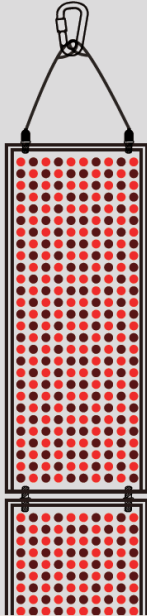

## Stap 1:

Om de lamp verticaal aan te sluiten, hangt u eerst uw deurhanger aan de deurhaak. Vervolgens tilt u de tweede lamp op en lijnt u de geleide ogen uit met de gaten in de bodem van het bovenste apparaat. Schuif de onderste geleide ogen in de gaten en duw ze terug om ze te vergrendelen.

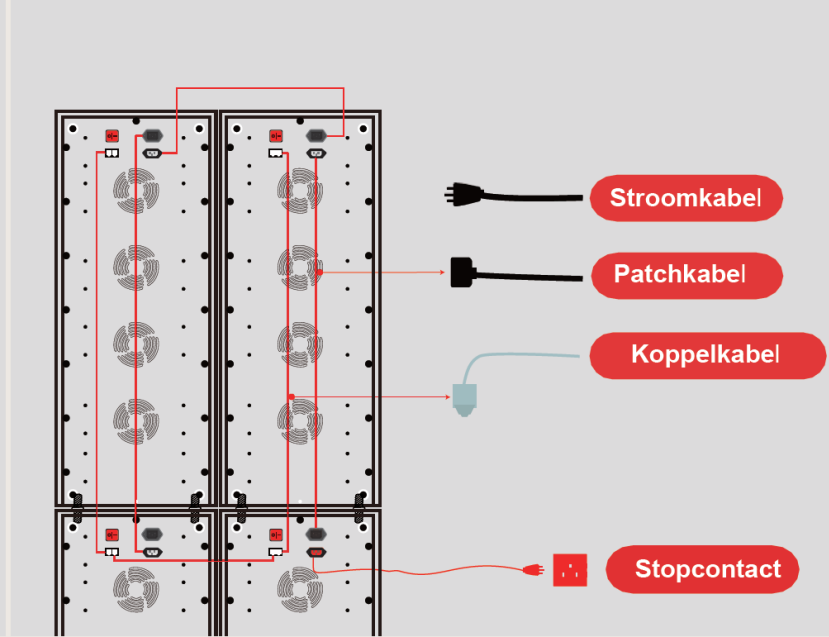

## Stap 2:

Sluit de stroomkabel, koppelkabel, en patchkabel aan. Kies één apparaat als host voor de koppelfunctie door de timerknop 3 seconden ingedrukt te houden (display toont primary). Wanneer het display 'primary' toont, betekent dit dat het apparaat de host is en direct zal er in het display van het andere apparaat 'secondary' komen te staan. Wanneer er 'offline' in het display staat, betekent dit dat u in solo modus zit.

# Veelgestelde vragen

## Welke behandeltime moet ik hanteren en hoe vaak per dag?

Een sessie van 10-15 minuten biedt het optimale resultaat. U kunt tot twee keer verspreid over de dag een sessie doen maar houd wel een maximale therapieduur van 20 minuten per dag aan. Overschrijdt u dit is dat niet schadelijk maar het kan mogelijk de positieve effecten verminderen.

## Hoeveel afstand moet ik houden van de lamp?

Dit hangt er vanaf wat u wilt behandelen. Wilt u een klein gebied behandelen voor bijvoorbeeld huidgenezing of spierherstel dan gaat u dichtbij zitten (15cm).

Het belangrijkste is dat het aangenaam voelt. Hoe verder u van de lamp af zit, hoe groter het oppervlak van uw lichaam dat wordt bereikt, maar hoe minder krachtig het licht is.

## Kan ik teveel rood lichttherapie gebruiken?

Ja. Teveel gebruik van rood lichttherapie is niet schadelijk, maar kan er wel voor zorgen dat de positieve effecten sterk verminderen. Dit betekent dus dat u uw behandeling voor niets heeft gedaan en dat wilt u ten allen tijden voorkomen. Houd daarom de instructies van VITAVÈR aan en overschrijdt niet de maximale therapieduur per dag van 20 minuten.

## Hoelang duurt het voor ik resultaat ga merken?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid sessies die u doet en welke voordelen u beoogt te bereiken.

Zo kunnen mensen na een enkele sessie al verbetering ervaren in huidgenezing, spierherstel en pijnvermindering. Andere behandelingen zoals voor huidverbetering (vermindering acné of psoriasis), betere slaap en een hoger energieniveau kunnen weer wat langer duren.

## Werkt rood lichttherapie door kleding en/of make-up?

Kleding en/of make-up zullen het licht deels of volledig blokkeren en dit zal dus invloed hebben op de effectiviteit van uw sessie. Om zeker te zijn van het best mogelijke resultaat, kunt het beste de sessie doen met een blote en schone huid.

## Zijn de lampen schadelijk voor mijn ogen?

Fel licht is niet prettig voor de ogen dus het advies is om gebruik te maken van de meegeleverde veiligheidsbril.

## Direct na mijn sessie lijkt alles voor een korte periode blauw of groen, hoe komt dit?

Tijdens de sessie worden uw ogen blootgesteld aan rood licht. Dit verhoogt de gevoeligheid voor andere kleuren. Wanneer uw sessie klaar is, valt het rode licht weg en hebben uw ogen even nodig om weer te normaliseren. Dit duurt meestal enkele seconden.

Dit hangt natuurlijk ook af het formaat van uw lamp. Mocht u het voor huidverbetering in het gezicht doen dan voldoet de X-Light of Y-Light. Mocht u het doen voor een hoger energieniveau dan is een groter formaat aan te raden voor sneller en meer resultaat.

Houd rekening met 4-8 weken gebruik voor het behalen van optimaal resultaat. Het belangrijkste bij rood lichttherapie is consistentie. Dagelijks gebruik is ideaal!

# Veiligheidsinstructies, waarschuwingen en disclaimer

Om de levensduur en functionaliteit van het apparaat te behouden, dient u het altijd op een koele en droge plaats te bewaren. Voor correct gebruik en veiligheid dient u deze handleiding te lezen en alle instructies op te volgen en mag u GEEN van de volgende dingen doen met het apparaat:

- Laat kinderen het apparaat NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Gebruik dit apparaat NIET bij baby's.
- Laat slapende, gehandicapte of bewusteloze personen het apparaat NIET gebruiken.
- Gebruik het apparaat NIET langer dan 20 minuten per therapiesessie.
- Gebruik het apparaat NIET op open, verse wonden.
- NIET gebruiken in combinatie met zalf of balsem of andere smeersels die warmte producerende bestanddelen bevatten. Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Wijzig dit apparaat NIET en probeer het NIET te repareren. Er zijn GEEN onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De lamp is een elektrisch apparaat.

Volg de volgende instructies om elektrische schokken en andere gevaren in verband met elektriciteit te voorkomen:

- Was elektrische onderdelen NIET met water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat NIET in water of andere vloeistoffen vallen en plaats het NIET op een plek waar het in water of andere vloeistoffen kan vallen of in vochtige ruimtes zoals de badkamer.
- Gebruik het apparaat NIET als het is gevallen, buiten heeft gestaan of in aanraking is gekomen met water of vloeistoffen.
- Stel het apparaat NIET bloot aan stromend water. Als het apparaat in contact komt of ondergedompeld wordt in water of een andere vloeistof, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Als het apparaat in de buurt van water wordt gebruikt, raden wij u aan een stopcontact te gebruiken dat beveiligd is met een aardlekschakelaar.
- Raak het apparaat NIET rechtstreeks aan met natte handen en raak de stekkers of schakelaars NIET aan met natte handen.
- Raak het apparaat NIET aan op of met een natte of vochtige huid.
- Schijnt het licht NIET op een natte of vochtige huid
- NIET aan het snoer trekken, dragen of optillen.
- Gebruik het apparaat NIET als het snoer beschadigd is.
- NIET gebruiken op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Dit apparaat NIET gebruiken op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan ontvlambare of brandbare producten of dampen. Er kan een explosie of brand ontstaan.
- Bewaar het apparaat NIET bij temperaturen van meer dan 50 graden Celsius.
- Gebruik het apparaat NIET als het beschadigd is. Gebruik van een beschadigd apparaat kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
- GEEN verlengsnoeren gebruiken, tenzij deze zijn ontworpen voor het totale vermogen van het apparaat dat van stroom wordt voorzien.
- Trek de stekker NIET uit het stopcontact door rechtstreeks aan het snoer te trekken. Pak de stekker zelf vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Dek de koelventilatoren NIET af terwijl u het apparaat bedient.

## Waarschuwingen

Wij raden u aan uw arts te raadplegen als u denkt dat u gevoelig bent voor licht. Ook als u verkoudheids- en allergiemedicijnen, pijnstillers en medicijnen gebruikt om infecties te behandelen want die kunnen lichtgevoeligheid veroorzaken.

Wij raden u ook aan uw arts te raadplegen voordat u het apparaat gebruikt als u zwanger bent, verdachte laesies hebt, kankerletsel hebt, een implantaat hebt, onlangs een steroïde-injectie hebt gekregen of topische steroïden gebruikt. Als u ongemak ervaart of zich zorgen maakt over het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met uw zorgverlener. Haal de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt om struikelgevaar te voorkomen.

Een sessie van 10-15 minuten biedt het optimale resultaat. U kunt tot 2 keer verspreid over de dag een sessie doen, maar houd wel een maximale therapieduur van 20 minuten per dag aan. Overschrijdt u dit is dat niet schadelijk, maar het kan mogelijk de positieve effecten verminderen.

Fel licht is niet prettig voor de ogen, maak daarom gebruik van de veiligheidsbril of houdt uw ogen dicht.

## Verwijdering

Het apparaat mag niet met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Het apparaat moet worden afgevoerd via een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrisch afval. Gelieve uw afvalmateriaal te recyclen om de natuurlijke hulpbronnen te sparen en de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.



## Disclaimer

Dit product is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, te genezen of te voorkomen. Wij geven geen claims, verklaringen of garanties met betrekking tot het vermogen van dit apparaat om uw lichamelijke, huid- of geestelijke toestand te genezen, zie dit als een hulpmiddel. Een gekwalificeerde gezondheidsdeskundige moet altijd worden geraadpleegd alvorens dit product te gebruiken voor aandoeningen die medische aandacht vereisen. De informatie van VITAVÈR is bedoeld voor onderwijs- en informatiedoeleinden en is niet bedoeld als medisch advies of als vervanging van medisch advies.

# Onderhoud en garantie

## Onderhoud

Het apparaat vereist geen ander onderhoud dan basisonderhoud en regelmatige reiniging. Het apparaat is gemakkelijk schoon te maken: haal de stekker uit het stopcontact en veeg het oppervlak af met een licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of bleekmiddel, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat droog is voordat u het weer gebruikt. Om veiligheidsredenen is het apparaat alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Wijzig dit apparaat niet en probeer het niet te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

## Garantie

We hechten er veel waarde aan dat u zorgeloos gebruik kunt maken van onze roodlichttherapie lampen. Kwaliteit en service zijn dan ook onze beloften. Omdat wij echt overtuigd zijn van de kwaliteit van onze producten, bieden wij 1 jaar garantie op de Essential GO en 2 jaar op alle andere VITAVÈR producten.

Wij garanderen dat het apparaat werkt en presteert binnen de specificaties gedurende de garantieperiode. De garantie dekt alle onderdelen gedurende de garantieperiode met bepaalde uitzonderingen waarbij het specifieke onderdeel niet te vervangen valt. Indien nodig is de koper zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van het apparaat naar ons binnen de garantieperiode van het desbetreffende product. De garantie is niet van toepassing op een apparaat dat verkeerd is gebruikt, gewijzigd, beschadigd of uitgerust met andere dan de gefabriceerde onderdelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of ongemakken veroorzaakt door gebreken aan ons product. Na afloop van de garantieperiode is de koper verplicht alle onderdelen en arbeidskosten voor eigen rekening te nemen. Bij reparatie of vervanging, binnen of buiten de garantieperiode, behouden wij ons het recht voor om onderdelen te leveren of te vervangen in andere kleuren dan het originele apparaat. Voor garantieservice kunt u ons een e-mail sturen.

# VITA | VÈR