

GEBRUIKSAANWIJZING



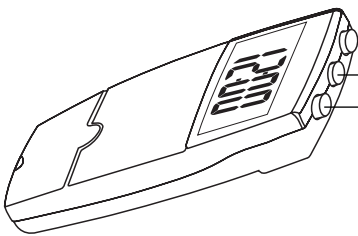
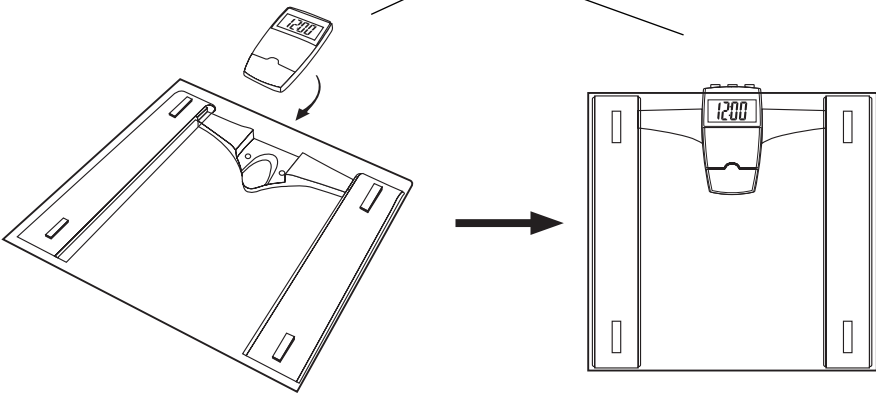
INTRODUCTIE

De Fysic FW-180 is een personenweegschaal met uitneembare uitleesunit die u op ooghoogte aan de wand kunt bevestigen voor een optimale aflezing van uw gewicht.

In rust wordt de actuele tijd op het display van de uitleesunit weergegeven en om op vaste tijden uw gewicht op te nemen, is de FW-180 voorzien van een alarmfunctie die op de ingestelde tijd beetonen laat klinken.

OVERZICHT WEEGSCHAAL EN UITLEESUNIT

Uitneembare uitleesunit



SET

om de actuele tijd en de alarm-tijd in te stellen



om bij het programmeren te verhogen;
tevens alarm in/uit schakel-toets



om bij het programmeren te verlagen;
tevens toets om gewicht te bepalen als de uitleesunit los van de weegschaal is

INSTALLATIE

Batterijen in weegschaal:

De weegschaal wordt gevoed door 4 stuks 1,5 Volt penlite batterijen van het formaat AAA (potloodcel). Bij voorkeur Alkaline batterijen plaatsen. Batterijen zijn niet meegeleverd.

1. Leg een handdoek op een vlakke ondergrond (tafel).
2. Neem de weegschaal op en leg deze met de glasplaat naar onder op deze handdoek.
3. Schuif de batterijdeksel aan de onderzijde van de weegschaal af.
4. Plaats 4 stuks 1,5V batterijen, formaat AAA, zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven.
5. Schuif de batterijdeksel terug.

Plaatsen weegschaal:

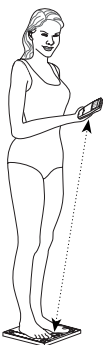
De weegschaal dient op een harde en vlakke ondergrond geplaatst te worden. De weegschaal is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Batterijen in uitleesunit:


De uitleesunit wordt gevoed door 2 stuks 1,5 Volt penlite batterijen van het formaat AAA (potloodcel). Bij voorkeur Alkaline batterijen plaatsen. Batterijen zijn niet meegeleverd.

1. Schuif de batterijdeksel aan de onderzijde van de uitleesunit af.
2. Plaats 2 stuks 1,5V batterijen, formaat AAA, zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven.
3. Schuif de batterijdeksel terug.

Plaatsen uitleesunit:



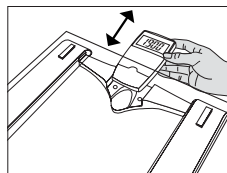Naar keuze kunt u de uitleesunit in de weegschaal plaatsen of kunt u deze boven de weegschaal op ooghoogte aan een schroef aan de wand bevestigen.



U kunt de uitleesunit ook in de hand houden tijdens het wegen. Bij bevestiging aan de wand of bij het vasthouden van de uitleesunit dient u er op toe te zien dat er een zichtverbinding moet zijn tussen de weegschaal en de uitleesunit.

TIJD INSTELLEN





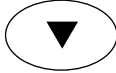

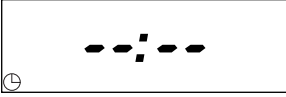















In rust geeft het display van de uitleesunit de actuele tijd in. Deze tijd dient u éénmalig in te programmeren. Volg hiertoe het onderstaande schema:

1. 3 seconden indrukken   de uren-weergave gaat knipperen
2. stel de uren in   
3. kort indrukken   de minuten-weergave gaat knipperen
4. stel de minuten in   
5. kort indrukken   de tijd is ingesteld

Na het vervangen van de batterijen in de uitleesunit, dien u de tijd opnieuw in te stellen.

ALARM INSTELLEN

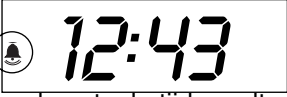Om op regelmatige tijden uw gewicht op te nemen, kan de weegschaal dagelijks op een vast ingestelde tijd attentie-beeps laten klinken. Als volgt stelt u dit alarm in:

- weergave op het display:
1. kort indrukken   of 
 2. schakel de alarmfunctie in of uit:
   alarmfunctie ingeschakeld |  alarmfunctie uitgeschakeld
 3. 3 seconden indrukken   uren-weergave knippert
 4. stel de uren in    | 
 5. kort indrukken   minuten-weergave knippert
 6. stel de minuten in   
 7. kort indrukken  
 8. kort indrukken   de actuele tijd wordt weergegeven + het alarm symbool licht op

GEBRUIKEN

Indien de uitleesunit in de weegschaal geplaatst is:

1. Stap op de weegschaal; de tijdweergave verdwijnt en de weegschaal start het opnemen van uw gewicht. (tijdens het bepalen van uw gewicht verloopt de display-uitlezing)
2. Zodra de weegschaal uw gewicht bepaald heeft, knippert het display 3x en wordt uw gewicht weergegeven.
3. Stap van de weegschaal af. Na ruim een minuut geeft het display weer de actuele tijd aan.

Indien de uitleesunit aan de wand bevestigd is of in de hand gehouden wordt:

1. Stap op de weegschaal en druk kort op toets **Kg** (= toets ▼) van de uitleesunit; de tijdweergave verdwijnt en uw gewicht verschijnt in het display. (tijdens het bepalen van uw gewicht verloopt het display)
2. Zodra de weegschaal uw gewicht bepaald heeft, knippert het display 3x en wordt uw gewicht weergegeven.
3. Stap van de weegschaal af. Na ruim een minuut geeft het display weer de actuele tijd aan (of druk op toets **SET** om direct de tijd weer te geven)

Alarm:

Als de alarm-beeps klinken kunt u op een willekeurige toets drukken om dit signaal uit te schakelen. Het alarmsignaal wordt dagelijks herhaald totdat u het uitschakelt zoals op de vorige pagina is beschreven.

BATTERY-LEEG EN OVERBELASTING WAARSCHUWING

Het display van de uitleesunit geeft aan wanneer de batterijen in de uitleesunit of in de weegschaal aan vervanging toe zijn of wanneer de weegschaal overbelast wordt:

b-Lo

batterijen in de weegschaal zijn bijna leeg

h-Lo

batterijen in de uitleesunit zijn bijna leeg

Err

het maximaal belastbaar gewicht van 180Kg wordt overschreden

(VEILIGHEID) TIPS EN ONDERHOUD

- Ga niet met natte of vochtige voeten op de weegschaal staan. Het gevaar bestaat dat u uitglijdt.
- Ga niet op de rand van de weegschaal staan en spring niet op of van de weegschaal; deze kan hierdoor omkiepen.
- Sta stil tijdens het bepalen van uw gewicht.
- De FW-180 is een precisie-instrument; laat deze niet vallen en behandel de weegschaal met beleid.
- Laat geen zware voorwerpen op de glasplaat van de FW-180 vallen.
- De weegschaal alleen op een horizontale, vlakke en stabiele ondergrond gebruiken.
- De weegschaal alleen met een licht-vochtige doek reinigen. Gebruik geen agressieve of chemische reinigingsmiddelen en dompel de weegschaal niet onder water.
- De FW-180 is niet geschikt voor handelsdoeleinden.
- De weegschaal is geen speelgoed. Houd de weegschaal buiten bereik van kinderen.

HET TOESTEL VERWIJDEREN (MILIEU)



Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------------|--|
| Voeding weegschaal:..... | 4x 1,5Volt, formaat AAA of potloodcel |
| Voeding uitleesunit: | 2x 1,5Volt, formaat AAA of potloodcel |
| Batterij levensduur..... | > 1 jaar |
| Maximaal belastbaar gewicht | 180Kg |
| Weegnauwkeurigheid..... | 100 gram |
| Gebruikstemperatuur..... | 5 - 45°C (bij 85% relatieve vochtigheid) |

GARANTIEBEWIJS

Op de Fysic FW-180 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Hoe te handelen:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer +31 (0) 73 6411 355.

De garantie vervalt:


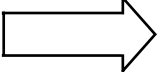


Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, bliksem-inslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Fysic FW-180 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



| | | |
|--|---|---|
| Service  |  | FYSIC [®] |
| Help  | |  +31 (0) 73 6411 355 |