


IPL Photorejuvenation de gebruikershandleiding van de Haarverwijdering

Lees deze instructie zorgvuldig voor gebruik

Productbeschrijving:

Het instrument gebruikt de IPL-technologie van de fotonische schoonheid en gebruikt intens gepulseerd licht om de huid direct te verlichten om fotobiochemische actie te produceren. Enerzijds kan het de regeneratie van collageenvezels en elastische vezels in de huid herschikken, de huidelasticiteit herstellen, de bloedmicrocirculatie verbeteren en rimpels verwijderen of verminderen. Anderzijds, kan het sterke gepulseerde licht de huid doordringen en selectief door de pigmentgroep en de capillaire buis in het weefsel worden geabsorbeerd. De warmte-energie kan het bloed laten stollen en de pigmentgroep ontbinden op voorwaarde dat het normale huidweefsel niet wordt vernietigd, waardoor de capillaire expansie wordt verlicht, de kleurvlekken worden verwijderd en het overtollige haar enz. wordt verwijderd.

Productprofiel:

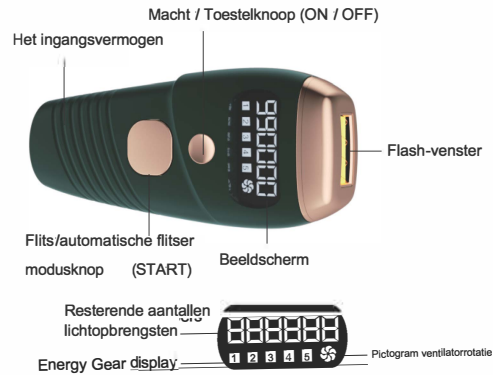

Huidtest:

Voordat u het eerst of na het zonnen gebruikt, voert u een huidtest uit voor elke behandelingsplaats. Huidtest is een noodzakelijke stap om de reactie van de huid op de behandeling te controleren en te beslissen om de juiste lichtintensiteit op een bepaalde plaats te gebruiken.

1. Kies een gebiedsdosis aan de behandelingskuur;
2. Tum op de kracht van het instrument, en selecteer de eerste versnelling standaard
3. Plaats de instrumentdosis op uw huid en druk vervolgens op de flitsknop om een flits uit te zenden;
4. Wacht na het voltooien van de huidtest 24 uur om te controleren of er een reactie op de huid is. Als de huid reageert, selecteer dan een tandwiel dat geen huidreactie veroorzaakt en gebruik het in de daaropvolgende ontharingsbehandeling.

Geschikt voor huidskleur:

Toepassingsgebied: liphaar, okselhaar, lichaamshaar van ledematen, haarlijn van voorhoofdhaar, enz. Pijnloze ontharing is geschikt voor zwart haar en donker haar mensen, niet geschikt voor wit, grijs, gouden haar; raadpleeg de volgende vergelijkingskaart voor meer informatie

Huidskleur en haarcontrastkaart

SKIN COLOR	WIT	BEIGE	LICHTBRUIN	BRUIN	DONKERBRUIN	ZWART
HAIR COLOR						
WIT/GRIJS	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ROOD	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
LICHTBLOND	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
DONKERBLOND	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
BRUIN	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
DONKERBRUIN	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
ZWART	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗

Voorzorgsmaatregelen:

1. Mensen met een huidperceptie stoornis zullen het niet gebruiken;
2. Allergische dermatitis, eczeem en andere huidziekten, allergische constitutie, mogen niet worden gebruikt
3. Het mag niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie of borstvoeding;
4. Degenen die bijna 2 weken aan zonlicht zijn blootgesteld, mogen het niet gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

Vorbereiding voor gebruik:

1. Verwijder eerst het haar op het oppervlak van de huid en doe de voorbehandeling van de huid, maar vóór het scheren moet het haar worden gehydrateerd (het beste effect is om zeep of douchegelballetjes te gebruiken om het haar te bevochtigen), anders is "droog scheren" gemakkelijk te scheren schade aan het stratum comeum op het huidoppervlak, waardoor allergieën ontstaan;
2. Reinig de huid en bevestig dat er geen duidelijk haar op het oppervlak is, het is volledig droog en er is geen olieachtige substantie. Voordat u het apparaat voor het verwijderen van folonhaar gebruikt, is het ten strengste verboden om aan te brengen... condensatie, aloë vera gel en andere producten. Anders veroorzaakt het geen licht.

Productparameters:

Naam van het product: IPL fotorejuvenatie ontharing

Instrument principe: IPL foton schoonheid technologie

Netto gewicht: 220g

Ingang: 12V / 2A

Vermogen: 24W

Certificering

Fabricagedatum: _____

Kwaliteitsinspectie: _____

Stappen voor gebruik:

1. Gebruik vóór gebruik een wattenstaafje of een stofvrije doek gedompeld in medische alcohol om de lichtuitgang en het filter van het instrument schoon te maken (als het niet vuil is, maak het dan niet schoon). Houd de lichtuitgang droog voor gebruik, anders wordt het licht beïnvloed;
2. Sluit de stekker aan, houd de UIT-knop 3 seconden ingedrukt, het aantal beschikbare tijden en tandwielen worden weergegeven wanneer de machine wordt ingeschakeld en de ventilator draait pictogram;
3. De AAN / UIT-schakelaar is ook een tandwielknop. Klik op de "tandwielknop" om de juiste versnelling te selecteren. Het display toont het energietoestel, het eerste tandwiel is het kleinste, het vijfde tandwiel is het grootste en het tandwiel kan cydisch worden aangepast
4. Nadat u de tandwielpositie hebt aangepast, plaatst u de lichtuitlaat van het apparaat volledig dicht bij het te ontharen huidgedeelte en drukt u op de flitsknop om licht uit te stralen.
5. Houd de flitsknop 3 seconden ingedrukt om de automatische flitsmodus in of uit te gaan en de tekens op het scherm knipperen om aan te geven dat de automatische flitsmodus is ingeschakeld; de vijfde stap van de cyclus is om eenmaal te knipperen op elk huidgedeelte dat moet worden onthaard, langzaam te bewegen en het licht drie keer tegelijk te herhalen, maar niet op dezelfde plaats drie keer achter elkaar. U moet het hele gebied van het onthaarde gebied verwijderen. Herhaal 2 keer. (Omdat drie opeenvolgende verlichting van dezelfde plaats warmer en gemakkelijker te verbranden zal zijn) na het gebruik van het ontharingsapparaat, breng aloë vera-gel selectief aan (of niet toepassen). Nadat u het apparaat hebt gebruikt, houdt u de "AAN / UIT-knop" gedurende 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen en de stroom op tijd af te sluiten. Na gebruik kunnen er kleine zwarte vlekken aan het filter van de lampkop zijn bevestigd, die met alcohol kunnen worden schoongemaakt.

Referentietabel van de behandelingscyclus:

Tijd	Frequentie	Effect
1-4 weken	2-3 keer per week	meer dan 75% van het haar begint op natuurlijke wijze af te vallen
5-6 weken	twee keer per week	nieuw haar valt af en remt de groei
6-7 weken	een keer per week	haar wordt dunner en minder, niet meer rebound
7-8 weken of meer	Gebruik 1 of 2 keer per week	volgens de haargroei-status, selectief gebruik (wanneer het haar groeit, kan het opnieuw worden gebruikt totdat het niet meer groeit)

Een behandeling voor ontharing is om 3 keer te bestralen. Na het bestralen van het gebied van de haarverwijdering, doe de 2e en 3e keer. Geef het licht niet drie keer op dezelfde plaats.

Hoe hoger de versnelling, hoe hoger de energie en hoe beter het effect. Het wordt aanbevolen om in een vroeg stadium 1-2 versnellingen te gebruiken. Nadat de huid zich heeft aangepast, kunt u ervoor kiezen om 3-5 versnellingen te gebruiken. Het interval van de behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke haargroei snelheid. Elk deel van het lichaam zal anders zijn.

Gebruik compleet:

1. Er kan lichte roodheid, zwelling of tintelingen of warmte op de huid zijn. Deze reacties zijn onschadelijk en verdwijnen snel;
2. Na 2 uur gebruik van het instrument kunt u veilig lotion, crème, deodorant, vochtinbrengende producten of cosmetica op de behandelingsplaats aanbrengen. Als de huid na de behandeling geïrriteerd of rood en gezwollen is, wacht dan tot deze aandoeningen verdwijnen. Breng vervolgens elk product op de huid aan. Als de huid tintelt na het aanbrengen van het product, spoel het dan af met water.

Product onderhoud:

1. Schakel na gebruik onmiddellijk de stroom van het apparaat uit, verwijder de stekker en laat het instrument afkoelen;
2. Bevochtig de schone zachte doek met een beetje water en gebruik het om de volgende delen schoon te maken: filter, huidcontactblad;
3. Bewaar het instrument op een droge plaats waar de temperatuur tussen 0°C en 60°C ligt zonder stof.

Probleemoplossing:

Apparaat / voedingsadapter wordt warm tijdens gebruik	Oorzaak Dit is normaal fenomeen	Oplossing u hoeft geen actie te ondernemen
Ik leg de epilator op mijn huid, (de flitsfilter is klaar) het indicatielampje gaat niet branden, maar de koelventilator begint te draaien.	Oorzaak het apparaat moet worden gereset	Oplossing wanneer de oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd, draait de ventilator nog steeds, schakel de voeding niet uit, wacht 15 minuten om af te koelen voordat u het blijft gebruiken

Geuren die vrijkomen bij gebruik van het apparaat	Vuile accessoires of filters;	Reinig de accessoires zorgvuldig
Tijdens de behandeling voelt de huid gevoeliger aan dan normaal en voelt het ondraaglijke pijn bij het gebruik van het apparaat	Je hebt het haar niet volledig verwijderd van de behandelingsplaats, zodat het kan branden en een gear kan ontwikkelen	Alvorens dit instrument te gebruiken, te verwijderen gelieve het haar op de oppervlakte van de huid;
	De lichtintensiteit die u gebruikt is te hoog	Controleer en bevestig of u de juiste instelling voor lichtintensiteit hebt gekozen. Indien nodig, verlaag de instelling
	U het haar niet volledig hebt verwijderd van de behandelingsplaats	Alvorens dit instrument te gebruiken, te verwijderen gelieve het haar op de oppervlakte van de huid;
	Het UV-filter aan de uitlaat is beschadigd	Gebruik dit apparaat niet meer als het UV-filter beschadigd is
	u gebruikt dit apparaat op een ongeschikte plaats, uw huidskleur is niet geschikt voor het gebruik van dit product voor behandeling	Gebruik het apparaat niet op Tepele, tepelhof, kleine schaamtepijpen, vagina, anus, neusgaten en binnenkant van de oren. Mannelijke gebruikers mogen het apparaat niet op het gezicht of scrotum gebruiken
	De lichtintensiteit die u gebruikt is te laag	Kies de volgende keer een hogere instelling
Niet tevreden met het resultaat van de behandeling	Je hebt geen ander licht laten schijnen rond het eerder behandelde gebied	Flits zo dicht mogelijk bij de vorige positie
	Dit apparaat heeft geen effect op je haarkeur	Als je haar licht goud, goud of rood is, zullen deze behandelingen niet effectief zijn. Om af het haar met succes te verwijderen, wordt aanbevolen de aanbevolen behandeling te volgen. U kunt het interval verkorten, maar u mag niet meer dan één keer per dag behandelen
	Als de frequentie van het gebruik van het instrument onvoldoende is, kan uw reactie op IPL-behandeling traag zijn	Blijf het apparaat gedurende ten minste 6 maanden gebruiken, omdat tijdens deze periode regurgitatie en haarverlies optreden

Operationele Overwegingen:

1. Tijdens verrichting, zullen de ogen niet direct naar de lichte afzet kijken of direct op de ogen flitsen;
2. Na verrichting, is de milde roodheid van de huid normaal, die door ijscompress of door zelf kan worden koel zijn;
3. Bij het reinigen van het vuil op de glasplaat in de uitlaat, spuit geen alcohol direct op de uitlaat;
4. Bij het bedienen van het instrument is het niet toegestaan om gelatineachtige cosmetica op de huid aan te brengen, zoals verslaafd aan het, om schade aan het instrument te voorkomen;
5. Probeer tijdens de operatie geen lichtgevoelig voedsel te eten, zoals spinazie, koolzaad, mosterd enz.
6. Pas het energieniveau aan van zwak naar sterk. Onder de voorwaarde van het niet beschadigen van de huid, hoe groter de energie, hoe beter het effect.
7. Mensen met een donkere huid kunnen een vertraagde huidreactie hebben en kunnen de energie niet verhogen omdat de onmiddellijke reactie niet duidelijk is;
8. Besteed aandacht aan huidhydratie en zonbescherming na ontharing;
9. Vermijd blootstelling aan ultraviolette stralen tijdens gebruik. Doe zonnescherm bescherming wanneer het uitgaan, probeer computerstraling op het werk te vermijden, isolatiecrème en zonnebrandcrème beschermende laag toe te passen;
10. Tijdens gebruik, gelieve te blokkeren niet de luchtinham, om het werk van de machine niet te beïnvloeden; 11. Tijdens het gebruik, als haar of vlekken aan het plastic aan de rand van de uitlaat blijven plakken, zal het ervoor zorgen dat het plastic aan de rand van de uitlaat zwart wordt of zwarte vlekken produceert, maar het zal de prestaties en het normale gebruik van het instrument niet beïnvloeden;
12. de instrumentuitlaat in de "lichtgevende buis, in de latere periode van het gespecificeerde leven, zal de binnenwand van de buis verschillende graden van zwartmakend fenomeen lijken, behoort tot het normale verouderingsproces van de t UBS, in het leven van de energievervalsnelheid zal het gespecificeerde bereik niet overschrijden, kan normaal worden gebruikt;
13. Het product heeft geen waterdichte functie. Gebruik het niet in de badkamer, douche of een andere plaats waar het gemakkelijk water kan krijgen.
14. Als de schaal of het venster van het product beschadigd is of het instrument per ongeluk in water is ondergedompeld, stuur het dan terug naar de fabrikant voor reparatie om te bepalen of het na reparatie opnieuw kan worden gebruikt. Als het in water met levende macht wordt ondergedompeld, te halen gelieve de macht alvorens het instrument te contacteren om uw veiligheid te verzekeren;
15. Vermijd opslag op plaatsen met sterk magnetisch veld, ernstig vocht en stof of op plaatsen met hoge temperaturen;
16. Raak het instrument niet sterk aan of raak het niet aan; 17. Het is verboden om het product te gebruiken voor andere doeleinden dan de opgegeven functies.