

# palmwood.

## Shiatsu Nek en Schouder Massagekussen


Handleiding




Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing heel goed door en bewaar deze voor toekomstige gebruik.

# Product Onderdelen

## A Massagekussen

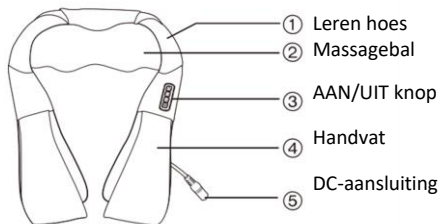

## B Voedingsadapter

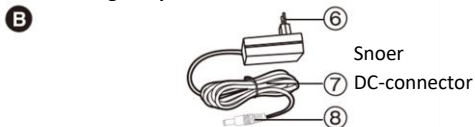

## C Auto Adapter



# Technische Specificaties

**Ingangsspanning massagekussen:** 12 V DC





**Vermogen:** 24 W

**Ingangsspanning voedingsadapter:** 100- 240 V

**Frequentie voedingsadapter:** 50 Hz

Opmerking: Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# Product Functies

Functie	Omschrijving
	<b>AAN/UIT</b> Snel en eenvoudig in- of uitschakelen. De timer schakelt het apparaat automatisch uit na 15 minuten.
	<b>Snelheid</b> Pas de kneedsnelheid eenvoudig aan je wensen aan.
	<b>Rotatie</b> Pas eenvoudig de richting van de kneedbeweging aan om de belangrijkste spanningsknopen (trigger points) aan te pakken.
	<b>Warmtemodus</b> Activeer of stop eenvoudig de warmtefunctie.

# Veiligheidsinstructies



De volgende basisveiligheidsrichtlijnen moeten altijd worden gevolgd bij het gebruik van elektrische apparaten om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te verminderen:

**let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken.**

1. Lees alle instructies volledig door en bewaar alle instructies voor toekomstig gebruik.
2. Let op risico's en consequenties die verbonden zijn aan het verkeerd gebruik van het apparaat. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
4. Gebruik het apparaat NIET: Als je zwanger bent; Als je een pacemaker of elektronische implantaten; kunstgewrichten; een hoge bloeddruk; botbreuken, spierziekte,-blessures; circulatieproblemen; blauwe plekken; tumoren; trombose; onstekingen; diabetes; spataderen; open wonden; geelzucht; circulatie problemen; zenuw afwijkingen; of andere gezondheidsproblemen hebt. Als je onverklaarbare pijn hebt; op de buik; bij organen; bij de gewrichten; op de botten; (on)verklaarbare blessures; ruggengraat; nek; hoofd; rondom de genitalien; zwakke/herstellende gebieden; littekens en op verbrandde/gevoelige huis.
5. Gebruik dit apparaat niet tijdens het rijden.
6. Als je tijdens de massage pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk en raadpleeg je arts.
7. Dit apparaat is geen vervanging voor behandelingen van een arts of fysiotherapeut.

8. Raadpleeg eerst je arts of fysiotherapeut, voordat je het apparaat gebruikt bij onverklaarbare pijn, medische behandelingen ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
9. Gebruik dit apparaat niet als je olie of lotions op je huid hebt aangebracht.
10. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de voedingsadapter uit het stopcontact.
11. Neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat je tijdens het gebruik niet in slaap valt.
12. Draag dit apparaat niet aan het snoer.
13. Maak dit apparaat nooit schoon tenzij het is losgekoppeld van het stopcontact. Gebruik voor het reinigen een lichtvochtige doek en droog daarna onmiddellijk het apparaat. Gebruik dit apparaat enkel als het helemaal droog is.
14. Gebruik dit apparaat niet onder een deken of kussen. Hierdoor kan oververhitting optreden die brand, elektrische schokken of persoon-lijk letsel kan veroorzaken.
15. Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Gebruik dit apparaat nooit als je nat bent.
16. Dompel dit apparaat niet onder in water en stel het niet bloot aan vloeistoffen.
17. Dit apparaat is alleen geschikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik. Bij commercieel of professioneel gebruik vervalt de garantie. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor letsel of schade als het apparaat voor iets anders is gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.
18. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
19. Laat het snoer niet in een positie rusten die struikelgevaar kan veroorzaken en zorg ervoor dat kinderen er niet aan kunnen trekken.
20. Plaats het snoer niet in de buurt van verwarmde oppervlakken.
21. Gebruik het apparaat niet als het gevallen of beschadigd is.
22. Controleer het snoer en de voedingsadapter regelmatig op eventuele beschadigingen. Als er schade is aan het snoer of de voedingsadapter, moet deze worden gerepareerd door de fabrikant of een gekwalificeerde vakman.
23. Gebruik alleen originele onderdelen als dit apparaat gerepareerd of onderhouden moet worden.

24. Als het apparaat op wat voor manier dan ook slecht begint te werken, moet je de voedingsadapter uit het stopcontact halen en onmiddellijk stoppen met het gebruik.
25. Gebruik geen smeermiddel, reinigingsmiddel, polijstmiddel, glans-middel, haarverf of luchtverfrisser op enig onderdeel van dit apparaat.
26. Gebruik geen benzine of andere brandbare producten (bijv. alcohol, benzeen, spuitbus, gel, nagellak) in de nabijheid van het apparaat.
27. Plaats dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
28. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere met water gevulde containers.
29. Bewaar het apparaat in een droge omgeving en houd het uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
30. Gebruik dit apparaat niet met accessoires die niet door ons bedrijf zijn geleverd of gespecificeerd.
31. Wijzig, repareer of demonteer het apparaat niet. Onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Onjuiste montage, demontage of onderhoud kan brand, elektrische schokken, letsel of de dood veroorzaken.
32. Gebruik geen spanningsomvormers om het apparaat te voeden.
33. Wanneer je dit apparaat in de badkamer gebruikt, schakel het dan na het gebruik altijd uit.
34. Gebruik dit apparaat niet op huisdieren.
35. Vermijd het gebruik voor het slapen gaan. De massage kan een stimulerend effect hebben en dit kan je slaap vertragen.


# Product Gebruik

Varieer de druk van de massage volgens je behoeften. Als het kneden te ruw is, haal dan wat druk weg.

**Massage gebieden:**




Nek en schouder

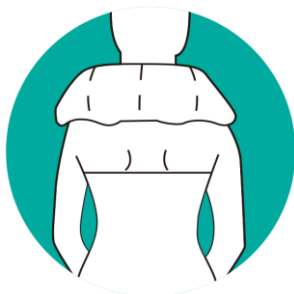

Nek




Rug

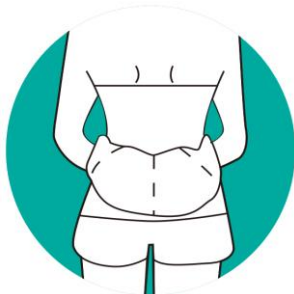

Taille



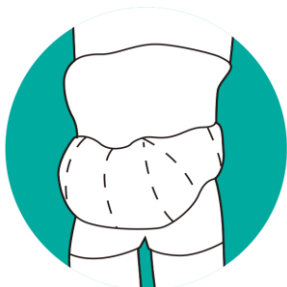

Buik



Dijen



Benen



Voet



Kuit

# Problemen Oplossen

Probleem	Mogelijke oplossingen
Het massageapparaat kan niet gestart worden.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zorg dat de voedingsadapter in het stopcontact zit.</li><li>- Controleer of er spanning op het stopcontact zit.</li><li>- Controleer of de AAN/UIT knop is ingedrukt.</li></ul>
Het massageapparaat stopt plotseling met werken tijdens het gebruik.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het massagekussen stopt automatisch na 15 minuten. Deze situatie is normaal.</li><li>- Controleer of de voedingsadapter uit het stopcontact is getrokken.</li><li>- Controleer op slechte verbindingen en stop het gebruik onmiddellijk als er een wordt gevonden.</li><li>- Het massagekussen heeft een automatische oververhittingsbeveiliging. Schakel de voeding uit en wacht een uur zodat het apparaat kan afkoelen. Als het probleem aanhoudt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met <b>palmwood</b> voor advies.</li></ul>



#### **WAARSCHUWING:**

Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen of baden

## **Reiniging en onderhoud**

1. Maak het apparaat schoon met een zacht, droog en schoon doekje. Let erop dat er geen vocht in de elektrische aansluitingen dringt, en gebruik geen schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen bij het schoonmaken.
2. Houdt het apparaat, adapter en stekker nooit onder water en spoel deze nooit onder stromend water.
3. Gebruik geen alcohol, nagellakverwijderaar of schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken. Dit kan defecten, barsten of verkleuring veroorzaken.
4. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## **Garantie**

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopsdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

## **Milieu**

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving! Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recylen.

Bedankt dat je voor **palmwood** hebt gekozen.  
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.



© 2023 Palmwood.  
Document versie: 2023-07-03