

beurer

MG 30

NL



NL Cadeauset met mini-massageapparaat
Gebruikshandleiding



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



NEDERLANDS

1. Reglementair gebruik

Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die door ondeskundig of lichtzinnig gebruik ontstaan is.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor het masseren van lichaamsdelen van het menselijk lichaam. Gebruik het massageapparaat niet als een of meer van de volgende kenmerken op uw van toepassing zijn.

WAARSCHUWINGA

Gebruik het massageapparaat

- niet bij kinderen,
- niet bij ziekelijke veranderingen of verwonding aan het te masseren lichaamsgebied (bijvoorbeeld verbranding, open wonden, littekens, huiduitslag of ander letsel),
- niet bij aandoeningen aan de bloedsomloop of hoofdpijn,
- niet op botten (bijvoorbeeld gewrichten, ruggengraat) of andere gevoelige plekken op het lichaam,
- niet na operaties,
- niet tijdens de zwangerschap,
- niet na inname van medicijnen of alcohol (beperkt waarnemingsvermogen),
- niet bij het bedienen van machines,
- alleen uitwendig.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis. Gebruik door deze personen is alleen toegestaan wanneer het plaats-

vindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over gebruik van het apparaat. Houd toezicht op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.

Het gebruik van dit apparaat vervangt niet een bezoek aan en behandeling door een arts.

Raadpleeg voor het gebruik van het massageapparaat uw dokter,

- wanneer u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen draagt,
- bij pijn met onbekende oorzaak,
- indien u niet zeker weet, of het apparaat voor u geschikt is.

Aanwijzing

De massage dient te allen tijde als aangenaam en ontspannend te worden ervaren. Breek de massage af of wijzig uw positie of de persdruk, indien u de massage als pijnlijk of onaangenaam ervaart.

2. Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWINGA

- Vóór gebruik moet gecontroleerd worden of het apparaat en de accessoires niet zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u om in twijfelgevallen het apparaat niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Gebruik geen hulpstukken, die niet door de fabrikant geadviseerd werden resp. als hulpstuk werden aangeboden.
- Als u het apparaat opent of zelf repareert, kan een storingsvrije werking niet langer gegarandeerd worden. Bij het niet naleven van de aanwijzingen vervalt de garantie. Wendt u zich voor reparaties tot de klantenservice van Beurer of tot een geautoriseerde handelaar.

3. Bediening

Batterijen plaatsen resp. vervangen:

- Open het deksel van het batterijvak van het betreffende apparaat.
- Plaats 2 alkalibatterijen of 2 normale batterijen van type AAA in het batterijvak volgens de markeringen. Let er daarbij op dat u de batterijen met de plus- en minpool aan de juiste zijde plaatst.
- Plaats vervolgens het deksel van het batterijvak terug en klik het vast. Let er daarbij op dat u de batterijen met de plus- en minpool aan de juiste zijde plaatst.




Toetsdruk: aan / uit

Tips voor de omgang met batterijen

Zorg ervoor dat batterijen niet in de handen van kinderen terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen in de mond nemen en inslikken. Dit kan tot ernstige schade aan de gezondheid leiden. In dit geval onmiddellijk een arts opzoeken!

- Normale batterijen mogen niet opgeladen, verhit of in open vuur worden geworpen (explosiegevaar!).
- Vervang alle batterijen altijd tegelijk en gebruik batterijen van hetzelfde type en gebruik geen accu's.
- Uitlopende batterijen kunnen schade aan het toestel veroorzaken. Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, neem de batterijen dan uit het batterijvak.
- Gebruik geen accu's!

Hoofdmassageapparaat

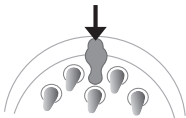

- Trek het lipje voor het openen van het deksel naar beneden.
- Sluit het lipje weer na het terugplaatsen van het deksel.

4. Apparaat reinigen en onderhouden

Uw massageapparaat is onderhoudsvrij. Alleen de buitenbehuizing dient regelmatig te worden gereinigd. Verwijder voor het reinigen de batterijen uit het batterijvak.

Reinig uw mini-massageapparaat voorzichtig met alleen een licht bevochtigde doek.

- Gebruik geen reinigings- of oplosmiddel.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Het water kan het apparaat binnendringen en beschadigen.

5. Verwijdering

Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde instanties voor afvalverwijdering.

De gebruikte, volkomen lege batterijen en accu's moeten via de speciaal aangegeven inzamelbakken, de inzamelpunten voor gevaarlijk afval of via de elektriciteitshandelaar worden verwijderd. U bent wettelijk verplicht de batterijen te verwijderen.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen die schadelijke stoffen bevatten: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.

