


Manuel d'utilisation

Variez la pression en fonction de vos besoins : si le pétrissage est trop rigoureux, réduisez la pression.

Zones de massage

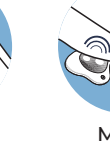

Cou

Dos

Cuissete

Mollet

Résolution de problèmes

Problème	Solution
Impossible de démarrer l'appareil de massage.	Assurez-vous que le cordon de massage a été chargé pendant 4 heures pour une charge complète.
Avec l'usage, le fonctionnent devient irrégulier.	L'appareil de massage arrive de fonctionner automatiquement après 15 minutes. Vérifiez si la fiche est correctement insérée. Vérifiez les mauvaises connexions et arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ne trouvez rien. En cas de soucis de solution ci-dessus ne fonctionne, contactez l'assistance clientèle et attendez une réponse.



Liste des pièces

1 Unité principale
 2 Puissance
 3 Direction
 4 Prise
 5 Cordon
 6 Prise de l'appareil
 7 Chauffage
 8 Vitresse
 9 Connecteur DC

1 Unité principale
 2 Puissance
 3 Direction
 4 Prise
 5 Cordon
 6 Prise de l'appareil
 7 Chauffage
 8 Vitresse
 9 Connecteur DC

Données techniques

- Batterie Li 2200mAh
- 4 heures de temps de charge
- 2 heures de fonctionnement sans fil
- 3,3A.V
- 1A maximum
- 100-240V ~ 50 / 60Hz

Fonctions

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour sélectionner l'une des fonctions suivantes.

Fonction	Décrire
1	Marche/Arrêt Démarrage et arrêt rapides de l'appareil. La minuterie automatique s'extingue après 15 minutes
2	Direction Ajoutez simplement la direction du mouvement de votre rasage pour cibler les zones de stress clés.
3	Chauffage Activez / désactivez simplement la fonction de chauffage.