




**ELEKTRISCHE
SHIATSU WARMTE
MASSAGEKUSSEN**

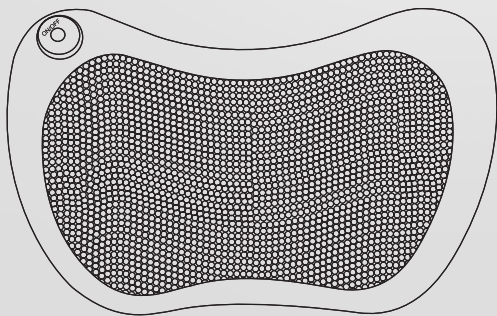

| GEBRUIKSAANWIJZING |

WAARSCHUWING EN ATTENTIE

Gebruiksaanwijzing van het Product



- Vrouwen dienen het massageapparaat niet te gebruiken gedurende de menstruatieperiode en de zwangerschap.
- Niet geschikt voor kinderen.
- Patiënten met een ernstige hartaandoening of die een gerelateerde ingreep hebben ondergaan, dienen zich te onthouden van gebruik van de stimulator.
- Patiënten met hemorragische aandoeningen, sepsis en koorts mogen het product niet gebruiken
- Niet gebruiken als de huid beschadigd of ontstoken is.
- Dit product kan niet worden gebruikt door mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, sensorische informatieverwerkingsproblemen of onervaren personen, tenzij zij onder toezicht of instructie staan van volwassene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor hun veiligheid. Dit apparaat heeft een verwarmingsfunctie, wees voorzichtig en let op tijdens het gebruik en pas de warmte aan op een comfortabel niveau voor uw gebruik.
- Gebruik de stimulator voorzichtig en oefen niet te veel lichaamsdruk uit op de stimulator, wat kan leiden tot beschadiging aan de motor.
- Drink na een massage 500 ml water of thee, om de stofwisseling in het lichaam te bevorderen.
- Steek uw vingers niet in de knop van de roterende massagekop, om de handelingen te stoppen
- Verwijder de interne onderdelen van het apparaat niet, het kan een storing veroorzaken en ook de garantie van het product doen laten vervallen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren in geval van problemen, neem onmiddellijk contact op met klantenservice@aycommerce.com Lees a.u.b. de Garantiegegevens zorgvuldig door.
- Wanneer de stimulator niet in gebruik is of na gebruik, haal dan de stekker van de stimulator uit het stopcontact
- Gebruik geen natte handen bij het bedienen van de stimulator, vooral niet als u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact haalt.
- Het product heeft een ingebouwde timer en gaat automatisch uit na 15 minuten.
- Houd uit de buurt van kinderen.

VOEDING EN SNOER

- Gebruik niet meer dan de aangegeven voltage van de stroomtoevoer, dit kan brand of schade aan het product veroorzaken.
- Bij het trekken van de stekker uit het stopcontact dient men de stekker vast te houden en vervolgens de stekker uit het stopcontact te trekken. Trek het stekker niet met een ruk uit het stopcontact.
- Als de netsnoer beschadigd of blootgesteld is, breng het dan onmiddellijk onder de aandacht van professionals of de fabrikant voor onderhoud of vervanging. Zie de sectie Garantie voor meer informatie.

BEDIENINGSHANDLEIDING

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de ON/OFF knop om de massagefunctie met warmte te openen.
- Druk nogmaals op de ON/OFF knop, schakel over naar de omkeerfunctie.
- Druk de ON/OFF knop 3 seconden in, het massageapparaat is alleen maar aan het kneden zonder warmte.
- Druk nog één keer op de ON/OFF knop, zet het massageapparaat uit.

VERPAKKING - PRODUCTEN OMVATTEN

- 1 Massagekussen
- 1 Verloopstuk
- 1 Handleiding

TECHNOLOGIE

- Voltage: DC12V
- Vermogen: 24W

FUNCTIE

- Draagbaar ontwerp en met één knop te starten, gemakkelijk te gebruiken
- Vier hoogfrequente massagestukken, massagestukken kunnen licht en warmte uitstralen
- Gelijk aan de positieve massagetechniek door een mens
- Flexibel en eenvoudig te verplaatsen, kan volledige aanraking van uw lichaam bewerkstelligen, het effect is duidelijk merkbaar
- Dit nekmassagekussen heeft een ingebouwd elektronisch veiligheidssysteem.
- Intelligent ontwerp uitgerust met rollers om een kneedmassage te bieden voor nek, schouder, taille, etc.
- Twee verschillende kneedmassages en stapsgewijze snelheidsregeling om uw lichaam te ontspannen
- Therapie op basis van infraroodverwarming die de bloedcirculatie bevordert.
- Verlicht spierpijn & vermoeidheid en verbetert de slaap.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact
- Zorg ervoor dat u de machine na gebruik en voor het opbergen schoonmaakt
- Bewaar in een schone, droge ruimte.
- Vermijd dat er stof binnendringt of zich op het massageapparaat ophoopt.
- Gebruik een schone, droge katoenen doek om de machine af te stoffen of te reinigen.
- Vermijd elke vorm van binnendringen van vloeistoffen of contact met de machine.
- Gebruik geen etherische olie, bleekmiddel of andere corrosieve oplosmiddelen om de machine af te vegen.



AY Commerce BV | Wijngaardsweg 22
6412 PJ Heerlen | Nederland
Email: klantenservice@aycommerce.com