
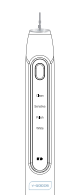

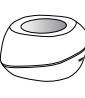


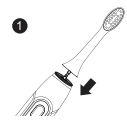
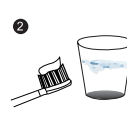

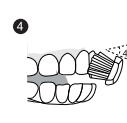
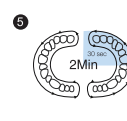



尺寸大小: 272mm*195mm


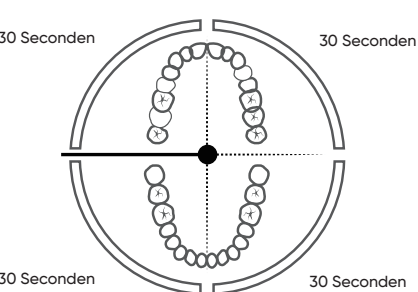


四折纸

68 mm195 mm

<div style="text-align: center;">V-GOODS</div> <div style="text-align: center;">BLAUW LICHT Sonic LED Elektrische Tandeborstel</div> <hr/> <div style="text-align: center;">HANDLEIDING</div> <div style="text-align: center;"></div> <p style="font-size: small;">De V-Goods elektrische tandeborstel biedt jouw een andere, gezonde en efficiënte poetservaring door het innovatieve ontwerp, lees voor gebruik de instructies zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats.</p>	<div style="text-align: center;">BORSTELMODI</div> <p>Om een modus te selecteren, drukt u gewoon op de pijltoets totdat de gewenste modusindicator oplicht. Eenmaal verlicht, wordt die modus de standaardmodus totdat een andere modus wordt geselecteerd. Elke modus is ontworpen om twee minuten te werken, met korte pauzes tussen elke burst van 30 seconden.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">NO.1 Premier LED-technologie Uniek en innovatief ontwerp met 6 led-lampen, koud blauw led-licht, tanden reinigen en witter maken met een betere effectiviteit.</div> <p>Schoon: schoon is de werkpaardmodus van de tandeborstel. Met poetsbewegingen per minuut verwijdert het tandpasta met superieure efficiëntie in een programma van twee minuten. De clean-stand is de basisstand op de tandeborstel. Als je je aan één modus wilt houden, maak er dan deze van.</p> <p>Gevoelig: Als je gevoelige tanden of tandvlees hebt, of als je de geluidstrillingen in het begin een beetje overweldigend vindt, schakel dan over naar de gevoelige modus. In deze stand trilt de tandeborstel met een lagere intensiteit, wat minder belastend is voor je tanden en tandvlees.</p> <p>Poels: verbeter de glans van het tandoppervlak. Swing verandert snel. De trillingsterkte verandert snel binnen 0,1 seconde om het polijsteffect te stimuleren. Het kan worden gebruikt voor een extra behandeling van het snijtandgebied om de tanden witter te maken.</p> <p>Wit: in de witte stand werkt de tandeborstel wat harder om oppervlaktevlekken veroorzaakt door bijvoorbeeld koffie en thee te verwijderen.</p> <p>TIPS: Gebruik met gel voor het bleken van tanden heeft een beter blekend effect.</p>	<div style="text-align: center;">WAT ZIT ERBIJ</div> <ul style="list-style-type: none"> 1x Sonic bleken Elektrische tandeborstel 2x LED Elektrisch Opzetborstels 1x Lader basis 1x Oplaaadkabel 1x Handleiding	<div style="text-align: center;">HOE TE GEBRUIKEN</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaats de opzetborstel volgens de richting van de pijl in het hoofdgedeelte van de tandeborstel. 2. Doe een kleine hoeveelheid tandpasta op de opzetborstel en maak deze nat. 3. Na het bevochtigen, een andere functie kiezen, de tandeborstel in de mond stoppen en de tandeborstel starten, dan langzaam en gelijkmatig bewegen. 4. Bij het tandenpoetsen zijn de borstel en het tandvlees 45 graden. 5. 30 seconden herinnering om het tandgebied te vervangen, 2 minuten wetenschappelijk poetsen 6. Spoel na het tandenpoetsen de opzetborstel en romp direct af met schoon water en glimlach daarna
---	---	---	---

272 mm1234

正面

<div style="text-align: center;">GEHEUGENFUNCTIE</div> <p>De tandeborstel onthoudt de modus van de laatste uitschakeling en herhaalt deze bij het opstarten</p> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;">INTELLIGENT BORSTELLEN</div> <p>Een interval van 30 seconden herinnert aan de Smart Timer van 2 minuten, de Quad Pacer en de Smart Timer helpen ervoor te zorgen dat tandartsen een poetstijd van 2 minuten aanbevelen en stimuleren het poetsen in elk kwadrant van de mond.</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">2 minuten totaal (2 x daags)</p> <p style="text-align: center;">LANGDURIGE KRACHT Volledig opgeladen in 10 uur, 4 weken gebruik.</p> <div style="text-align: center;"></div>	<div style="text-align: center;">OPLADEN & REINIGEN</div> <div style="text-align: center;"></div> <p>LED-oplaadindicator wordt ROOD tijdens het opladen nadat deze volledig is opgeladen, de indicator wordt GROEN.</p> <div style="text-align: center;">De tandeborstel opladen</div> <p>Zorg ervoor dat u de tandeborstel uitschakelt voordat u deze oplaadt. Laad op door de basis in een stopcontact te steken en het handvat op de oplader te plaatsen. Het indicatielampje van de oplader wordt ROOD, wat aangeeft dat het handvat aan het opladen is. Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadlampje GROEN, wat aangeeft dat de tandeborstel volledig is opgeladen.</p> <ol style="list-style-type: none">1 De batterij is na 10 uur volledig opgeladen. Als de tandeborstel volledig is opgeladen, kan deze worden gebruikt voor ongeveer 4 weken vooraf ingestelde poetscycli.2 De tandeborstel moet 10 uur worden opgeladen als:<ul style="list-style-type: none">- Dit is de eerste keer dat u de tandeborstel gebruikt- De tandeborstel is langer dan drie maanden niet gebruikt- De lading is onttrokken aan het gebruik3 Om de batterij volledig opgeladen te houden, raden we aan om de tandeborstel op de oplader te laten wanneer deze niet in gebruik is.4 Het is normaal dat de tandeborstel warm wordt tijdens het opladen. <div style="text-align: center;">Schoonmaken & Opbergen</div> <p>Spoel na het poetsen de opzetborstel een paar seconden onder stromend water om achtergebleven tandpasta of vuil te verwijderen. Om een soepele werking te behouden, verwijdert u af en toe de opzetborstel en spoelt u de steel af onder stromend water.</p> <p>Bedek de opzetborstel niet na het schoonmaken. Dit kan bacteriegroei op de kop en borstelharen veroorzaken.</p> <p>Bewaar de tandeborstel rechtop voor een goede afvoer van vocht en droging aan de lucht.</p> <p>Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak het schoon en bewaar het op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht.</p>	<div style="text-align: center;">PARAMETERS</div> <p>Nominale spanning: gelijkstroom 3,7 V Ingangsspanning: DC 5V/1A Stroomverbruik in stand-by: <0,5 W Batterijtype: polymeer 800mAh Li-ion batterij Levensduur batterij: meer dan 4 weken nadat deze volledig is opgeladen</p> <div style="text-align: center;">DISCLAIMERS/WAARSCHUWINGEN</div> <ul style="list-style-type: none">• Staak het gebruik als dit product op enigerlei wijze beschadigd lijkt (opzetborstel, handvat, oplader). Dit product bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden.• Gebruik de oplader nooit als het snoer/de stekker beschadigd is. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.• Dit product is alleen ontworpen om uw tanden, tandvlees en tong te reinigen. Stop met het gebruik van dit product en neem contact op met een arts/tandarts als ongemak of pijn optreedt.• Buiten het bereik van kinderen houden. <div style="text-align: center;">WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK</div> <ol style="list-style-type: none">1. Om elektrische schokken en brand te voorkomen, laad het product niet op in de badkamer of dorpel het niet in water of andere vloeistoffen en was de oplaadpoort niet met water.2. Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd is of als het stopcontact niet goed vastzit.3. Plaats het product niet in heet water4. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen5. Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gebruikt op een elektrische stroombron die overeenkomt met de nominale spanning. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.6. Het wordt aanbevolen om een nieuwe opzetborstel te vervangen bij gebruik van 3 maanden7. Vervang een nieuwe als de kabel beschadigd is, zodat u deze kunt opladen.	<div style="text-align: center;">GEVAAR</div> <p>Om het risico op electrocutie te verminderen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Plaats of bewaar de oplader niet op een plek waar deze kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken2. Plaats de oplader niet in water of een andere vloeistof3. Grijp niet naar een oplader die in het water is gevallen. Koppel onmiddellijk los4. Niet gebruiken tijdens het baden <div style="text-align: center;">BELANGRIJK</div> <ol style="list-style-type: none">1. Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.2. Houd bij het loskoppelen altijd de stekker vast in plaats van het snoer3. Pas de producten niet aan. Niet demonteren of repareren. Dit kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Raadpleeg uw dealer voor reparaties of neem contact op met een servicecentrum. Haal het product niet uit elkaar, behalve wanneer u de batterij weggooit.4. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen <div style="text-align: center;">BELANGRIJK</div> <p>V-Goods geeft op haar producten een jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten worden op kosten van V-Goods gerepareerd of vervangen, mits een overtuigend aankoopbewijs in de kwalificatieperiode wordt overlegd. In de volgende gevallen is V-Goods niet verantwoordelijk voor de garantie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Opzetborstels• Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeoorloofde reparatie.• Normale slijtage, inclusief chips, krassen, schaafwonden, verkleuring of verving. <div style="text-align: center;">IMPLICIETE GARANTIES</div> <p>Alle impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de duur van de hierboven vermelde uitdrukkelijke garanties. In sommige staten zijn beperkingen op de duur van impliciete garanties niet van toepassing.</p>
--	---	--	--

1

2

3

4

反面