



Scheer met een **scheermesje** of je **ladyshave** de haartjes van de lichaamsdelen waarop je het IPL apparaat wil gebruiken.

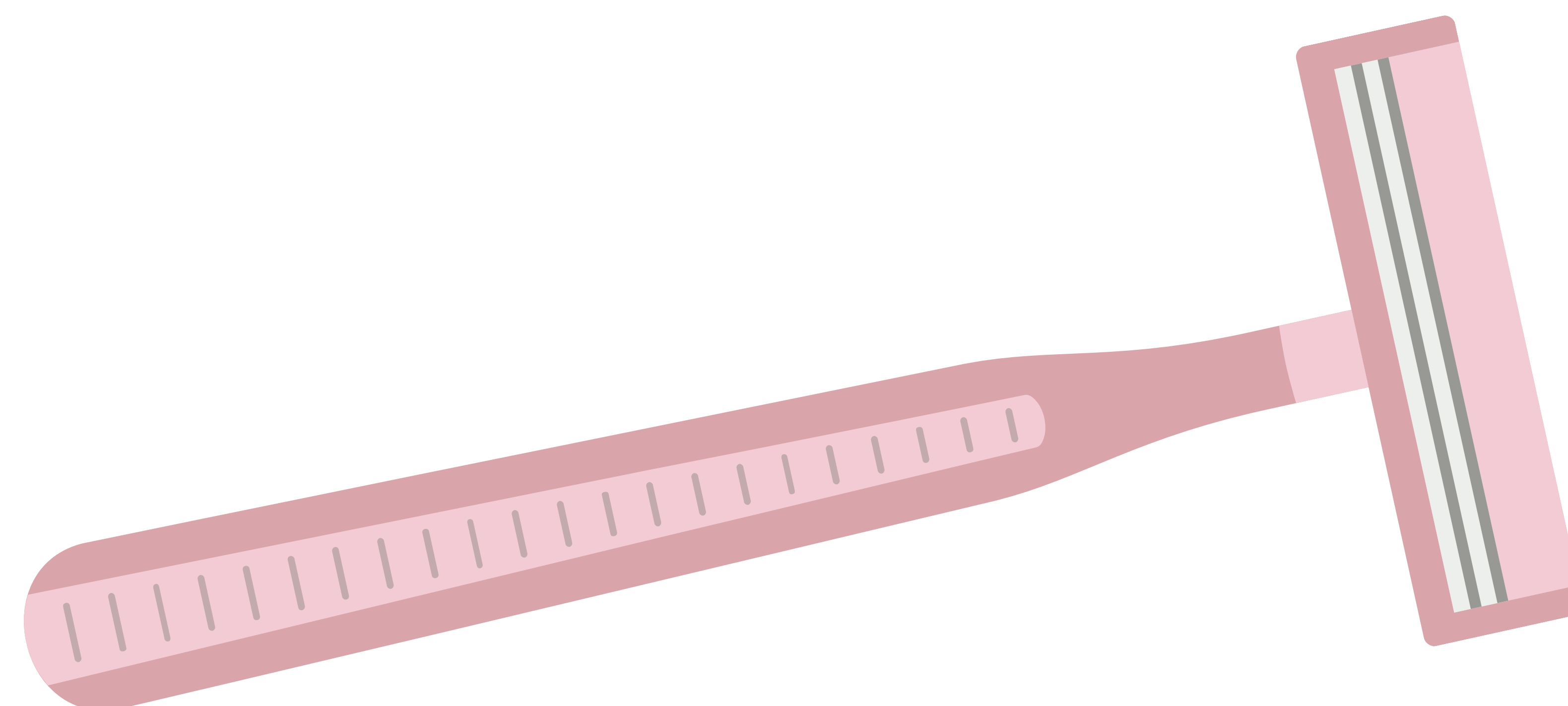

Kies de juiste stand

Hoe lichter je huidskleur is hoe hoger je het energie niveau kan zetten.

Breng de beschermende bril aan die meegeleverd wordt met de set. Het is belangrijk om je ogen te beschermen voor de lichtflitsen.

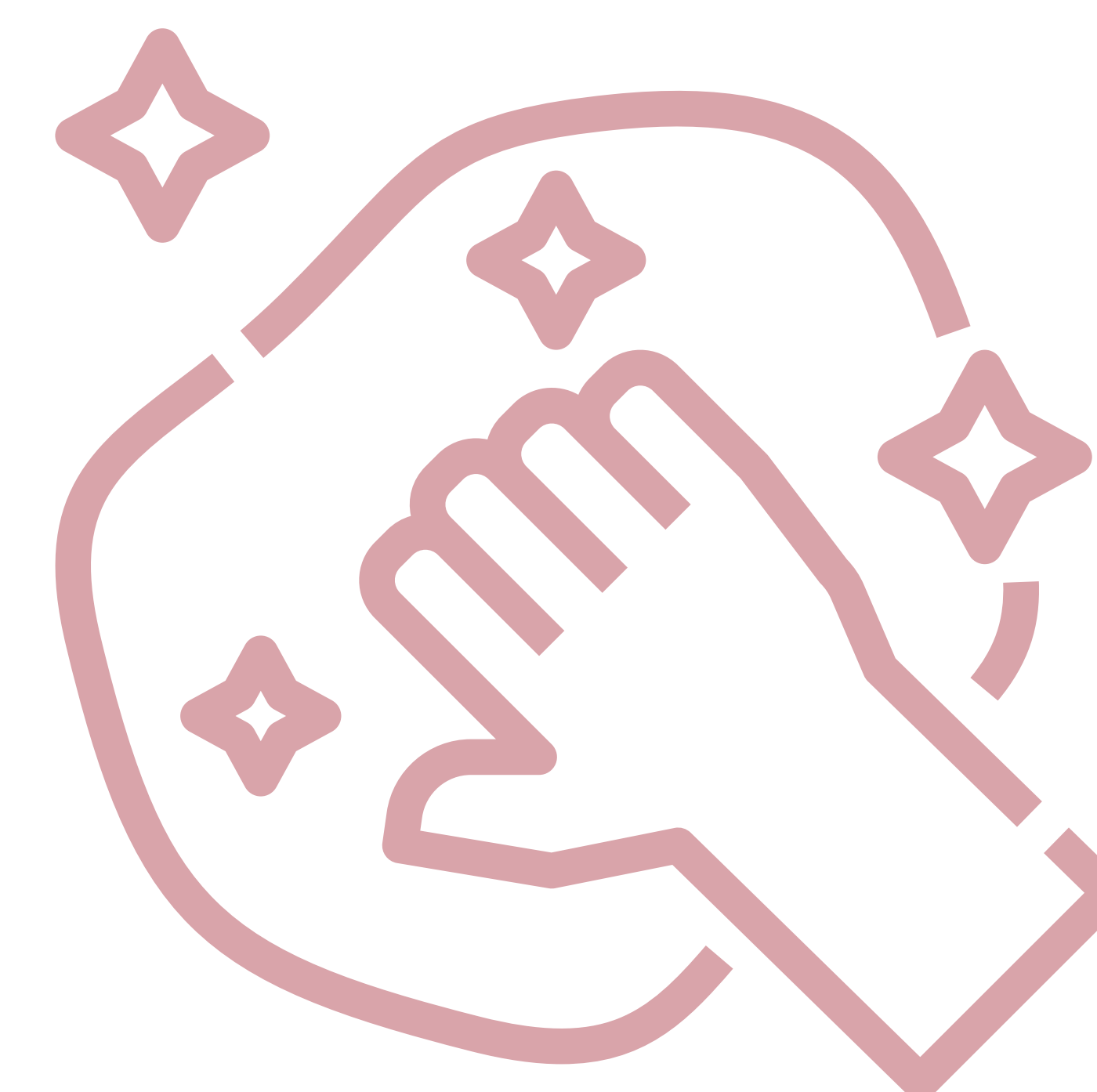

Verzorg je huid en het apparaat

Schakel het IPL ontharing apparaat na gebruik uit. Vervolgens reinig je met een zacht en vochtig doekje het lichtvenster.



Ga niet in de zon zitten na de behandeling