

Nekbeautydevice




Gebruikershandleiding

Product Specifications

Naam van het product: IPL rimpel nek schoonheid apparaat
 Artikelnummer: HY38
 Oplaadspanning: 5V A
 Nominaal vermogen: 5W
 Batterijparameters: 3,7V/450mAh
 Oplaadtijd: 3 uur
 Productgrootte: 50*92*135mm
 Oplaadmethode: USB opladen

Key Definition

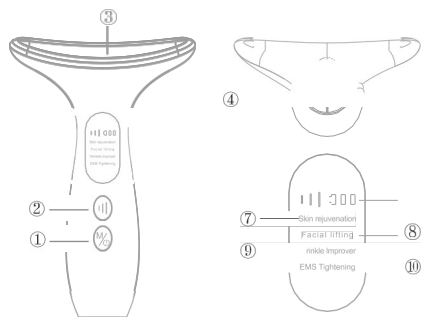

@ Schakelknop: lang indrukken schakelaar / kort indrukken versnelling schakelaar @ Versnellingsstoets
 kleurenlichttherapie @ DC oplaadpoort @ Batterijweergave @ Facial
 @ Versnellingsdisplay @ Huidverjonging @ Wrinkle lifting @ EMS Tightening

Key Function

OSI-knop:

Druk lang op de schakelknop, het apparaat voor nekschoonheid gaat over op de schakelmodus

Kort indrukken om te schakelen

Druk één keer kort op om naar modus 1 te gaan: blauw licht display, huid regeneratie modus Druk één keer kort op om naar modus 2 te gaan: rood licht display, gezichtsift modus.

Eén keer kort indrukken om naar modus 3 te gaan: Paars lichtdisplay, modus voor rimpelverbetering

Enmaals kort indrukken, activeert modus 4: geen licht, EMS-microstroomverzorging

Versnellingsstoets:

Druk eenmaal kort om naar de tweede versnelling te gaan: druk nogmaals kort op de derde versnelling, druk nogmaals kort om naar de cyclusedmodus te gaan

DC oplaadpoort:

Plaats de USB-aansluiting om op te laden, activeer de oplaadmodus, de batterij-indicator knippert en de indicator voor volledig bestek is altijd aan

Blue light bevordert, groter voor

Het blauwe licht kan de synthese van proteïne en collageen activeert de huid, haalt en ontspant huid, fijne poriën aan, vette huid, sterk gevoelige huid verbeteren.

Rood licht en gladde huid.

Rood licht verbetert de cel vitaliteit, versnelt de bloedsomloop, en bevordert de groei van fibroblasten en collageen, voor een gladde huid. Fijne lijntjes, rimpels, verstevigt de huid, verlicht pigmentatie en vervaagt littekens.

Purple light

Paars licht kan de alternatieve functie van cellulair zuurstofgebruik verbeteren en microcirculatie op het lichaamsoppervlak bevorderen. Het kan lymfe uitbaggeren en oedeem afvoeren, terwijl het de huid kalmeert en in balans brengt. stabiel effect.

bus

FMS-microstroom geeft intermitterende nulsstromen af


Commentary Mode



Features



Packing List

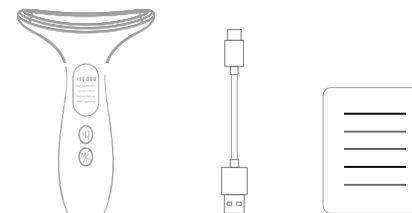

Improver @ EMS Tightening

stimuleert de ATR-productie, verbetert de van de hoge
gezichtsspiervezels; activeert de collageenactiviteit om de
huid te verstevigen.

Nek schoonheidsapparaat

Gegevenslijst

Handmatig

Product Features

- o De gestroomlijnde massagekop is speciaal ontworpen voor de nek. Het gestroomlijnde ontwerp is ergonomisch en brengt energie over op elke centimeter van de nek.
- o De geluidsgolfrilling van de massagekop werkt samen met vier modi, evenals blauwe, rode en witte licht en EMS-massage, die samen de bloedsomloop bevorderen. de acupunctuurpunten van het gezicht en de hals stimuleren, de meridianen draineren, de bloedsomloop verbeteren, het metabolisme bevorderen. en langdurige afvalgiften bevorderen. Het kan de apin van epidermale cellen verminderen, neklijnen verminderen, puffiness verminderen, schouders en nek ontspannen, acupoint fysiotherapie, snel vermoeidheid elimineren en fysieke fitheid herstellen.
- e vier modi zijn: huidverjonging en antirimpel (blauwe lip). warming sensation lifting (Red light), neck and face hidden lines (Purplelight), EMS tightening, druk lang op de schakelaar om te starten, en elke keer dat de modus wordt omgeschakeld, wordt een cyclus uitgevoerd. Druk op de aan/uit-knop om uit te schakelen.
- * Elke modus heeft 3 drie versnellingen en elke modus heeft trillingen. Het symbool van de verjongings- en antirimpelmodus heeft lange heldere punten en kleine Drackets die van binnen naar buiten lopen.
- * De temperatuur-trekmodus verwarmt tot 45 graden, de symDol-punt knippert en stopt, het lampje van de haakjes brandt niet, het onzichtbare patroon voor hals en gezicht verwarmt tot 45 graden. de symboolpunt brandt niet en de haakjes knipperen en stoppen.
- mDe EfWS heas upto 65 deg ees, thesymboldotghis up, andihe paenihehes un #omouisdeto inside
- * USB-kabel charpinp, veilig en milieuvriendelijk.
- * Klein en draagbaar. Je kunt het altijd en overal gebruiken.
- * De nieuwe introductie van het bionische ontwerpconcept. het gebruik van dollfijnenstaart

Qy Productonderhoud

1. Probeer dit product te bewaren in een droge omgeving met een normale temperatuur of in een opbergdoos.
2. Laad de batterij niet te lang op om schade aan de levensduur te voorkomen.
3. Als je hem lange tijd niet gebruikt, veeg hem dan schoon na het opladen en stop hem in de opbergdoos.
4. De buitenkant van het product kan worden schoongeveegd met alcohol of verdund afwasmiddel.
5. Tijdens het gebruik zal het apparaat lichtjes warm zijn, maar het is normaal dat het niet heet is . Fenomeen.
6. Het is verboden om het lichaam direct met water te wassen.
7. Laad de batterij minstens om de 3 maanden op als deze lange tijd niet wordt gebruikt.

1 Waarschuwing gebruiken

Niet gebruiken in combinatie met geïmplanteerde medische apparatuur, zoals pacemakers.

Niet gebruiken als de handpalm huidproblemen heeft zoals wondjes, eczeem, blaren, vervellen, etc.gebruik dit product niet.

Gebruik dit product niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is. Demonteer, repareer of modificeer dit product niet zonder toestemming. Dit kan leiden tot defecte apparatuur of letsel.

Geef dit product niet aan kinderen jonger dan zes jaar om persoonlijk letsel te voorkomen.

Q&A huidverzorging kleine klas

- V: Kan het elke dag worden gebruikt Hoe lang gaat het mee?
- A: Het kan elke dag gebruikt worden, het wordt aanbevolen om het één keer 's ochtends en één keer 's avonds te gebruiken, t e l k e n s gedurende 5-10 minuten.
- V: Waarop moet worden gelet voor het gebruik van
- A: Reinig de huid voor gebruik. Het is beter om het samen met nekcrème en massagecrème te gebruiken. Trek en til tijdens het gebruik zachtjes aan elk deel, gebruik niet te veel kracht om de huid niet te beschadigen.
- V: Kan het worden gebruikt op acnegevoelige huiden?
- A: Het wordt aanbevolen om het met voorzichtigheid te gebruiken voor de acnegevoelige huid om secundaire schade te voorkomen.
- V: Hoe opladen en gebruiken*?
- A: Dit product gebruikt een USB-laadpoort om elektriciteit op te slaan, wat handig en snel is. Over het algemeen duurt het 3 uur om op te laden en is het apparaat volledig opgeladen.

