

HANDLEIDING

ENVIGANTE 7-IN-1 HUIDVERJONGINGSAPPARAAT FACELIFT APPARAAT | EMS & RED & BLUE LIGHT THERAPY



Bedankt voor de aankoop van ons product. Om dit product correct te gebruiken, raden wij u aan deze gebruikershandleiding voor gebruik door te lezen. Bewaar de handleiding goed zodat u deze op elk gewenst moment kunt lezen.

INLEIDING

ENVIGANTE 7-IN-1 HUIDVERJONGINGSAPPARAAT | FACELIFT APPARAAT | EMS & RED & BLUE LIGHT THERAPY

Het is een gezichtsschoonheidsapparaat met EMS micro-stroom (galvanische ionen), trillingen warme massage, rood, blauw en oranje licht, dat diepe reiniging, betere verjonging kan realiseren en gezicht het opheffen.
EMS microstroom (galvanische ionen): Gebruik het principe van de mildeste impulsstroom anode en kathode trekken vet en vuil aan, verzachten en ontladen.

Vibratie: Gebruik fysieke vibratie, elektrische stimulatie om de elasticiteit te verhogen en het celmetabolisme te verbeteren.
Warme Massage: Bevordert de absorptie van huidverzorgingsproducten, maak de huidtextuur uitgerekt, houd de huid vol elasticiteit.

Rood licht: 640nm-650nm rood licht diep in de dermis, verhoogt de bloedcirculatie om rimpels te verminderen, de huid strakker te maken en stimuleert de aanmaak van nieuwe huidcellen.

Blauw licht: Goltengte 415nm heeft een snel ontstekingsremmend effect, vermindert talgproductie, elimineert acnebacillen om acne en wrat te verwijderen, verbetert vette huid. Oranje licht: de golfengte 600nm diep in huid 1-2mm, behandelt effectief de huid rode vlek, verlicht het zwellen, bevordert het opperhuidmetabolisme om de huid het witten te maken.

WERKMODI

SCHOON

De verwarmende sensatie helpt om poriën te openen, diep schoon te maken om het effect van poriëverfijning, acnevlekken en het oplossen van de donkere huid op.

RF LED

Het rode licht kan de celelasticiteit activeren, de synthese bevorderen van proteïne en beencollageen, werk met het warme verwarmen samen en trillingsmassage, maken de huid glad.

ACNE-T


Blauw licht kan acne verminderen, de huid effectief remmen ontsteking en olieafscheiding en verbetert de poriëgrootte.

WIT

Het oranje licht kan de energie van cellen aanvullen, versnellen het metabolisme van huid, activeert huid, maakt de huid helder en wit.

IMPORT

De micro-stroom en het warme verwarmen driften de producten van de huidzorg diep in huid, werk met kleurenlucht en trilling samen de massage, maakt de bodem van huid voedende essentie absorberen voldoende, en maakt de huid vochtig en mollig.

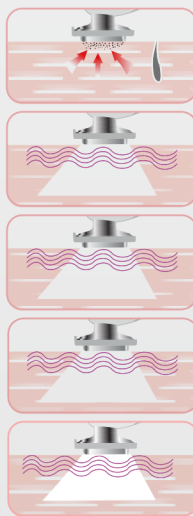

1


EMS UP

EMS-microstroommassage bevordert de bloedsomloop, verbetert de huidelasticiteit en versteviging, optimaliseert je huid naar beste conditie.

OOGVERZORGING

Warme vibratiemassage verlicht vermoeidheid van de ogen, drijft de oogcrème of oogessentie diep in de huid en bevordert absorptie, maakt je ogen mooi charmant.

BESCHRIJVING

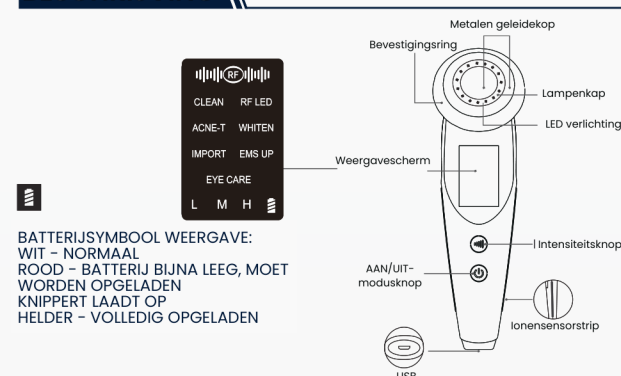

BATTERIJSYMBOL WEERGAVE:
WIT - NORMAAL
ROOD - BATTERIJ BIJNA LEEG, MOET WORDEN OPGELADEN
KNIPPERT LAADT OP
HELDER - VOLLEDIG OPGELADEN

Intensiteitsknop: Kort indrukken - de intensiteit veranderen; lang indrukken - in-/uitschakelen trillen (werkt voor elke modus).

AAN/UIT & Modusknop: Lang indrukken - AAN/UIT; kort indrukken - de modus wijzigen.

PARAMETERS

PRODUCTNAAM	ENVIGANTE 7-IN-1 HUIDVERJONGINGSAPPARAAT	MODELNR	MB807
MAAT	160 * 50 * 54 MM (6.29 * 1.96 * 2.12 INCH)	GEWICHT	100 G
INVOER	5V/1A	STROOM	4W
BATTERIJ CAPACITEIT	750 MAH	LAADTIJD	ONDEVEER 3 UUR
INTENSITEIT	3	BEVINDENDE STANDAARD	FDA/FDA-2005

VERPAKKINGSINHOUD: HOOFDAPPARAAT | BEVESTIGINGSRING | BASIS | OPLAADKABEL | GEBRUIKSHANDLEIDING

2

GARANTIE KAART

PRODUCTNAAM: ENVIGANTE 7-IN-1 HUIDVERJONGINGSAPPARAAT

DISTRIBUTEUR:

.....GEBRUIKERSINFORMATIE.....

NAAM:

ADRES:

TEL:

DEFECT FENOMEEN:

VOOR REPARATIEDELENDEN VERZOEKEN WIJ U DE DETAILS IN TE VULLEN

CERTIFICAAT

De productie, assemblage en prestaties van dit product zijn getest en voldoen aan de kwaliteitsnorm van de fabriek, het is goedgekeurd voor vrijgave.

3

BEGELEIDING NAAR DE 7 MODI

- Houd het product na onmiddellijk volledig op voor gebruik. Het wordt uitgeschakeld om zichzelf te beschermen tijdens het opladen.
- Verpleeg alleen het gezicht en de hals, vermijd acne en roosheid, de gevoelige huid moet voorzichtig worden gebruikt. Doe eerst het gebruikelijke experiment op de huid diep met gebruiken om je energie te testen.
- Als je dit product voor het eerst gebruikt of je hebt je er nog niet aan aangepast, gebruik dan de eerste versie van de [CLEAN] modus om de huid diep te reinigen. (Opmerking: Bij het exporteren, match met make-up remover of reinigende lotion, maar niet met cleanser, make-up verwijderende lotion of reinigende olie).
- Houd tijdens het gebruik de ionensensistrips aan beide zijden van het product vast en raak de huid aan met de metalen geleidekop om een circuit te vormen. Houd de huid nat, anders kan het product niet normaal werken.
- Als u de huidverzorging voor anderen doet, zorg er dan voor dat u de ionensensistrips aan beide zijden van het product met één hand vasthoudt en met de andere hand het lichaam van de gebruiker aanraakt om het lichaamscontact te vormen.
- Druk lang op [POWER] om in/uit te schakelen, het wordt automatisch uitgeschakeld als er niet binnen 5 minuten van modus wordt geleefd.

1. [CLEAN] modus (Het gebruikt met bevestigingsring, katoen en lucifers met make-up remover/reinigende toner).



2/3/4. [RF LED/ACNE-T/WHITEN] modus (Het komt overeen met toner / essence / lotion zonder bevestigingsring en wattenwafel).



5. [IMPORT] modus (komt overeen met gezichtsmasker zonder bevestigingsring en wattenwafel).



6. Modus [EMS UP] (past bij toner/essence/lotion zonder bevestigingsring en wattenwafel).



7. [OOGVERZORGING] -modus (komt overeen met oogcrème / oogessentie zonder bevestigingsring en wattenwafel).



OOGVERZORGING EMS-microstroom is standaard uitgeschakeld en kan indien nodig worden ingeschakeld door op de knop te drukken

4

HUIDVERZORGINGSTIPS



ATTENTIES

WAARSCHUWINGEN

GEBRUIK HET NIET VOOR HET VOLGENDE PERSONEEL:

1. PLASTISCHE CHIRURGIE VAN HET GEZICHT, ONDERHUIDSE METAALPLANTATIE; LIJF ARTS VOOR GEBRUIK;
2. ALLEERGICHI VOOR COSMETICA OF COSMETISCHE INSTRUMENTEN (RAADPLEEG UW ARTS VOOR GEBRUIK);
3. SLECHTE GEZONDHEID, MENSEN DIE DRINKEN;
4. HUIDZIEKTEN, ALLERGIEËN, KWETSBAAR HUID;
5. ONDER BEHANDELING, FYSIEKE GROEI, ACUTE PATIËNTEN, TUBERCULOSEPATIËNTEN, HYPERTENSIE EN INFECTIEZIEKTEPATIËNTEN;
6. TIJDENS MENSTRUATIE, BORSTVOEDING, ZWANGERSCHAP, MENSEN DIE SLAAPMIDDELEN GEBRUIKEN;
7. MENTALE ATOPISCHE HUIDZIEKTEPATIËNTEN.

NIET GEBRUIKEN OP DE VOLGENDE ONDERDELEN:

1. SNIJWONDEN, PLASTIC WOND, MONDHOLTE, VULVA, SLIMVLIES, HUIDPURULENTE ONTSTOKEN DELEN, ENZ.
2. ADAMAPPEL, OOGBOEL, PERIOCCULAIRE, VIRALE WRATTEN, ENZ.
3. INGEBED IN METALEN, SILICONEN, PLASTIC ONDERDELEN IN HET LICHAAM;
4. ONLANGS GEDAAN ONTHAREN OF SCHEREN DELEN.

ALS JE DE SITUATIE NIET ZELF KUNT BEOORDELEN, RAADPLEEG DAN VOOR GEBRUIK JE ARTS.

6

KENNISGEVING

1. ADVISEER DAT DE VERPLEEGTIJD NIET LANGER DAN 15 MINUTEN MAG ZIJN;
2. GEBRUIK GEEN ALCOHOL, VERDUNNER OF NAGELLAKREMOVIER OM HET SCHOON TE MAKEN;
3. GEBRUIK DE METALEN GELEIDKOP NIET OM HET METAAL TE SLUITEN;
4. BEWAAR VAN DE HOGE LICHTE OPPERVLAKTE VOOR METAALGLOES HOOFD DIE GEMAKKELIJK IS TE ZIJN GEKRAST WANNEER HET GEBRUIKEN, GELEVE VOORAL VOORZICHTIG TE ZIJN, ZULLEN DE TOEVALLIGE KRASSEN NIET HET GEBRUIK VAN HET EFFECT BEWILDOVEN (HET BEHOORT NIET TOT HET KWALITEITSPROBLEEM); GELEVE TE VERWIJDEREN DE METAALJUWELLEN, DE GLAZEN OF DE CONTACTLENS, DE METAALJUWELLEN ENKEL ZOALS
5. KETTING, CORRELEN, HORLOGES, ENZ. VOOR GEBRUIK;
6. NIET GESCHIKT VOOR MENSEN JONGER DAN 12 JAAR;
7. LED KAN WORDEN BESTRAALD ROND DE OGEN, SLUIT UW OGEN, KIK NIET DIRECT IN DE LED;
8. ALS U HET PRODUCT LANGE TIJD NIET GEBRUIKT, LAAD HET DAN EENS IN DE 6 MAANDEN OP;
9. DIT PRODUCT MAAKT GEBRUIK VAN EEN LITHIUMBATTERIJ, DOO DEZE WEG IN OVEREENSTEMMING MET DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN.

GARANTIE

DE GARANTIE (GRATIS REPARATIE) VAN HET PRODUCT BINNEN DE GARANTIEPERIODE WORDT UITGEVOERD VANAF DE AANKOOPDATERUM.

1. HET PRODUCT HEEFT EEN GARANTIE VAN 6 MAANDEN VANAF DE VERKOOP, MAAR NIET VOOR DE ONDERDELEN.
2. DE GARANTIESERVICE IS ALLEEN GELDIG BIJ NORMAAL GEBRUIK, ALLE KUNSTMATIGE SCHADE, ZELFDE MONTAGE, ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE SCHADE VALT NIET ONDER DE GARANTIE.
3. DE GARANTIEKAART IS VEREIST VOOR GARANTIE. WIJZIG DEZE KAART NIET ZONDER TOESTEMMING.
4. BEWAAR DEZE KAART GOED. BIJ VERLIES WORDT DEZE NIET OPNIEUW VERSTREKT;
5. DE GARANTIESERVICE ZAL GRATIS WORDEN ONDERHOUDEN VOLGENS DE GARANTIE PERIODE EN VOORWAARDEN ZOALS GESPECIFICEERD IN DEZE GARANTIEKAART, EN HET ONDERHOUD NA DE GARANTIEPERIODE WORDT IN REKENING GEBRACHT. DE GARANTIEPERIODE IN REKENING GEBRACHT;
6. DE TRANSPORTKOSTEN EN LOGISTIEKE KOSTEN MET BETREKKING TOT HET ONDERHOUD ZIJN VOOR REKENING VAN DE KLANT;
7. IMITATIEPRODUCTEN DIE NIET DOOR ONS BEDRIJF ZIJN GEPRODUCERD, HEBBEN GEEN RECHT OP GARANTIESERVICE.

APPARAATONDERHOUD

WANNEER U HET APPARAAT MOET ONDERHOUDEN, ZORG ER DAN VOOR DAT HET APPARAAT IS UITGESCHAKELD OM DE KANS OP IRRITATIE TIJDENS HET REINIGINGSproces TE VOORKOMEN.



7