



ENVIGANTE

INSTRUCTIES




HUIDVERJONGINGS APPARAAT
Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik

Productstructuur



Naam: Huidverjongingsapparaat	Nominale spanning 5V
Productmodel: 2032	Materiaal: ABS + PC-materiaal
Productgrootte: 92*126*37,4 mm	Nominaal ingangsvermogen: 2.5W
Opladetid: 3.5 uur	Batterijcapaciteit: 750 mAh
Belangrijkste functies liften, aanspannen, ontspannen en activeren van spieren	

Modeluitleg

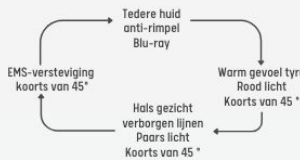

Blauw licht



Het blauwe licht kan de synthese van proteïne bevorderen. Zorgt voor meer collageen, activeert huid, spant losse huid aan, krimpt poriën en verbetert een vette huid en zeer gevoelige huid.

Rood licht



Het rode licht kan celvatbaarheid verbeteren, de bloedsomloop versnellen, bevordert de groei van vezelcellen en collageen, maakt fijne lijntjes glad, verwijderd rimpels, spant de huid aan, verlicht het pigment en verdunt littekens.

Paars licht



Het paarse licht kan de afstelselende functie van cellen verbeteren, verbetert het zuurstofgebruik, bevordert de microcirculatie, lymfe en drainage oedeem en zorgt voor een stabiele huid.

EMS



EMS microcurrent zorgt voor een intermitterende pulstroom, stimuleert AIR productie, verbetert de elasticiteit van de gezichtsspiervezels, activeert collageen en proteïne en spant de huid aan.

Productkenmerken

- De stroomlijnmassagekop is speciaal ontworpen voor de nek. Het gestroomlijnde ontwerp voldoet aan de ergonomische theorie en geeft energie door aan elke centimeter van de nek. De massagekop is voorzien van akoestische vibratie met vier standen. Er zijn drie kleuren licht: blauw, rood en paars. De EMS-massage zorgt voor het bevorderen van de bloedsomloop, het stimuleren van de punten op het gezicht en de hals en het verbeteren van de circulatie om de stofwisseling te bevorderen. Bovendien is de toets van de afstelselende functie die lange tijd wordt geaccumuleerd, vertraagt het verouderen van epidermiszellen, om de halflijnen af te zwakken, vacht te verminderen en de hals te ontspannen. Acupunctuurtherapie, elimineert snel vermoeidheid, herstelt de fysieke functie.
- De vier modi zijn: anti-rimpel (blauw licht), temperatuur sensing pull (rood licht), hals en gezicht cryptogram (paars licht), EMS versteviging. Druk lang op de op knop om de machine te starten.
- Iedere modus heeft drie versnellingen en elke modus heeft trillingen.
- Dit apparaat biedt diverse modi voor gezichtsmassage, waaronder een anti-rimpelmodus die kleine elektroden van binnenuit naar buiten gebruikt. De verwarmingsmodus bereikt een temperatuur van 45 graden Celsius, waarbij het symboolpunt knippert en de elektroden niet oplichten. In de neurtische modus op 45 graden Celsius knipperen de symboolpunten niet, maar de elektroden knipperen en stappen mogelijk om een specifiek massagepatroon aan te duiden. In de EMS-modus op 45 graden bewegen de elektroden van buiten naar binnen tijdens de massage, terwijl het symboolpunt continu brandt.
- USB-oplaadbaar, veilig en milieuvriendelijk.
- Uniek ergonomisch ontwerp dat zich perfect naar de contouren van de hals en het gezicht vormt.

Tips:

- Laad het product volledig op voordat u het gebruikt.
- Als het product voor een langere tijd niet wordt gebruikt [ongeveer 3 maanden], laad het product dan eerst weer volledig op voor gebruik.

Gebruik op de nek

- Breng de huidverzorgingsproducten gelijkmatig aan op de hals.
- Kies de stand op basis van persoonlijke behoeften. Masseer de nek van onder naar boven.
- Na de massage is het aanbevolen om verschillende technieken toe te passen, zoals drukpunten, bewegingen over de huid, brugtechnieken en duwende bewegingen om het massageproces te verbeteren.

Gebruik op het gezicht

- Verdeel uw huidverzorgingsproduct gelijkmatig over uw gezicht.
- Selecteer de stand op basis van uw persoonlijke behoeften.
- Maak gebruik van puntdruk om spierspanning te verlichten.
- Geef vorm aan de driedimensionale contouren van uw gezicht door vanaf de onderkant naar de bovenkant te werken, voor een optimaal resultaat.

Schoonmaakstappen

- Houd de aan-toets 1 seconde lang ingedrukt om het product uit te schakelen.
- Veeg het apparaat af met een schone doek zonder gebruik van afwasmiddel.
- Plaats het apparaat op een droge en geventileerde plaats.

Zaken die aandacht nodig hebben

- Lees de instructies grondig door voordat u het product gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Het product wordt opgeladen met een USB-kabel. Het duurt ongeveer 3,5 uur om volledig op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.
- Het rode licht knippert wanneer de batterij bijna leeg is, terwijl het rode en groene licht knipperen tijdens het opladen.
- Dit product heeft een geheugenfunctie, wat betekent dat het bij herstart automatisch teruggaat naar de modus waarin het voor het laatst is uitgeschakeld.
- Gebruik dit product niet tijdens het opladen.
- Het product heeft een verwarmingsfunctie van ongeveer 45 °C. Houd er rekening mee dat de gevoels temperatuur kan variëren afhankelijk van de huid.
- Als u zich ongemakkelijk voelt of huidproblemen ervaart tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.
- Het product is niet waterbestendig, dus vermijd contact met water.
- Plaats het product op een droge, goed geventileerde plek, vermijd direct zonlicht en houd het uit de buurt van bijtende chemicaliën.

- Als u borstvoeding geeft, gebruik dan de juiste hoeveelheid huidverzorgingsproducten. Overmatig gebruik kan leiden tot onvolledige absorptie door de huid, wat resulteert in verspilling. Tegelijkertijd kan er resterende voelstof in het interieur van het product achterblijven, wat de levensduur ervan kan verminderen. Veeg het product na gebruik onmiddellijk af met een schone doek.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen om mogelijke gevaren te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Het probleem	De oplossing
Het product trilt plotseling niet meer. Wat is de reden voor het niet werken?	<ol style="list-style-type: none"> De hoeveelheid gebruikte producten is verhoogd. Controleer of het product voldoende vermogen heeft. Zorg ervoor dat het product goed is ingeschakeld. Probeer het product opnieuw op te starten na het afschakelen. Neem contact op met de verkoper voor overleg of bel de after-sales service hotline voor assistentie.
Kan ik het apparaat iedere dag gebruiken?	Ja, dit product is ontworpen met professioneel stijfheidsniveau en kan veilig dagelijks worden gebruikt. De vibratie-intensiteit en temperatuur zijn aangepast om aan de hoogste normen te voldoen en zijn niet irriterend voor de huid.
Ik heb last van allergieën, kan ik het product gebruiken?	Ja, dit product is gemaakt van speciaal geselecteerde milieuvriendelijke materialen die voldoen aan internationale normen en zijn veilig en niet-irriterend voor de huid. Het kan zonder zorgen dagelijks worden gebruikt.
Op welk moment van de dag kan ik het apparaat het beste gebruiken?	Dit product kan op elk moment van de dag worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke keer gedurende 5 tot 10 minuten te gebruiken voor optimale resultaten.