

Kluvaro EMS Voetmassage Apparaat



Neem de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om schade aan uw nieuwe Kluvaro product te voorkomen.

1. Over het Kluvaro voetmassage apparaat

Bedankt voor uw keuze voor Kluvaro. Onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Functionaliteit, gebruiksgemak en kwaliteit staan bij ons voorop.

Deze gebruiksaanwijzing zal u helpen begrijpen hoe u het Kluvaro voetmassage apparaat kunt gebruiken om uw pijn te verlichten en/of spieren in uw voeten te stimuleren. In deze handleiding treft u alle noodzakelijke informatie en technische gegevens die nodig zijn om verantwoord gebruik te maken van de stimulator en de toebehoren.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing door om eventuele beschadigingen en defecten te voorkomen. Volg de instructies zoals beschreven in deze handleiding duidelijk op voor veilig gebruik. Indien u in behandeling bent bij een arts of therapeut, volg dan altijd hun instructies eerst op!

Het voetmassage apparaat van Kluvaro is compact, stijlvol en is uitgerust met een comfortabele en zachte voetmassage mat. De geavanceerde module heeft veel stimulatiemogelijkheden. Veel mensen gebruiken het apparaat ter verlichting van pijn, het aansterken van spieren of ter verbetering van de bloedcirculatie. Wij hopen dat u ook veel profijt van dit apparaat zult hebben. Wij wensen u veel succes toe met uw therapie.

Heeft u vragen over het product of problemen bij het gebruik? Neem dan contact met ons op via info@kluvaro.nl

2. Inhoud van de verpakking

- EMS voetmassage mat
- Kluvaro EMS module
- USB oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing

3. Controle van het product

Controleer direct na ontvangst het product. Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de bovengenoemde verpakkingsinhoud en ga na of het product werkt zoals beschreven in de handleiding. Neem direct contact op met de leverancier wanneer er onderdelen ontbreken, delen van de inhoud zijn beschadigd of bij een defect. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat er aan het artikel ontbreekt of beschadigd is. Om verwarring te voorkomen raden we aan de problemen te verhelderen middels foto- en/of videomateriaal.

4. Veiligheidsinstructies

1. Algemene opmerkingen

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies.
- Als u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Schakel het apparaat uit als u de module van de voetmassage mat verwijdert.
- Controleer voor gebruik of de onderdelen juist zijn bevestigd.
- Gebruik dit apparaat niet meer dan twee keer per dag.
- Repareer of demonteer het product niet zelf.
- Recycle de gebruikte materialen in overeenstemming met hun markering. Gooi de gebruikte materialen niet naar believen weg.
- Houd kinderen uit de buurt van onderdelen en de verpakking van het product om inslikken en/of verstikking te voorkomen.
- Gebruik de stimulator bij een temperatuur tussen -10 en 30°C en voorkom blootstelling aan directe hitte en constant zonlicht.
- Gebruik de stimulator niet in een explosieve atmosfeer of andere gebieden waar sprake kan zijn van vluchtige gassen.



2. Verbodsbepalingen

Gebruik dit apparaat niet in de volgende omstandigheden of situaties.



- Gelieve niet te gebruiken bij hartritmestoornissen of andere hartproblemen, huidziekten, koorts en andere ziekten. Bij twijfel, neem altijd eerst contact op met een arts!
- Dit product mag niet door mensen gebruikt worden die een hartslagregelaar, kunsthart of pacemaker gebruiken.
- Gelieve niet te gebruiken tijdens het slapen, autorijden of in bad.
- Plaats het product niet in een te droge of een te vochtige omgeving.
- Gelieve niet te gebruiken in ontvlambare, explosieve en onstabiele gebieden.
- Gelieve dit product niet te gebruiken op de volgende lichaamsdelen, anders kan dit een schade aan uw huid of lichaam veroorzaken: borst, schouder, hoofd, gezicht.
- Gebruik het apparaat niet op wonden, ogen, mond, vagina, etc.
- Gebruik het apparaat niet op lichaamsdelen die aan het genezen zijn van een operatie.
- Gebruik het apparaat niet op metalen of plastic implantaten.
- Gebruik het apparaat niet op je ruggengraat.
- Niet gebruiken op dichtbij nieuwe tatoeages.
- Niet gebruiken op andere lichaamsdelen dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

3. Onderhoud en reparatie



- Probeer de stimulator niet zelf aan te passen of te repareren. Reparaties dienen door Kluvaro geautoriseerde personen uitgevoerd te worden.
- Gebruik geen nieuwe (alkaline) en volledig opgeladen batterijen (NiMH / Li-ion) tegelijkertijd met gebruikte of ontladen batterijen.
- Als de stimulator langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de module van de voetmassage mat.
- Denk aan het milieu en recycle het product volgens de geldende richtlijnen.

5. Product specificaties

Functie:	EMS voetmassage
Materiaal Behuizing:	ABS
Voltage:	DC 3V
Weergavemodus:	Digitaal scherm
Modus:	8 programma's
Uitgangsfrequentie:	1 ~ 100HZ
Uitgangspulsbreedte:	100 ~ 250uS
Uitgangsspanning:	Maximum 9.8 mA
Intensiteit niveaus:	0 ~ 19 niveaus
Automatische uitschakeling:	15 minuten
Gewicht:	240 gram
Grootte:	32,5cm x 29,5cm
Certificering:	CE RoHs

6. Gebruik van het EMS voetmassage apparaat

ALLEEN GEBRUIKEN ZOALS VOORGESCHREVEN. DIT IS GEEN MEDISCH HULPMIDDEL. DE VERSTREKTE INFORMATIE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN IS NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR HET ADVIES VAN UW ARTS OF ZORGVERLENER.

Het Kluvaro voetmassage apparaat geeft door middel van een voetmassage mat, elektrische pulsen via de huid in de voeten aan de zenuwen door. Dit prikkelen van de huid heeft een tweeledig doel. Enerzijds worden de zenuwen 'afgeleid' van de aanwezige pijnprikkels, waardoor minder pijnsignalen aan de hersenen doorgegeven worden. Anderzijds wordt het lichaam aangezet endorfines te produceren, waarvan een pijnstillende en ontspannende werking uitgaat. Hierdoor zullen spieren in de voeten en benen snel herstellen na een inspanning.

Wat is EMS therapie?

Elektrische spierstimulatie (EMS), ook bekend als neuromusculaire elektrische stimulatie (NMES) is het opwekken van spiercontractie door middel van elektrische impulsen. De impulsen bootsen de actiepotentiaal na die afkomstig is van het centrale zenuwstelsel, waardoor de spieren samentrekken. EMS is bewezen zeer doeltreffend te zijn als proactief middel voor spierversterking, ter ontspanning of ter herstel van spieren en voor het verhogen van de lokale bloedcirculatie

7. Hoe te bedienen


Zorg ervoor dat de module volledig is opgeladen middels de bijgeleverde USB oplaadkabel. Dit zal gemiddeld 30-60 minuten duren. Wanneer het rode lampje brandt, wordt de module opgeladen. Wanneer het rode lampje uitgaat, is de module volledig opgeladen. Tijdens het opladen kan de module niet gebruikt worden.

Vouw de voetmassagemat uit en klik de module op de voetmassagemat. Ga met beide blote voeten op de voetmassagemat staan en stel het programma en de gewenste intensiteit in. Wij raden aan om te beginnen met intensiteit 1 en desgewenst de intensiteit tijdens de behandeling op te voeren.

Wanneer beide voeten niet meer in contact staan met de voetmassagemat zal de module binnen 10 seconden automatisch worden uitgeschakeld.

Bij gebruik zal de module na 20 minuten automatisch uitschakelen. Voor een nieuwe sessie dient het product opnieuw opgestart te worden.

Wanneer u op de "power on" en/of "rising intensity" (+) knop drukt, gaat de lamp beetje bij beetje branden. Wanneer u op de "power off" en/of "down intensity" (-) knop drukt, gaat de lamp beetje bij beetje uit. U kunt middels deze toetsen kiezen uit 19 verschillende klassen. Met de modusknop (M) heeft u de keuze uit 8 verschillende modi.

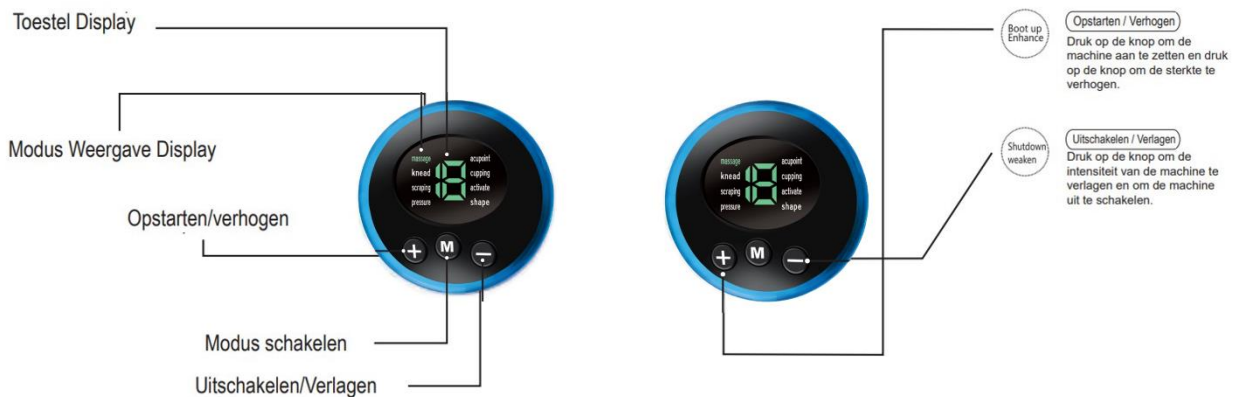

Voor een efficiënte training schakelt het voetmassage apparaat automatisch uit na 20 minuten. Het verlagen van de sterkte kan de levensduur van de batterij verlengen. De gebruikstijd van de batterij zal worden verkort door de sterkte aan te passen. In een omgeving met lage temperaturen zijn de prestaties van de batterij laag en zal de levensduur van de batterij korter zijn.

8. Service en garantie

Als u vragen heeft over het product of aanvullende informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op via info@kluvaro.nl

Wij bieden twee jaar garantie op onze producten. De klant moet een aankoopbewijs kunnen voorleggen en de garantie moet binnen een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop ingeroepen worden. Let op! De garantie is niet van toepassing op:

- **Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of reparatie;**
- **Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn;**
- **Gebreken waarvan de klant op de hoogte was op het moment van aankoop;**
- **Gebreken veroorzaakt door eigen schuld van de klant;**
- **Schade veroorzaakt door derden.**

9. Disclaimer

Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

10. Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via onderstaand adres.



Flux Forward
Van Neslaan 67
3742 MP Baarn
Nederland/2022 – V4.