




SHOPLACE

# GEBRUIKSAANWIJZING

IPL-Lichtontharingsapparaat

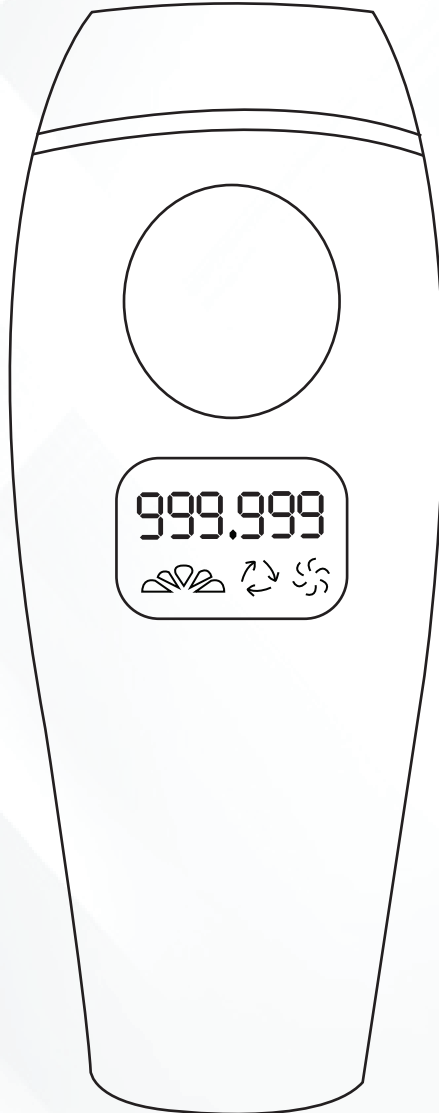


Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C

RoHS CE FC

# Inhoud

- 1. Introductie
  - .1 Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
  - .2 Ontvangen van het product
  - .3 Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Geschikte haar -en huidtypes
- 5. Behandelfases -en instructies
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Shoplace IPL-apparaat aandachtig door en bewaar deze goed. Volg en lees de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van het product. Mocht je nog vragen hebben over het product of iets anders, neem dan contact met ons op via : [support@shoplace.nl](mailto:support@shoplace.nl)
- De Shoplace IPL-apparaat kan gebruikt worden om permanente haarverwijdering mogelijk te maken via lichtpulsen. Het apparaat heeft een totaal van 999.999 flitsen, waarmee je gemiddeld 10 jaar lang gebruik van kan maken. Het flitsscherm van het apparaat is extra breed gemaakt om een groter gebied tegelijk te kunnen behandelen. Met de 5 verschillende flitsniveaus is het voor jou gemakkelijk gemaakt om de juiste stand te vinden tijdens het behandelen. Tijdens het behandelen kun je gebruik maken van een automatische flitsmodus waarbij je het apparaat alleen dicht op de huid dient te plaatsen, zonder de flitsknop in te klikken. De ingebouwde airco zorgt ervoor dat het apparaat koel blijft en niet oververhit raakt, wel zo handig. De Shoplace IPL-apparaat is efficiënt, effectief en gemakkelijk op te bergen.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Shoplace IPL-apparaat:

- Als dit de eerste keer is dat je de Shoplace IPL-apparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies aandachtig door te lezen. Let op de consequenties -en de risico's die ontstaan bij misbruik van het IPL-apparaat. Dit kan leiden tot persoonlijke letsel -en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking, of mensen die geen ervaring of kennis hebben met het apparaat.
- Gebruik het IPL-apparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- Het IPL-apparaat is gemaakt voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan het IPL-apparaat.
- Het IPL-apparaat werkt op netspanning, wat de benodigde risico's met zich meebrengt. Blijf altijd bij het apparaat tijdens gebruik.
- Het IPL-apparaat kan alleen droog en niet nat gebruik worden. Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water of hierin onderdompelt wordt.
- Gebruik en bewaar het IPL-apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Laat het apparaat op ieder niveau afkoelen na gebruik van 15 minuten -en of meer.

- Gebruik het Shoplace IPL-apparaat nooit als u een van de onderstaande aandoeningen heeft:
  - Stofwisselingsziekte.
  - Congestieve hartinsufficiëntie.
  - Ziektes die samenhangen met lichtgevoeligheid, zoals polymorfe lichteruptie (PMLE), zonneuricaria, porfyrie en meer.
  - Indien je in het verleden behandeld bent voor een collageenaandoening.
  - Epilepsie.
  - Huidkanker of als je in het verleden een andere vorm van kanker hebt gehad.
  - Bloedingsstoornis.
  - Immuniteitsaandoeningen.
  
- Gebruik het Shoplace IPL-apparaat nooit in de onderstaande gevallen:
  - Indien je plekken met tatoeages wilt gaan behandelen.
  - Indien je een implantaat heeft zoals een pacemaker, neurostimulator of insulinepomp.
  - Indien je infecties, eczeem, brandwonden, snijwonden, schaafwonden heeft op de gebieden die je wilt behandelen.
  - Indien je huidirritatie krijgt -en of hebt.
  - Indien je littekens hebt op de plekken die je wilt behandelen.
  - Indien je wratten of permanente make-up heeft op de plekken die je wilt behandelen.
  
- Gebruik het Shoplace IPL-apparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
  - De ogen of rondom de ogen.
  - De tepels, lippen en oren.
  - De penis en balzak.
  - De vagina.

## Ontvangen van het product

1.2

- Controleer de inhoud van het pakket wanneer je de zending ontvangt. Neem contact op met ons, indien er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met ons en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace IPL-apparaat met 999.999 flitsen
- **Accessoires:**
  - 1x Beschermingsbril
  - 1x Scheermesje
  - 1x EU-lichtadapter
  - 1x Shoplace opbergzak
  - 1x Handleiding

**Flitsscherm**

**Flitsknop**

**Flitsniveaus**

**Automatische modus**

**Ventilatiemodus**

**Flitsen**

**Aan/uit knop**

**Stroomingang**

**Ventilatiestroom**

Grootte	176 x 73 x 46 mm
Gewicht	244 gram
Materiaal	ABS en Quartz glas
Kleur	Wit met roze
Lengte stroomsnoer	1 m
Aantal flitsstanden	5
Aantal flitsen	999.999
Invoerspanning	AC DC12V 3A
Veiligheid	Huidsensor -en UV-filter

## Aanbevelingen

- Reinig het IPL-apparaat na ieder gebruik. Volg de reinigingsinstructies onder sectie 6.
- Druk het IPL-apparaat niet te hard op de huid om schade te voorkomen aan het flits scherm.
- Scheer het haar op de huid 12 tot 24-uur van tevoren voor iedere behandeling.
- Zet het apparaat pas aan wanneer deze is aangesloten aan het stroomnet.
- Gebruik voor de eerste behandeling de laagste flitsniveau om het resultaat te bekijken op huid -en haar.
- Gebruik de veiligheidsbril tijdens het behandelen met het IPL-apparaat.
- Gebruik de automatische flitsmodus om niet meer handmatig de flitsknop in te drukken.
- Plaats het IPL-apparaat op een hoek van 90-graden op de huid om de beste resultaat te verkrijgen.
- Verplaats het apparaat 1-2 cm bij iedere flits.



## HAARTYPES



Blond



Beige



Lichtbruin



Bruin



Donkerbruin



Donker




## HUIDTYPES




## – Instructies


1. Scheer het haar op de huid 12 tot 24-uur van tevoren voor iedere behandeling.
2. Sluit het apparaat aan het stroomnet en zet deze aan met de aan/uit knop.
3. Druk op de aan/uit knop om de gewenste flitsniveau te selecteren. De huidige flitsniveau is te zien op het scherm.
4. Zet de veiligheidsbril op tijdens je behandelingen.
5. Houd het flitsknop ingedrukt om de automatisch modus in te schakelen. Hierna hoeft je het IPL-apparaat alleen dicht tegen je huid te houden.
6. Plaats het apparaat in een hoek van 90 graden tegen de huid. Je bent nu klaar om te flitsen
7. Verplaats het apparaat 1-2 cm na iedere flits.

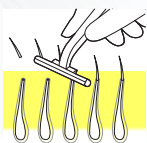

1. Scheer het haar 12-24 uur voor elke behandeling.

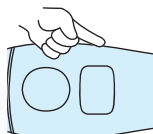


2. Sluit het apparaat aan op stroom. Zet het apparaat aan door de aan/uit knop ingedrukt

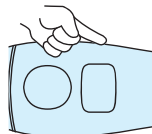


3. Selecteer de lichtintensiteit door op de aan/uit knop te drukken




4. Zet de veiligheidsbril op tijdens het gebruik van het IPL apparaat

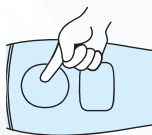

5. Houd de knop ingedrukt om de automatische flitsmodus te activeren

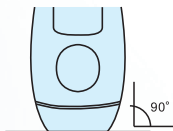

6. Plaats het apparaat in een 90 graden hoek tegen de huid. Je bent klaar om te flitsen

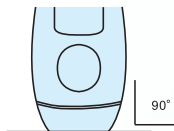

7. Verplaats het apparaat 1-2 cm na elke flits

## – Behandelfases

- **Fase 1 (week 1-2):** Dit is de beginfase van je behandelingen. Ervaring krijgen is essentieel voor het gebruik van het apparaat. Probeer de verschillende flitsniveaus uit en bekijk welke flitsniveau het beste past bij je huid -en haar.
- **Fase 2 (week 3-4):** In deze fase wordt je haargroei verminderd en zul je merken dat de huid gladder wordt en de haargroei ook geleidelijk afneemt.
- **Fase 3 (week 5-6):** In deze fase worden je haarzakjes beschadigd door de lichtpulsen. Je kunt merken dat de haargroei op verschillende plekken begint te stoppen. Daarnaast zul je nog wel plekken overhouden die je opnieuw moet scheren en behandelen.
- **Fase 4 (week 7 - 14):** De haarzakjes zullen in deze fase geleidelijk afsterven. De huid wordt gladder en de haargroei begint te verdwijnen. Probeer je huid -en haar consistent te behandelen om de beste resultaat te krijgen.
- **Fase 5 (week 10-13):** De haarzakjes zijn in deze fase afgestorven en het resultaat is te zien. Als je het IPL-apparaat consistent hebt gebruikt, dan zul je merken dat er nauwelijks haren meer teruggroeien.
- **Fase 6 (week 13-16):** Dit is de afrondingsfase. De haargroei verdwijnt volledig en de huid blijft levendig en glad. Probeer in deze fase nog steeds consistent gebruik te maken van het IPL-apparaat om de overige plekken te behandelen.
- **Onderhoudsfase (week 16 en verder):** Schakel over na de onderhoudsfase om je behaalde resultaten te behouden. In deze fase hoef je het IPL apparaat slechts 1 keer per 2-3 weken te gebruiken. Zo blijf je haarvrij op de gewenste delen van je lichaam.

- Berg het IPL-apparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats en berg het hierna op een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig het IPL-apparaat na ieder gebruik. Het IPL-apparaat dient NIET met water schoongemaakt te worden, maar met een licht vochtig doekje.
- **Stappenplan reinigen:**
  1. Zet het IPL-apparaat uit
  2. Verwijder de lichtadapter uit het stopcontact en haal het IPL-apparaat uit het stroomnetkabel.
  3. Zorg voor een schone en stofvrije doekje en maak deze heel licht nat om vochtig te worden.
  4. Zorg ervoor dat er geen water van het doekje druppelt en verwijder overtollig water uit het doekje. Gebruik GEEN oplossing -en of schuurmiddelen.
  5. Reinig het gebied rond het flits scherm en zorg er NIET voor dat het flits scherm aangeraakt wordt.
  6. Reinig de overige gebieden om het IPL-apparaat hygiënisch en schoon te houden.
  7. Berg het apparaat netjes op in de daarvoor bedoelde opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar [support@shoplace.nl](mailto:support@shoplace.nl)*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging ontstaan bij vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant het IPL-apparaat onjuist gebruikt.