


70*110mm 铜版纸128g

Handleiding

V-Goods Professionele Tandsteen Verwijderaar



Geachte meneer/mevrouw, hartelijk dank voor de aankoop van onze Professionele Tandsteen Verwijderaar. Met V-Goods streven wij ernaar om de meest zelfverzekerde versie van je zelf naar boven te halen met onze producten! Hopelijk doen wij dit ook bij u. Wij hebben een heel team klaar staan voor al uw vragen/opmerkingen, dus aarzel niet ons te contacteren wanneer u iets kwijt wilt. Wij raden u aan onze handleiding door te nemen voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Introductie

Dit is een persoonlijk mondzorgapparaat. Het maakt gebruik van hoogfrequente trillingen om tandsteen, rookvlekken, thee-vlekken en meer effectief van tanden te verwijderen waardoor u uw schone en gezonde tanden terugkrijgt. Het is ontworpen om compact en eenvoudig te zijn, gemakkelijk en veilig om thuis te gebruiken.


Let op:

- Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Hou het buiten bereik van kinderen om letsel te voorkomen
- Het apparaat is overal waterdicht behalve aan de onderkant, let erop dat u dat gedeelte waterdicht houdt.
- Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Niet in het vuur gooien of gebruiken of achterlaten in een omgeving met hoge temperaturen.
- Raak de werkpunt niet aan terwijl het apparaat aan het vibreren is
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is

Producteigenschappen

- LED-scherm:** toon intensiteit en batterij direct
- 5 intensiteiten:** Biedt meerdere opties voor verschillende gebruikers
- Hoge vibraties:** Levert geweldige tanden reinigende effecten
- Multifunctioneel:** kan zowel reinigen als polijsten
- Slim geheugen:** Selecteert automatisch laatste keuze
- Veilig:** Roestvrijstalen werkpunten & Waterdichte behuizing
- Nauwkeurig:** LED-hulplicht helpt voor een extra scherp beeld op uw tandsteen en/of vlekken
- Milieuvriendelijk:** ingebouwde 250mAh oplaadbare batterij
- Comfortabel:** Siliconen handvat zorgt voor extra goede grip

Productoverzicht

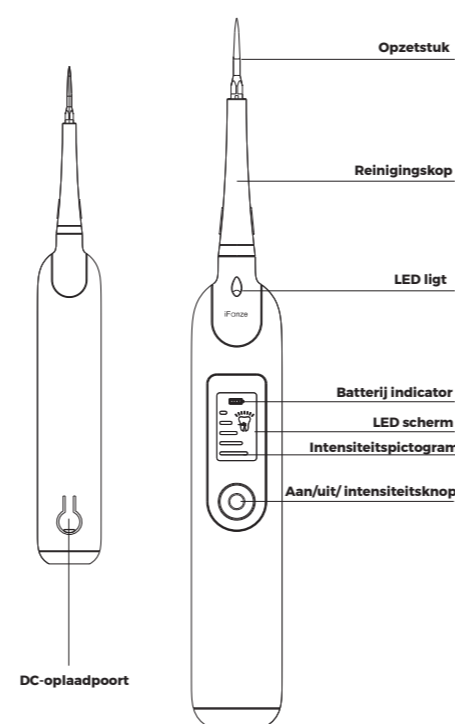

Batterij indicator
Geschikt voor het verwijderen van vlekken en polijsten




Batterij indicator
Geschikt voor het verwijderen van vlekken en polijsten

Batterij indicator
Geschikt voor het verwijderen van hardnekkig tandsteen

Oplaadmethodes

- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het batterijpictogram op het LED-scherm (geeft geen balk meer aan), wat u eraan herinnert het apparaat op te laden.
- Sluit het apparaat aan met een 5V/1A-adapter (niet meegeleverd) via de DC-oplaadkabel steek vervolgens de adapter in het stopcontact.
- Het batterijpictogram zal scrollen tijdens het opladen en stoppen met scrollen (laat 3 balkjes zien) zodra het opladen is voltooid.



Reinigingskop erop & eraf draaien

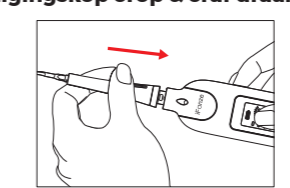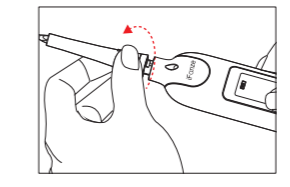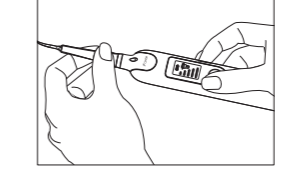

- 
- 
- 



Monteren: Krijp in de reinigingskop. Maak een hoek van ongeveer 45 graden tussen de werkpunt en de voorkant van het apparaat, druk de reinigingskop in de wortel van de schacht en draai vervolgens tegen de klok in totdat deze stopt. Opmerking: Raak de werkpunt niet aan tijdens het proces om letsel te voorkomen.

Demonteren: Krijp in de reinigingskop en draai met de klok mee om deze te verwijderen.

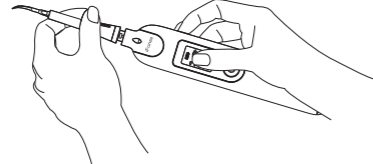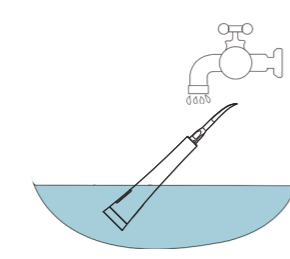Toepassingsmethoden

- 
1. Kies en monteer een geschikte reinigingskop
- 
2. Reinig de werkpunt met stromend water of alcohol.

- 
3. Druk op de knop (2 sec) om het apparaat in te schakelen. Het LED-lampje gaat automatisch aan. De standaardmodus is de zachte modus
- 
4. Druk op de aan/uit-/intensiteitsknop om een intensiteit te kiezen. Er zijn 5 intensiteiten. Hoe langer het intensiteitspictogram, hoe hoger de intensiteit.
Opmerking: raad beginners aan om met de laagste intensiteit te beginnen. **Opmerking:** het apparaat wordt geleverd met een slimme geheugenfunctie, wat betekent dat het automatisch uw laatste keuze selecteert

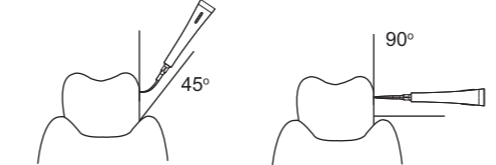- 
5. Kijk in een spiegel en breng de werkpunt aan op het benodigde deel van uw tanden om eventuele tandsteen of vlekken te verwijderen.
Let op: Bij het verwijderen van tandsteen is het beter om een hoek van 45 graden aan te houden tussen de werkpunt en de tanden. Bij het verwijderen van vlekken en polijsten is het beter om een hoek van 90 graden aan te houden tussen de werkpunt en de tanden.
Opmerking: druk tijdens het gebruik niet te hard op de reinigingskop.
- 
6. Houd na gebruik de aan/uit-/intensiteitsknop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het LED-lampje gaat automatisch uit.

Opruimen & Verzorgen

- Spoel het apparaat af of veeg het af met een natte doek als er vuil op het oppervlak zit.
- Plaats het apparaat in een koele plek. Vermijd direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen om elk gevaar te voorkomen.
- Het apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Om de levensduur te behouden, dient u het apparaat elke 3 maanden op te laden als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Probeer het apparaat nooit zelf te openen of te repareren. Als er een storing is opgetreden of als het niet werkt, neem dan contact met ons op.

Specificaties

Naam: V-Goods Professionele Tandsteen Verwijderaar

Batterij capaciteit: 250mAh

Oplaadmodus: DC opladen

Werkspanning: 3.7-4.2V

Nominale stroom: 130mA Max

Waterdichte kwaliteit: IPX6

Aanbevolen opslag temperatuur: -10 C - 40 C

Verpakkingsinhoud

- 1* V-Goods Professionele Tandsteen Verwijderaar
- 1* Haakachtige reinigingskop
- 1* Platte haakachtige reinigingskop
- 1* Borstel reinigingskop
- 1* DC oplaadkabel
- 1* Handleiding