


V-GOODS

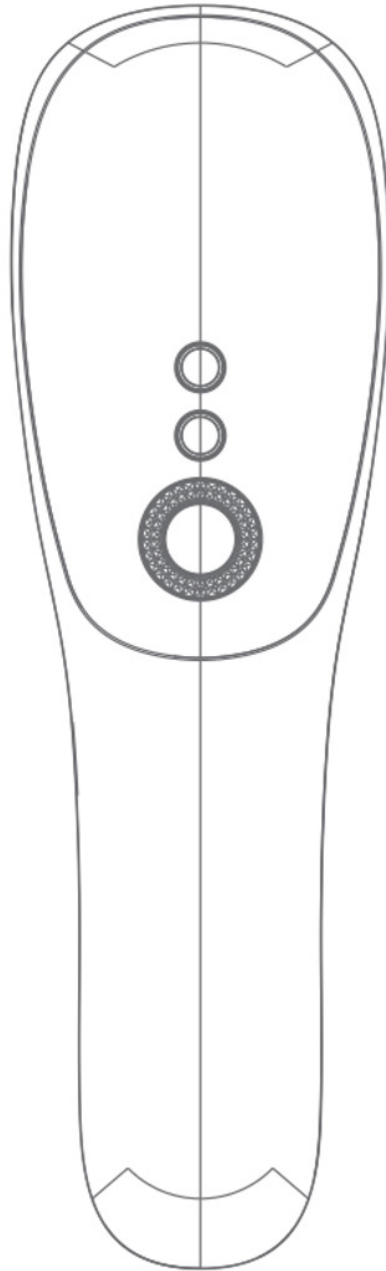

**V-Goods Premium IPL
Ontharingsapparaat**

Dank u voor uw aankoop van dit product. Om het gebruik te vergemakkelijken, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen en goed te bewaren. Deze afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter illustratie.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Speciale aandacht

- Breng voor gebruik geen gels of verzorgingsproducten (aloë vera gel etc.) aan. Zorg ervoor dat u het product monteert en gebruikt in overeenstemming met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing.
 - Lees de "Gebruiksaanwijzing" zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
 - Neem bij vragen tijdens het gebruik contact op met de online klantenservice in de gewenste taal.
- ⊙ **GEVAAR:** Inhoud met betrekking tot persoonlijk letsel als gevolg van onjuiste bediening.
- ⓘ **WAARSCHUWING:** Gevaarlijke inhoud door onjuiste bediening.
- ⚠ **LET OP:** Inhoud met betrekking tot persoonlijke veiligheid of schade als gevolg van onjuiste bediening.

Waarschuwing: niet gebruiken in bad of onder de douche.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet in de buurt van met water gevulde badkuipen, douchebakken, wastafels of ander waterhoudend keukengerei. Houd dit product en de voedingsadapter droog.
- Als het product beschadigd is, raak dan geen interne onderdelen aan om elektrische schokken te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in het product en plaats het product niet naar believen.
- Gebruik dit product niet rond uw ogen. Het dragen van een veiligheidsbril is een normale handeling die de gebruiker beschermt. Als u rond uw ogen opereert, blokkeert een veiligheidsbril de energie mogelijk niet volledig en wordt het licht van dichtbij geabsorbeerd door de irismelanine in uw ogen.
- We raden u aan om elke keer dat u dit product gebruikt een veiligheidsbril te dragen. Hoewel licht uw ogen niet rechtstreeks beïnvloedt, kan hoogfrequent flitslicht uw zicht beïnvloeden.
- Wanneer u een rugontharing nodig heeft, heeft u mogelijk een assistent of partner nodig. Dit is onze aanbeveling, omdat we ons zorgen maken dat u risico loopt als u het alleen gebruikt.
- Als uw haar langer is dan 1 mm, scheer dan eerst. We raden aan om het met een scheerapparaat te gebruiken. Overmatig lang haar absorbeert warmte op het huidoppervlak en kan een rode en gezwollen huid veroorzaken, en haarschroeiing zal een eigenaardige geur produceren, die uw ervaring met het product zal beïnvloeden.

- Als de huid in het bestraalde gebied niet droog of schoon is, heeft dit invloed op het gebruikseffect en kan het product niet flitsen of per ongeluk flitsen.
- We hebben geen gegevens over het gebruik van het product bij kinderen onder de 15 jaar, dus we raden u aan voorzichtig te zijn en te voorkomen dat kinderen het product aanraken, en houd het uit de buurt van kinderen onder de 15 jaar wanneer u het product gebruikt instrument.
- Gebruik verschillende versnellingen voor lichtintensiteit voor verschillende lichaamsdelen, aangezien hun huidskleur anders is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door een specialist van de onderhoudsafdeling van de fabrikant of een vergelijkbare afdeling.

Waarschuwing

- Gebruik geen anti-transpiranten onmiddellijk na blootstelling aan de oksels.
- Controleer en reinig regelmatig het vuil op het bestralingsportaal om brandwonden en defecten tijdens gebruik te voorkomen.
- Plaats het bestralingsportaal niet in de buurt van items die gemakkelijk kunnen worden gedemagnetiseerd, om storingen en schade te voorkomen.
- Gebruik het niet bij het blokkeren van de ontluichtingsopening, aangezien dit rook en brand kan veroorzaken.
- Richt het bestralingsportaal niet op zwarte voorwerpen, om te voorkomen dat de machine abnormaal draait.
- Verlicht geen kleding, haar en andere items om schroeien, verkleuring en beschadiging te voorkomen.
- Niet gebruiken bij huisdieren om letsel te voorkomen.
- Gebruik dit product niet rond uw ogen om oogletsel te voorkomen.
- Veeg na gebruik de haar- en huidverzorgingsproducten die aan de ontharing zijn bevestigd, af om defecten en huidbeschadiging te voorkomen.
- Gebruik het niet in de buurt van kinderen. Ontharen straalt sterk licht uit en doet gemakkelijk pijn aan de ogen van kinderen.
- Stel de bestralingsintensiteit in op basis van uw huidconditie. Zorg ervoor dat u het eerste niveau gebruikt voor het eerste gebruik.
- Als de huid na gebruik een beetje heet en rood wordt, is dit normaal.
- Het product mag niet onbeheerd worden achtergelaten nadat het is ingeschakeld, schakel het onmiddellijk na gebruik uit.
- Reinig de huid om ervoor te zorgen dat er geen haarresten op het huidoppervlak achterblijven, deze is volledig droog en vrij van olieachtige stoffen en vlekken;
- Als het verschil in omgevingstemperatuur groter is dan 20 graden (van lage temperatuur naar hoge temperatuur, of vice versa), schakel het instrument dan uit en laat het staan. Hergebruik na ongeveer 2 uur;

- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare en explosieve materialen (inclusief sproeiers en benzinstations enz.), die brand en elektrische schokken kunnen veroorzaken.
- De omgevingstemperatuur voor deze ontharing is 0-45°C, bevestig de kamertemperatuur voor gebruik.
- Vermijd binnen 24 uur na bestraling directe ultraviolette stralen.
- Stel het product niet langdurig bloot aan direct zonlicht of ultraviolet licht, dit zal het product ernstig beschadigen.
- Als de ingebouwde ventilator niet werkt (er is geen geruis hoorbaar) na het inschakelen van de stroom, gebruik deze dan niet om storingen zoals rook en vuur te voorkomen.

Ongeschikte gemeenschap en situatie

- Niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, de menstruatie van vrouwen, littekens op het lichaam, diabetes, een kwetsbare huid en een lichtgevoelige huid.
- Ernstige hartaandoeningen, matige tot ernstige hypertensie, kwaadaardige tumoren, folliculitis, besmettelijke huidaandoeningen, verbrande huid en stollingsstoornissen zijn verboden.
- Niet gebruiken als u een abnormaal collageenmetabolisme heeft, inclusief een voorgeschiedenis van littekens en slechte wondgenezing.
- Patiënten met vaatziekten, zoals spataderen en vasodilatatie op hun bestralingsplaats.
- Niet gebruiken als uw huid gevoelig is voor licht en gevoelig is voor huiduitslag of allergieën.
- Gebruik het niet als uw bestraalde gebied geïnfecteerd is, patiënten met herpes simplex, huidlaesies en hematoom zijn verboden.
- Onderdrukking van immunoresponsziekten (waaronder HIV-infectie, lupus erythematosus porfyrie, etc.) is verboden.
- Elke patiënt met een bloedingsstoornis is verboden, en degenen die isotretinoïne, fruitzuur (AHA), salicylzuur (BHA) of azaleazuur gebruiken, zijn verboden.
- Gebruik dit product met de nodige voorzichtigheid voor degenen die binnen 30 dagen chemische ontharing gebruiken, degenen die in korte tijd producten voor het bleken van de huid hebben gebruikt of degenen die vitamine A-ingrediënten hebben gebruikt.
- Niet gelijktijdig gebruiken met etherische olieproducten. Zorg ervoor dat de huid in het lichte gebied schoon en droog is en dat er geen lotions, glijmiddelen en andere cosmetica worden gebruikt.
- Als het huidoppervlak niet schoon en droog is, kan dit de gebruikservaring van het product beïnvloeden en zelfs het product beschadigen.
- Verboden tijdens het gebruik van aspirinegeneesmiddelen, het gebruik van immunosuppressiva, isotretinoïne en andere geneesmiddelen. Het recente gebruik van lichtgevoelige medicijnen is verboden (zoals tetracycline en sulfa)

Niet gebruiken voor de volgende lichaamsdelen of de volgende

1. Intra-oraal, genitaliën, slijmvliezen, enz.
2. Plastische chirurgie
3. Keelknoop
4. Oogbol, ooglid, rond de ogen
5. Hoofd
6. Acnegebied
7. Vlekken en moedervlekken
8. Wenkbrauwen, haar
9. Oor
10. Tepel, tepelhof
11. In de navel
12. Grote ader
13. Tatoeage, bodypainting

(**Let op:** Deze lijst is niet uitputtend, als u niet zeker weet of u dit product kunt gebruiken, raden wij u aan een arts te raadplegen)

Notities

1. Gebruik het instrument niet met een van nature donkere huid
2. Stel jezelf niet bloot voor het ontharen
3. Scheer eerst voordat u gaat scheren (gebruik geen chemische ontharingsmethode)
4. Zorg ervoor dat u bij het eerste gebruik in de eerste versnelling start
5. Zorg er bij het voorbereiden van ontharing voor dat het ontharingsvenster zich dicht bij de huid bevindt en voer vervolgens de ontharing uit.
6. Verboden te gebruiken in een donkere omgeving
7. Draag bij gebruik een veiligheidsbril
8. Gebruik het niet in indirect zonlicht om machinestoringen te voorkomen
9. Stoot of schud dit product niet met geweld
10. Haal de stekker niet direct uit het stopcontact zonder de machine uit te schakelen om schade aan de machine te voorkomen

Let op: als u het ontharingsapparaat voor een pauze gebruikt, zorg er dan voor dat de inlaat naar boven is gericht en het LCD-scherm naar beneden is gericht, wat gunstig is voor thermische dissipatie en koeling.



PRODUCT INTRODUCTIE

Product korte introductie

Over ontharing

- Dit product is gebaseerd op een concaaf thermisch lichtontharingsinstrument, dat medische ontharingstechnologie miniaturisatie en huishoudelijk gebruik maakt. Tijdens het ontharen drukt de platte kop stevig op de huid en verpletterde het haarzakje, om de wortel dicht bij het hogere energiegebied van de epidermis te brengen, en de energie-absorptie-efficiëntie van het haarzakje is verbeterd. De platte lamphouder is gemakkelijk schoon te maken, na het afvegen behoudt hij een sterkere lichttransmissie en betere ontharingseffecten.
- Het product stelt 5 energieniveaus in om te voldoen aan de behoeften van verschillende huidgevoeligheid. De machine en voeding kunnen worden gescheiden, compact en draagbaar, gemakkelijk op te bergen.
- Dit product heeft een geïntegreerde lamphouder die een leven lang niet vervangen hoeft te worden, en het is geschikt voor meerdere ontharingsgebieden (zoals gezicht, lippen, oksels, bikinilijn, armen, benen, enz.), om de extra kosten voor het vervangen van de lamphouder. U hoeft niet vaak accessoires te kopen en er zijn geen verborgen extra kosten. Bovendien heeft het een perfect filtersysteem, dat ineffectieve korte golflengte en schadelijk licht heel goed kan filteren.

PRODUCTSTRUCTUUR EN ACCESSOIRES

Productsamenstelling



Gastheer




Stroomdraad




Stofbril

Handmatig

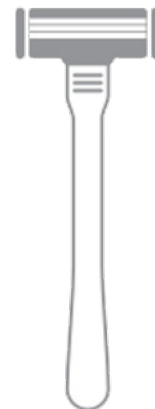

Schraper


Product Structuur

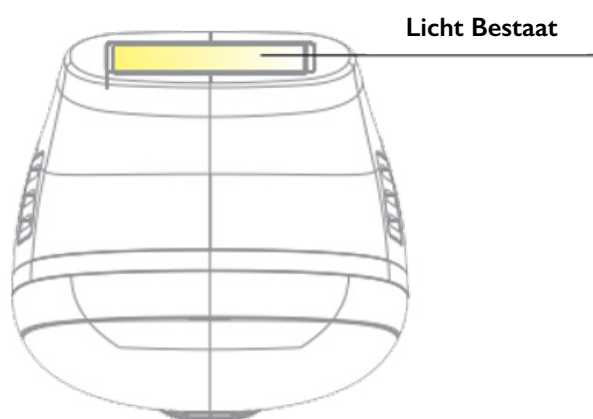

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Aan de slag

Reinig de huid grondig om ervoor te zorgen dat deze haarloos, volledig droog en vetvrij is stoffen (Residuen zoals parfums, lotions, deodorants en zonnebrandmiddelen).

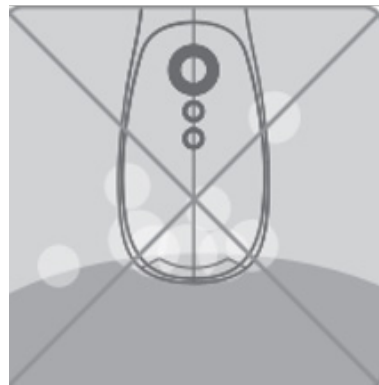

Controleer of er geen vuil, haar of ander vuil achterblijft op hun stralingsportaal en of er geen schade of afwijkingen zijn. Als er vuil is, maak het dan schoon om defecten aan het product, verslechtering en huidproblemen te voorkomen.



Bevestig na 2 uur huidtest de huidconditie. Als er geen afwijking (roodheid, blaren) is in het bestraalde gebied, kunt u dit product veilig gebruiken. We raden geen ontharing aan totdat de huidblootstellingstest is voltooid.



HOE TE GEBRUIKEN

Gebruik stappen

Stap 01

Gebruik een scheermesje om het haar af te scheren. Het schraapmes mag de huid niet direct raken. Gebruik het met schuim of scheer tijdens het douchen. Het schraapmes is scherp. Gebruik het voorzichtig om krassen te voorkomen.




Stap 02

Sluit het netsnoer aan op de adapter



Stap 03

Sluit het netsnoer aan op de invoerconnector aan de achterkant van het product

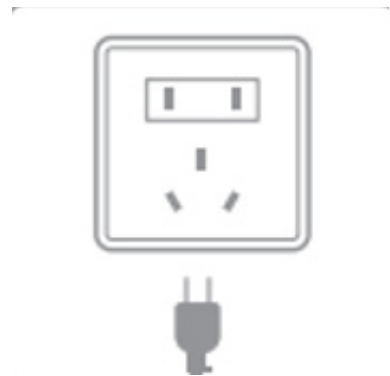

Stap 04

Nadat u het netsnoer op de invoerconnector hebt aangesloten, steekt u de stekker in een stopcontact.



Stap 05

Druk kort op de aan-uitknop aan de zijkant van de host om de machine in te schakelen, en de versnellings- en ijsmodus worden weergegeven wanneer de machine wordt ingeschakeld.



Stap 02


Draag de bril om te voorkomen dat de flits de ogen irriteert.



Stap 03


Plaats de lichtuitlaat op de te behandelen huid en breng deze verticaal aan (lichtjes op de huid plakken in een hoek van 90°).

Het lampje van de ontharingssensor gaat branden om aan te geven dat het volledig in aanraking is. Druk op de flitsknop om de ontharing te starten. Als het witte licht niet flitste, betekent dit dat de lampkop niet volledig op de huid is bevestigd en dat het instrument geen licht uitstraalt.

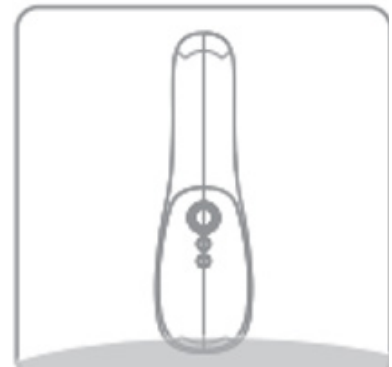

Stap 04

Nadat het ontharingsproces is voltooid, houdt u de aan-uitknop 1,2 sec ingedrukt om het apparaat uit te schakelen (trek nooit de stekker uit het stopcontact zonder het apparaat uit te schakelen om schade te voorkomen).

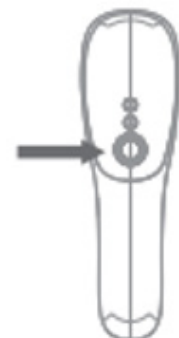

Modus introductie

Continue knipperende modus (geschikt voor grote gebieden, zoals armen, benen):

Plaats de lichtuitlaat op het te behandelen gebied op de huid en pas de huid volledig aan. Op dit moment gaat de lamp van de ontharingssensor branden, wat aantoont dat de lampkop volledig in contact is met de huid. Druk lang op de flitsknop en begin het instrument langzaam en gelijkmatig over de huid te bewegen, waarbij de pasvorm met de huid behouden blijft, en de flits zal met een bepaald interval worden uitgezonden. Houd het apparaat in beweging en schuif het apparaat twee keer heen en weer in het gebied waar ontharing nodig is. Om ervoor te zorgen dat het ontharingsgebied gelijkmatig wordt gekleed en om ontbrekend licht te voorkomen.

Tip: Om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid gelijkmatiger is, kan de bewegingssnelheid van het apparaat worden aangepast aan de flitssnelheid. De flitsfrequentie is het snelst in de eerste versnelling en is ongeveer in de tweede versnelling. Hoe hoger de versnelling, hoe lager de snelheid voor de lichtopbrengst.



Enkele flitsmodus (geschikt voor kleine gebieden, zoals vingers, lip):

Plaats de lichtuitlaat op het te behandelen gebied op de huid en pas de huid volledig aan, de ontharingssensorlamp gaat branden, wat aangeeft dat de lampkop volledig in contact is met de huid. Druk kort op de flitsknop om te beginnen met werken. Verplaats de lampkop naar het volgende gebied, wanneer het witte licht van de ontharingssensorlamp oplicht, drukt u op de flitsknop voor ontharing. En voer vervolgens dezelfde stappen uit als hierboven.

Tip: als uw huid tijdens het ontharingsproces oververhit begint te raken, pauzeert u een paar seconden, laat u de lichtuitlaat even afkoelen en begint u opnieuw met ontharen.



Tips voor het gebruik van ontharing

Stap 01

Omdat het constante knippen warmte zou verzamelen tijdens het werken van het apparaat, raden we aan om, zodra u zich oververhit voelt, tijdelijk naar een ander doelgebied te gaan en later door te gaan nadat het is afgekoeld, om ervoor te zorgen dat het haarverwijderingseffect werkt.



Stap 02

Bij gebruik van een ontharingsapparaat moet de lamphouder stevig op de huid worden gedrukt, de wortel van het haarzakje het apparaat volledig raken en het haarzakje meer hogere energie laten absorberen om een beter ontharingseffect te krijgen.



Ontharing met behulp van een tijdschema

1e-2e week: 3 keer per week;

3e-5e week: twee keer per week;

Na de 5e week: om de twee weken of een keer per maand.

Opmerkingen: Pas de gebruiksfrequentie en gebruikstijden aan op basis van uw haargroeicyclus. En u kunt het energieniveau en de frequentie verhogen volgens de groeicyclus van het lichaam en dikker haar.

VERZORGING NA GEBRUIK

Voorzorgsmaatregelen na ontharing

- Vermijd baden en het aanraken van water binnen 6 uur na het beëindigen van de ontharing. Gebruik later dan bevochtigend water om het bestraalde gebied te hydrateren.
- Gebruik na gebruik geen parfums, gezichtsmaskers of cosmetica die scrubkorrels bevatten.
- Vermijd blootstelling aan UV of direct zonlicht binnen 24 uur na het ontharen, gebruik indien nodig zonnebrandcrème.
- Zonnebaden kan huidverdonkering of zonnebrand veroorzaken. Bestraling veroorzaakt onmiddellijk roodheid, zwelling en ontsteking. Wees daarom tijdens het gebruik van dit product voorzichtig en stel niet bloot aan de zon, aangezien het herstel van zonnebrand niet minder dan 1 week duurt.
- Kunstmatige bruining is niet toegestaan tijdens de ontharingsoperatie.
- Raadpleeg uw arts als u na het ontharen plastische chirurgie nodig heeft (alleen voor het ontharingsgebied).
- Raadpleeg uw chirurg als u zich onwel voelt.

Reiniging en onderhoud

- Om het beste gebruikseffect en de lange levensduur van het apparaat te behouden, dient u het product voor en na elke epilatie schoon te maken en opgehoopt haar en stof op het apparaat te vermijden. Als het niet elke keer goed wordt schoongemaakt, zal dit de gebruiksprestaties beïnvloeden.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en laten afkoelen.
- Veeg de lamphouder en de lichtuitlaat schoon met een zachte, droge, schone doek. En bewaar het ontharingsapparaat vervolgens in een droge en stofvrije omgeving bij -10 ~ 60°C.
- Was het product en de accessoires nooit in kranen en vaatwassers.
- Gebruik geen stalen kogels, schurende reinigingsmiddelen (tandpasta, enz.) of bijtende vloeistoffen (benzine, motorolie, aceton, enz.) om het product schoon te maken.

Opmerking: als het wassen met water niet goed reinigt, kunt u een paar druppels alcohol met een hoge concentratie (niet meer dan 96%) gebruiken om de bovenstaande onderdelen schoon te maken.

Milieubescherming

- Als u het product weggooit, gooi het dan niet bij het gewone huisvuil. U moet het naar een aangewezen recyclingcentrum sturen. Dit is gunstig voor het milieu. Bedankt.

BASISPARAMETERS

Apparaat voor ontharing

Specificatieparameter

| | |
|---|-------------------------------|
| Modelnummer | ZTM-03 |
| Nominaal vermogen: | 30W |
| Nominale spanning: | 12V |
| Nominale stroom: | 2.5A |
| Opslag- en transportomstandigheden | Bedrijfsomstandigheden |
| Opslagtemperatuur: -10 ~ 60°C | Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 45°C |
| Vochtigheid: 5% - 90% RV | Vochtigheid: 10% - 90% RV |
| Relatieve druk: 50~106kPa | Relatieve druk: 86~106kPa |