

LIROMA


NL: LED-gezichtsmasker

EN: LED face mask



Inhoud

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. LED gezichtsmasker | 5. Oogbescherming |
| 2. USB-kabel | 6. Opberghoes |
| 3. Afstandsbediening | 7. USB-oplaadkabel |
| 4. Hoofdriem | 8. Hoofdriem |

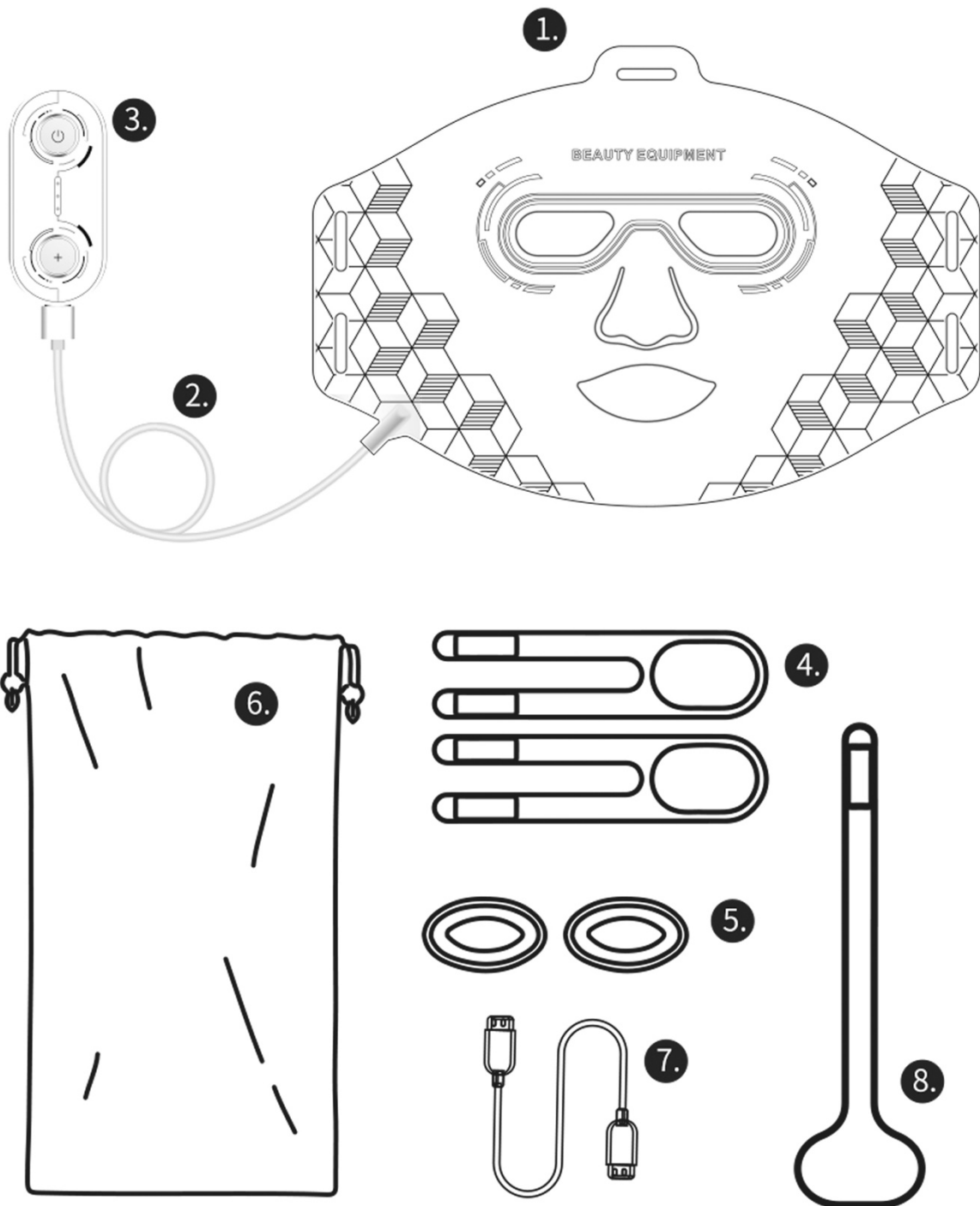

⚠️ Waarschuwingen ⚠️

Gebruik dit product niet als je behoort tot de volgende groepen

1. Niet gebruiken als je zwanger bent of je voorbereidt op een zwangerschap en borstvoeding geeft.
2. Niet gebruiken als je lichtgevoelig bent of geneesmiddelen gebruikt die lichtgevoeligheid kunnen veroorzaken:
3. Niet gebruiken als je een genetische oogziekte of huidziekte hebt (zoals lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme, enz.)

Oplaaainstructies

1. Dit product bevat een lithium-ion polymeerbatterij, gebruik het niet tijdens het opladen.

(Opmerking: Eenmaal gebruikt tijdens het opladen, kan dit schade veroorzaken aan de batterij en het apparaat. Het masker licht mogelijk niet op en werkt niet)

2. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Om het apparaat op te laden sluit u de USB-oplaadkabel aan op de controller. Steek nu de adapter in het stopcontact.
3. Als het indicatielampje van de controller knippert wordt het apparaat opgeladen. Als de indicatorlampjes stoppen met knipperen dan is het opladen voltooid.

Uitleg kleuren

Nabij-infrarood licht

Volgens experts zijn rimpelverminderende apparaten die alleen rood/geel/blauw LED-licht gebruiken niet zo effectief in het verminderen van tekenen van veroudering of het verbeteren van de algehele huidtextuur en -toon.

Nabij infrarood licht met een kortere golflengte (760M tot 1500NM) heeft meer energie en een hogere transmissie, waardoor het effectiever is.

Modus 1: Anti-veroudering

(63nm+850nm rood licht+nabij infrarood):

1. Wek je collageen en elastine op met anti-aging rood licht en nabij infrarood.
2. Helpt fijne lijntjes en rimpels te verminderen.

Modus 2: Anti-Acne

(460nm+850nm blauw licht+nabij Infrarood):

1. Straal puistjes weg met anti-acne blauw licht en nabij infrarood.
2. Helpt acne-veroorzakende bacteriën te doden.
3. Vermindert een vette huid en bacteriën.

Modus 3: Anti-Pigmentatie

(605nm+850nm geel licht+nabij infrarood):

1. Egale en stralende huid door geel licht te gebruiken.
2. Vermindert roodheid en pigmentatie.
3. Bevordert de lymfestroom om gifstoffen te verwijderen.

Quick start

Stap 1

Maak je gezicht grondig schoon




Stap 2

Maak de riemen vast aan het masker. Zet het masker op het gezicht en maak de riemen vast. Zorg ervoor dat het masker goed op het gezicht zit. Houd de aan/uit-knop op de controller ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



Stap 3

Het apparaat heeft drie verschillende kleuren. Nadat het apparaat is ingeschakeld, geeft het standaard rood licht. De kleur kan worden aangepast door kort op de "aan/uit" knop te drukken. Druk kort op de "plus" knop om de helderheid te wijzigen. Als de lampjes knipperen, is de batterij bijna leeg. Laad het apparaat tijdig op.

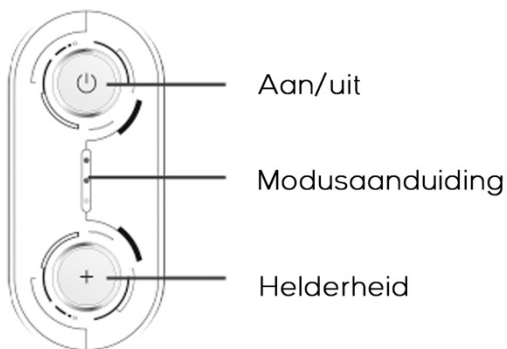

Stap 4

Het apparaat schakelt automatisch uit na een sessie van 10 minuten. Verwijder het masker nadat het apparaat is uitgeschakeld.



"Het wordt aanbevolen om 3-4 keer per week het masker te gebruiken. 10-15 minuten per keer en 4 opeenvolgende weken"

Gevoeligheidstest

Voer een lichtgevoeligheidstest uit voordat u dit product voor het eerst gebruikt.

Stap 1

Plaats het apparaat op je arm en zet de lampen aan om gedurende 10 minuten te bestralen. Als er symptomen als jeuk op de huid verschijnen, geeft dit aan dat je mogelijk een lichtgevoelige huid hebt. Het is aan te raden het apparaat niet meer te gebruiken of een dermatoloog te raadplegen voordat je het weer gebruikt.

Stap 2

Reinig voor gebruik je gezicht en houd het droog (zonder make-up) om te voorkomen dat mogelijk ingrediënten in cosmetica de werking van de huidverzorging beïnvloeden.

Stap 3

Na gebruik kan de huid rood worden, wat een normale reactie van de huid is en binnen 1-2 uur verdwijnt. Als je een branderig gevoel of een ander ongemak voelt tijdens de behandeling, stop dan onmiddellijk met het gebruik.

Garantie

Als je problemen hebt met het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@liroma.nl. We proberen je binnen 24 uur zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Liroma geeft 2 jaar beperkte garantie vanaf de aankoopdatum.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper:

- Een kopie van de factuur/aankoopbon bezit.
- Als het product in originele staat is.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn:

- Slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product.
- Met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren).
- Producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Liroma geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn.

- Schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaan.
- Producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn.
- Gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uitproductaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheid bepalingen bestaan

Neem contact op met de verkoper of op via info@liroma.nl als er problemen zijn met het product.