

GoSmooth




GoSmooth IPL Pro T-04A

HANDLEIDING

A woman with blonde hair tied back, wearing white sunglasses and a white strapless top, is using a white laser hair removal device on her armpit. She has a tattoo on her upper left arm and is wearing a gold bracelet. The background is a plain, light-colored wall.

Minder haar-
groei binnen 5
weken

- 04** Geschikte haar-
en huidtypes
- 05** Productbeschrijving
- 06** Gebruik
- 08** Behandelfases
- 09** Hoe werkt IPL?
- 10** Schoonmaken
en opbergen
- 11** Veiligheid
- 12** Medicatie en
aandoeningen
- 13** Voorzorgsmaatregelen



Geschikte haar- en huidtypes

Haar



Huid



Voor alle huidtypes raden wij aan om te beginnen op stand één. Als de huid goed op de behandeling reageert kunt je vervolgens de stand elke week met één intensiteit level verhogen. Als de huid 5 uur na de behandeling nog pijnlijk aanvoelt raden wij aan om de stand de volgende behandeling te verlagen. Heb je een getinte huid raden wij aan om de stand langzamer op te bouwen en extra alert te zijn bij gevoeligheid. Bij een te hoge stand kan een getinte huid namelijk sneller verbranden. Heb je een donkere huidskleur, dan raden wij het af om ons apparaat te gebruiken.

Product- beschrijving



Gebruik



01

Scheer 12-24 uur voor **elke** behandeling



02

Sluit het apparaat aan op het stroom



03

Zet het apparaat aan door op de aan/uit knop te **drukken**



04

Selecteer de stand door nogmaals op de aan/uit knop te **klikken**

Gebruik



05

Plaats het apparaat in een 90 graden hoek tegen de huid



06

Druk op de flitsknop wanneer het scherm begint te knippen



07

Verplaats het apparaat 1-2 cm na elke flits



08

Smeer de behandelde lichaamsdelen in met de GoSmooth Aloe Vera Gel na het behandelen

Behandel- fases

Wij raden aan om 1 keer in de 7 dagen te behandelen met de GoSmooth IPL Pro

Fase 1 (week 1-2): Dit is de startfase, je huid zal beginnen te wennen aan IPL.

Fase 2 (week 3-4): Je huid is in deze fase gewend aan IPL. Je zult merken dat de huid gladder wordt en de haargroei iets minder wordt.

Fase 3 (week 5-6): In deze fase zijn de haarzakjes beschadigd. Je zult merken dat de haargroei op sommige plaatsen is gestopt. Maar je zult nog wel wat plekjes moeten scheren.

Fase 4 (week 7-9): In deze fase sterft het haarzakje. De haargroei begint te stoppen op meerdere plaatsen.

Fase 5 (week 10-12): Het haarzakje is afgestorven. De haargroei stopt op de plekken die zijn behandeld.

Fase 6 (week 13-14): Dit is de afrondingsfase. De haargroei verdwijnt op alle plekken die zijn behandeld.

Onderhoudsfase:

Schakel over naar de onderhoudsfase om de behaalde resultaten te behouden. In dit stadium hoef je het IPL apparaat nog maar 1 keer in de 4 weken gebruiken. Zo blijf je haarvrij op de gewenste delen van je lichaam.

Hoe werkt IPL?

Met de GoSmooth IPL Pro worden lichtpulsen afgegeven aan de huid die worden opgenomen door de haarwortel. Hoe donkerder het haar, hoe beter de lichtpulsen worden opgenomen.

Het haarzakje houdt het licht vast en zet het om in warmte. Als gevolg hiervan valt het haarzakje uiteindelijk op natuurlijke wijze uit en wordt nieuwe haargroei voorkomen.

Een haargroeycyclus bestaat uit verschillende fases, één daarvan is de groeifase. IPL Ontharing is het meest effectief wanneer het haarzakje in de groeifase zit. Dit is ook de reden waarom wij iedereen adviseren om 12-24 uur van tevoren te scheren. Hiermee zorg je ervoor dat het haarzakje in de groeifase zit als je een IPL behandeling gaat doen.




Schoonmaken & opbergen

Schoonmaken

Je kunt de GoSmooth IPL Pro na gebruik schoonmaken met een vochtig doekje. Zorg ervoor dat het doekje niet te nat is, anders kan het apparaat beschadigd raken. Vermijd schoonmaakmiddelen die agressief op de huid reageren.

Opbergen

Wij raden aan om de GoSmooth IPL Pro op een droge en stofvrije plek te bewaren. Bewaar de GoSmooth IPL Pro **nooit** naast een bad of wasbak.

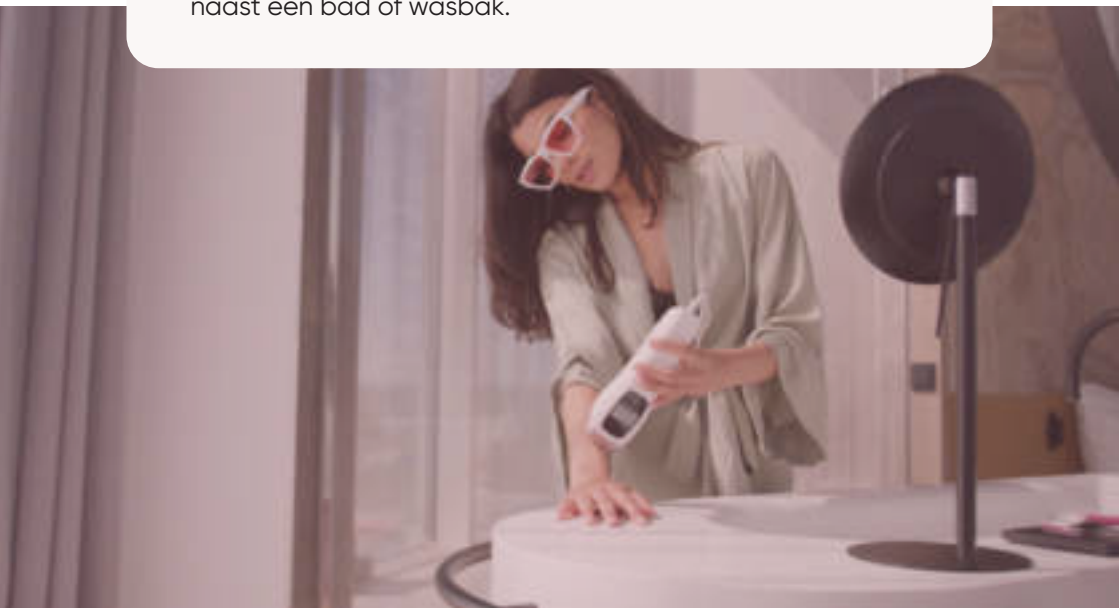

Gebruik de GoSmooth IPL Pro **nooit in de onderstaande gevallen:**

1. Als je plekken met tatoeages wilt behandelen.
2. Als je een implantaat hebt, zoals een pacemaker, neurostimulator of insulinepomp.
3. Als je infecties, eczeem, brandwonden, snijwonden of schaafwonden hebt op de plekken die je wilt behandelen.
4. Als je huidirritaties hebt.
5. Als je littekens hebt op plekken die je wilt behandelen.
6. Als je wratten of permanente make-up hebt op plekken die je wilt behandelen.

Gebruik de GoSmooth IPL Pro **nooit op de onderstaande lichaamsdelen:**

1. Ogen of rondom de ogen
2. Tepels
3. Lippen
4. Oren
5. Penis
6. Balzak

Medicatie en aandoeningen

Medicatie

Gebruik de GoSmooth IPL Pro **nooit wanneer je de onderstaande medicaties gebruikt:**

1. Alfa-hydroxyzuren
2. Béta-hydroxyzuren
3. Isotretionoïne
4. Azelainezuur
5. Accutane
6. Roaccutane
7. Alle medicatie die lichtgevoeligheid verhoogt
8. Antistollingsmiddelen
9. Straling therapie
10. Chemo therapie
11. Immunosuppressieve medicatie

Aandoeningen

Gebruik de GoSmooth IPL Pro **nooit wanneer je één van de onderstaande aandoeningen hebt:**

1. Stofwisselingziekten
2. Congestieve hartinsufficiëntie
3. Ziektes die samenhangen met lichtgevoeligheid, zoals polymorfe lichterruptie (PMLE), zonneurticaria, porfyrie etc.
4. Als je in het verleden behandeld bent voor collageenaandoening
5. Epilepsie
6. Huidkanker of als je in het verleden een andere vorm van kanker hebt gehad
7. Bloedingstoornis
8. Immuniteitsaandoeningen

Voorzorgs- maatregelen

Volg deze instructies zorgvuldig:

- Gebruik de GoSmooth IPL Pro nooit in bad of in de douche.
- De GoSmooth IPL Pro dient niet gebruikt te worden door kinderen jonger dan 14 jaar.
- Gebruik de GoSmooth IPL Pro niet als het zichtbaar kapot is of niet juist functioneert.
- Gebruik de GoSmooth IPL Pro niet als het lichtvenster beschadigd is.
- Zorg ervoor dat er altijd een vrije luchtstroom is bij het ventilatievenster aan de achterzijde van de GoSmooth IPL Pro.
- Maak geen eigen aanpassingen aan de GoSmooth IPL Pro en de adapter.
- Raak het lichtvenster niet aan tijdens of na het gebruik.





Contact

Mocht je na het lezen van deze handleiding nog steeds vragen hebben over de GoSmooth IPL Pro of over IPL in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande emailadres:

support@go-smooth.com

of bezoek onze website **www.go-smooth.nl**
voor meer informatie