

Onderhoud

1. Veeg het oppervlak van de apparatuur af met een licht vochtige handdoek en droog het af met een zachte doek.
2. Wanneer u de batterij lang opbergt of reist, scheidt u de batterij van de apparatuur en plaatst u deze in de originele verpakkingendoos van de apparatuur.

Waarschuwing

1. Dompel niet onder in water, blijf uit de buurt van vloeistof en warmtebron op hetzelfde moment en houd het koelgat van de motor vrij van stof en diversen.
2. Demonteer schroeven niet zonder toestemming.
3. Sluit de apparatuur gedurende een half uur uit voor elk uur van gebruik.
4. Koppel de oplader los van de batterij na het opladen of voor gebruik en gebruik deze niet tijdens het opladen.
5. Het gebruik van deze apparatuur is verboden zonder een arts te raadplegen voor het gewonde deel van het lichaam.

Disclaimer


Lees voordat u de apparatuur gebruikt de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik deze apparatuur vervolgens correct volgens de instructies. Het bedrijf zal geen wettelijke verplichtingen op zich nemen voor de verwondingen en verliezen veroorzaakt door het onjuiste gebruik van de apparatuur volgens de instructies. Niet gebruiken bij hoge snelheid en hoge druk of verbied het gebruik van apparatuur zonder toestemming van de arts in een van de volgende omstandigheden:

Zwangerschap, diabetes, neuropathie of schade aan het netvlies, pacemakerkleding, recente chirurgie, epilepsie of migraine, hernia, lysis of spondylitis, recente gewrichtsvervangings of intra-uteriene apparaat of fysieke gezondheidsproblemen, zwakke volwassenen en kinderen (moeten worden vergezeld door gezonde volwassenen). Deze tegenstrijdigheden betekenen niet dat u deze apparatuur niet kunt gebruiken. We raden u aan uw arts te raadplegen voordat u het met zijn toestemming gebruikt. We bestuderen de impact van de apparatuur op specifieke medische ziekten, wat ertoe kan leiden dat de bovenstaande beschrijving niet volledig en gedetailleerd is, maar alle mensen die lijden aan de bovenstaande symptomen moeten worden aangevuld met het advies en worden begeleid door de artsen, experts of fysiotherapeuten.



Gebruikershandleiding

Fysiotherapeutische apparatuur voor Myofascium CC - 9111

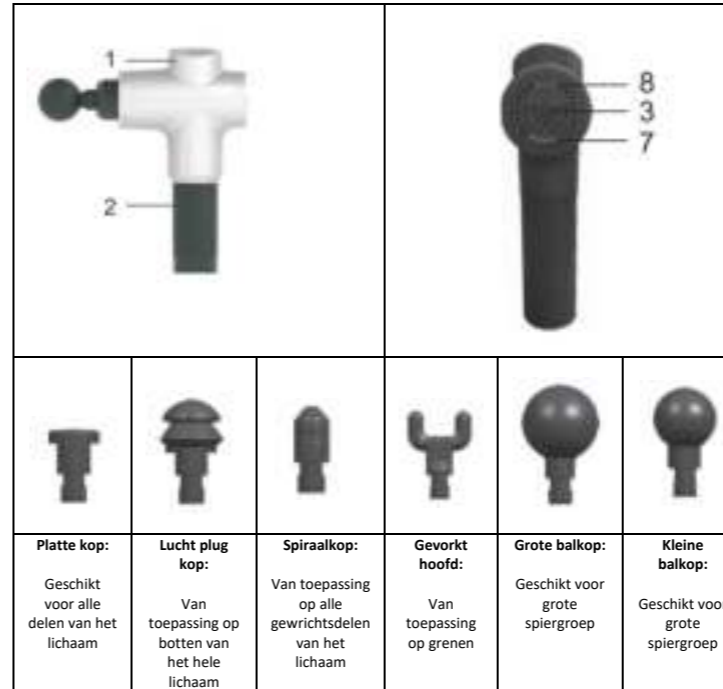

1. Hoge frequentie, hoge stilte, hoge snelheid motor
2. Batterij
3. Start- en snelheidsregelknop voor motor
4. Batterij schakelaar +
5. Opladaansluiting
6. 6 soorten massagekoppen;
7. Elektrische indicatorlampje (wanneer vier groene lampjes en één rood lampje van links zijn, geeft dit voldoende batterij aan.
 - a. Naarmate de gebruikstijd langer en langer wordt, gaan de vier groene lampjes van links naar rechts uit en uiteindelijk alleen het rode lampje brandt, wat aangeeft dat de elektriciteit is uitgeput en moet worden opgeladen).
8. Versnellingslampje (het eerste blauwe lampje van rechts licht op als eerste versnelling (pulsfrequentie: 4 1800 tpm), de tweede versnelling wanneer twee blauwe lampjes oplichten (pulsfrequentie: 2400 tpm) en de derde wanneer drie lampjes oplichten (pulsfrequentie: 3200 tpm: 5 minuten)

Gebruiksaanwijzing

1. Wanneer de batterijschakelaar 6 in de "AAN" -positie wordt gezet, zijn zowel de batterijvoedingsindicator als de voedingsindicator 9 ingeschakeld, met 4 groene lampjes en 1 rood lampje dat het stroomverbruik van sterk naar zwak van links naar rechts vertegenwoordigt, en wanneer alleen het rode lampje brandt, betekent dit dat het stroomverbruik moet worden opgeladen.
2. Afhankelijk van de verschillende behoeften van massageonderdelen, worden specifieke koppen geselecteerd om in het ronde gat voor het fascia-pistool te worden gestoken.

3. Wanneer de startknop 4 van de motor wordt ingedrukt, begint de motor te draaien; Het eerste groene lampje boven de motorknop licht bovenaan voor versnelling "1"; Druk nogmaals op de startknop van de motor, de twee groene lampjes lichten op naar versnelling 2; Druk drie keer op de startknop van de motor en de drie groene lampjes lichten op om versnelling 3" weer te geven; Druk vier keer op de startknop van de motor, waarna de motor stopt met draaien; Druk nogmaals op de motor om de "1" versnelling te starten. Het bovenstaande is de basiscyclustroom.
4. Schakel de batterijschakelaar uit na massage.
5. Om apparatuur te beschermen, stopt de verbinding automatisch de beveiliging na 10 minuten continu gebruik. Als het nog steeds nodig is, schakel het dan weer in.

Batterij Instructies

1. Nadat de stroom is uitgeput, moet de batterij 2,5-3 uur worden opgeladen om volledig te worden opgeladen en de duur van de levensduur van de batterij is afhankelijk van de versnellingsaanpassing. Wanneer de batterij is opgeladen, gaat het batterij-indicatielampje 5 branden, wat betekent dat het opladen normaal is. Tegelijkertijd is het verboden om de motor te starten tijdens het opladen. Voor uw veiligheid kan de motorsleutel niet worden gestart bij het opladen van de batterij.

Veiligheidsinstructies

Om elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, moet dit product worden gebruikt volgens de volgende instructies.

1. Alleen voor volwassenen.
2. Deze apparatuur kan het huidoppervlak niet direct masseren, om geen schade aan de huid te veroorzaken. Het massagegedeelte of de apparatuur moet worden bedekt met droge en schone kleding en de apparatuur moet tijdens gebruik voorzichtig worden ingedrukt en verplaatst. De massagetiempoort voor hetzelfde deel mag niet langer zijn dan 60 seconden.
3. Onder de voorwaarde van geen pijn, tumor en ongemak, kunnen alleen de zachte weefseldelen van het lichaam met hoge snelheid en druk worden gebruikt, en het hoofd en eventuele botdelen van het lichaam kunnen niet met hoge snelheid en druk worden gebruikt.
4. Afhankelijk van de massagebehoefte van verschillende delen, selecteert u de juiste massagekop.
5. Frequente hoge snelheid en hoge druk op hetzelfde deel zal blauwe plekken veroorzaken, vergezeld van pijn en ongemak, die onmiddellijk moeten worden gestopt.
6. Houd uw vingers en al uw haar uit de buurt van de telescopische staaf van de apparatuur en het koelgat van de motor aan de achterkant om knijpen te voorkomen.
7. Plaats geen voorwerpen in de warmteafvoergaten van de motor.
8. Laat de apparatuur niet overlopen in het water. Er mag geen water in de apparatuur komen vanuit het warmteafvoergat van de motor.
9. Gooi deze apparatuur niet weg of misbruik deze niet.
10. Alleen de oplader van de originele fabriek kan worden gebruikt voor het opladen.
11. Controleer de apparatuur en batterij zorgvuldig voor elk gebruik.
12. Breng geen wijzigingen aan de apparatuur aan zonder toestemming.
13. Bedien de apparatuur niet en laad de apparatuur niet op in onbeheerde toestand.

--	--	--	--