


Opladen

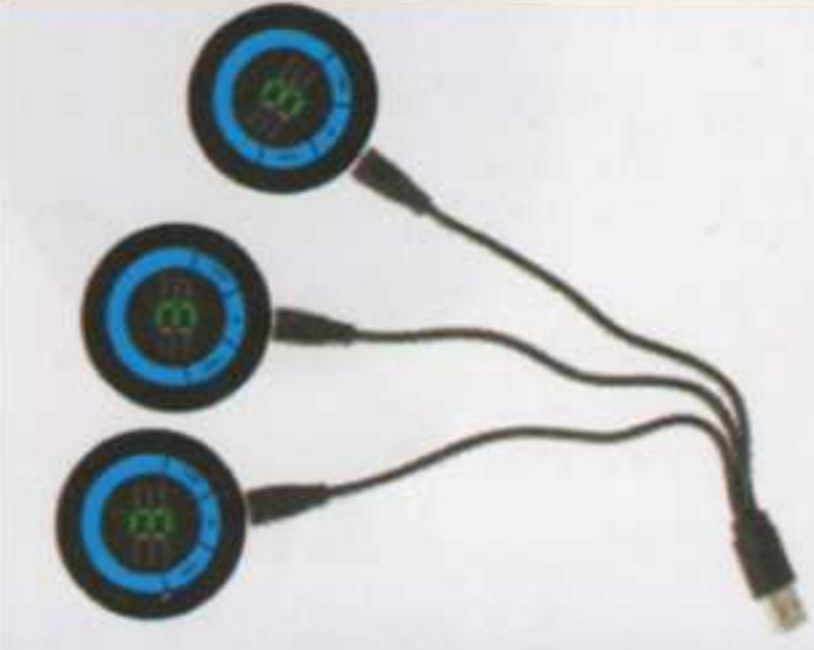

Maak verbinding met de USB-kabel om drie controllers op te laden. Wanneer deze oplaad, brand een rood lichtje. Wanneer het volledig geladen is, is het lichtje gedoofd. Het duurt ongeveer 1 uur om de controllers volledig op te laden. Bij een volledig geladen lithium batterij kan de controller minimaal 500 minuten gebruiken alvorens deze weer opgeladen dient te worden.

Algemene veiligheidsregels

Deze EMS trainer mag nooit worden gebruikt om niet-gediagnosticeerde pijn te maskeren of te verlichten. Voordat u symptomen van pijn behandelt, moet u uw arts raadplegen.

Gebruik de EMS trainer niet in de buurt van je hart, op je mond of bij huidproblemen.

Gebruik de EMS trainer niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid is, zoals de badkamer.

Het kan nodig zijn om een EMS trainer te gebruiken onder toezicht van een fysiotherapeut.

Als je onder behandeling van een arts bent, bespreek dit met hem voor eerste gebruik van deze EMS trainer.

Bij twijfel voor gebruik van de EMS trainer, ga eerst naar een arts.

Niet gebruiken tijdens slapen, autorijden of douchen.


Laat de EMS trainer niet in aanraking komen met metaal zoals broekriem, sieraden.

Niet gebruiken, als je

- Een implantaat in je lichaam hebt
- Hartritmestoornissen of andere hart of zenuw aandoening hebt;
- Epileptische aanvallen hebt
- Zwanger bent
- Kanker hebt

Technische Specificatie

Product Naam	LCD display abs stimulator	Voltage	4.2V (Accu)
Gewicht	Ongeveer 111.5g	Programma	6 Programma's 9 intensiteiten
Afmeting	200X186mm (buispijler pad) 200X55 (Arm of been pad) 50mm (Controller)	Beste omgevings temperatuur	Tussen de 15 en 35°C
Type Batterij	Polymer lithium battery		
Voltage	5V (Voltage tijdens laden)		

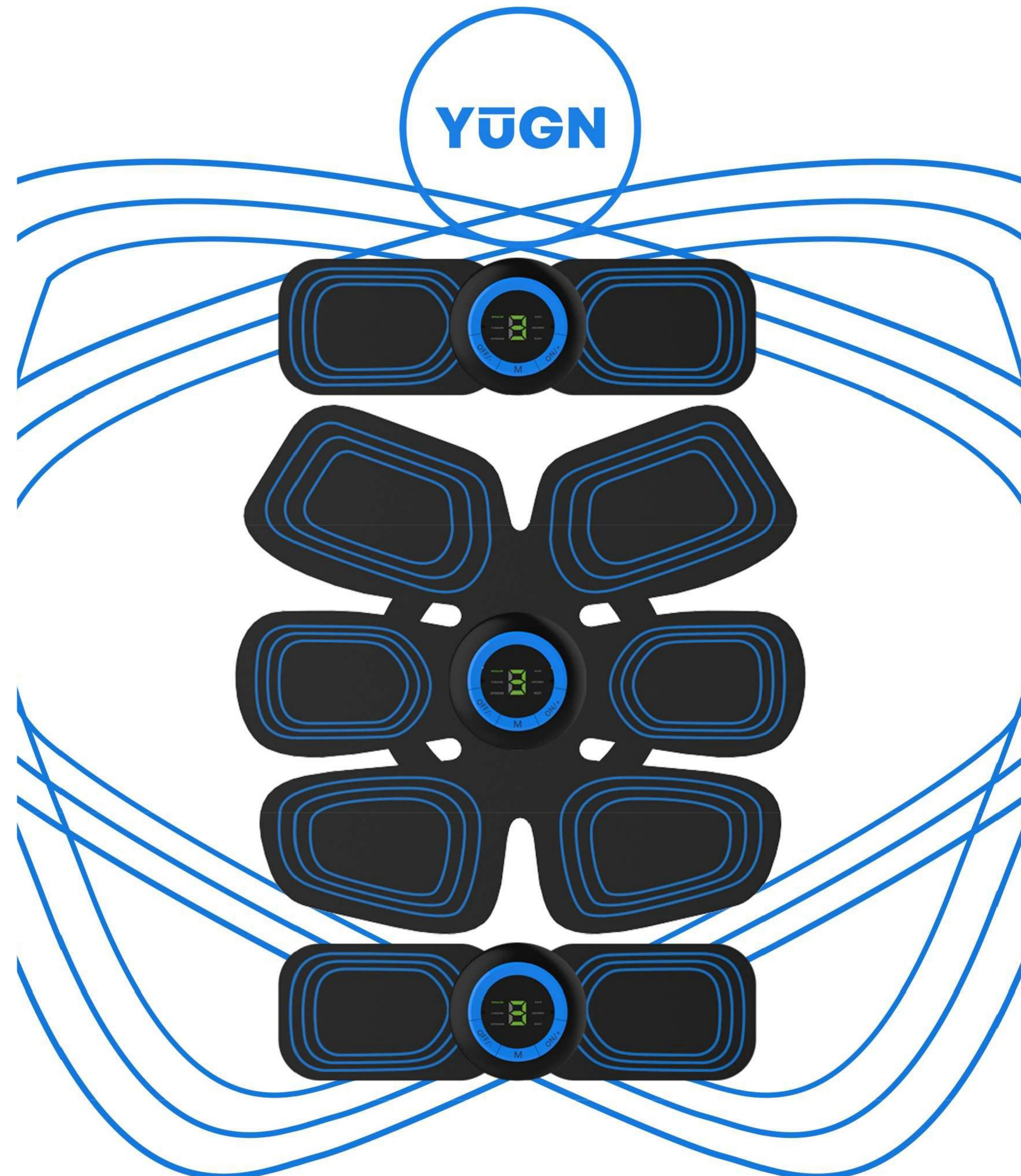

Vitality