




**NL Gebruiksaanwijzing
Warmtekussen HS 200**

Apparaat en bediening

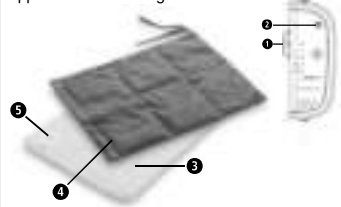

- 1 Bedieningsunit met schuifknop
- 2 Lampje
- 3 Warmtekussen
- 4 Kersenpiethoes
- 5 Aansluiting (aan de achterkant)

Legenda

- Gebruik het warmtekussen niet als het verfrommeld of gevouwen is!
- Steek geen naalden in het warmtekussen!
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!
- Gebruik het warmtekussen uitsluitend in overdekte ruimtes!
- Het warmtekussen kan in de wasmachine met een fijnwasprogramma op max. 30°C worden gewassen!
- Was de kersenpiethoes niet!
- Niet bleken!
- Het warmtekussen mag niet in de wasdroger worden gedroogd!
- Het warmtekussen mag niet worden gestreken!
- Niet chemisch reinigen!

BELANGRIJK! Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
Deze instructies moeten worden opgevolgd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

TIP
Deze aanwijzingen geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.

Beschermingsklasse II
LOT-nummer
Fabrikant

NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het product aan iemand anders geeft.



over de voeding

- Let op dat het apparaat is uitgeschakeld voor u de stekker in het stopcontact steekt en dat de op het label vermelde elektrische spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet.
- Houd het snoer en de bedieningsunit uit de buurt van hitte, vocht en vloeistoffen. Pak de stekker nooit vast met natte handen of wanneer u in het water staat.
- Het warmtekussen mag alleen worden gebruikt met de bijbehorende bedieningsunit (HS 200).
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek direct de stekker uit het stopcontact.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact om het warmtekussen van de stroomtoevoer te scheiden. Trek nooit aan het snoer!
- Trek niet aan het snoer, draai het warmtekussen niet aan het snoer en til het niet op aan het snoer.
- Let op dat het stopcontact en het snoer goed bereikbaar zijn, zodat u de stekker zo nodig snel uit het stopcontact kunt trekken.

voor bijzondere personen

- Gebruik het warmtekussen niet bij kinderen, mindervaliden of slapende personen en evenmin bij mensen die ongevoelig zijn voor warmte, waardoor ze niet kunnen reageren op oververhitting.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het warmtekussen spelen.
- Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar mogen dit product niet gebruiken, omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- Het warmtekussen mag niet worden gebruikt door jonge kinderen vanaf 3 jaar, tenzij één van de ouders of een begeleider de bedieningsunit heeft ingesteld en het kind voldoende is geïnstrueerd hoe de bedieningsunit veilig kan worden gebruikt.
- Het warmtekussen kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar, waarbij de temperatuur altijd moet zijn ingesteld op de laagste stand.
- Wanneer het snoer of de bedieningsunit onjuist wordt gebruikt, bestaat kans op verwurging of struikelen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het correct leggen van het elektriciteits snoer.
- Overleg eerst met uw arts voor u het warmtekussen gaat gebruiken als u twijfels heeft omtrent uw gezondheid.
- Gebruik het warmtekussen niet op lichaamsdelen die gezwollen, ontstoken of gekwetst zijn.
- Informeer uw arts wanneer u gedurende langere tijd spier- of gewrichtspijn heeft. Langdurige pijn kan een symptoom zijn van een ernstige ziekte.
- De elektromagnetische velden die afkomstig zijn van dit elektrische product kunnen in bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker storen. Overleg daarom met uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voor u dit product gaat gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product wanneer u het ervaart als onaangenaam of pijnlijk.
- Let op dat uw huidsiere niet in de kersenpiethoes bijten; het eten van kersenpitten kan giftig zijn voor hun kleine lichamen.
- Gooi het product en de pitten direct weg buiten het bereik van kinderen en huishouders wanneer het kersenpitten beschadigd is of wanneer er pitten uit zijn gevallen.
- De kersenpiethoes is niet geschikt voor personen die hiervoor allergisch zijn.

over het gebruik van het product

- Gebruik het warmtekussen alleen voor doeleinden waarvoor het is bedoeld zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of het warmtekussen sporen van slijtage en/of beschadigingen vertoont.
- Gebruik het warmtekussen niet als u slijtage, beschadigingen of tekenen van onjuist gebruik constateert aan het warmtekussen, de bedieningsunit of het snoer of als het warmtekussen niet werkt.
- Het warmtekussen mag niet worden gebruikt als het gevouwen of geknikt is.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere puntige of scherpe voorwerpen aan het warmtekussen worden vastgemaakt of in het warmtekussen worden gestoken.

⚠ **Risico van een elektrische schok en brandgevaar!** Het warmtekussen en de controller mogen niet in de magnetron of op een verwarming worden gelegd.



- Zet het warmtekussen nooit aan zonder toezicht.
- Het product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt in ziekenhuizen.
- Ga niet slapen terwijl het warmtekussen aan staat. Van te lang gebruik van het warmtekussen op een hoge warmtestand kan de huid verbranden.
- Gebruik het warmtekussen niet als het nat is en alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer e.d.).
- De bedieningsunit mag tijdens het gebruik niet op of onder het warmtekussen worden gelegd of worden afgedekt.
- Ga niet op het warmtekussen zitten of liggen, maar leg het kussen op het gewenste lichaamsdeel.
- Gebruik de vooraf verwarmde kersenpiethoes niet samen met het warmtekussen.

over onderhoud en reiniging

- U mag het warmtekussen zelf alleen schoonmaken. Om ongelukken te voorkomen, mag u het nooit zelf repareren. Neem contact op met de servicedienst.
- Kinderen mogen het warmtekussen niet schoonmaken of onderhouden zonder dat er toezicht op wordt gehouden.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd snoer alleen worden vervangen door **medisana**, een erkende specialzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Een beschadigd snoer kan alleen worden vervangen door eenzelfde type snoer.
- Repareer het warmtekussen niet zelf wanneer er zich een storing voordoet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende specialzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Laat het warmtekussen eerst afkoelen voor u het ongevouwen oppergt op een schone en droge plaats.
- Leg geen voorwerpen op het warmtekussen wanneer u het heeft opgeborgen om scherpe knikken te voorkomen.

Levering

Controleer eerst de het product compleet en onbeschadigd is. Gebrek het product bij twijfel niet en neem in dat geval contact op met uw verkoper of de klantenservice.

Meegleverd:

- 1 **medisana** warmtekussen HS 200 met afneembare bedieningsunit HS 200
- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

⚠ WAARSCHUWING
Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen!
Kans op verstikking!

Gebruik

Ga niet op het warmtekussen zitten of liggen, maar leg het kussen op het gewenste lichaamsdeel. Het warmtekussen bereikt enkele minuten nadat het is ingeschakeld een aangename temperatuur die individueel kan worden ingesteld.

Daarnaast kan het warmtekussen ook worden gebruikt in combinatie met de kersenpiethoes. Het kan in dat geval langer duren voor de warmte aan de buitenkant van de hoese voelbaar wordt.

De kersenpiethoes kan de al opgeslagen warmte ook afgeven zonder gebruik van stroom. Warme daartoe de kersenpiethoes met het warmtekussen op, schakel daarna het warmtekussen uit en haal vervolgens de hoese van het warmtekussen af.

Gescheiden van het warmtekussen kan de kersenpiethoes ook in de magnetron (max. 700 watt, max. 1 minuut) of op een verwarming worden opgewarmd. Spuut ca. 6 ml water gelijkmatig over de hoese. Plaats 1/3 kopje water samen met de hoese in de magnetron. Controleer na het opwarmen altijd zorgvuldig de temperatuur, om het risico van verbranding te voorkomen.


VOORZICHTIG Gebruik de hete kersenpiethoes niet samen met het warmtekussen. Laat de kersenpiethoes eerst afkoelen (handwarm) en gebruik hem daarna pas om het warmtekussen.

Gebruik

Steeke de stekker in het stopcontact en schakel het warmtekussen in. Schuif daartoe de schuifknop van de bedieningsunit **0** in de gewenste stand 1, 2, 3 of 4. De schuifknop geeft bij elke stand een klik. Zodra het warmtekussen is ingeschakeld, gaat het lampje **0** van de bedieningsunit branden en klinken drie korte tonen. Het lampje van de bedieningsunit brandt eerst oranje (opwarmfase) en na het bereiken van de juiste temperatuur groen. Hoe hoger de stand, des te hoger wordt de temperatuur. Schuif om het warmtekussen weer uit te schakelen de schuifknop helemaal terug naar stand 0. Wanneer het lampje van de bedieningsunit uit gaat, is het warmtekussen uitgeschakeld. Schuif de schuifknop in stand 1 wanneer u het warmtekussen in de automatische modus wilt gebruiken. Na ca. 90 minuten in de automatische modus schakelt het kussen automatisch uit. Trek de stekker uit het stopcontact als u het warmtekussen niet meer wilt gebruiken.

Standen schuifknop

0 = het warmtekussen is uitgeschakeld, het lampje van de bedieningsunit is uit.
1 = laagste warmtestand, stand 1 wordt aanbevolen voor de automatische stand;
2, 3 = gemiddelde warmtestanden
4 = hoogste warmtestand.

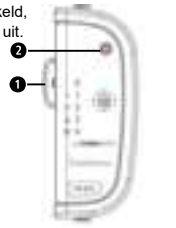

Het warmtekussen heeft een bijzonder nauwkeurige elektronische regeling. Afhankelijk van de temperatuur van de ruimte en de instelling kan het lampje binnen enkele seconden van oranje naar groen en weer terug wisselen. Dit geeft aan dat het kussen snel tussentijds opwarmt en is volkomen normaal.

Automatisch uitschakelen

Het warmtekussen schakelt automatisch uit. Dit gebeurt onafhankelijk van de ingestelde warmtestand na 90 minuten. Schuif de schuifknop helemaal terug naar stand 0. Schuif de schuifknop om het warmtekussen weer in te schakelen terug naar stand 0 en vervolgens weer naar de gewenste warmtestand.

Schoonmaken en onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het warmtekussen tenminste 10 minuten afkoelen voor u het gaat schoonmaken.
- Het warmtekussen heeft een afneembare bedieningsunit. Haal de bedieningsunit los van het warmtekussen door het verbindings snoer uit de aansluiting **0** van het warmtekussen te trekken.
- Het warmtekussen mag in de wasmachine op een 30° fijnwasprogramma of voorzichtig met de hand worden gewassen. Leg het warmtekussen bij voorkeur in een badkuip met handwarm water en een beetje fijnwasmiddel en knijp het zacht uit.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
- Laat het warmtekussen nadat het is gewassen ongevouwen drogen op een plat oppervlak.
- Gebruik het warmtekussen pas weer als het volledig droog is.
- Bewaar het warmtekussen op een schone en droge plaats, vouw het niet dubbel en leg er niets bovenop.
- De kersenpiethoes kan voorzichtig worden schoongemaakt met een vochtige doek. Kersenpiethoes niet in de wasmachine stoppen!

Weggooien

⌘ Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model:	medisana warmtekussen HS 200
Voeding:	230V~, 50 Hz
Verwarmingscapaciteit:	100 watt
Autom. uitschakeling:	na ca. 90 minuten
Gebruiksomstandigheden:	alleen gebruiken in droge ruimtes conform de gebruiksaanwijzing
Bewaaromstandigheden:	niet dubbelvouwen, schoon en droog bewaren
Afmetingen:	ca. 41 x 31 cm
Gewicht:	ca. 900 g
Lengte snoer:	ca. 2,70 m
Artikelnr.:	61168
EAN-nummer:	40 15588 61168 1

In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Problemen en oplossingen

Dit warmtekussen is voorzien van het actieve beveiligingssysteem APS TECH. Het warmtekussen herkent diverse storingen en geeft afhankelijk van de oorzaak zo nodig bepaalde alarmsignalen af. Bovendien gaat bij een storing het lampje van de bedieningsunit ROOD branden. **3 piepsignalen met een tussenpoos van 1 seconde en het lampje van de bedieningsunit brandt rood:** de verbinding tussen de bedieningsunit en het warmtekussen is onderbroken of er is sprake van een technisch defect van de elektrische onderdelen. Controleer of het snoer goed is aangesloten. Gebruik het warmtekussen niet en neem contact op met een servicedienst als het snoer goed zit aangesloten, maar het alarm signaal aanhoudt.

3 piepsignalen met een tussenpoos van 2 seconden gedurende 1 minuut en het lampje van de bedieningsunit brandt rood: het warmtekussen is geknikt of gevouwen. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en met inachtneming van alle veiligheidsinstructies.

Ononderbroken piepsignaal en het lampje van de bedieningsunit brandt rood: er zijn essentiële onderdelen beschadigd of er is sprake van kortsluiting. Gebruik het warmtekussen in dat geval niet en neem contact op met een servicedienst.

Wanneer het product NIET reageert nadat het is ingeschakeld (dus wanneer het lampje van de bedieningsunit niet gaat branden en er geen piepsignaal klinkt), controleer dan of de stekker goed in het stopcontact zit. Wanneer de stekker wel goed zit, is het kussen defect. Gebruik het warmtekussen in dat geval niet en neem contact op met een servicedienst.

Garantie- en reparatievoorwaarden

Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw specialzaak of direct met de servicedienst. Als u het product moet opsturen, geef dan aan wat het defect is en stuur een kopie van de aankoopbonnee mee. Daarbij gelden de volgende garantievoorwaarden:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantperiodes gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode van het product of de vervanging onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
 - a. alle schades die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of bij het opsturen naar de servicedienst.
 - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.