


Handleiding Long Xing (LX-314) Infrarood thermometer




1. Installeren van de batterijen

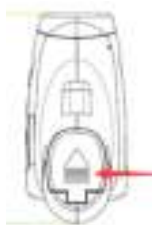

Openen van de batterijhouder

Draai de thermometer met het batterijdeksel naar boven en duw het batterijdeksel in de richting van de pijl om het batterij houder te openen.

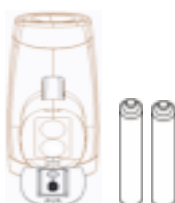

Plaatsen van de batterijen

Plaats 2 AAA batterijen (niet meegeleverd) op de juiste manier in de de batterijhouder. Op de onderkant van de thermometer staat aangegeven waar de + en de – geplaatst dient te worden.



Sluiten van de batterijhouder

Duw de batterijdeksel weer terug totdat deze goed sluit. De thermometer is nu klaar voor gebruik. Indien de thermometer niets doet controleer dan of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.

2. Het meten van de temperatuur



- Richt de thermometer op het midden van een voorhoofd op een afstand van 3 -5 cm.
- Druk op de paarse knop (meettoets).
- Na ongeveer 1 seconde hoort u een piepton, dit betekent dat de lichaamstemperatuur is gemeten en de meting voltooid is.
- Op het LCD-scherm wordt nu de gemeten temperatuur weergegeven.

3. Geheugenrecords



Na elke test registreert de thermometer automatisch de gemeten temperatuur, tot maximaal 32 gegevens. Als de geheugen plekken vol zijn, wordt het oudste meetresultaat gewist.

Om de voorgaande meetgegevens te bekijken neemt u de volgende stappen

- Activeer de thermometer door de paarse meetknop te drukken
- Klik op + of – knop aan de zijkant van de thermometer om eerdere metingen af te lezen

4. Instelling temperatuureenheid



De temperatuur kan zowel in Celsius (°C) als in Fahrenheit (°F) worden ingesteld. Door middel van een klik op de knop “Mode” kan de instelling aangepast worden. De gekozen instelling wordt rechtsboven op het LCD-scherm weergegeven (°C of °F).

5. Waarschuwingsweergave in kleur



Op het moment dat de gemeten lichaamstemperatuur hoger is dan de ingestelde alarmtemperatuur, verandert de kleur van het LCD-scherm naar geel of rood.

Automatische uitschakeling

Nadat de thermometer heeft gemeten zal deze automatisch na 15 seconden automatisch uitschakelen.