

Gebruiksaanwijzing Voetmassage apparaat



Inhoudsopgave

Gebruiks/ Veiligheidsinstructies –	p.2
Raadpleeg vóór gebruik een arts indien–	p.3
Opslag van het product –	p.3
Gebruik van de belangrijkste functies –	p.3
Recycling en milieu –	p.4
Product opbouw–	p.4
Problemen en oplossingen –	p.4
Technische Specificaties –	p.5
Aanvullende gebruiks- en onderhoudsvoorschriften–	p.5
Contact en conformiteit–	p.5

Gebruiksaanwijzing

Voetmassage apparaat

Sole AN-8201



Relax Master



www.relaxmaster.nl

Gebruiks/ Veiligheidsinstructies

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door om veilig en correct gebruik te garanderen.
2. Het apparaat kan tijdens gebruik warm worden. Wees extra voorzichtig bij een droge, gevoelige of slecht doorbloede huid om verbranding te voorkomen.
3. Gebruik het apparaat niet binnen één uur vóór of na een maaltijd.
4. Val nooit in slaap terwijl het apparaat in werking is.
5. Gebruik het apparaat maximaal 30 minuten aaneengesloten. De aanbevolen gebruiksduur is 15 minuten per sessie.
6. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.
7. Stop onmiddellijk met het gebruik bij storingen, abnormale situaties of ongemak.
8. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de adapter of het apparaat zelf beschadigd is. Laat onderdelen uitsluitend vervangen door gekwalificeerd servicepersoneel of een erkende onderhoudsafdeling.
9. Gebruik het apparaat niet in een omgeving met hoge temperatuur of luchtvochtigheid, om schade aan de motor te voorkomen.
10. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en oefen tijdens gebruik geen overmatige druk uit.
11. Schakel alle functies uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat loskoppelt of schoonmaakt.
12. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door professioneel servicepersoneel. Voer zelf geen reparaties of demontage uit.
13. Dit product is geen medisch hulpmiddel en heeft geen diagnostische of therapeutische werking. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een medisch professional.
14. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huiselijk gebruik en ontspanning.

Raadpleeg vóór gebruik een arts indien:

1. een pacemaker of ander medisch implantaat heeft
2. lijdt aan botproblemen (zoals osteoporose)
3. zwanger bent
4. behandeld wordt voor een ernstige medische aandoening.

Opslag van het product


1. Bewaar het apparaat altijd op een veilige, droge plaats.
2. Gebruik of bewaar het niet bij temperaturen boven 40 °C.
3. Plaats het apparaat nooit buitenshuis.
4. Bescherm het tegen direct zonlicht en hoge temperaturen.

Gebruik van de belangrijkste functies (knoppen)



Aan/uit-schakelaar

- Nominale gebruiksduur: 15 minuten
- Automatische uitschakeling na 15 minuten

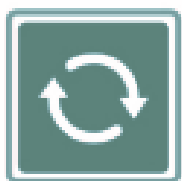

Shiatsu-richting schakelaar

- Verandert de draairichting van de massagekoppen
- Massage in afwisselende richtingen is effectiever



Snelheidstoets

- Wijzigt de massage-intensiteit (totaal 3 snelheden)




Verwarmingsschakelaar

- Aan/uit voor de warmtefunctie
- Activeert de verwarmingsfunctie tijdens de massage

Recycling en milieu

Dit apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt (WEEE).

Productopbouw

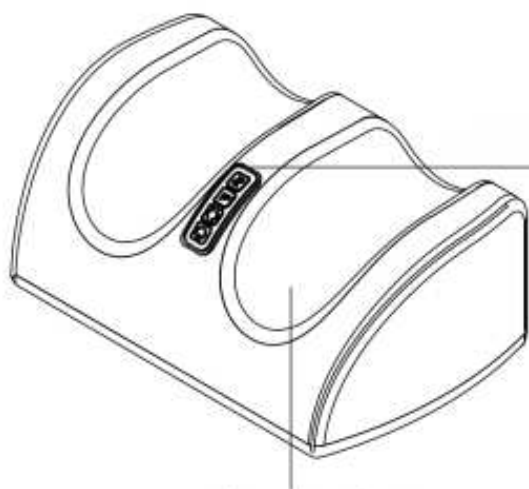

Bedieningspaneel

Shiatsu-massagekop

Problemen en oplossingen

Als u tijdens het gebruik van het product problemen ondervindt, volg dan de onderstaande tips en oplossingen.

Situatie	Eventuele oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	1. Geen stroom 2. Schakelaar niet ingedrukt	1. Controleer de stroomtoevoer 2. Druk op de aan/uit-knop
Plotselinge onderbreking	1. Stroomuitval 2. Gebruiksduur overschrijdt ingestelde tijd 3. Massage te krachtig onderbroken	1. Controleer de stroomtoevoer 2. Wanneer het apparaat is afgekoeld, druk opnieuw op de "ON/OFF"-toets 3. Schakel het apparaat weer in

Technische specificaties

Voeding: 210–240V

Adapter: 12V, 2A

Vermogen: 24W

Automatische gebruiksduur: 15 minuten

Afmetingen: 33,5 x 22 x 14,5 cm

Aanvullende gebruiks- en onderhoudsvorschriften

- Hang het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Controleer altijd of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties van het apparaat.
- Trek bij het loskoppelen de adapter rechtstreeks uit het stopcontact, nooit aan het snoer.
- Gebruik uitsluitend de originele adapter om de levensduur van het apparaat te waarborgen.
- Schakel het apparaat volledig uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het langere tijd niet gebruikt.



Dit product is in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

Richtlijn Laagspanning (2014/35/EU)

EMC Richtlijn (2014/30/EU)

RoHS Richtlijn (2011/65/EU)

WEEE Richtlijn (2012/19/EU)

Een EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de importeur.

Relax Master

Verkooppartner Social SET

Hoogstraat 157, 6373

Landgraaf

The Netherlands

Mail voor vragen, reparatie en garantie naar info@relaxmaster.nl
Wij bieden 2 jaar garantie.