

INFINITY GOODS SHIATSU MASSAGE KUSSEN

PRODUCT HANDLEIDING



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees alle instructies volledig en bewaar alle instructies voor toekomstig gebruik.
2. Niet geschikt voor kinderen.
3. Niet gebruiken tijdens het rijden.
4. Gebruik niet als u zwanger bent.
5. Gebruik niet als u een van de volgende gezondheidsaandoeningen heeft:
Hittegevoeligheid, circulatiestoornis, spatader, kneuzingen, gebroken huid, huidirritatie, spier- of weefselontsteking, aderontsteking, letsel of open wonden.
6. Als u tijdens de massage pijn of ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts.
7. Gebruik niet als u een van de volgende zaken heeft: Pacemaker, kunstmatige gewrichten elektronische implantaten.
8. Niet gebruiken als u een olie of lotion op uw huid heeft aangebracht
9. Zet het product uit na gebruik en koppel los van het lichtnet.
10. Neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat u niet in slaap valt tijdens het gebruik.
11. Draag dit product niet aan het stroomsnoer.
12. Maak dit product nooit schoon, tenzij het is losgekoppeld. Gebruik een met een zeer kleine hoeveelheid water bevochtigde doek om het product te reinigen, kan worden gebruikt om het product af te vegen, maar het moet onmiddellijk worden gedroogd. Gebruik dit product pas weer in als het helemaal droog is.
13. Niet onder een deken of kussen gebruiken. Overmatige verhitting kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen bij personen.
14. Gebruik dit product nooit in de buurt van water of een hoge luchtvochtigheid. Gebruik dit product nooit tenzij u volledig droog bent.
15. Dompel dit product niet in een vloeistof en stel ook niet bloot aan vloeistoffen
16. Dit apparaat is alleen geschikt voor persoonlijk huishoudelijk gebruik.
17. Bij commercieel of professioneel gebruik vervalt de garantie. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade als het apparaat voor iets anders wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.
18. Dit apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden
19. Koppel dit apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het niet onder toezicht staat. Laat dit apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
20. Laat geen kabels of snoeren rusten in een positie die een struikeling kan veroorzaken of trekgevaar
21. Laat het netsnoer niet in de buurt komen van verwarmde oppervlakken
22. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op eventuele schade. Als er sprake is van schade aan het netsnoer, laat dit repareren door een gekwalificeerde professional



HOE TE GEBRUIKEN

Het shiatsu massag kussen kan voor alle lichaamsdelen gebruikt worden. Ook kan de gebruiker zelf de druk bepalen door de kussen harder of zachter tegen het lichaam aan te drukken. Hieronder staan enkele voorbeelden hoe de kussen gebruikt kan worden.



Schouders



Nek



Rug



Middel



Buik



Dijen



Benen



Voeten




Kuiten




ONDERDELENLIJST

A Massage apparaat

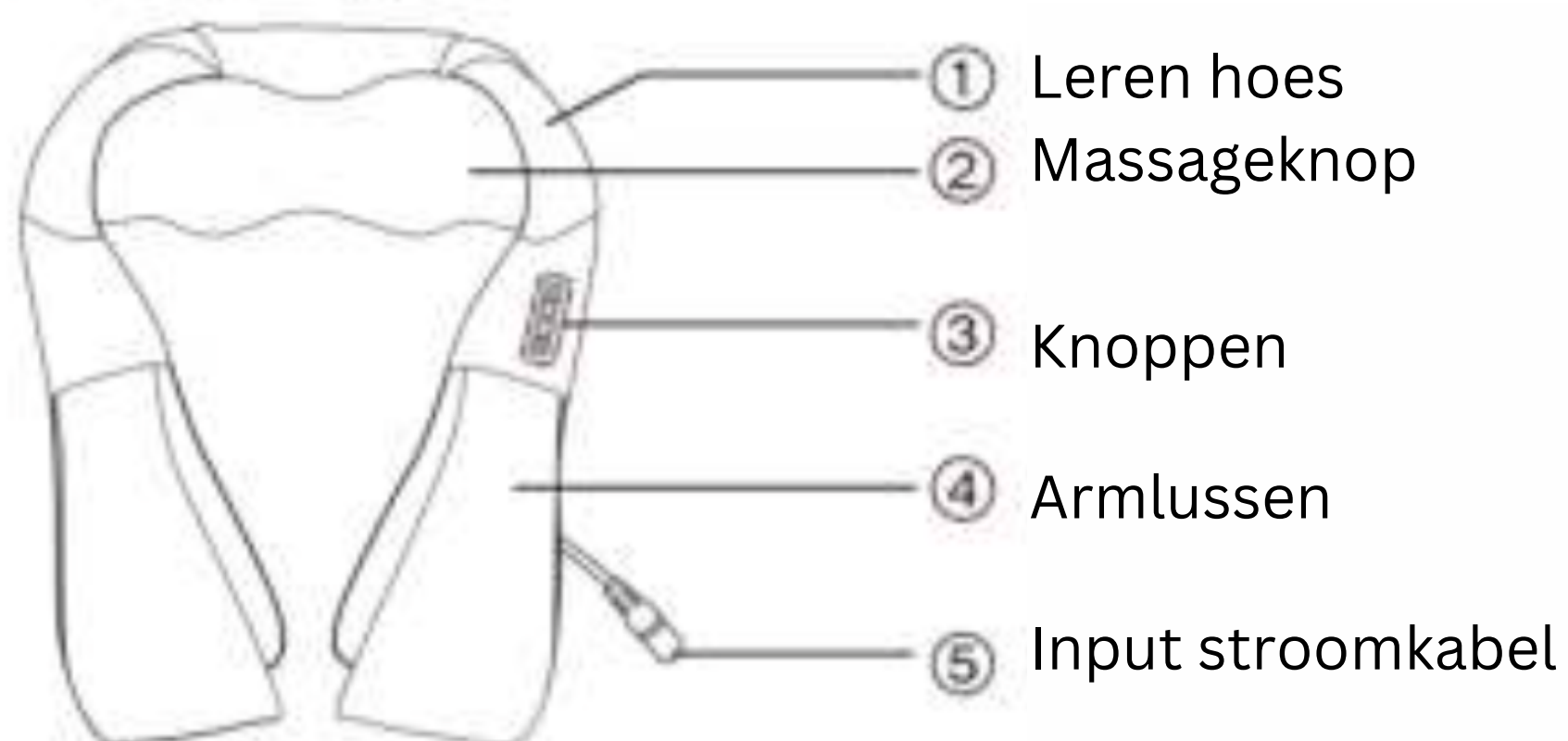

B Stroomkabel

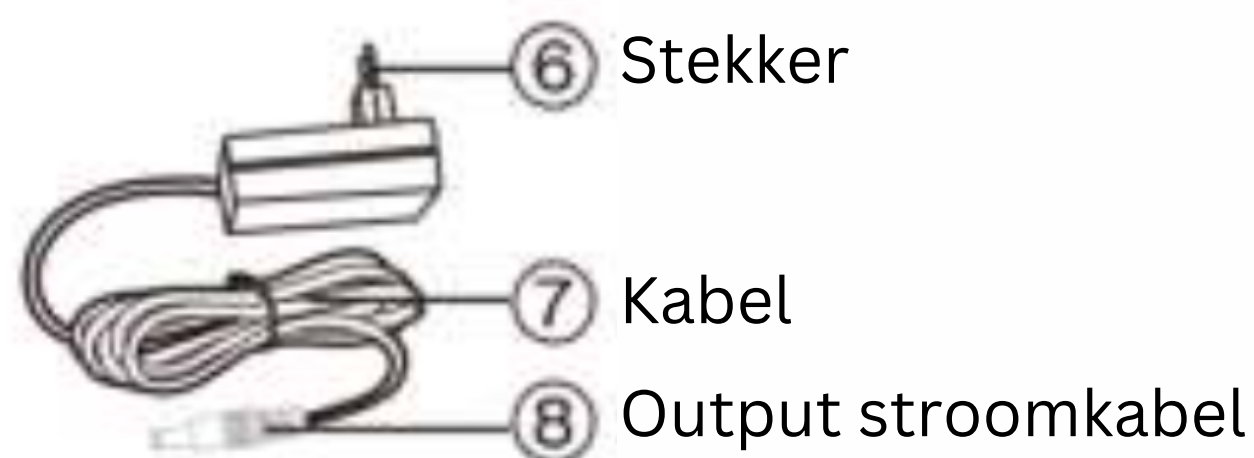

C Kabel voor auto



Technische specificaties

Nominale spanning: **DC12V**
Nominale vermogen: **24W**
Nominale frequentie: **50Hz**



UITLEG KNOPPEN

| | |
|---|--|
|  | Aan/uit Met deze knop kan het apparaat aan of uit worden gezet. |
|  | Snelheid Met deze knop kan de snelheid van de massagekoppen worden aangepast. |
|  | Richting Met deze knop kan de draairichting van de massagekoppen worden aangepast. |
|  | Warmte Met deze knop kan de warmtefunctie worden geactiveerd worden. |

PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem | Oplossing |
|------------------------------|--|
| Het apparaat gaat niet aan | Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit. Controleer of de schakelaar is ingeschakeld. Controleer of de knop is ingedrukt. |
| Het apparaat gaat opeens uit | Controleer of de stekker uit het stopcontact is getrokken. Controleer op de eventuele slechte verbindingen en stop het gebruik ervan onmiddellijk als er een slechte verbinding wordt gevonden. Als geen van de bovenstaande oplossingen werken, schakel dan de hoofdstroomvoorziening uit en wacht een uur, zodat het product kan afkoelen. De massage kussen heeft een automatische oververhittingsbeveiliging. Als het probleem blijft bestaan, stop onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met ons per mail: service@infinitygoods.eu |





INFINITY

G O O D S