



ProRecover

GEBRUIKSHANDLEIDING


HANDLEIDING

LET OP - DIT APPARAAT TRILT NIET - HET MAAKT GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE IMPULSEN, GEEN TRILLINGEN!

Voor een gedetailleerde werking van uw ProRecover raadpleegt u de uitgebreide instructies in deze handleiding.


Om ProRecover onmiddellijk te gebruiken, volgt u deze 5-punts snelstartgids

1

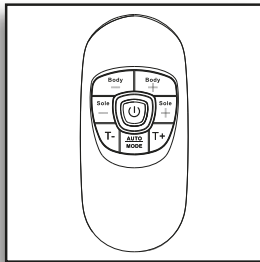


- Haal uw ProRecover uit de verpakking.
- Haal de afstandsbediening eruit en verwijder de schroef van de batterijbehuizing.
- Plaats 2 AAA-batterijen in het compartiment volgens aanwijzing. Schroef vervolgens de batterijbehuizing op.

2

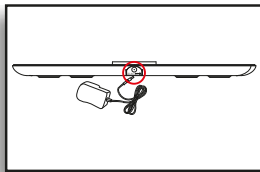

- Sluit de DC-adapter aan op een geschikt stopcontact en sluit de kleine DC-aansluiting aan op het apparaat.

3

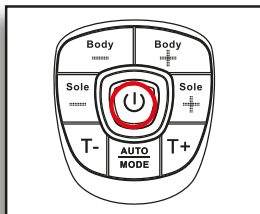


- Schakel de stroom in, het centrale display zal oranje oplichten.

4



- Verwijder je schoeisel en sokken of kousen. Ga zitten in een comfortabele stoel.
- Beide blote voeten moeten op het apparaat staan om het te laten werken. Je linkervoet op de linkervoetplaat en je rechervoet op de rechervoetplaat.

5

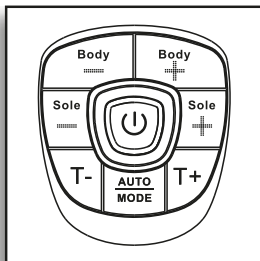

- Verhoog de intensiteitsniveaus voor de voet door op de "SOLE+" te drukken of op "SOLE - " te drukken om de intensiteit te verlagen.
- Het intensiteitsniveau varieert van 0-99, verhoog langzaam het niveau totdat u de microstroomstimulatie begint te voelen.

INHOUD

Belangrijke veiligheidsinformatie	3
Machineoverzicht en onderdelennamen	4
Functies van het bedieningspaneel	5
Hoe te gebruiken	6-7
Probleemoplossing	8
Technische specificaties	9

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gevaar



Dit toestel mag niet worden gebruikt in combinatie met de volgende medische hulpmiddelen:

- Intern getransplanteerde elektronische medische apparaten, bijvoorbeeld pacemakers.
- Elektronische levensondersteunende apparatuur, zoals gasmaskers.
- Elektronische medische hulpmiddelen op het lichaam, zoals elektrocardiografen.

Het gebruik van dit toestel met andere elektronische medische hulpmiddelen kan een foutieve werking van die apparaten veroorzaken.

Waarschuwing



Personen met de volgende aandoeningen moeten de arts raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken:

- acute ziekte
- kwaadaardige tumor
- infectieziekte
- zwangerschap
- hartdisfunctie
- hoge koorts
- abnormale bloeddruk
- huidsensorische aandoeningen of huidproblemen
- het ontvangen van medische behandeling, vooral degenen die ongemak voelen.



Demonteer of verbouw dit toestel niet. Kan brand, problemen of een ongeval veroorzaken.



Gebruik dit apparaat niet in de buurt van het hart, boven de nek, op het hoofd, rond de mond of op een zieke huid.

Kan een ongeval of een slechte gezondheid veroorzaken. Toepassing van elektroden in de buurt van de thorax kan het risico op hartfibrilleren verhogen.

Gebruik dit apparaat niet gelijktijdig met andere therapeutische device of in combinatie met zalven, waaronder zalven van het spraytype .

Kan ongemak of een slechte gezondheid veroorzaken. Gelijktijdige aansluiting van een PATIËNT op een h.f. chirurgische APPARATUUR kan leiden tot brandwonden op de plaats van de STIMULATOR elektroden en mogelijke schade aan de STIMULATOR.

Gebruik in de nabijheid (bijv. 1 m) van een kortegolf of microgolftherapie APPARATUUR kan instabiliteit van de STIMULATOR-output veroorzaken.

Gebruik dit toestel niet voor andere doeleinden dan de behandeling die in deze handleiding wordt aangegeven. Kan leiden tot een ongeval, problemen of uitval van het apparaat.

Plaats de elektrodekabelplug niet op een andere plaats dan de elektrodekoordaansluiting van de hoofdeenheid. Kan een elektrische schok veroorzaken.

Voorzichtigheid



Als het apparaat niet goed functioneert of als u ongemak voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.


Als u problemen met uw lichaam of huid voelt, raadpleeg dan de arts en volg zijn / haar instructies op.

Als u de Electrode Pad tijdens de behandeling naar een andere regio of uw lichaam wilt verplaatsen, moet u de stroom uitschakelen. Zo niet, dan kunt u een sterke elektrische schok krijgen.





Probeer de pads niet aan andere pads te bevestigen. U kunt een elektrische schok krijgen.

Start de behandeling niet terwijl u een elektronisch apparaat draagt. De instellingen en timings van het apparaat kunnen worden beïnvloed


MACHINE EN ONDERDELENVERZICHT

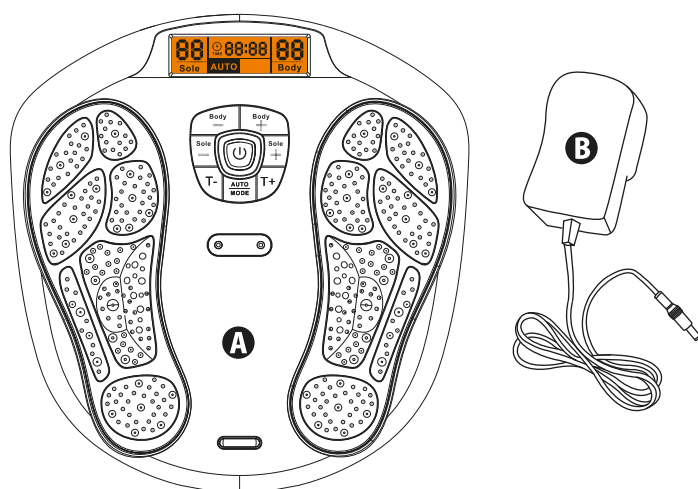

A	Hoofdeenheid
B	DC-voedingsadapter
C	Afstandsbediening
D	Electrode Gel Pad x 4 stuks
E	Draadkabel die de Elektrode gel pads en apparaat
F	Opbergtas

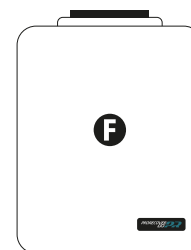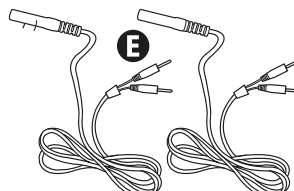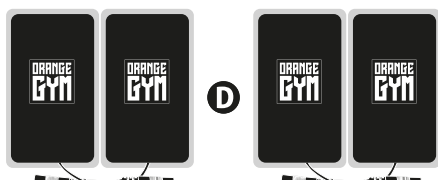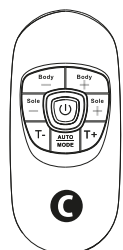


Boven aanzicht


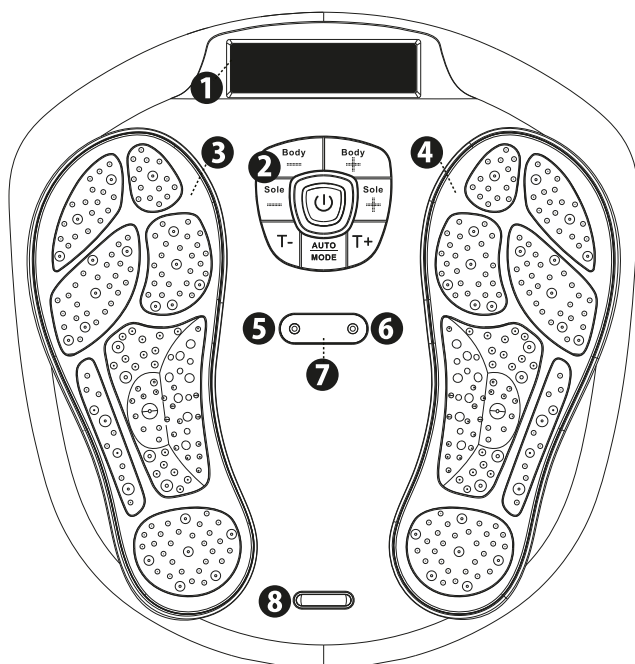


1.	LCD-scherm
2.	Configuratiescherm
3.	Electro pedaal voor linkervoet
4.	Electro pedaal voor rechtervoet
5.	Gel pad A
6.	Gel pad B
7.	Ontvanger afstandsbediening
8.	Decoratie knop
9.	AC-aansluiting voor adapter

Zij aanzicht

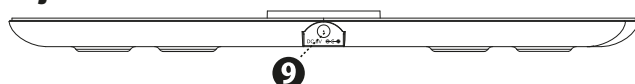


FUNCTIE VAN BEDIENINGSPANEEL

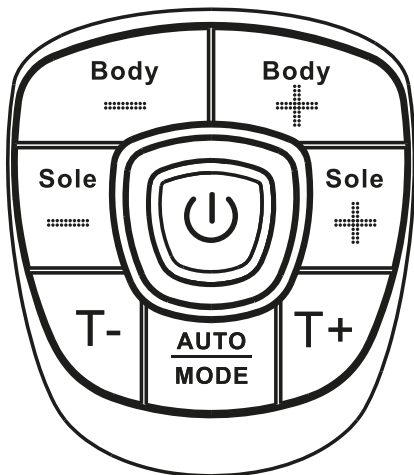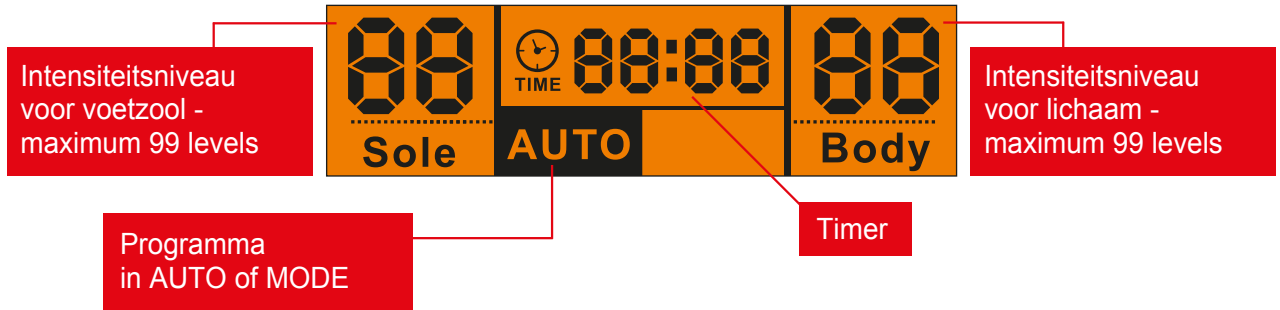


	AAN/UIT schakelaar
BODY -	Verlaag de output intensiteit voor het lichaam (1 - 99 niveaus beschikbaar)
BODY +	Verhoog de output intensiteit voor het lichaam (1 - 99 niveaus beschikbaar)
SOLE -	Verlaag de output intensiteit voor de voetzool (1 - 99 niveaus beschikbaar)
SOLE +	Verhoog de output intensiteit voor de voetzool (1 - 99 niveaus beschikbaar)
TIME -	Verkort de werkingstijd (1 - 60 minuten)
TIME +	Verhoog de werkingstijd (1 - 60 minuten)
AUTO/MODE	AUTO - is het vooraf ingestelde programma met 14 massage vormen voor de voetzolen en 10 massage vormen voor het lichaam MODE - gebruiker kan het programma aanpassen aan resterende tijd

Elektrodegebied van het apparaat en gelpad

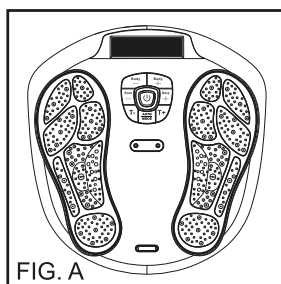

De zwarte gebieden op het apparaat zijn voorzien van elektroden voor de zool (zie figuur A)

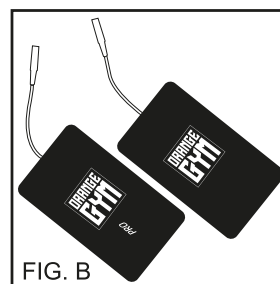

De zwarte gebieden op het plakkende gebied van de gelpad zijn voorzien van elektroden voor het lichaam
Formaat: 5 x 9 cm (zie figuur B)

HOE TE BEDIENEN

Voor voeten – SOLE

Tip: Gebruik Circulation Reviver Foot Gel op de voetzool om de geleiding te verbeteren

1. Plaats beide blote voeten op de ProRecover (draag geen sokken).
2. Druk op de on/off knop. Het oranje LCD-display gaat aan. Het programma staat op AUTO. De cijfers staan op 00, dit is de standby modus.
3. Verhoog voorzichtig de intensiteitsinstelling door op de knop 'SOLE+' te drukken. Of verlaag de intensiteitsinstelling door op de knop 'SOLE-' te drukken. Het intensiteitsniveau is instelbaar tussen 0 en 99. De LCD-display toont het geselecteerde niveau (zie fig. 2).
4. U kunt de timer voor automatisch uitschakelen aanpassen door op de knop "Tijd" te drukken – "of "Tijd +". Timers bereik Van 1-60 notulen. Aan beëindigen de massage periode gebruiker kunnen draaien af het apparaat op elk gewenst moment door eenmaal op de aan/uit-knop te drukken. De timer begint af te tellen vanaf de door u gekozen tijdinstelling. (zien Fig.3)
5. Als het huidige massageprogramma dat u gebruikt bevredigend is, kunt u het programma op zijn plaats vergrendelen door op de Auto / Mode-toets te drukken. Hierdoor wordt de rest van de huidige massagetermer alleen op de geselecteerde instelling uitgevoerd. (zie. fig. 4)

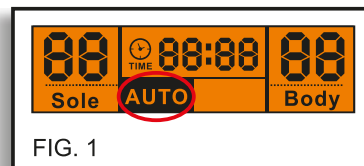


FIG. 1

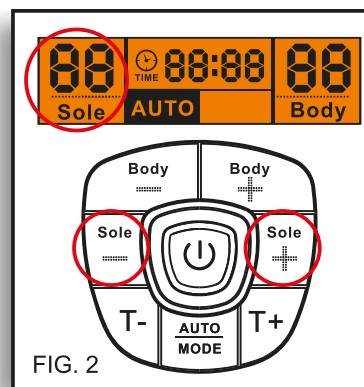


FIG. 2

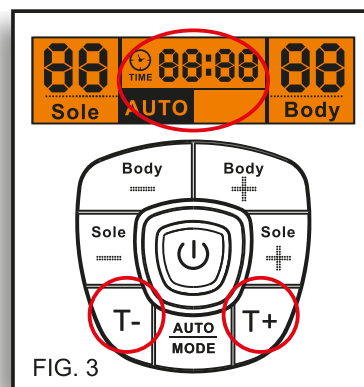


FIG. 3

BELANGRIJK INFORMATIE:

- A. HET DOEL IS NIET OM OP NIVEAU '99' TE KOMEN.
- B. KIES EEN ITENSITY-NIVEAU DAT COMFORTABEL VOOR U IS! DIT NIVEAU KAN VAN DAG TOT DAG HEEL ERG ZIJN.
- C. VERGEET NIET OM VEEL VOCHT TE DRINKEN - ALS U GEDEHYRDEERD BENT, VERMINDERT DIT DE EFFECTIVITEIT VAN HET APPARAAT.
- D. ALS JE DROGE VOETEN HEBT – HYDRATEER ZE ROYAAL MET CIRCULATION MAXX REVIVER GEL VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT.

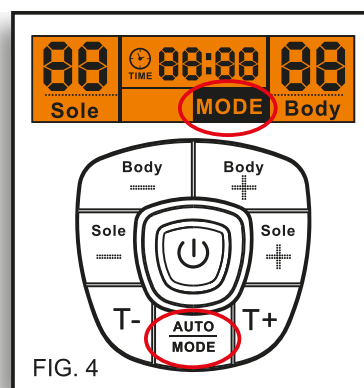






FIG. 4

Voor lichaam – Gel pads

DE GELPADS GEBRUIKEN

Was en droog de huid voor gebruik. Sluit de uitgangsdraad aan op de gelpads. Sluit het andere uiteinde van de uitgangsdraad aan op de uitgang op ProRecover. Verwijder de beschermfolie van de lijm Pads. Vastmaken de gel Pads op de huid. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen en de stimulerende uitgangsimpuls aan te passen aan het gewenste niveau. (Het display toont de modus en het niveau dat u hebt geselecteerd en begint af te tellen).

1. Sluit de 2 kabels aan op de kabelaanluiting op het toestel. (Zie fig. 5)
2. Sluit de pin van de kabel op de juiste manier aan op de gelpad. (Zie fig.6).
3. Verwijder de beschermfolie op het gelkussen. Alle vier de gelpads om het gebied van het lichaam dat u wilt behandelen.
4. Herhaal de bewerking zoals in de voetinstructies, pas de intensiteit aan voor gebruik op het lichaam.
5. Verhoog voorzichtig de intensiteitsinstelling door op de knop 'BODY +' te drukken. Of verlaag de intensiteitsinstelling door op de knop 'BODY-' te drukken. Het LCD-scherm toont ook het niveau dat u hebt geselecteerd (zie Fig. 7).

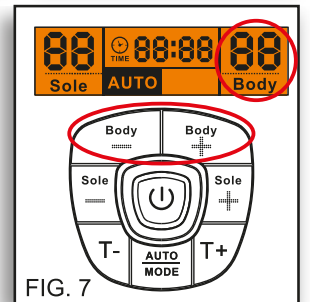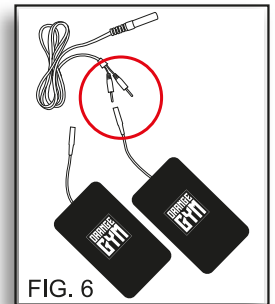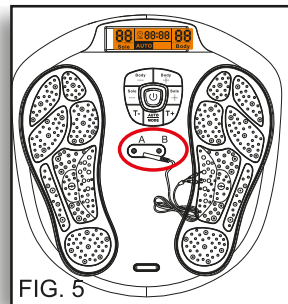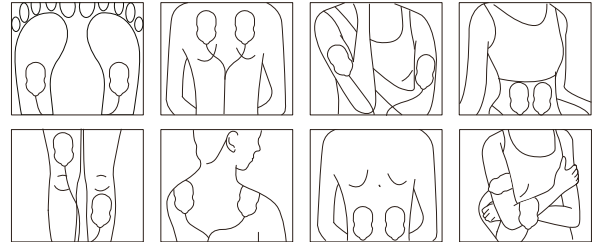


ONDERHOUD VAN GEL PADS

Plak nooit twee zelfklevende pads op elkaar. Houd de zelfklevende gelpads schoon, stel ze nooit bloot aan hoge temperaturen of directe zonneschijn. Als de elektrodegelpads onvoldoende klevend of vuil zijn, afvegen met een natte doek of vervangen voor nieuwe, zijn vervangende onderdelen rechtstreeks verkrijgbaar bij Vytaliving of uw distributeur.

Reinig de elektrodegelpads niet met chemicaliën.

Probeer **ALTIJD** de gelpads te beschermen en bewaar de gelpads op de gelpad-beschermer wanneer ze niet in gebruik zijn, zoals in de afbeelding.

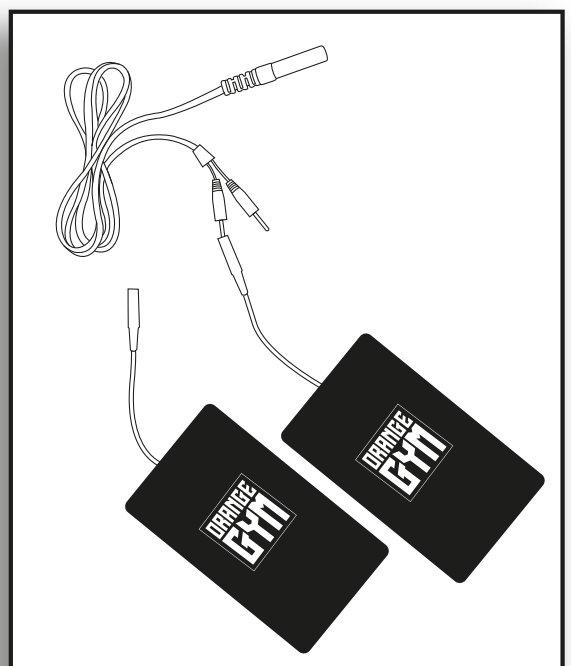

PROBLEEMOPLOSSING

Probleemoplossing & onderhoud

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat schakelt niet in	Batterijen in de verkeerde richting geplaatst. De adapter is niet goed aangesloten op het apparaat.	Plaats de batterijen in de juiste richting of controleer of de batterij volledig gevuld is. Controleer of de aansluiting van de adapteraansluiting goed is aangesloten op het stopcontact.
De stroom wordt te snel uitgeschakeld	Geld Pads niet goed bevestigd op de huid.	Bevestig de Gel Pads correct op de huid.
De stroom wordt uitgeschakeld tijdens het gebruik van de stimulator	Als u batterijen gebruikt, kunnen de batterijen (bijna) leeg zijn.	Plaats twee nieuwe gelijk 1,5V alkaline batterijen, type AA
	De behandelings periode van 30 minuten is voorbij en stroom wordt automatisch uitgeschakeld.	Start de behandeling opnieuw of schakel de stimulator uit.
	Als u de lichaamsmassage gebruikt: de elektrode van de Gel Pad kan gebroken zijn	Vervang de elektrode Gel Pad
Het is moeilijk om de Gel Pad op de huid te bevestigen	Transparantie folie is niet verwijderd	Verwijder de transparantie folie van het zelfklevende oppervlak
	Gel Pad is direct na het wassen aangebracht	Droog uzelf goed voor dat u de Gel Pads bevestigd
	Zelfklevend oppervlak van Gel Pad is beschadigd	Vervang de Gel Pad
	De Gel Pads worden vies en verliezen hun kleefkracht	Vervang Gel pad of reinig de gel pad met een kleine druppel water op de kleverige kant van de elektrode pad en wrijf in het oppervlak
Zelfklevend oppervlak van Gel Pad is plakkerig	Gebruik van Gel Pad tijdens transpireren	Leg de Gel Pads een nacht in de vriezer
	Gel Pad is te lang en/of te vaak gewassen	
	Gel Pads zijn bewaard in hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid of directe zon	
Het is moeilijk om de stimulatie te voelen	De voetzolen zijn te droog	Breng circulation maxx gel aan op de voeten om ervoor te zorgen dat ze voldoende gehydrateerd zijn
	De voetzool raakt het voetkussen van de stimulator niet goed	Zorg ervoor dat elke voeten goed op elk pedaal geplaatst wordt
	De Gel Pads zijn niet goed bevestigd op de huid	Bevestig de Gel Pad stevig op de huid
	Gel Pads overlappen elkaar	Bevestig de Gel Pads opnieuw zonder overlap
	Elektrodenkabel is niet goed aangesloten	Sluit de elektrodenkabel correct aan
	Toegepaste intensiteit is te zwak	Verhoog de intensiteit door aan de draaiknop te draaien
De huid wordt rood of de huid voelt geïrriteerd aan	Zelfklevend oppervlak van Gel Pad is vuil of droog	Was het zelfklevende oppervlak van Gel Pads zachtjes met uw vingertoppen gedurende ongeveer 3 seconden onder langzaam stromend water
	Zelfklevend oppervlak van Gel Pads is beschadigd	Vervan de Gel Pads

Hygiëne

Na gebruik van product

Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek. Maar zorg ervoor dat u de doek goed uitwringt voordat u het voetpedaal reinigt

Opslag

Houd de gehele set schoon en bewaar op een stofvrije en droge locatie onder de volgende voorwaarden

Opslagtemperatuur en vochtigheid	-10°C tot 60°C, 10% tot 95 % RV
Gebruikstemperatuur en vochtigheid	-5°C tot 50°C, 30% to 90% RV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam	Orange Gym ProRecover	
Model	BE305	
Voeding	6V DC of 4×1.5V alkaline batterijen type AA* voor de hoofdeenheid 2×1.5V alkaline batterijen type AAA* voor de afstandsbediening	
Leverancier van adapter	Guangdong Keerda Electrics Co Bvba.	
Modelnr. van adapter	DZ007AHL060050B	
Adapter ingang	AC 100-240V ~ 50-60Hz 0.1A	
Adapter uitgang	dc 6V 500mA 3.0W	
Levensduur van de batterij	>350 minuten	
Frequentie generatie	Ca. 10 Hz tot 55,56 Hz	
Stroomverbruik	1,05 W	
Maximale uitgangsspanning	U < 54,8 V (tijdens 1 KΩ belasting)	
Maximale uitgangsstroom	I < 910 μA (gedurende 1 KΩ belasting)	
Bedrijfstemperatuur en vochtigheid	-5°C tot 50°C, 30% tot 90% RV	
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-10°C tot 60°C, 10% tot 95% RV	
Afmetingen hoofdeenheid	338 (L) x 324 (B) x 48 (H) mm	
Gewicht ca.	950 gr	
Inhoud van de verpakking	Aantal	Onderdeel
	1	Circulatie Reviver TM
	1	AC/ DC-adapter
	1	Afstandsbediening
	2	Kabeldraad voor elektrode gel pads
	4	Electrode Gel pads
	1	Gebruiksaanwijzing
	Accessoires: Gebruik alleen originele accessoires. Als de gebruiker andere onderdelen gebruikt of materialen kunnen de minimale veiligheid aantasten. Controleer of de inhoud van de levering compleet is.	

*Batterijen zijn niet inbegrepen



Download
hier de
handleiding
in andere talen



www.yellowweb.nl/en/manuals-prorecover

DISTRIBUTED BY:
Orange Planet
De Els 3A
5107 RK Dongen
Nederland