

# Steelwratjes

**GIDS VOOR  
THUISGEBRUIK**



**JT BEAUTY CARE**

**VOOR DE OPTIMALE VERWIJDERING VAN STEELWRATJES  
EN DE NAZORG ERVAN**

**TAAT SHOP  
3072AP ROTTERDAM NL**

# Steelwratjes

## GIDS VOOR THUISGEBRUIK

### OP WELKE PLEKKEN MAG DEZE KIT GEBRUIKT WORDEN?

In principe kan de kit op alle plekken van de huid gebruikt worden. De kit is enkel geschikt voor extern gebruik. De steelwratjes elastieken en tengels zijn geschikt voor steelwratjes ter grootte van 2-4mm en 4-7mm. Deze kit is niet geschikt om normale wratten en/ of moedervlekken mee te verwijderen. Het wordt niet aangeraden om steelwratjes dichtbij de oogleden te verwijderen. Raadpleeg hiervoor uw huisarts.

### WANNEER VALT MIJN STEELWRATJE ERAF?

Bij kleine steelwratjes duurt het gemiddeld 7 dagen dat het steelwratje van de huid af valt. Omdat elk steelwratje verschillend is, kan het soms voorkomen dat het langer duurt dan 7 dagen. Houd hier dus rekening mee en laat het elastiekje zitten (mits u ongemak ervaart). Bij grotere steelwratjes kan het 1-2 weken duren voordat het steelwratje definitief van de huid af valt.

### BLIJVEN DE STEELWRATJES WEG?

Ja! Wanneer het steelwratje van de huid af gevallen is, keert het niet meer terug.

### HOE ZIET HET PROCES VAN VERWIJDERING ERUIT?


Nadat het elastiekje om het steelwratje is geplaatst, kunt u rondom het steelwratje wat druk ervaren. Dit komt doordat het elastiekje ervoor zorgt dat het bloedtoevoer naar het steelwratje stopt. Door het elastiekje krimpt de steelwrat en in de laatste fase verandert de steelwrat ook van kleur. Nadat de steelwrat van de huid af valt, is er nog een klein wondje over. Ook kan de huid op de locatie iets lichter zijn geworden dan de rest van de huid.

# Steelwratjes

## GIDS VOOR THUISGEBRUIK

### HOE WERKT HET?

1. Maak met het schoonmaakdoekje de steelwrat en de omliggende huid schoon
2. Rol het elastiekje door de kegel tot het bredere gedeelte
3. Plaats de tengel over de kegel
4. Plaats de kegel samen met de tengel over het steelwratje heen. Schuif met de tengel vervolgens het elastiekje door de kegel heen. U voelt dat het elastiekje nu rond het steeltje van de steelwrat zit
5. Laat het elastiekje zitten totdat het steelwratje eraf valt
6. Plak een wondpleister op de behandelde plek

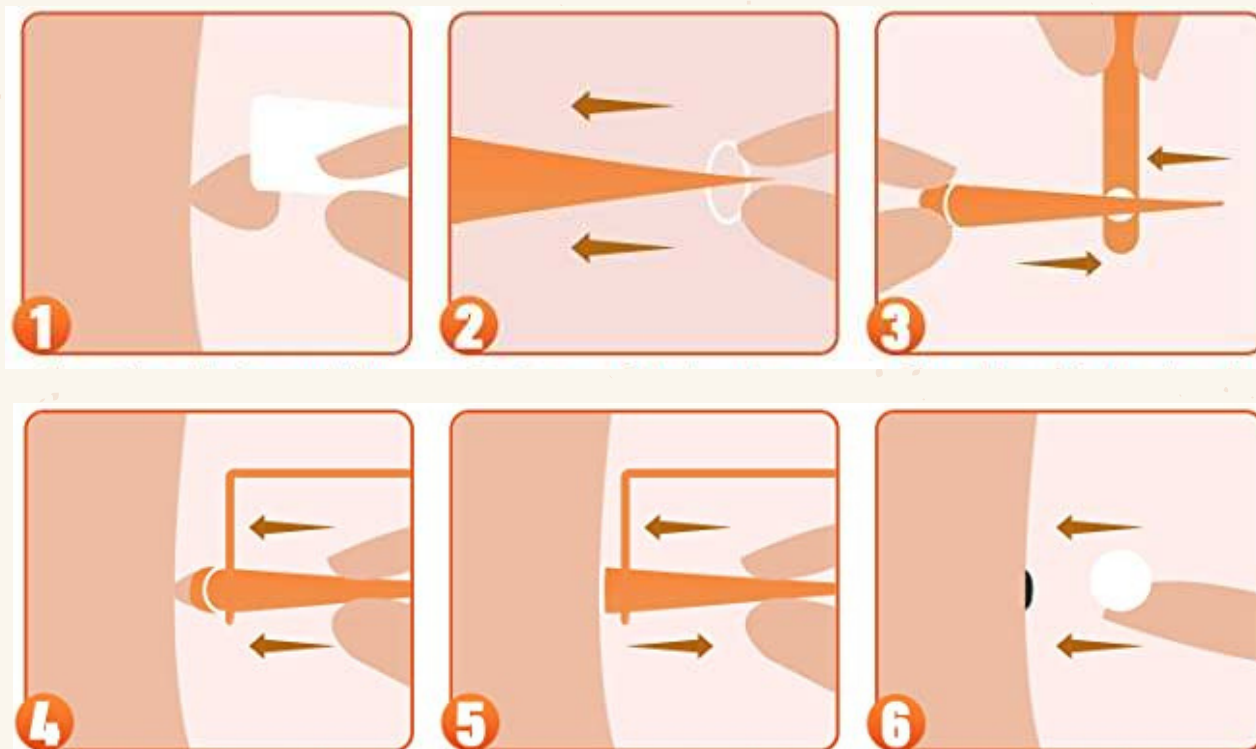

### ERVAART U ONGEMAK?

Als u het elastiekje toch wil verwijderen ondanks dat het verwijderingsproces nog niet is voltooid, vraag dan hulp van een tweede persoon. Pak het elastiekje met een pincet vast en probeer het over het steelwratje heen te halen. Dit is het meest makkelijke methode. Lukt dit niet, rek het elastiekje zoveel mogelijk met een pincet en knip of snijd het elastiekje door zonder de huid aan te raken.

- De elastiekjes zijn gemaakt van rubber en zijn dus niet geschikt voor personen met een rubberallergie.

# Steelwratjes

## GIDS VOOR THUISGEBRUIK

### TIPS VOOR STEELWRATJES VERWIJDERING

Soms is het lastig om de elastiekjes aan te brengen, zoals bij de oksels, rug of achterkant van de nek. Vraag iemand om hulp hiervoor.

Zit het steelwratje op een locatie waar het tegen kleding aan kan schuren, plak er een pleister overheen. Zo ervaart u zo min mogelijk ongemak.

### NAZORG

Het steelwratje is eraf gevallen en er is nog een klein wondje over. Plak er een pleister overheen. Dit zorgt ervoor dat het wondje niet gaat infecteren. Is het wondje volledig dicht, dan kunt u de pleister verwijderen.

Soms komt het voor dat de behandelde plek lichter kleurt dan de rest van de huid of dat er behandelde plek nog zichtbaar is. Hiervoor kunt u (als de wond volledig dicht is) dagelijks een aloe vera gel smeren op het behandelde gebied. Aloe vera gel voorkomt littekens en versnelt het proces van het aanmaken van nieuwe huidcellen. De witte kleur zal gedurende tijd minder worden. De huid heeft namelijk tijd nodig om pigment aan te maken.

### WAARSCHUWING

1. Deze steelwratjes thuiskit van JT Beauty Care is geschikt voor een normale gezonde volwassene.
2. U gebruikt de kit op eigen risico. De distributeurs en producenten zijn niet aansprakelijk voor de schade bij gebruik of misbruik van deze thuiskit
3. Niet geschikt voor mensen met een allergie voor rubber
4. Niet geschikt voor normale wratten en moedervlekken
5. Niet geschikt voor de oogleden
6. Alleen geschikt voor uitwendig gebruik
7. Houd de kit buiten bereik van kinderen
8. Twijfelt u ergens aan? Raadpleeg ten alle tijde uw huisarts