


---

# BOME

---

# WATERFLOSSER

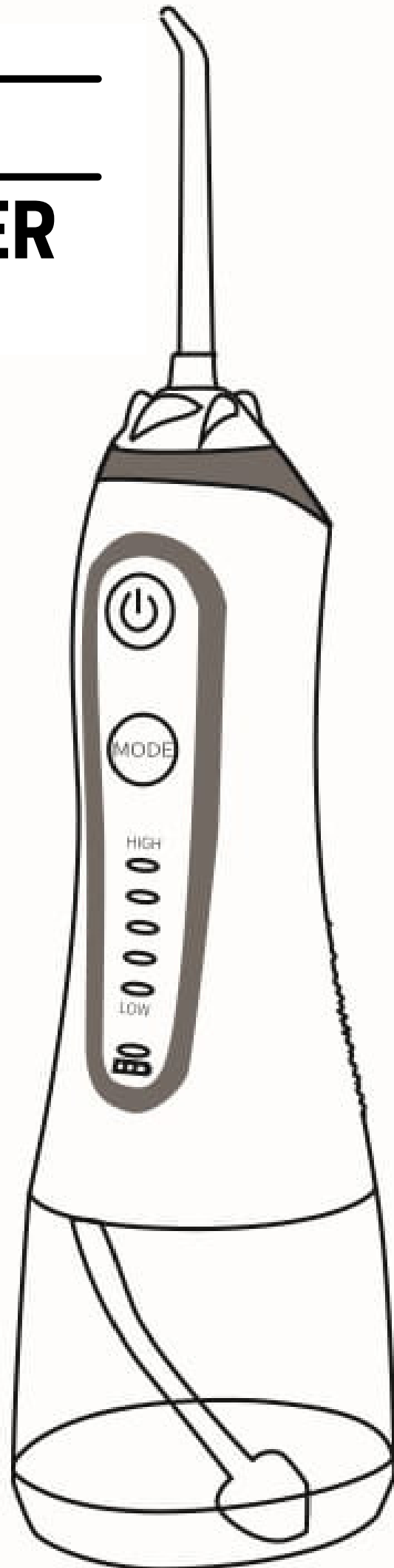

NE

# Inhoud

<b>Veiligheidsinstructies</b>	01
<b>Productinformatie</b>	02
<b>Product accessoires</b>	03
<b>Gebruiksaanwijzingen</b>	03
<b>Gebruik van de opzetstukken</b>	05
<b>Onderhoud en aftersales</b>	07
<b>Gebruik van de opzetstukken</b>	08

## Veiligheidsinstructies


- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door.
- Houd de lader weg van water of andere vloeistoffen.
- Zorg voor droge handen indien u de laadkabel koppelt.
- Controleer de laadkabel altijd op schade voor gebruik.


### Waarschuwing

- Gebruik het product niet als de laadkabel of stekker is beschadigd, of als het product niet werkt naar behoren.
- Gebruik het product niet indien deze is gevallen, beschadigd, of gedurende lange tijd in water heeft gelegen.
- Spuit geen water onder de tong, in de oren, in de neus of op andere gevoelige gebieden. De hoge druk die gegenereerd wordt door dit product kan ernstig letsel veroorzaken op deze plaatsen.
- stop of steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van dit product.
- Houd het product en de laadkabel weg van warme oppervlakken.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.
- Indien uw arts u het gebruik van antibiotica aanbeveelt vóór een tandheelkundige behandeling, dient u uw tandarts te raadplegen voordat u dit product of enig ander hulpmiddel voor mondhygiëne gebruikt.


- Wanneer kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met speciale behoeften het gebruiken, moeten ze nauwlettend worden gecontroleerd en begeleid om er zeker van te zijn dat ze het product correct gebruiken.
- Voorkom dat kinderen met dit elektrische product spelen.
- Vul de tank alleen met water of mondwater.

## ***Product Detail***

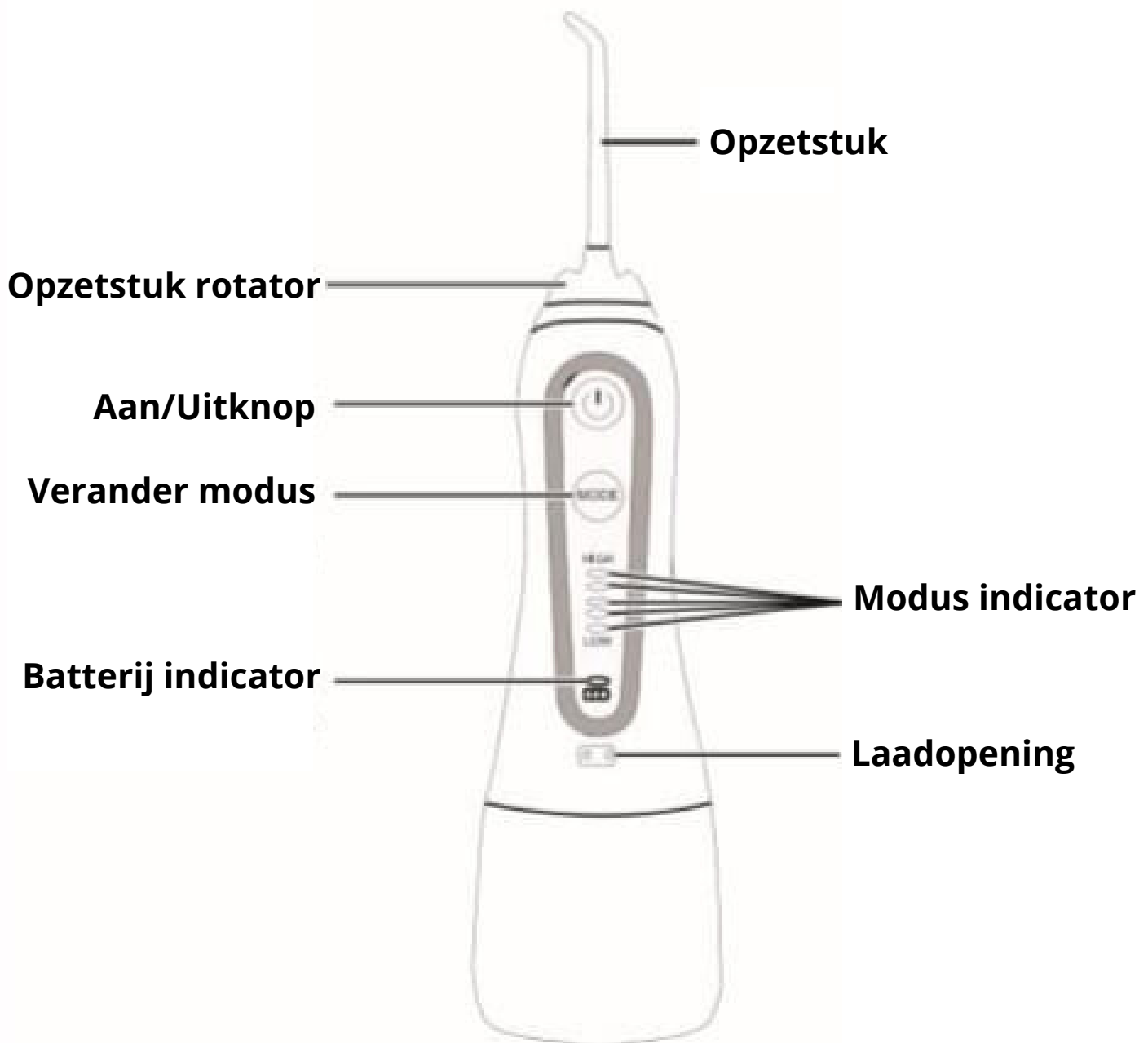

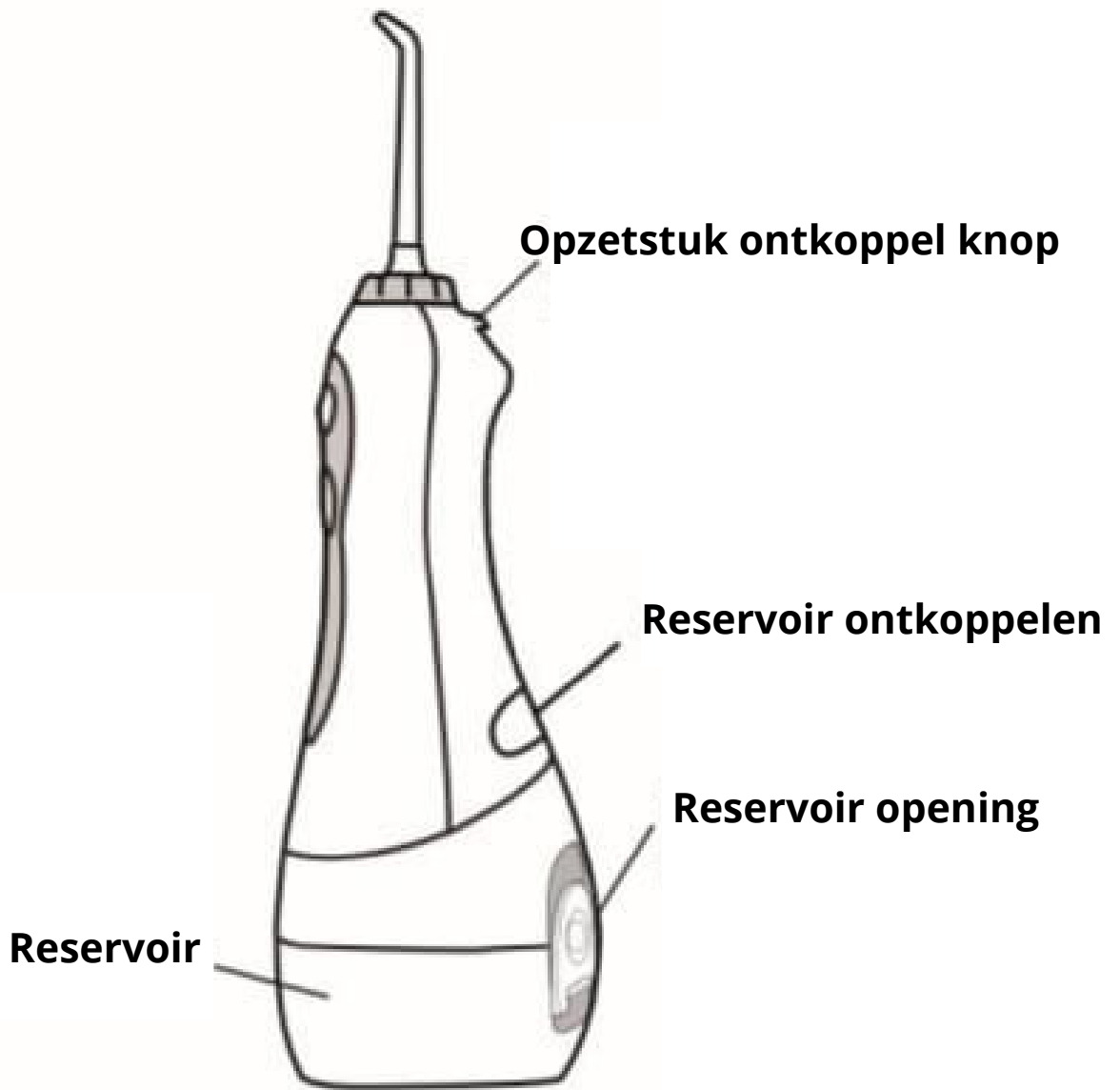

## ***Product Accessoires***

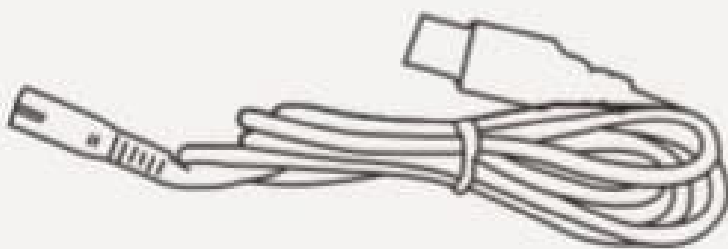

Usb laadkabel



Tongreiniger



Orthodontisch  
opzetstuk



Parodontaal  
opzetstuk




Standaard  
opzetstuk

# Gebruiksaanwijzing

## 1. Opladen vóór het eerste gebruik

Dit product wordt niet geleverd met een AC / DC-oplader. Het apparaat wordt opgeladen via apparaten met een adapter of met een 5V USB-stroomvoorziening, zoals een mobiele telefoon, laptop, USB-oplader, enz. De oplaadindicator op het handvat knippert tijdens het opladen en blijft continu branden als het apparaat volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt 3-5 uur.

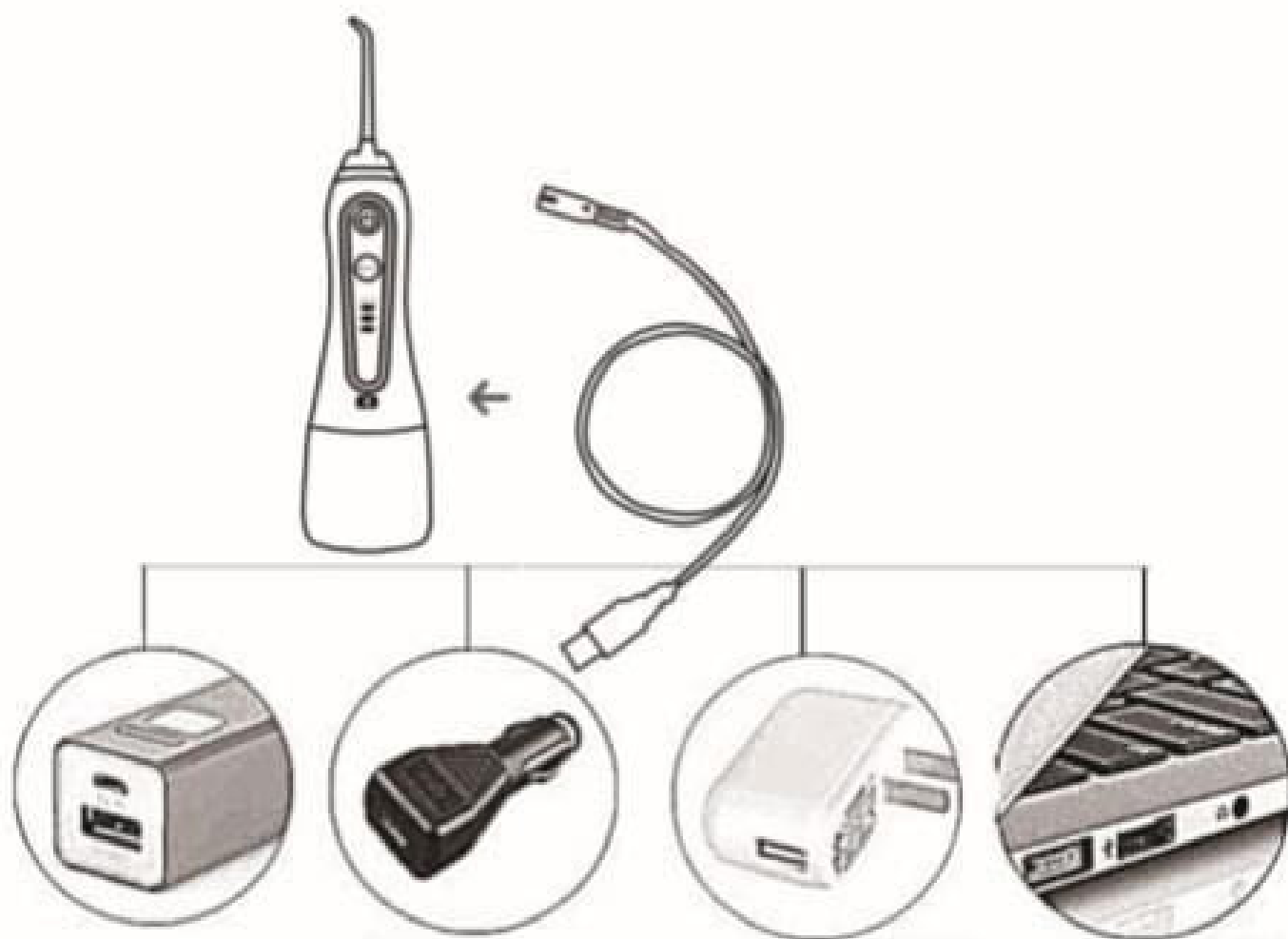

## 2. Het reservoir vullen



Open de klep van het reservoir en vul het reservoir met lauw water

### 3. Opzetstuk koppelen en ontkoppelen



Steek het mondstuk in het midden van de opening aan de bovenkant van de waterflosser. Druk stevig naar beneden totdat het mondstuk op zijn plaats "klikt". Om het opzetstuk van het handvat te verwijderen, drukt u op de knop voor het ontkoppelen van het opzetstuk. Trek het vervolgens voorzichtig uit het apparaat. Druk niet op de knop voor het uitwerpen van het opzetstuk terwijl het apparaat in werking is.

### 4. Na gebruik

Zet het apparaat uit door de aan/uitknop in te drukken. Verwijder vervolgens de resterende vloeistof uit het reservoir

**Let op!**

*De aan/uitknop kan gevoelig zijn.*

## Gebbruik van de opzetstukken

### Parodontale opzetstuk

Breng het parodontale opzetstuk in contact met de tanden en de tandvleesrand. Laat de zachte punt in een hoek van 45 graden tegen een tand leunen en plaats de punt voorzichtig onder de tandvleesrand. Start de waterflosser op de laagste stand volg voorzichtig de tandvleesrand.



## Tongreiniger


Leun met uw hoofd over de gootsteen. Gebruik de laagste stand. Start de waterflosser en plaats de tongreiniger achter op uw tong. Beweeg vervolgens met het apparaat naar voren om uw tong schoon te maken. Indien gewenst kunt u vervolgens een hogere stand kiezen.




## Standaard opzetstuk

Plaats het opzetstuk bij uw tanden en tandvlees. Zet vervolgens het apparaat aan. Houd uw mond een beetje open om het water in de gootsteen te laten lopen. Richt de waterstroom in de richting van de tandvleesrand in een hoek van 90 graden, zodat er contact wordt gemaakt waar de tand en het tandvlees samenkomen.

Manoeuvreer de waterstroom van tand naar tand en vergeet niet om tussen elke tand even te pauzeren door op de aan/uitknop te drukken.

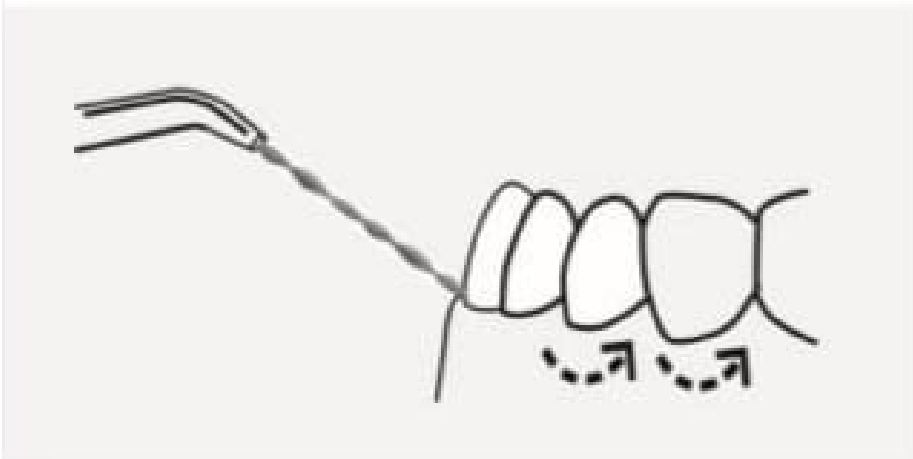

## Orthodontisch opzetstuk

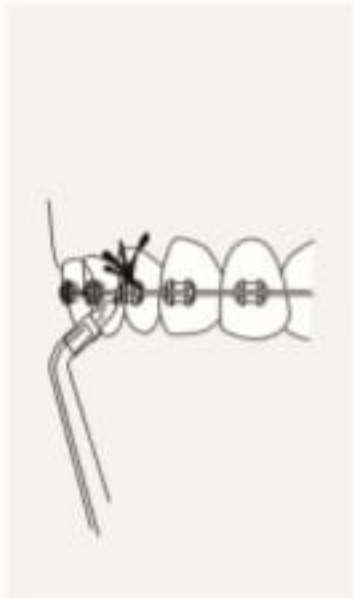

Gebruik het orthodontisch opzetstuk om moeilijk bereikbare plekken rond beugels, kronen, bruggen en implantaten te flossen. Begin op de laagste stand. Plaats de tip in een hoek van 90 graden ten opzichte van de tand en het tandvlees. Laat de punt voorzichtig langs de tandvleesrand glijden.

## Onderhoud en aftersales

### Onderhoud

1. Dompel het apparaat nooit onder in water. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Als reiniging nodig is, gebruik dan een zachte doek en een zacht, niet-bijtend reinigingsmiddel om het apparaat schoon te vegen.
2. Het apparaat kan worden gebruikt om mondwater en antibacteriële oplossing toe te dienen. Na gebruik van een speciale oplossing in het apparaat, moet deze worden doorgespoeld om te voorkomen dat het apparaat verstopt raakt. Zet het apparaat aan en laat het draaien totdat de tank leeg is.
3. Afzettingen van kalk kunnen zich in het apparaat ophopen, afhankelijk van het mineraalgehalte van het water. Als dit de prestatie beïnvloedt, maak dan de interne onderdelen schoon: vul de tank met warm water, voeg 1 eetlepel witte azijn toe. Richt het handvat en de sproeikop in de wasbak. Schakel het apparaat in en laat het draaien totdat de tank leeg is. Vul de tank met schoon, warm water en herhaal de bovenstaande procedure voor het doorspoelen. Dit moet elke 1 tot 3 maanden worden herhaald om optimale prestaties te garanderen.



## **Aftersales**

1. Als u kwaliteitsproblemen heeft, neem dan binnen een maand na de aankoopdatum contact met ons op.
2. De garantieperiode voor oplaadbare batterijen is een jaar. Het bovenstaande omvat niet: schade veroorzaakt door menselijke schade, misbruik, verkeerd gebruik, en omvat geen verbruiksartikelen zoals mondstukken en opzetborstels.

### ***Opmerkingen***

Er zal na gebruik altijd wat water in het apparaat achterblijven. Om het verkorten van de levensduur van het product en het kweken van bacteriën te voorkomen, is het normaal dat het product op natuurlijke wijze een kleine hoeveelheid geaccumuleerd water afvoert door de opening van de romp.

Het waterdichtheidsniveau van de behuizing van het product en het interne circuitsysteem is tot IPX7.