




**ELEKTRISCHE
SHIATSU MASSAGEAPPARAAT
VOOR NEK EN SCHOULDERS**



LET OP

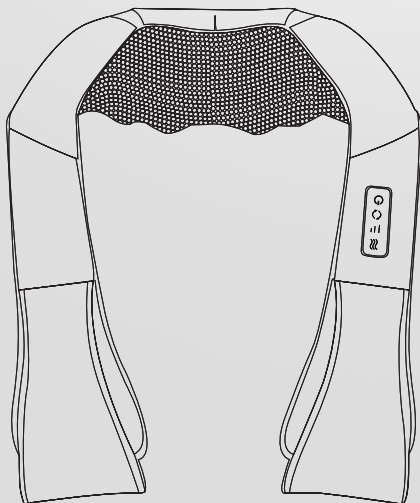

FORDIG

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door.

1. **BELANGRIJK:**

- ledereen die zwanger is of kan zijn of recentelijk bevallen is, een hartaandoening of een pacemaker heeft, lijdt aan diabetes of een andere zintuiglijke beperking, flebitis (aderontsteking) en/of trombose, gewrichtsstoornis, ontsteking of verwondingen, zwakke botten, osteoporose, hoge koorts of een abnormale of gekromde wervelkolom heeft, een groter risico op het ontstaan van bloedstolsels loopt, pennen/schroeven/kunstgewrichten of andere medische hulpmiddelen in zijn/haar lichaam geïmplantiseerd heeft, behandeld wordt voor een medische aandoening of lichamelijk letsel of onder doktersverzorging staat, dient een medische deskundige te raadplegen alvorens gebruik te maken van het massageapparaat.
2. Gelieve in geen geval aan de rits te trekken of de interne onderdelen aan te raken.
3. Reinig de schakelaar niet met water.
4. Wanneer het product in gebruik is of wordt opgeladen, zorg er dan voor dat er iemand aanwezig is. Wanneer u geen gebruik maakt van het product of vertrekt, gelieve de stekker uit het stopcontact te halen.
5. Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker.
6. Spuit niet met vluchtige olie, verf of pesticiden.
7. Gebruik niet in vochtige plaatsen zoals badkamers.
8. Gelieve direct zonlicht te vermijden voor lange periodes om beschadigingen te voorkomen.
9. Gelieve het omhulsel niet te openen of de interne delen zelf te vervangen, u loopt dan gevaar op kortsluiting en elektrische schokken bij gebruik. Neem altijd vooraf contact op met klantenservice@aycommerce.com om u product te laten repareren.
10. Plaats niet in de buurt van vuur en ontvlambare stoffen.
11. Houd dit product uit de buurt van kinderen.

OPMERKINGEN

1. Het product heeft een verwarmingsfunctie, gelieve aandacht te besteden aan mensen die gevoelig zijn voor warmte.
2. Niet geschikt voor kinderen.
3. Bij ongemak of abnormaliteiten, gelieve onmiddellijk te stoppen met gebruik maken van het product.
4. Zet na gebruik de schakelaar uit en trek dan de stekker uit het stopcontact.
5. Drink 500ml water of hete thee na de massage, zodat de lichaamstofwisseling zal worden bevorderd.
6. Als de netsnoer is beschadigd neem direct contact op met klantenservice@aycommerce.com

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Steek de stekker in de oplaadaansluiting.
2. Druk op de "⏻" knop, open automatisch de massage- en opwarmfunctie.
3. Druk op de "⏸" knop, laat de massagekop met de klok mee of tegen de klok in draaien.
4. Het product heeft intensiteit die met drie snelheden is aan te passen, druk op "111" om de massagesnelheid aan te passen van laag naar gemiddeld en vervolgens naar hoog.
5. Druk op de "⏏" knop om de warme functie te sluiten; druk nogmaals op de knop om de warme functie te openen.
6. Druk op "⏻" om de stroomvoorziening uit te schakelen en trek de stekker na gebruik uit het stopcontact.

OPSLAG

1. Gelieve de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt;
2. Voeg geen water of andere vloeistof toe aan het product;
3. Gelieve het product met een zachte doek schoon te maken;
4. Als het product echt vuil is, veeg met een zachte doek waarop water of een neutraal reinigingsmiddel is aangebracht. Veeg stof gewoon af met een droge doek;
5. Maak het product niet schoon met water;
6. Bewaar het product op een droge, koele plaats, stel het product niet direct bloot aan zonlicht, hoge temperatuur, mist of een vochtige omgeving;
7. Gelieve dit product niet samen met of in combinatie met nevelproducten te gebruiken.

PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom	Oorzaak / Behandeling
Kan de stroom niet aanzetten	Gelieve te bevestigen dat de massageknop is ingedrukt.
Stopt plotseling met werken tijdens de massage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per ongeluk de schakelaar uitgeschakeld. 2. Product heeft een 15 minuten durende automatische timer, de tijdslimiet is bereikt.

TECHNISCHE INFORMATIE

Productnaam: Shiatsu Knedend
Massageapparaat
Met Warmte

Nominale spanning: DC12V

Nominaal vermogen: 24W

BEDIENINGSPANEEL DIAGRAM & MASSAGEONDERDELEN

Stroomvoorziening



Richtingsschakelaar



Snelheid



Opwarmen



Nek en schouder



Rug



Taille



Been



AY Commerce BV | Wijngaardsweg 22
6412 PJ Heerlen | Nederland
Email: klantenservice@aycommerce.com