

IPL Hair Removal Device T5



Instructieboekje

2 Veiligheidsaanbevelingen

Belangrijk
Waarschuwingen
Voorzorgsmaatregelen
EMC verklaringen

6 Meer weten over IPL ontharingstechnologie

Hoe werkt IPL
Wat te verwachten
Toepasselijke omstandigheden
Lichaamsgebieden
Huidskleur
Haarkleur
Huidtint- en lichaamshaartypetabel

8 Leer uw IPL-ontharingsapparaat kennen

Apparaatoverzicht
Product technische specificaties

10 Uw IPL-ontharingsapparaat bedienen

Hoe te gebruiken
Behandelingsmethoden
Foutcodelijst

15 Behandelingsschema voor uw IPL-ontharingsapparaat

Kies een geschikt energieniveau
Gebruik hoge energieniveaus met voorzichtigheid
Behandelingsschema
Nazorg
Mogelijke bijwerkingen

18 Probleemoplossing

19 Garantie-inhoud

Garantie informatie

Wij zijn zeer bewust van veiligheid. Wij streven ernaar om voorop te blijven lopen in de behoeften van klanten door hoogwaardige producten en diensten te leveren op basis van onze bedrijfsprincipes van "Hoog niveau van verantwoordelijkheid" en "Absolute geloofwaardigheid." Daarnaast vragen wij u om voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van het product en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Dit is om ervoor te zorgen dat het product correct en veilig wordt gebruikt. Om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen bij gebruikers of anderen te voorkomen, verzoeken wij u deze richtlijnen strikt op te volgen.

Belangrijk

- Minderjarigen en kinderen onder de 18 jaar worden afgeraden ons apparaat te gebruiken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor zwangere of borstvoedende vrouwen, of vrouwen die momenteel hun menstruatieperiode doormaken.
- Gebruik het apparaat niet op huid die lichtgevoelig is of littekens heeft.
- Gebruik het apparaat niet als u spataderen of vaatverwijding heeft.
- Gebruik het apparaat niet op een geïrriteerd gebied, zoals bij een eenvoudige huiduitslag, huidlaesies, hematomen, enz.
- Gebruik het apparaat niet op het bovenste deel van het gezicht (boven de jukbeenderen), anus, tepel of mammaire areola. Let ook op dat mannen het apparaat niet op het scrotum mogen gebruiken; vrouwen mogen het apparaat niet gebruiken op de schaamlippen of de vagina.
- Gebruik het apparaat niet op: verbrande huid, folliculitis, kwaadaardige tumoren, infectieuze huidaandoeningen, enz.
- Als u een zonnesteek of zonnebrand heeft, wacht dan tot de huid hersteld is voordat u het apparaat gebruikt. Gevoelige delen van de huid, zoals slijmvlies, mogen niet worden blootgesteld aan IPL-therapie.
- Personen die binnen 30 dagen chemische methoden voor ontharing hebben gebruikt, huidbleekmiddelen hebben gebruikt, of cosmetica met vitamine A-ingrediënten hebben toegepast, mogen dit product niet gebruiken.
- Personen die isotretinoïne hebben gebruikt in de afgelopen 6 maanden mogen het apparaat niet gebruiken, omdat dit littekens kan veroorzaken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in dezelfde periode als producten met etherische oliën. Zorg ervoor dat het te behandelen gebied schoon, droog en vrij is van crèmes, smeermiddelen en andere cosmetica; als het huidoppervlak niet glad is, kan dit het gebruik van het apparaat beïnvloeden en zelfs het apparaat beschadigen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

● Het is ten strengste verboden dit product te gebruiken voor enig type wond die nog niet is genezen. Het wordt niet aanbevolen voor patiënten met hirsutisme en andere door hirsutisme veroorzaakte aandoeningen.

● Als uw huid- of haarkleur niet geschikt is, gebruik dit product dan niet (raadpleeg de huidskleurkaart). (Raadpleeg indien nodig uw arts voordat u het product gebruikt).

Waarschuwingen

● Haarverwijdering met een IPL-apparaat of intens gepulseerde lichtbronnen kan bij sommige personen haargroei stimuleren. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens zijn vrouwen van mediterrane, Midden-Oosterse en Zuid-Aziatische afkomst de grootste risicogroep voor deze reactie.

● Houd het product buiten het bereik van kinderen.

● Gebruik dit product niet in de buurt van een bad, douchebak, wastafel of andere omgevingen met water.

● Houd het product en de adapter droog.

● Als het product beschadigd is, raak dan geen interne onderdelen aan om elektrische schokken te voorkomen.

● Steek geen voorwerpen in dit product.

● Voor het verwijderen van rughaar dient u een assistent of partner in te schakelen.

● Als uw haar langer is dan 1 mm, scheer het dan eerst. We raden aan om hiervoor een scheermesje te gebruiken. Overmatig lang haar absorbeert warmte op het huidoppervlak, wat roodheid en zwelling van de huid kan veroorzaken.

● Als de huid van het bestraalde gebied niet droog of schoon is, beïnvloedt dit het gebruik en kan het ertoe leiden dat het product niet flitst of onverwacht flitst.

● Als het netsnoer beschadigd is, moet dit om gevaar te voorkomen worden vervangen door de fabrikant.

● Oogveiligheid: Het apparaat zendt flitsen van intens gepulseerd licht uit. Hoewel het apparaat is getest en voldoet aan internationale normen om ervoor te zorgen dat de output veilig is voor uw ogen, is directe blootstelling nog steeds mogelijk schadelijk.

● Het apparaat kan alleen flitsen:

ALS beide huiddetectiesensoren (aan de binnenkant van het lichtvenster) een geldige huiddetectie registreren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

● Echter:

--KIJK NIET rechtstreeks in het lichtvenster van het apparaat wanneer het apparaat is ingeschakeld.

--PROBEER NIET het apparaat te laten flitsen in de richting van de ogen.

--BEHANDEL GEEN gebieden rond de ogen (wenkbrauwen of wimpers).

--GEBRUIK dit product NIET rond de ogen.

Beschermende brillen kunnen inderdaad de normale werking van de gebruiker beschermen, maar als u rond de ogen werkt, kunnen de beschermende brillen mogelijk niet volledig voorkomen dat energie door het melanine in uw iris wordt geabsorbeerd op korte afstand.

--FLITS het systeem ALLEEN wanneer het lichtvenster van het apparaat goed contact maakt met het gebied dat u wilt behandelen.

--WIJ RADEN AAN om weg te kijken van het apparaat wanneer u het op uw huid laat flitsen. Of draag beschermende brillen bij elke gebruiksbeurt. Hoewel het licht de brillen niet rechtstreeks beïnvloedt, kan het hoogfrequente flitslicht uw gezichtsvermogen beïnvloeden.

--KIJK NIET rechtstreeks in het lichtvenster van het apparaat wanneer het apparaat is ingeschakeld.

--PROBEER NIET het apparaat te laten flitsen in de richting van de ogen.

● De maximale temperatuur van de behandelkop is 110°F, wat de huid niet zal verbranden wanneer deze een bepaalde temperatuur bereikt.

Voorzorgsmaatregelen

● Sommige gebruikers zullen na gebruik lichte roodheid ervaren, wat normaal is. Dit verdwijnt meestal binnen 24 uur. Als dit niet het geval is, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg de klantenservice of uw arts.

● Gebruik geen antitranspiranten direct na het gebruik van het IPL-apparaat op uw oksels.

● Zorg ervoor dat u de bestralingpoort regelmatig schoonmaakt en al het vuil verwijdt om brandwonden en storingen tijdens het gebruik te voorkomen.

● Gebruik het IPL-apparaat niet als de ventilatieopening geblokkeerd is.

● Gebruik dit apparaat onder geen enkele omstandigheid op huisdieren.

● Gebruik dit product niet in de buurt van de ogen om oogschade te voorkomen.

● Maak na gebruik de haren en huidverzorgingsproducten die aan de epilator vastzitten schoon om storingen en huidbeschadiging te voorkomen.

● Gebruik het IPL-apparaat niet in de buurt van kinderen.

SAFETY RECOMMENDATIONS

- Als de huid na gebruik licht warm en rood wordt, is dit volkomen normaal. De ijscompressiefunctie kan worden ingeschakeld om huidongemak te verlichten.
- Richt de bestralingpoort niet op een zwart object, omdat dit schroeien, verkleuring of schade kan veroorzaken.
- Nadat het product is ingeschakeld, mag het onder geen enkele omstandigheid onbeheerd worden achtergelaten. Schakel het onmiddellijk uit na gebruik.
- Reinig de huid vóór gebruik, zorg ervoor dat er geen haarresten zijn, dat de huid volledig droog is en dat er geen olieachtige stoffen zichtbaar zijn op het huidoppervlak.
- Als het verschil tussen de kamertemperatuur en het apparaat groter is dan 70°F (21°C), schakel het apparaat dan uit en laat het ongeveer 2 uur staan voordat u het opnieuw gebruikt.
- De omgevingstemperatuur voor dit IPL-ontharingsapparaat is 40-95°F (4-35°C). Controleer of de kamertemperatuur binnen dit bereik ligt voordat u het apparaat gebruikt.
- Vermijd binnen 24 uur na bestraling direct ultraviolet licht op de bestraalde huid.
- Als de huid op het bestraalde gebied niet droog of schoon is, beïnvloedt dit de effectiviteit van het pulserende licht en kan het apparaat gaan flitsen.
- Raak de lichtuitgang niet aan na gebruik, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
- Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht of ultraviolette straling gedurende een lange periode, omdat dit ernstige schade kan veroorzaken.
- Als de ingebouwde ventilator niet werkt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, gebruik het apparaat dan niet, omdat dit oververhitting kan veroorzaken.

EMC Verklaringen

- IPL-ontharingsapparaat voldoet aan EMC-vereisten.
- Gebruikers dienen het apparaat te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de EMC-informatie beschreven in de bijgevoegde materialen.
- Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de prestaties van het apparaat beïnvloeden. Vermijd daarom sterke elektromagnetische interferentie tijdens het gebruik (bijvoorbeeld telefoon, magnetron, enz.).
- Details over de handleiding en de verklaring van de fabrikant staan aan het einde van het artikel (Bijlage I).

MEER WETEN OVER IPL ONTHARINGSTECHNOLOGIE

Hoe werkt IPL

Het IPL-ontharingsapparaat biedt ontharing via Intense Pulsed Light-technologie, ook wel IPL genoemd. Het apparaat maakt gebruik van hoogenergetisch licht om langdurige haarvermindering te bereiken. De geabsorbeerde lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het huidoppervlak), die de haarfollikel uitschakelt. Dit brengt het haar in de rustfase.

Wat te verwachten

Direct na de behandeling zou je geen significante bijwerkingen moeten zien.

In de eerste weken na de initiële behandelingen zal je nog steeds enige haargroei zien.

Dit is waarschijnlijk haar dat tijdens de eerste behandeling niet werd bereikt, bijvoorbeeld omdat de haren inactief waren en niet in hun groeifase (Anagene fase) tijdens de behandeling, aangezien IPL in deze fase het meest effectief is.

Ongeveer 2 weken na de start van het 4-weekse behandelingsprogramma zou je een vermindering in haargroei moeten zien. Echter, veel haren zijn mogelijk nog niet behandeld in hun groeifase. Het is belangrijk om de wekelijkse behandelingen voort te zetten totdat alle haren aan het IPL-apparaat zijn blootgesteld. Na het 5-6 weekse programma zou je een significante vermindering van haren in het behandelde gebied moeten zien. Overblijvende haren zullen fijner en lichter van kleur zijn. Maandelijks vervolgbehandelingen, of behandelingen naar behoefte, zullen de vermindering van ongewenst haar behouden.

Toepasselijke omstandigheden

Bedoeld gebruik: Ons IPL-ontharingsapparaat is een vrij verkrijgbaar apparaat bedoeld voor het verwijderen van ongewenste haren, zoals maar niet beperkt tot kleine gebieden zoals oksels en gezichtshaar onder de kinlijn, en grote gebieden zoals benen.

Geschikt voor personen vanaf 18 jaar.

Lichaamsgebieden

Vrouwen: Benen, armen, oksels, bikinilijn en gezicht (onder de jukbeenderen).

LET OP: Gebruik het apparaat niet in de buurt van de ogen, langs het voorhoofd, op de lippen of in de neusgaten. Gebruik het niet op de genitale zone.

Mannen: Schouders en lager (borst, rug, armen, buik, benen).

LET OP: Voor mannelijke gebruikers, gebruik het apparaat niet op het gezicht, de hals of de genitale zone. Het apparaat is bedoeld voor lichaamshaar onder de hals, inclusief armen, oksels, bikinilijn, buik en benen. (Gebruik op mannelijke baarden of gezichtshaar kan leiden tot ongelijke resultaten.)

MEER WETEN OVER IPL ONTHARINGSTECHNOLOGIE

Huidskleur

Het apparaat is bedoeld voor gebruik op lichte, medium en donkere huidtinten tot en met huidtint (zie huidtinttabel).

Haarkleur

Het apparaat is bedoeld voor gebruik op natuurlijk zwart of bruin haar. Het kan minder effectief zijn op wit, grijs, blond of rood haar.

Wij raden aan om te kiezen op basis van de Fitzpatrick-huidtyperingsschaal, ontwikkeld door dermatoloog Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, van de Harvard Medical School, om de teint van een persoon en hun tolerantie voor zonlicht te classificeren. Er zijn zes niveaus van huidtinten in deze schaal. Het product is geschikt voor huidtinten van Type I tot Type IV. Identificeer uw huidskleur en raadpleeg onderstaande afbeelding en tabel om te controleren of uw huid geschikt is.

het product toepasbaar is:

Huidtint & lichaamshaartypen tabel



Huidskleur							
Haarkleur		Wit	Beige	Licht bruin	Bruin	Donker bruin	Zwart of donkerder
	Wit/Grijs	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	Rood	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	Licht blond	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	Donker blond Lichtbruin	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
	Bruin	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
	Donker bruin	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
	Zwart	✓	✓	✓	✓	⊘	⊘
		✓ Van toepassing ⊘ Niet van toepassing					

LEER UW IPL ONTHARINGSAPPARAAT KENNEN


Als u niet zeker bent van uw huid-/haartype, raadpleeg dan de Huidtint- en Lichaamshaartypetabel voordat u het apparaat gebruikt.

Opmerking: Verschillende huidgevoeligheden en instellingen voor blootstelling kunnen leiden tot verschillende gebruikerservaringen. Begin met vermogensniveau 1 en verhoog dit indien nodig geleidelijk.

APPARAATOVERZICHT

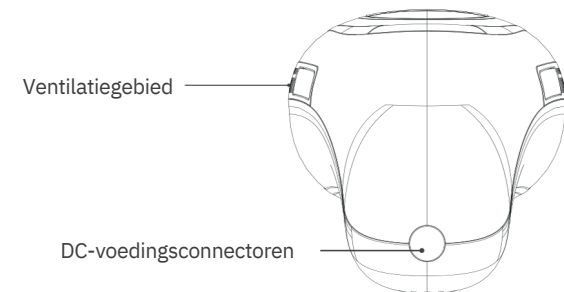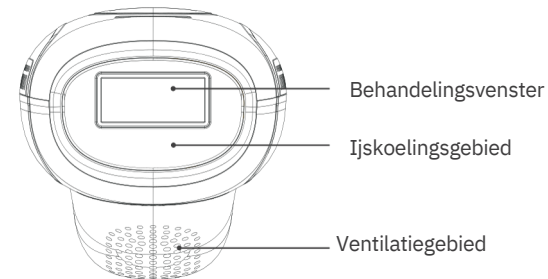

LEER UW IPL ONTHARINGSAPPARAAT KENNEN

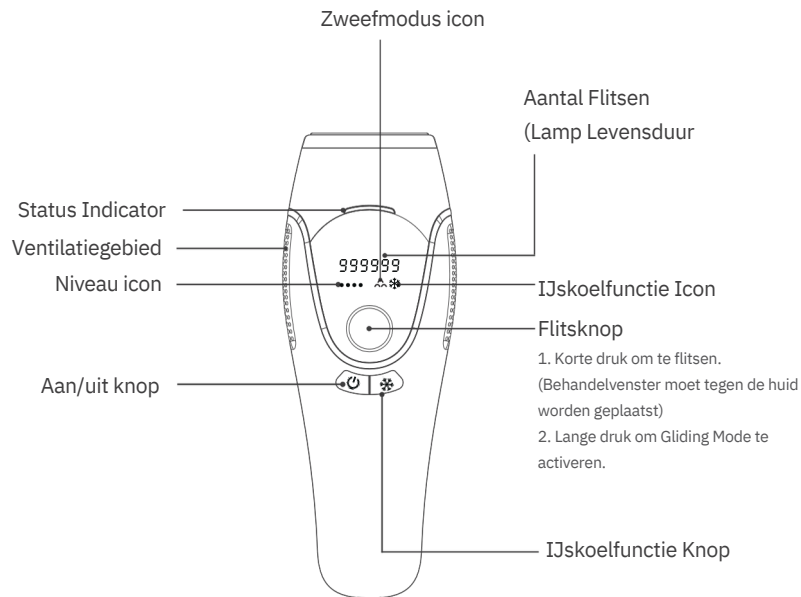

Bril



Scheermes



Stekker



Opbergasje

LEER UW IPL ONTHARINGSAPPARAAT KENNEN

PRODUCT TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	T4
Type bescherming	BF Type, Class II
Beschermingsniveau	IP22
Afmeting	194.5*73*53.6mm
Maximum teller	999,999 keer
Vermogen	48W
Ingangsspanning	100-240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Lichtgolflengte	510-1200nm
Spotgrootte (venstergrootte van licht)	3.4 cm ²
Behandelsintensiteit	Level 1 to 5
Energieniveau	10-18J
Energie dichtheid	2.94-5.29J/cm ²

UW IPL-ONTHARINGSAPPARAAT BEDIENEN

WAARSCHUWING: Volg elke stap in het behandlingsproces en zorg ervoor dat je alle aspecten van elke stap afrondt voordat je verder gaat met de volgende stap.

Stap 1: Het behandelgebied voorbereiden

Verwijder alle zichtbare haren op de huid voordat u het apparaat gebruikt. Reinig de huid grondig om ervoor te zorgen dat de huid volledig droog is en vrij van haarresten en olieachtige substanties (parfum, lotion, vloeibare deodorant, zonnecrème, enz.). Hierdoor kan het licht worden geabsorbeerd door de haartjes onder het huidoppervlak voor een effectieve behandeling. Gebruik geen ontharingscrèmes, omdat chemische stoffen huidreacties kunnen veroorzaken.

Stap 2: Doe een huidgevoeligheidstest

Voor je eerste behandeling op elk nieuw lichaamsgebied, raden we je aan om na te gaan of je huidskleur geschikt is en je huid (op dat gebied) te testen op reacties. Selecteer een klein deel van je huid om een huidgevoeligheidstest uit te voeren aan de hand van de volgende vereisten:

UW IPL-ONTHARINGSAPPARAAT BEDIENEN

1. Kies een gebied dicht bij het gebied dat je wilt behandelen.
2. Zet het apparaat aan. Zorg ervoor dat je niveau 1 of 2 selecteert.
3. Plaats het apparaat tegen je huid en druk op de flitsknop om een flits te activeren.
4. Schuif het apparaat over de huid naar het volgende gebied dat behandeld moet worden.
5. Verhoog de instelling met één niveau, voer een flits uit en schuif het apparaat naar het volgende gebied. Herhaal dit voor alle niveaus binnen het aanbevolen bereik voor jouw huidtype.
6. Wacht na de huidtest 24 uur en controleer je huid op eventuele reacties. Als je huid reacties vertoont, kies dan het hoogste niveau dat geen huidreactie veroorzaakte voor verder gebruik. De huidtest moet in alle gebieden worden uitgevoerd die je wilt behandelen.

Hoe te gebruiken

- ① Sluit het netsnoer aan op het IPL-apparaat. Het display van het apparaat zal oplichten.



- ② Houd de aan/uit-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen. De koelventilator binnenin zal starten, en je kunt het geluid ervan horen. De statusindicator zal 5~6 keer knipperen.




- ③ Kies het energieniveau dat je wilt gebruiken (er zijn vijf niveaus, en je kunt daartussen schakelen met de Power & Energy Levels-knop). Het gekozen niveau wordt op het scherm weergegeven. (Begin met de laagste instelling en voer de huidgevoeligheidstest uit.)



UW IPL-ONTHARINGSAPPARAAT BEDIENEN

- ④ Druk op de knop voor de Ice Cooling-functie om het koelmechanisme te activeren. (Ijs-technologie, die actief het metalen deel koelt dat in contact komt met je huid.)

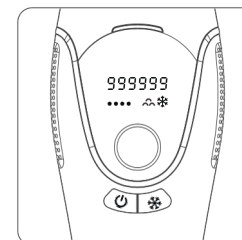

- ⑤ Plaats het uiteinde van het apparaat tegen de huid die je wilt behandelen en druk op de flitsknop.

Let op: Als je een lage pijngrens hebt, raden we aan om 30-45 minuten vóór gebruik Numb Master Cream aan te brengen en vlak voor de behandeling de huid te verdoven met ijs (vervolgens afdrogen) om het knijpende gevoel te verminderen wanneer het apparaat IPL uitzendt om het haar te verwijderen.



Opmerking: Behandel dezelfde plek niet meer dan één keer per sessie. Het apparaat werkt alleen als het behandelingsvenster volledig contact maakt met de huid.

- ⑥ Na het voltooien van de behandeling, houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Het scherm toont een aftelling van 10 seconden. Na de aftelling gaat het apparaat in de standby-modus en toont het scherm "OFF".



Opmerking: Om ongelukken te voorkomen, schakelt het apparaat automatisch uit na 5 minuten inactiviteit.

- ⑦ Gebruik een droge en schone doek om het apparaat voorzichtig af te nemen en berg het daarna samen met de accessoires op in de doos op een veilige plek.



UW IPL-ONTTHARINGSAPPARAAT BEDIENEN

Aantal Power bar lampjes verlicht	5	4	3	2	1
Max. Energie (J/cm ²)	5.29	4.85	4.59	3.88	2.94
Max Energie (J)	18	16.5	15.6	13.2	10

Als u hevige pijn voelt, stop de behandeling dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts voordat u het apparaat weer gebruikt.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u denkt dat u hulp nodig hebt. Neem contact met ons op.

BEHANDELINGSMETHODEN

Afhankelijk van het gebied dat je wilt behandelen kun je kiezen tussen de zweef-modus en de Precisie-modus: De Gliding modus maakt snelle en efficiënte behandelingen mogelijk en wordt aanbevolen voor grote huidoppervlakken (bijv. benen, armen, borst en rug), terwijl de Precision modus wordt aanbevolen voor het behandelen van gevoelige of kleine, moeilijk te bereiken gebieden zoals knieën, scheenbenen, enkels, bikinilijn of oksels en gezicht voor vrouwen. Het te behandelen gebied moet haarvrij, schoon en droog zijn.

Zweefmodus

- ① Houd de Flitsknop (ingedrukt voor 1~2 seconden) en op het displayscherm verschijnt het symbool zweefmodus '∞',
- ② Plaats het behandelingsvenster tegen de huid en laat het apparaat tussen de flitsen door over de huid glijden. Probeer het apparaat te bewegen met een constante snelheid die een volledige dekking geeft zonder overlapping of gemiste zones.

UW IPL-ONTTHARINGSAPPARAAT BEDIENEN

Precisie Modus

- ① Plaats het behandelingsvenster tegen de huid Druk op de flitsknop en laat hem onmiddellijk los.
- ② Het apparaat geeft een flits.
- ③ Til het apparaat op en plaats het op de volgende te behandelen plek. Wacht tot de statusindicator witte LED's laat zien. Druk dan op de behandelingsknop en laat hem los.
- ④ Ga door met de behandeling van plek voor plek totdat je het hele gebied dat je wilt behandelen hebt behandeld.

FOUTCODELIJST

Dit is een lijst met foutcodes waarin verschillende veelvoorkomende foutcodes worden uitgelegd wanneer het apparaat in werking is

Fout 3: Temperatuurbeveiliging. Wanneer de temperatuur van het apparaat de hoogste waarde overschrijdt, geeft het apparaat een AEC-herinnering. Klanten moeten stoppen met het gebruik van het apparaat en wachten tot de temperatuur van het apparaat is afgekoeld voordat het apparaat weer normaal gebruikt kan worden.

Fout 1: De condensator geeft geen boost, de klant moet contact opnemen met de klantendienst.

Fout 0: De lampbuis lekt en de klant moet contact opnemen met de klantendienst.

Kies een geschikt energieniveau

Begin op de laagste stand (niveau 1 of 2) en werk naar boven naarmate de haarzakjes beginnen af te sterven. Na een paar behandelingen zou je moeten merken dat het pijnniveau afneemt (de donkere, grovere haarzakjes zouden moeten worden geïnactiveerd, het lichtere/fijnere haar zal minder pijn doen) en kun je het vermogen verhogen.

Gebruik hoge energieniveaus met voorzichtigheid

Het IPL-apparaat heeft een hoge energie-output, wat betekent dat het op niveau 3-5 iets meer pijn kan doen, maar het zal effectiever zijn in het verminderen van haargroei. De ICE-koelfunctie helpt de pijn te verminderen zodat het op het hoge energieniveau draaglijk is. Als je intense pijn of een branderig gevoel hebt, behandel dan op een lager niveau.

Behandelingsschema

Voor optimale resultaten moet de IPL ontharingsmachine gedurende 8 weken twee keer per week worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle haarzakjes worden behandeld. Na de eerste behandelingsfase (8 wekelijkse behandelingen) raden we aan om de IPL ontharingsmachine gedurende 9-12 weken eenmaal per week te gebruiken en daarna eenmaal per maand om de behandelde resultaten te behouden. Opmerking: Je kunt de energieniveaus aanpassen aan je pijntolerantie en de groei van het haar. We raden af om de voorgestelde behandel frequentie te overschrijden.

Intensiteitsniveau en huidskleurcontrasttabel

Lichaamsdelen	Huidskleur					
	Wit	Geel	Medium bruin	Licht bruin	Bruin	Donkerbruin / Zwart
Oksel	3-5 level	3-5 level	3-4 level	2-3 level	2-3 level	n.v.t.
Arm	3-5 level	2-4 level	2-4 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.
Been	3-5 level	2-4 level	2-4 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.
Rond de mond	3-4 level	2-3 level	2-3 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.
Gezicht	3-4 level	2-3 level	2-3 level	1-3 level	1-3 level	n.v.t.

Nazorg

- ① Breng de gel na het ontharen onmiddellijk aan op het ontharingsgedeelte. Het wordt aanbevolen om binnen 6 uur geen water aan te raken.
- ② Vermijd parfums, deodorants en warme douches gedurende de eerste 24 uur.
- ③ Vermijd blootstelling aan ultraviolette straling binnen 24 uur na het ontharen. Smeer gel voordat u naar buiten gaat en doe goed aan de fysieke sunblock.
- ④ Zonnebaden kan de huid donker maken of zonnebrand aan het huidoppervlak veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het apparaat in deze periode niet te gebruiken.

Mogelijke bijwerkingen

Bij gebruik van IPL ontharingsapparaten volgens de gebruiksaanwijzing zijn bijwerkingen zeldzaam. Elke esthetische procedure, inclusief het gebruik van apparaten voor thuisgebruik, kan echter tot op zekere hoogte bijwerkingen veroorzaken.

Als een van de volgende aandoeningen optreedt en langer dan 24 uur aanhoudt, moet u uw arts of dermatoloog raadplegen.

Bijwerkingentabel

Mate van bijwerkingen	Bijwerking	Oplossing
Vaak voorkomende huidreacties	Roodheid Prikkelen Tintelingen Warm Gevoeligheid voor de zon	1. Druk een ijspack op het behandelde gebied 2. Onschadelijk en verdwijnt snel.
Zeldzame bijwerkingen	Brandwonden Littekenvorming Pigmentveranderingen Overmatige roodheid/pijn Zwelling	1. Gebruik een lagere lichtintensiteit. 2. Raadpleeg een arts of de klantenservice voor hulp.
Uiterst zeldzame bijwerkingen	Infectie Kneuzing	Stop met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts of de klantenservice voor hulp.

PROBLEEMOPLOSSING

Deze handleiding beschrijft de problemen die zich voordoen bij het gebruik van het product. Als u de volgende informatie niet kunt gebruiken om deze problemen op te lossen, neem dan tijdig contact op met de klantenservice.

Problemen	Mogelijke redenen	Oplossing
Het kan niet worden gestart.	De voeding is niet goed aangesloten	Controleer of de voeding correct is aangesloten
De bestraling is niet beschikbaar.	Lichaamstemperatuur te hoog is. De kop te dicht bij de huid.	Wacht tot de apparatuur op natuurlijke wijze is afgekoeld, maak de host dicht bij de huid totdat de statusindicator stopt met knipperen.
Het werkklampje brandt niet.	Haren op het verwijderingsgedeelte worden niet geschoren.	Voordat u dit product gebruikt de haren op het te bestraald worden. In geval van huidallergie veroorzaakt door het scheren haren zo kort mogelijk en gebruik het onder een comfortabele instelling.
De pijn is ondraaglijk tijdens het ontharen.	Het product is niet geschikt voor het ontharingsgedeelte.	Gebruik het product niet bij de schaamlippen, vagina, anus, tepel of tepelhof. Gebruik het product niet op het scrotum.
	Te hoog intensiteitsniveau.	Verminder het intensiteitsniveau tot de comfortniveau.
	Het behandelingsvenster is beschadigd.	Repareer of retourneer het product onmiddellijk.
Na het ontharen wordt het ontharingsgebied rood.	Milde roodheid is normaal en onschadelijk voor het menselijk lichaam, en zal verdwijnen snel verdwijnen.	Raadpleeg indien nodig uw arts.
Het effect is slecht.	De gebruikte intensiteit is te laag voor jou.	Gebruik de volgende keer een hoge instelling.
Automatische overtemperatuur	Zelfbescherming procedure voor oververhitting van de apparatuur.	Plaats het product op een geventileerde plaats om af te koelen.
Er is geur tijdens de bestraling.	Het optische licht filter heeft stof of er zijn resten haren op het oppervlak.	Reinig de lampkap en omgeving en zorg ervoor dat alle haren geschoren zijn en stel hem in op de juiste versnelling.
Product schakelt automatisch uit na een paar minuten.	Om ongelukken te voorkomen schakelt het apparaat automatisch uit nadat het 5 minuten onbeheerd is geweest.	Herstart het apparaat

GARANTIE-INHOUD

Garantie-informatie

Volgens ons onderzoek hebben sommige mensen het product teruggestuurd wegens gebrek aan resultaat en hebben ze het waarschijnlijk niet lang genoeg volgehouden.

Dat deel is nogal moeilijk omdat je niets kunt doen om het proces te versnellen vanwege de groeicycli en het feit dat elk haartje alleen effectief gezapt kan worden als het in de juiste fase van de cyclus zit.

In feite kan het in de paar dagen na een behandeling zelfs lijken alsof er meer haar is omdat de gezapte haren naar buiten worden geduwd.

We hopen dat je genoeg tijd hebt om onze producten te ervaren en de gewenste resultaten te behalen.

- Eén jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
- Er is geen garantie in geval van verkeerd gebruik, stress, breuk, verlies of het verlies van sommige onderdelen, of het binnendringen van sommige vloeistoffen aan het product, wat resulteert in het niet gebruiken van het apparaat, het vertragen van itsefficiency of volledig vernietigen.
- Het apparaat kan niet worden vervangen of gerepareerd als wordt ontdekt dat het meerdere keren is gebruikt, in schoonheidssalons, ontharingsklinieken, voor commerciële doeleinden of door meerdere gebruikers.

Er is geen garantie als het product is opgeladen met een hoog voltage van meer dan 240V.

- Het apparaat kan continu worden gebruikt. Tijdens continu gebruik, als de temperatuur van het apparaat 75 graden bereikt, zal het apparaat stoppen met knippen, maar de ventilator zal blijven werken om het apparaat te koelen. Verwijder uw haar met een scheerapparaat voordat u het apparaat gebruikt, anders ontstaan er vuile plekken op de lens.
- Vuil op de lens en zwarte plekken die hierdoor ontstaan vallen niet onder de garantie. Neem contact op met de lokale agent in geval van schade aan het product of vragen.

Luxuriq

Deze handleiding is eigendom van Luxuriq B.V. en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxuriq B.V. niet worden gekopieerd, verspreid, aangepast of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze oorspronkelijk is bedoeld.

Opruimen



Gooi het IPL ontharingsapparaat aan het einde van de levensduur NIET weg bij het normale huisvuil, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling (Neem contact op met de gemeente voor informatie over recycling). Zo help je het milieu te beschermen.



RoHS



Als gevolg van voortdurende productverbetering kunnen de producten die in dit boekje zijn afgebeeld/fotografeerd enigszins afwijken van het daadwerkelijke product.