


# Handleiding V1 Massage gun



Bedankt dat u voor de Malatie V1 Massage gun gekozen heeft.  
Lees voor een veilig en correct gebruik deze handleiding voor gebruik  
zorgvuldig door.

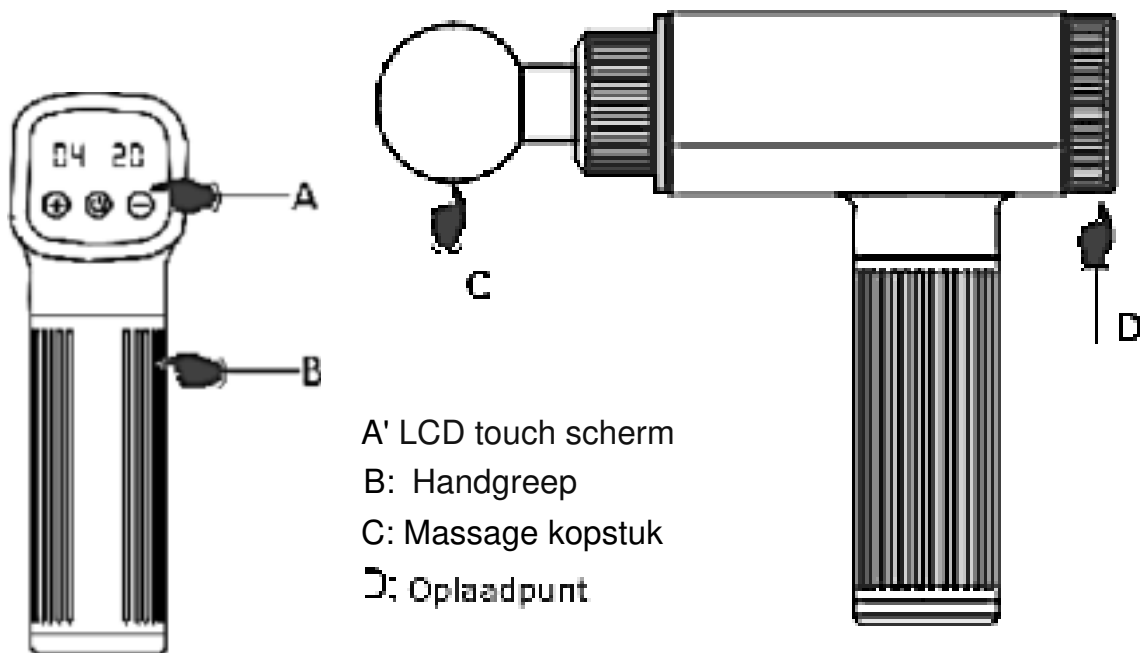

04 : Snelheidsweergave,  
 versnellingsstand van 1 tot 30

: Batterij percentage weergave

: Aan/Uit knop.  
 Houd de knop 2 seconde ingedrukt  
 om het apparaat te starten



-}- : Standje omhoog


— : Standje omlaag

## Massage kopstukken



## Installatie

Bij het vervangen van de kopstuk, of het erop monteren is het belangrijk dat er voorzichtig met een slag wordt gedraaid. Doe dit niet met teveel kracht

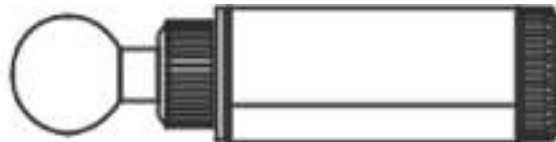

## Specificaties

Naam	Malatie Massagegun	Model	V1
Gewicht	800 gram	Formaat	178x198x62mm
Materiaal	ABS	Snelheidsstanden	30 standen
Batterij capaciteit	2600 mAh	Massage kopstukken	6 kopstukken
Voltage	12V	Temperatuur	0 - 40°C
Vermogen	24W	Kleur	Donker grijs
Scherm	LCD touch scherm	Laadspanning	5V
Automatisch uit	Na iedere 15 minuten sessie	Oplaad tijd	Tot 4 uur

## Belangrijk

Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt

---

1 Alleen voor gebruik door volwassenen. Niet gebruiken als u gewond bent

2 Houd uw huid tijdens het gebruik droog. Het wordt niet aanbevolen om te gebruiken als u huid nat is

3 Plaats dit product niet in water

4 Blijf uit de buurt van plaatsen of voorwerpen met een hoge temperatuur

5 Haal het product niet zelf uit elkaar

6 Gebruik het niet langer dan 1 uur onafgebroken. Voordat u het opnieuw gebruikt er minimaal 30 minuten tussen zitten

7 Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als er een onjuiste reactie is

# Opladen

- 1 Dit product vereist de uitvoer van een 5V 1A-2A USB-oplader om op te laden, als het gebruik van andere specificaties de adapter kan leiden tot het niet opladen of beschadiging
- 2 Wanneer het resterende vermogen minder is dan 20%, knippert het en geeft het opladen aan. Het wordt stap voor stap weergegeven.
- 3 Laad de accu op tijd als er onvoldoende stroom is
- 4 Gebruik dit product niet tijdens het opladen
- 5 Als het product lang niet wordt gebruikt, moet het worden opgeladen één keer per maand om langer mee te gaan

# Gebruiksaanwijzingen

- 1 Houd de Aan/Uit knop 2 seconden ingedrukt om te starten of uit te zetten
- 2 Wanneer + wordt ingedrukt, neemt de massage intensiteit toe met de maximum van 5
- 3 Wanneer - wordt ingedrukt, neemt de massage intensiteit af.

# Onderhoud/reiniging

- 1 Gebruik geen alcohol en andere organische chemische oplosmiddelen. Maak het schoon met een schone zachte doek.
- 2 Zet dit product niet op vochtige plekken maar bewaar het op een geventileerde plek.
- 3 Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren