

# IPL Laser Ontharing



# Inleiding

**Bedankt dat je hebt gekozen voor het IPL ontharingsapparaat! Dit apparaat is perfect voor iedereen die graag ongewenste haargroei wil verminderen of volledig wil verwijderen. Dit apparaat biedt een gemakkelijke en effectieve manier om te genieten van de voordelen van laser ontharing in het comfort van je eigen huis.**

**Deze handleiding bevat instructies voor het gebruik van het IPL ontharingsapparaat. Zorg ervoor dat je deze handleiding volledig hebt gelezen voordat je het apparaat gebruikt.**



# Veiligheidsinstructies

- **Gebruik het IPL ontharingsapparaat alleen voor het beoogde doel, namelijk het verminderen of verwijderen van ongewenste haargroei.**
- **Gebruik het apparaat niet op een beschadigde huid of als je last hebt van een huidaandoening.**
- **Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.**
- **Gebruik het apparaat niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft.**
- **Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.**
- **Draag altijd de meegeleverd beschermbril om je ogen te beschermen tijdens het gebruik van het apparaat.**

# Vorbereiding

**Volg deze stappen om het IPL ontharingsapparaat te gebruiken:**

- 1. Zet het apparaat aan door op de aan/uit-knop te drukken en houd deze knop 2 seconden ingedrukt totdat het apparaat begint te trillen en de indicatorlampjes beginnen te knipperen.**
- 2. Plaats de meegeleverde beschermbril op je gezicht om je ogen te beschermen.**
- 3. Plaats het apparaat op het te behandelen gebied en druk op de flitsknop. Het apparaat geeft een lichtflits af die de haarzakjes inactief maakt, waardoor de haargroei wordt verminderd.**
- 4. Herhaal deze stap totdat je het hele te behandelen gebied hebt behandeld.**
- 5. Zet het apparaat uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het apparaat stopt met trillen en de indicatorlampjes uitgaan.**



# Tips voor gebruik



**Gebruik het IPL ontharingsapparaat regelmatig voor de beste resultaten. Voor de meeste mensen is het aanbevolen om het apparaat eens per week te gebruiken.**


- **Het is normaal dat je tijdens het gebruik van het apparaat een licht tintelend of brandend gevoel ervaart. Als je pijn of ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.**
- **Gebruik het IPL ontharingsapparaat niet op een gevoelige huid, zoals het gezicht of de schaamstreek.**
- **Vermijd het gebruik van het IPL ontharingsapparaat op een gebruinde huid, omdat dit de kans op bijwerkingen vergroot.**
- **Houd het apparaat schoon en droog wanneer je het niet gebruikt.**

# Onderhoud




## **Maak het apparaat schoon**

Reinig het apparaat na elk gebruik met een zachte, vochtige doek.

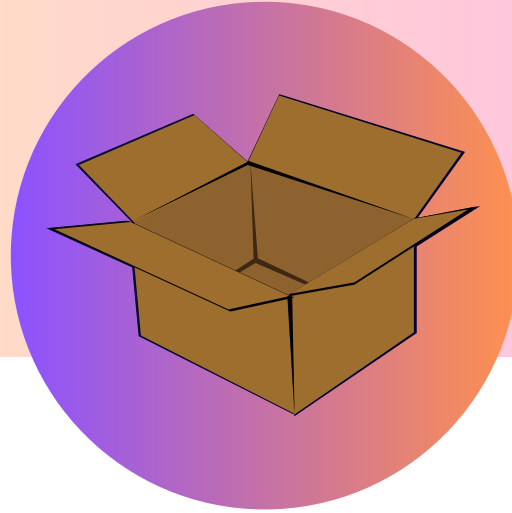

## **Berg het apparaat op**

Berg het apparaat op in de meegeleverde opbergtas.

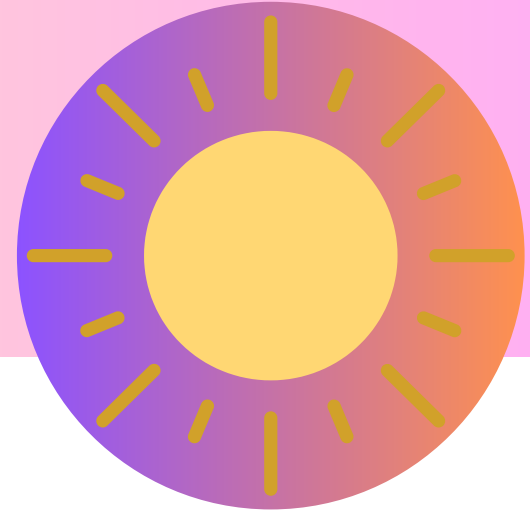

## **Berg het uit de buurt van de zon**

Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht en hitte.

**Het IPL ontharingsapparaat is een handig en effectief apparaat om ongewenste haargroei te verminderen of te verwijderen. Door de eenvoudige bediening en de veelzijdigheid van het apparaat, kan het gebruikt worden voor verschillende delen van het lichaam. Door de voordelen van laser ontharing in het comfort van je eigen huis te ervaren, bespaar je tijd en geld ten opzichte van een bezoek aan een schoonheidsspecialist. Gebruik dit IPL ontharingsapparaat regelmatig en volg de instructies zorgvuldig op voor de beste resultaten.**

# Conclusie