

# beurer


## Aroma HK 65

NL



**NL** Aromawarmtekussen  
Gebruikshandleiding

## • Verklaring symbolen op etiket

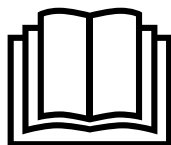

Aanwijzingen lezen!



Niet gevouwen of in elkaar gescho-  
ven gebruiken!



Geen naalden insteken!

### Geachte klant,

we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht.

Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,  
Uw Beurer-team

**Meegelieferd:** 1 warmtekussen, 1 schakelaar, 1 overtrek, 2 kruidenvullingen, deze gebruikshandleiding

# 1. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen – zorgvuldig lezen en voor later gebruik bewaren

Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan schade aan personen en goederen (elektrische schok, verbranding, brand) veroorzaken. De volgende veiligheids- en gevarenaanwijzingen dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid resp. de gezondheid van derden, maar ook ter bescherming van het product. Houd daarom rekening met deze veiligheidsinstructies en geef deze handleiding door wanneer u het artikel uit handen geeft.

- Gebruik dit warmtekussen uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing omschreven doel.
- Dit warmtekussen is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
- De warmtekussen dient niet gebruikt te worden door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder het toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Niet gebruiken bij hulpbehoevenden, kleine kinderen of personen die ongevoelig zijn voor hoge temperaturen (bijv. diabetici, personen met door ziekte veroorzaakte huidveranderingen of littekens in het toepassingsgebied, na inname van pijnstillende middelen of alcohol).
- Te lang gebruik kan leiden tot verbranding van de huid.
- Let op! In geen geval in slaap vallen wanneer het warmtekussen gebruikt wordt.
- Het warmtekussen niet gebruiken op lichaamsdelen die ontstoken, gewond of opgezwollen zijn. In geval van twijfel vóór gebruik een arts raadplegen.
- Gebruik de kruidenvullingen niet bij een bekende overgevoeligheid of allergie voor de onder punt 2 genoemde kruiden. Bij twijfel dient u uw arts te raadplegen.
- De elektrische en magnetische velden die dit warmtekussen uitstraalt kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw pacemaker verstoren. Deze liggen echter ver onder de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, magnetische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische stroomdichtheid: max. 0,1 milli-tesla. Raadpleeg daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker vóór gebruik van dit warmtekussen.

- Dit warmtekussen
  - alleen aansluiten op de op het warmtekussen aangegeven spanning,
  - uitsluitend gebruiken met de op het warmtekussen aangegeven type schakelaar,
  - niet zonder toezicht aan laten staan,
  - niet in opgevouwen of in elkaar geschoven toestand inschakelen,
  - niet vastklemmen,
  - niet knikken,
  - niet bij dieren gebruiken,
  - niet in vochtige toestand gebruiken.
- De elektrische onderdelen van dit warmtekussen zorgen bij gebruik voor lichte opwarming van de schakelaar. De schakelaar mag daarom niet afgedekt zijn of op het warmtekussen liggen wanneer dit in gebruik is.
- Niet aan de kabels trekken, draaien of deze knikken.
- Geen naalden of scherpe voorwerpen in het warmtekussen steken.
- Dit warmtekussen mag niet door kinderen worden gebruikt tenzij de schakelaar van tevoren door een ouder of toezienend persoon ingesteld is of het kind voldoende geïnstrueerd is hoe het dit warmtekussen veilig moet gebruiken.
- Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te garanderen dat zij niet met het warmtekussen spelen.
- Vaak kan dit verwarmingskussen in de loop der tijd worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er inderdaad slijtage of beschadiging zichtbaar is of als het verwarmingskussen gebruikt is op andere wijze dan bedoeld, moet het eerst worden gerepareerd door de fabrikant of de verkoper.
- Als de netkabel van dit verwarmingskussen beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakman of een door de fabrikant erkende reparatiewerkplaats worden uitgevoerd omdat speciaal gereedschap nodig is. Door ondeskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
- Neem contact op met onze klantenservice wanneer u nog vragen hebt over het gebruik van dit apparaat.

## 2. Over de aromatoepassingen

Door de verwarming van de aromatische, geneeskrachtige kruiden worden de hierin opgenomen etherische oliën als inhaleerbare dampen aan de lucht afgegeven.

### 2.1 Verkoudheidsmelange

Inhoud van het kruidenmengsel "Verkoudheid": 1 g anijs, 1 g tijm, 2 g pepermunt.

De etherische oliën van dit kruidenmengsel staan erom bekend dat ze een bevrijdende werking hebben op de luchtwegen en dat ze hoestprikkels kunnen verminderen.

### 2.2 Ontspanningsmelange

Inhoud van het kruidenmengsel "Ontspanning": 2 g lavendel, 1 g citroenmelisse, 1 g St. Janskruid

De etherische oliën van dit kruidenmengsel staan erom bekend dat ze een ontspannende werking hebben.

## 3. Kennismaking

### 3.1 Overtrek met aloë vera

De verwisselbare sloop van het warmtekussen is behandeld met een extract van de Aloë Vera-plant. Daardoor is de sloop zeer huidvriendelijk en aangenaam zacht.

De sloop kan in de machine worden gewassen.

Houd er rekening mee dat het toegevoegde extract na verloop van tijd en als gevolg van wasbeurten zal zijn verdwenen. U kunt een reservesloop bestellen bij de klantenservice onder vermelding van productnummer 140.834.

### 3.2 Kruidenvullingen

Het warmtekussen wordt geleverd met twee verschillende kruidenvullingen. De ontspannings- en de verkoudheidsvulling.

Plaats afhankelijk van de gewenste werking één van de twee kruidenvullingen onder het overtrek van het warmtekussen. Plaats het warmtekussen zo op uw lichaam dat u de etherische dampen kunt inademen. Bij een dagelijks gebruik moeten de vullingen na ca. 1 maand worden vervangen, omdat de etherische oliën dan bijna volledig zijn verdampt. In de winkel zijn nieuwe vullingen verkrijgbaar.

Het aromawarmtekussen is alleen bedoeld voor privégebruik en niet voor medisch of commercieel gebruik.


## 4. Gebruik volgens de voorschriften

Dit warmtekussen is bedoeld voor de verwarming van het menselijk lichaam. U kunt hiermee doelgericht warmte gebruiken. De warmte bevordert de doorbloeding en ontspant de spieren. Dit warmtekussen is niet voor gebruik in ziekenhuizen of bedrijfsmatig gebruik bedoeld. Vooral zuigelingen, kleine kinderen, personen die ongevoelig zijn voor te hoge temperaturen, hulpbehoevenden en dieren mogen niet verwarmt worden.

Onze verwarmingskussens van ademende microfleece zijn zeer flexibel en niet schadelijk voor de huid. Ze kunnen ook zonder stoffen hoes worden gebruikt. Door de afneembare schakelaar kunt u het verwarmingskussen wassen in de wasmachine (zie reinigingsinstructies).

## 5. Apparaatbeschrijving

- 1 Verwarmingskussen
- 2 Stekkeraansluiting
- 3 Overtrek
- 4 Schakelaar
- 5 Kruidenvullingen

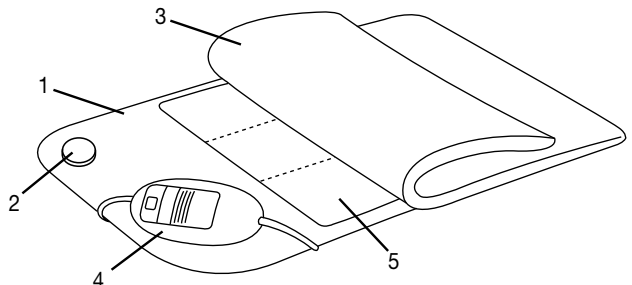

## 6. Ingebruikname

Verwijder de verpakking van de gewenste kruidenvulling en leg deze door het geopende overtrek plat op het kussen. Sluit de ritssluiting. Controleer vervolgens of de schakelaar via de stekkerkoppeling met het warmtekussen is verbonden. Steek daarna de stekker in het stopcontact. Plaats het warmtekussen op uw bovenlichaam, zodat u de etherische oliën kunt inademen.

## 7. Bediening

### 7.1 Veiligheid

Dit warmtekussen is voorzien van een VEILIGHEIDSSYSTEEM. Deze elektronische sensortechniek voorkomt oververhitting van het warmtekussen over het totale oppervlak door automatische uitschakeling in geval van fouten. Wanneer het warmtekussen door een fout automatisch door het veiligheidssysteem wordt uitgeschakeld, brandt het signaallampje niet meer, ook wanneer het warmtekussen is ingeschakeld. Let op! Na een veiligheidsfout kan het warmtekussen niet meer gebruikt worden en moet het naar het aangegeven serviceadres worden gestuurd.

### 7.2 Ingebruikname

Controleer eerst of de schakelaar via de stekkerverbinding verbonden is met het verwarmingskussen. Steek dan de stekker in het stopcontact.

### 7.3 Temperatuurkeuze

Na het inschakelen wordt de schakelstand permanent verlicht. U kunt het warmtekussen het snelst verwarmen door eerst de hoogste temperatuurstand in te stellen. Later kan naar behoefte teruggeschakeld worden.

Wij adviseren bij een langer gebruik van het warmtekussen de laagste temperatuurstand.

### 7.4 Temperatuurstanden

Stand:      0 uit  
              1 minimale warmte  
              2 middelmatige warmte  
              3 maximale warmte

### 7.5 Automatisch uitschakelen


Dit kussen is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Hiermee wordt de warmtetoevoer ca. 90 minuten na ingebruikname van het warmtekussen stopgezet. De schakelstand begint daarna te knipperen. Om het warmtekussen opnieuw te kunnen gebruiken, moet u de schakelaar eerst op stand "0" instellen. Na ongeveer 5 seconden kunt u het kussen opnieuw inschakelen.

Wanneer het warmtekussen na de tijduitschakeling niet meer wordt gebruikt, moet het worden uitgeschakeld (stand "0") en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.



### 7.6 Snelverhitting

Deze verwarmingskussens beschikken over een snelverhittingsfunctie die voor een snelle verwarming zorgt gedurende de eerste tien minuten.

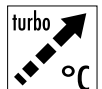

## 8. Reiniging en onderhoud

**Trek vóór reiniging van het warmtekussen altijd de stekker uit het stopcontact.**

U kunt de textielhoes wassen volgens de reinigingssymbolen op het etiket.

De aromavullingen mogen niet worden gewassen.

Kleine vlekken op het verwarmingskussen kunnen met een doek of vochtige spons en eventueel een klein beetje vloeibaar wasmiddel worden verwijderd. Gebruik geen reinigingsmiddel met oplosmiddel.

Let op, het verwarmingskussen mag niet chemisch gereinigd, gecentrifugeerd, in de machine gedroogd, gemengd of gestreken worden.

Verwijder vóór het wassen eerst de stekkerverbinding en de schakelaar uit het verwarmingskussen (zie afbeelding). Stel de wasmachine in op een programma van 30° graden.


Uit milieuoverwegingen raden wij u af het verwarmingskussen gelijktijdig met andere artikelen te wassen.

Gebruik een fijnwasmiddel volgens de doseringinstructies van de fabrikant.

Let op, door te vaak wassen slijt het verwarmingskussen. Het verwarmingskussen mag daarom gedurende de totale levensduur maximaal 10 keer machinaal worden gewassen.

**Hang het verwarmingskussen nooit op met wasknijpers of iets dergelijks en zet het verwarmingskussen nooit aan om deze te drogen!**

**Verbind de schakelaar pas weer met het verwarmingskussen als de stekkerverbinding en het verwarmingskussen volledig droog zijn.**

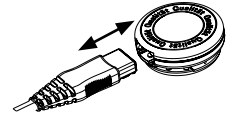

## 9. Bewaring

Wanneer u het warmtekussen langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan het in de originele verpakking in een droge omgeving en zonder belasting te bewaren.

Laat het warmtekussen eerst afkoelen.

## 10. Verwijdering

Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het toestel conform het Besluit Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde instanties voor afvalverwijdering.



