


LED LICHT MASKER

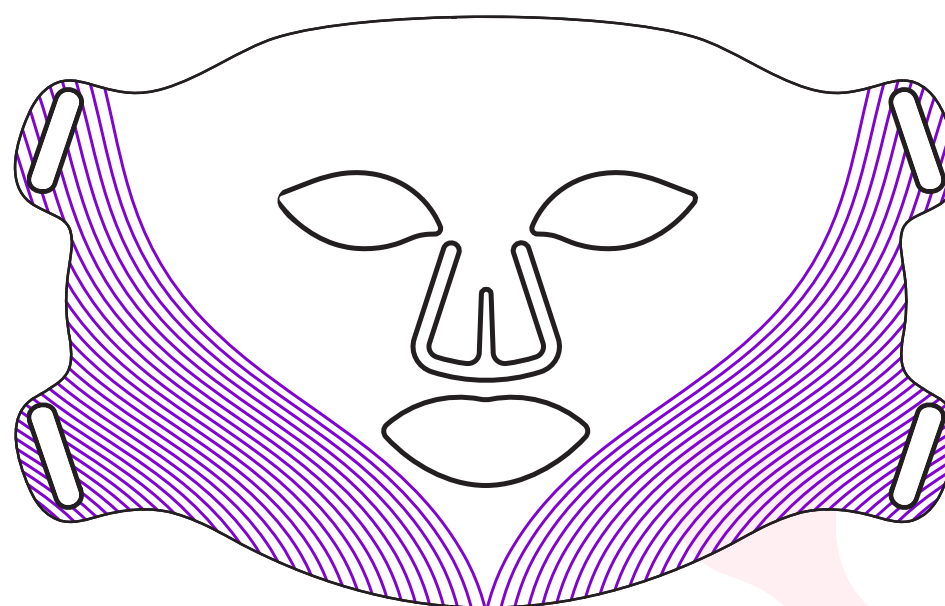

LED Licht Masker

Het LED Gezichtsmasker van Panacea Light Therapy is een handig draagbaar apparaat voor thuisgebruik. Gemaakt van medisch siliconenmateriaal, hij is hierdoor makkelijk op te vouwen en mee te nemen. Door de verstelbare gesp past hij zich aan verschillende gezichtsvormen aan. Het masker heeft 240 hoogwaardige LED-lampjes verdeeld over 60 blokken. Elke blok bevat 4 lampjes die elk 4 soorten licht uitstralen: rood (630 nm), blauw (460 nm), geel (590 nm) en nabij-infrarood (850 nm). Met de controller kun je kiezen uit 3 energieniveaus en verschillende lichttijden. Door middel van foterapie dringt het diep in de huid door, stimuleert het de productie van collageen en elastine, en zorgt het voor een prachtige huid.


Licht Golf lengtes

Rood licht: 630 nm, anti-veroudering, bevordert collageen, verstevigt de huid, verhoogt elasticiteit.
Blauw licht: 460 nm, doodt bacteriën, acnebacteriën, vermindert ontstekingen en littekens, verhoogt de zuurstof in de huid.
Geel licht: 590 nm, balanceert de textuur van de huid, stimuleert rode bloedcellen om roodheid en fijne lijntjes te verminderen.
Nabij-infrarood licht: 850 nm, herstelt de huid, verbetert de bloedcirculatie, verhoogt de vochtigheid van de huid.

Infraroodlicht wordt onafhankelijk aangestuurd en kan ook worden gebruikt met elk type licht.

Eerste gebruik


Zorg ervoor dat je de batterij volledig oplaadt voordat je het masker de eerste keer gebruikt. De indicator op de controller gaat knipperen om aan te geven dat het masker aan het opladen is. Als de batterij vol is, gaat het indicatorlicht uit. Laad het masker 4-5 uur op en draag het gemakkelijk met verstelbare klittenband sluiting. Om het masker te bevestigen, steek je de band door de opening aan de andere kant van het masker, rond je hoofd, en bevestig je het.

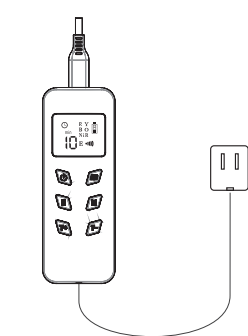

01

Uitleg afstandsbediening

- 01 Power: Aan/uit-knop: Houd 1-2 seconden ingedrukt om in of uit te schakelen.
- 02 NIR knop: Onafhankelijke bedieningstoets voor infraroodlicht: Aan/uit voor infraroodlicht, kan worden gebruikt met elk ander licht.
- 03 E-toets: Energieniveau aanpassen, kort indrukken om tussen 3 energieniveaus te schakelen. M-toets: Lichtbronmodus aanpassen, 4 lichtbronmodi.
- 04 Lichttijdverlengingstoets: Druk op de T + toets om de belichtingstijd te verlengen. Druk op de T-toets om de belichtingstijd te verkorten, in totaal 5 tijdsinstellingen (10/15/20/25/30 minuten).

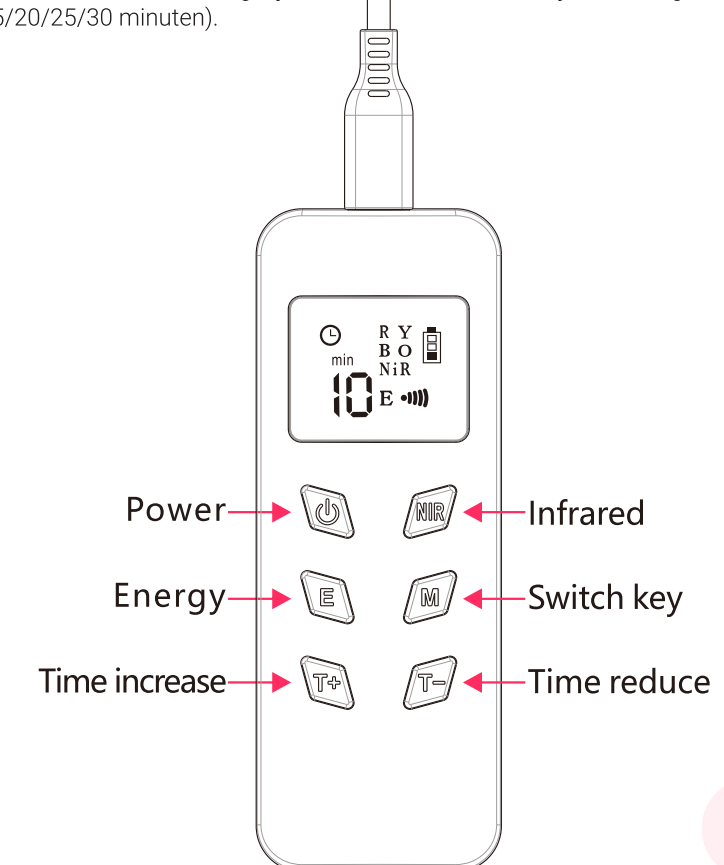


02

Productinformatie


LED Licht gezichtsmasker			
Aantal LED's	240	Verpakking	43x23x4.5cm
Timer	10/15/20/25/30min	Stroom	0.3A 50/60HZ
Temperatuur	0- 40 Graden	Gewicht van Masker	0,32 KG
Adapter input	100-240V	Adapter output	5V DC 3000MAH
4 Gofflengtes van Licht	Rood licht 630nm, blauw licht 460nm, geel licht 590nm en nabij-infrarood licht 850nm.		
In de verpakking	Masker, afstandsbediening, oplaadkabel, gebruiksaanwijzing, klitteband		

Installatie

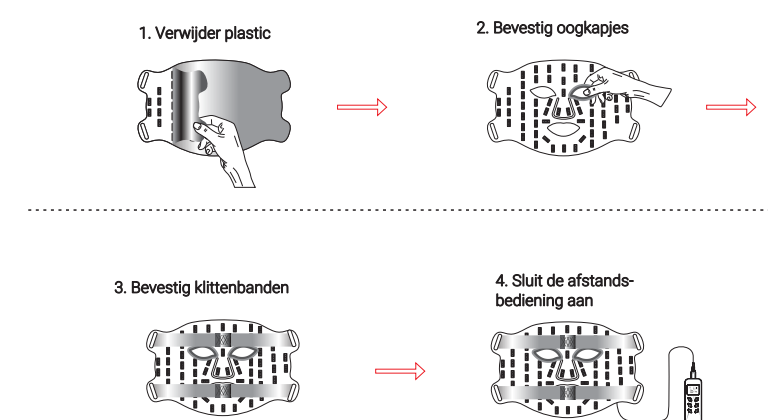

03

LED Licht werking

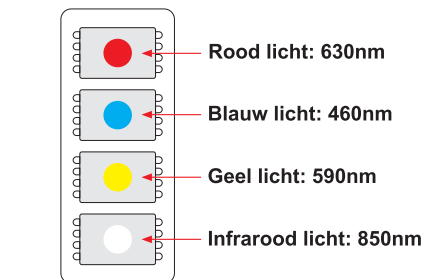


Rood licht: 630 nm
Draagt bij aan het verminderen van tekenen van veroudering, stimuleert de aanmaak van collageen, verlicht de verslachte huid en verbetert de elasticiteit.

Blauw licht: 460 nm
Bestrijdt acnebacteriën, vermindert ontstekingen en littekens, verhoogt de zuurstoftoevoer naar de huid en laat de huid stralen.

Geel licht: 590 nm
Evenwichtige huidtextuur, stimuleert de bloedcirculatie om roodheid en fijne lijntjes te verminderen, vermindert effectief acne-markeringen en behoudt de stabiliteit van de huid.

Infrarood licht: 850 nm
Herstelt de huid, versnelt de stofwisseling, verbetert de bloedcirculatie en verhoogt het vochtgehalte in de huid.

Hoe te gebruiken?

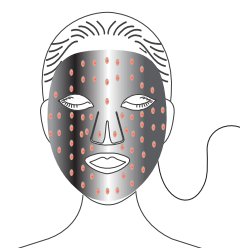

Nadat je het LED Light Therapy-masker hebt geïnstalleerd, zorg ervoor dat de band comfortabel is afgesteld. Sluit het masker aan op de controller en zet het licht aan. Belicht je gezicht gedurende 1 minuut en ga verder zonder ongemak te ervaren.

⚠️ Begin met stand 1-2 om te zien hoe je huid reageert. Kies dan de juiste energiestand op basis van hoe je huid aanvoelt. Verhoog de tijd en frequentie van het licht niet zomaar. Pas de belichtingstijd aan op basis van hoe je huid echt aanvoelt. Gebruik het masker 3-4 keer per week, elke keer 15-25 minuten.

04

Let op! Lees goed door

- 01 Gebruik het LED Light Masker van Panacea Light Therapy volgens de handleiding om problemen te voorkomen.
- 02 Gebruik het apparaat niet anders dan aangegeven, om schade of ongelukken te vermijden.
- 03 Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen mogen het masker niet gebruiken.
- 04 Het wordt afgeraden voor mensen met lichamelijke, zintuiglijke, of geestelijke aandoeningen, en voor diegenen die een dermatologische behandeling ondergaan, zoals bij lupus erythematoses, fotosensitieve eczeem of albinisme. Raadpleeg in deze gevallen een specialist voordat je het masker gebruikt.
- 05 Mensen met fotosensitieve stoornissen moeten het masker vermijden, aangezien dit ernstige huidreacties kan veroorzaken.
- 06 Gebruik het masker niet op dezelfde dag als producten met fotosensitieve ingrediënten.
- 07 Draag het oogmasker correct en bescherm je ogen tijdens het gebruik door ze te sluiten.
- 08 Als je genetische oogproblemen hebt, gebruik dan geen biologisch masker. Stop onmiddellijk met het gebruik als je ongemak ervaart.
- 09 Het apparaat is niet waterdicht, dus vermijd contact met water.
- 10 Geef het niet aan kinderen en bewaar het buiten hun bereik.
- 11 Gebruik het niet als er onderdelen beschadigd zijn. Het masker is bedoeld voor dagelijks gebruik.
- 12 Demonteer, transformeer of repareer het niet zonder toestemming.
- 13 Gebruik het 3-4 keer per week, met een enkele sessie van 15-25 minuten.

05