

140x90



Handleiding

Eraglow 7 kleuren LED licht Huidverjongingsapparaat voor gezicht & hals

Functie

De Eraglow 7 kleuren LED licht huidverjongingsapparaat voor gezicht en hals is een handapparaat voor de behandeling van rimpels in het hele gezicht en hals. Het combineert 7 kleuren LED-licht, trillingen en verwarming om rimpels en andere huidproblemen te behandelen.

(A) Trillingen

Deze multifunctionele apparaat heeft 3 massagstanden met verschillende energieniveaus.

De CLEAN-modus kan de poriën zuiveren en uw huid schoon en glanzend houden.

De EMS-modus kan uw huid ontspannen, uw huid helpen huidverzorgingsproducten te absorberen en fijne lijntjes en rimpels te verminderen.

De HOT-modus kan de slappe huid strakker maken en de collageenproductie bevorderen, waardoor uw huid wordt verjongd.

Dit LED-huidverjongingsapparaat bevat 7 LED-lichtstanden. Meer opties voor verschillende huidproblemen!

(B) Verwarming

Een constante temperatuur van 45+-5 graden Celsius tijdens de behandeling bevordert de opname van huidverzorgingsproducten. De juiste temperatuur maakt de huidverzorging ook aangenamer.

(C) 7 kleuren LED-licht standen

ROOD Licht (630 nm) Anti-veroudering en bevordering van collageenproductie

BLAUW Licht (415 nm) Verzacht ontstekingen en kalmeert de gevoelige huid

GROEN Licht (525 nm) Vermindert rimpels en fijne lijntjes

PAARS Licht (390 nm) Bevordert lymfedrainage

GEEL Licht (590 nm) Vermindert melanineproductie

CYAAN Licht (490 nm) Vermindert huiszwellingen en kalmeert de huid

WIT Licht (mix) Ontspannt de huid en versnelt de groei en genezing van huidcellen.

Gebruiksaanwijzingen

1. Reinig uw gezicht en breng uw favoriete huidverzorgingsproduct gelijkmatig aan rondom het te behandelen gebied.

2. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

3. Druk op de knop om de lichtstand en massagemodus te selecteren op basis van uw behoeften.

4. Plaats de massagekop tegen uw huid en masseer van onder naar boven.

5. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat na gebruik uit te schakelen.

Opmerkingen

1. Dit apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.


2. De Huidverjongingsapparaat begint pas met werking wanneer deze dicht op de gezichtshuid wordt geplaatst.

3. Als er gedurende één minuut geen gebruik plaatsvindt, schakelt het apparaat automatisch uit.

Producteigenschappen



Tips voor gebruik

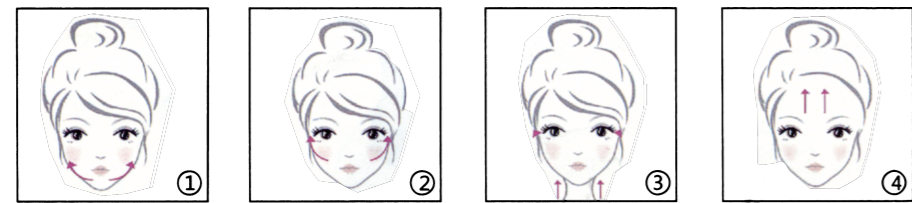

1. Masseer van kin tot wang
2. Masseer vanaf de wang tot de buitenste ooghoek
3. Masseer van nek tot kin
4. Masseer het voorhoofd van onder naar boven

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Gebruik de Huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.

1. Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking. Het wordt niet aanbevolen voor mensen met een plastische gezichts chirurgie, een metalen implantaat hebben of zwangere.

2. De Huidverjongingsapparaat kan alleen droog/vochtig gebruikt worden. Veeg de massagekop na gebruik af met een droog/vochtige tissue of doek. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met een olie, serum -en of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat niet onder stromend water of hierin onderdompelt wordt.

3. Plaats het apparaat niet in de badkamer of op andere vochtige plekken, omdat er gemakkelijk kortsluiting kan ontstaan. De Huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere -en droge plek opgeladen wordt en houd regelmatig zicht.

4. Gebruik geen bijtende oplossingen (zoals alcohol, olie, benzine, nagellakremover enz.) om het apparaat af te veegen.

5. Elke modus kan slechts één keer per dag gebruikt worden; en het wordt aanbevolen om drie modi één keer per dag achter elkaar te gebruiken.

De Huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privé thuis gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Eraglow is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan het Huidverjongingsapparaat.

Productkenmerken

Product naam	7 kleuren LED licht huidverjongingsapparaat voor gezicht & hals
Invoerspanning	USB Micro DC 5V/ 5V-1A
Vermogen	2.5W
Batterij model nr.	602535
Batterij kenmerk	3.7V/ 500mAh
Opladtid	120 minuten
Afmetingen apparaat	120 x 89 x 47 mm
Gebruiksduur	60 minuten/ Als er gedurende één minuut geen gebruik plaatsvindt, schakelt het apparaat automatisch uit.



Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

Er is geen garantie in de volgende situaties:

- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door onjuist gebruik.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren zoals vuur, overstrooming, aardbeving.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant de Huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.