

CIRCULATION MAXX™

REFLEXOLOGY



HANDLEIDING

Distributed by:
Orange Planet
De Els 3A, 5107 RK, Dongen
The Netherlands

ANOTHER GREAT PRODUCT DISTRIBUTED BY:




SNELSTARTGIDS

LET OP - DIT APPARAAT TRILT NIET - HET GEBRUIKT ELEKTRISCHE IMPULSEN, GEEN TRILLINGEN!

Voor een gedetailleerde bediening van uw Circulation Maxx Reflexology™ verwijzen wij u naar de uitgebreide instructies in deze handleiding.


Volg deze 5-punts snelstartgids om Circulation Maxx Reflexology™ onmiddellijk te gebruiken.

1

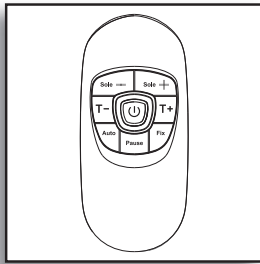


- Haal uw Circulation Maxx Reflexology™ uit de verpakking.
- Haal de afstandsbediening eruit en verwijder de schroef van de batterijbehuizing.
- Plaats 2 AAA-batterijen in het compartiment zoals aangegeven. Schroef vervolgens de batterijbehuizing vast.

2

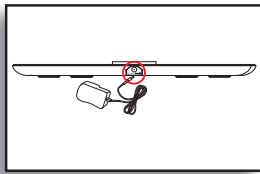

- Sluit de DC-adaptor aan op een geschikt stopcontact en steek de kleine DC-aansluiting in het apparaat.

3

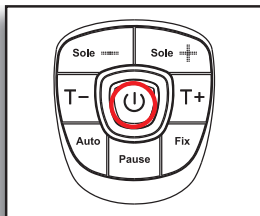


- Zet het apparaat aan, het centrale display licht wit op.

4



- Verwijder uw schoenen en sokken of kousen en ga zitten in een comfortabele stoel.
- Beide blote voeten moeten op het apparaat liggen om te kunnen werken. Je linkervoet op de linkervoetplaat en je rechervoet op de rechervoetplaat.

5

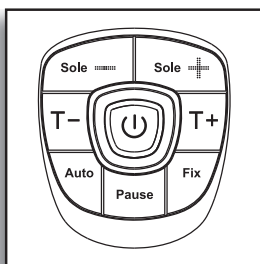

- Verhoog de intensiteitsniveaus voor de voeten door op de "SOLE+" te drukken of druk op "SOLE –" om de intensiteit te verlagen.
- Het intensiteitsniveau varieert van 0-99, verhoog langzaam het niveau totdat u de microstroomstimulatie begint te voelen.

INHOUDSOPGAVE



Veiligheidsinformatie – Lees a.u.b.	3
Machineoverzicht en onderdeelnamen	4
Voetreflexologie Kaart	5
Functie van het bedieningspaneel:	6
Hoe te bedienen	7
Batterij installatie	8
Circulatie Maxx Reflexology TENS-apparaat	9-10
Technische specificaties	11-12



VEILIGHEIDSINFORMATIE - GELIEVE TE LEZEN

Gevaar



Dit apparaat mag niet in combinatie worden gebruikt met de volgende medische hulpmiddelen:

- Intern getransplanteerde elektronische medische apparaten, zoals pacemakers.
- Elektronische levensondersteunende apparatuur, zoals: ademhalingstoestellen.
- Elektronische medische apparaten aangesloten op de lichaam, zoals elektrocardiografen.

Dit apparaat gebruiken met andere elektronische medische apparaten kunnen een foutieve werking van die apparaten veroorzaken.

Waarschuwing



Personen met de volgende condities moeten de arts raadplegen alvorens gebruik van dit apparaat

- acute ziekte kwaadaardige tumor infectieziekte
- zwangerschap
- hartdisfunctie
- hoge koorts
- abnormale bloeddruk
- huidsensorische aandoeningen of huidproblemen
- medische behandeling ondergaan, vooral die ongemak voelen.



Demonteer of verbouw dit apparaat niet. **Kan brand, problemen of ongelukken veroorzaken.**



Gebruik dit apparaat niet in de buurt van het hart, boven de nek, op het hoofd, rond de mond of op een zieke huid.

Kan een ongeval of een slechte gezondheid veroorzaken. Toepassing van elektroden nabij de thorax kan het risico op hartfibrillatie verhogen.

Gebruik dit apparaat niet gelijktijdig met: ander therapeutisch hulpmiddel of in combinatie met zalven inclusief spraytype zalven.

Kan ongemak of een slechte gezondheid veroorzaken. Gelijktijdige aansluiting van een PATINT op een h.f. chirurgische APPARATUUR kan resulteren in: brandwonden op de plaats van de STIMULATOR elektroden en mogelijke schade aan de STIMULATOR.

Bediening in de directe nabijheid (bijv. 1 m) tot een kortegolf- of microgolftherapie APPARATUUR kan instabiliteit veroorzaken de STIMULATOR-uitgang.

Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden: behandeling dan aangegeven in deze handleiding. Kan leiden tot ongelukken, problemen of storingen van de eenheid.

Steek de stekker van het elektrodesnoer alleen in de aansluiting van het hoofdapparaat, nergens anders. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Voorzichtigheid



Als het apparaat niet goed werkt of u ongemak voelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de eenheid.

Als u problemen heeft met uw lichaam of huid, raadpleeg de arts en volg hun instructies.

Als u de elektrodepad wilt verplaatsen naar: een andere regio of je lichaam tijdens behandeling, moet u ervoor zorgen dat u de stroom uitschakelt.

Zo niet, dan kunt u een sterke elektrische schok krijgen.

Probeer de pads niet aan een andere persoon te bevestigen persoon tijdens de behandeling. U kunt een sterke elektrische schok krijgen.

Begin niet met de behandeling terwijl u een elektronisch apparaat bedient.


De instellingen en timings van het apparaat kan worden beïnvloed.

MACHINEOVERZICHT EN ONDERDEELNAMEN




1. Circulatie Maxx Reflexology voetmassager
2. Afstandsbediening voor Circulation Maxx Reflexology voetmassager
3. 6V 500mA AC-adapter voor Circulation Maxx Reflexology-voetmassageapparaat
4. TENS-apparaat
5. Draadkabel voor het aansluiten van de gelpad en het TENS-apparaat
6. 4 × ovale gelpad voor TENS-apparaat

Vooraanzicht

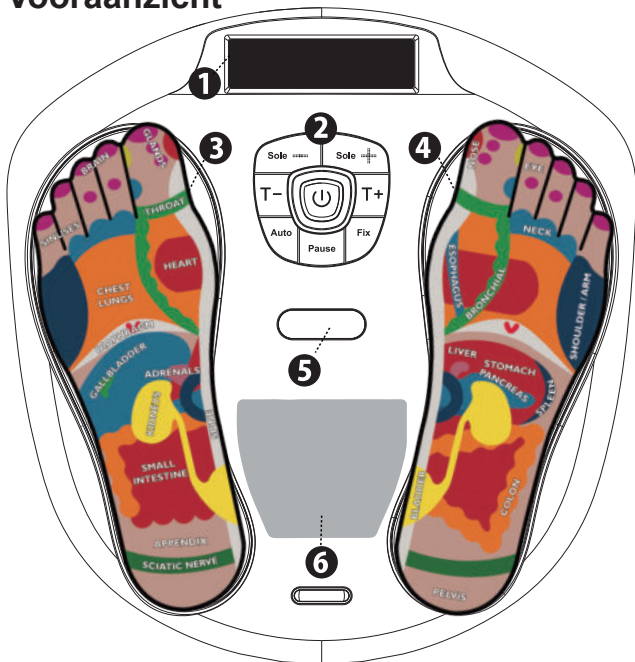

1.	LCD-scherm:
2.	Controlepaneel
3.	Elektropedaal voor linkervoet
4.	Elektropedaal voor rechervoet
5.	Afstandsbediening ontvanger sensor
6.	Voetreflexologie grafiek
7.	AC-aansluiting voor de adapter

Zijaanzicht

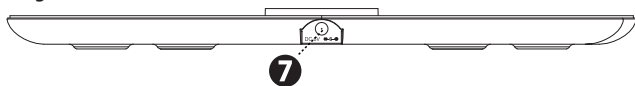

VOETREFLEXOLOGIE KAART



Hoe werkt reflexologie?

Reflexologie beweert te werken volgens de theorie van Qi (spreek uit Chee). Dit is een onzichtbaar energieveld en levenskracht die door het lichaam stroomt. De theorie is dat als je Qi wordt verstoord door: stress, letsel, ziekte of congestie, dat het lichaam uit balans raakt en niet in staat is om zelf te genezen, wat tot pijn leidt.

Reflexologie heeft als doel om eventuele blokkades op te heffen en laat Qi vrij door het gehele lichaam stromen tot een staat van evenwicht bereikt is, bekend als homeostase. Door gebieden op de reflexology voetkaart te stimuleren verbeteren reflexologen de stroom van energie naar het gekoppelde lichaamsdeel. Het kan een diepe staat van ontspanning mogelijk maken die het lichaam in staat stelt zichzelf te genezen. Reflexologie produceert ook endorfines en chemicaliën die helpen pijn en stress te verminderen.

De voetkaart voetreflexologie uitgelegd

Stel je een kaart voor van je hele lichaam geprojecteerd op je voet - dat is in wezen wat een voetkaart voor voetreflexologie is. Elk deel van het lichaam is vertegenwoordigd op een bepaald deel van een of beide voeten.

Een voetkaart voor voetreflexologie ziet er misschien een beetje verschillend van elkaar uit, maar elk van de organen en lichaamsdelen worden op dezelfde manier weergegeven. Sommige voetkaarten voor voetreflexologie zijn: gedetailleerder dan andere welke rekeningen voor veel van de verschillen.

Gezondheidsvoordelen van reflexologie

- Balance Energy, de stroom van Qi overal in het lichaam
- Verbetering van de bloedsomloop, van bloed-, voedingsstoffen en zenuwsignalen
- Verbeter de gezondheid en versterk het immuunsysteem
- Reinig het lichaam, van verschillende gifstoffen
- Laat endorfines vrij, een chemische stof die helpt om pijn en stress te verminderen
- Bevorder ontspanning en genezing


Wat zeggen reflexologen?

Reflexologie wordt steeds populairder aangezien het als een veilige, niet-invasieve, natuurlijke behandeling wordt beschouwd, zonder de behoefte aan medicijnen of chemicaliën. Het is ook makkelijk om de technieken te leren en zelf toe te passen overal en altijd. Alles wat je nodig hebt is enkele eenvoudige instructies en een reflexologie voet kaart.

FUNCTIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL



Selecteer deze modus om het massagepatroon van de resterende tijd vast te leggen op het huidig massagepatroon

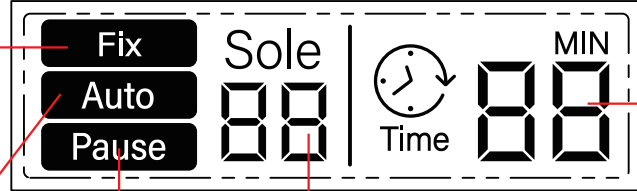


Timerindicatie

Standaardmodus van de behandeling: massagepatroon verandert elke minuut

Tijdelijk stoppen met de behandeling

Geeft de intensiteit van de behandeling aan, max. 99 niveaus

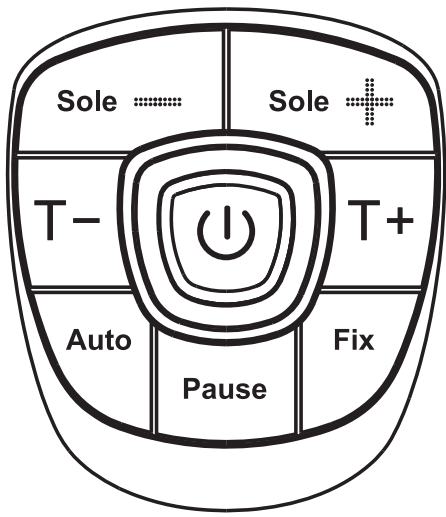

⏻	AAN/UIT-schakelaar
SOLE -	Verlaag de intensiteit van de voetplaten (Beschikbaar van 1 - 99 niveaus)
SOLE +	Verhoog de intensiteit van de voetplaten (Beschikbaar van 1 - 99 niveaus)
TIME -	Verlaag de werkingstijd (beschikbaar vanaf 1-60 minuten)
TIME +	Verhoog de werkingstijd (beschikbaar vanaf 1-60 minuten)
Pause	Druk om de behandeling tijdelijk te stoppen Druk nogmaals om de behandeling voort te zetten
Auto	Het vooraf ingestelde programma met 14 massage patronen voor de voeten
Fix	Gebruiker kan het programma vastleggen naar het huidige massagepatroon voor de resterende tijd



Elektrodegebied van het apparaat

Het zwarte kleurgebied op het apparaat is het elektrodegebied voor de voet.

Hoe te bedienen

Tips: om de geleiding te vergroten, breng water of geleidende gel op waterbasis aan op de zool van uw voet.

1. Plaats uw blote voeten op de Circulation Maxx Reflexology Elektrische stimulator (draag geen sokken/schoenen).
2. Druk op de aan/uit-knop, het LCD-scherm licht wit op en het programma moet 'AUTO mode 00' tonen. Dit is de standby-modus. (Zie Afb. 1)
3. Verhoog voorzichtig de intensiteitsinstelling door op de 'Sole +' knop te drukken, of verlaag de intensiteit door op de 'SOLE -' knop te drukken. De intensiteitsniveaus gaan van 0 tot 99. Het LCD display toont het geselecteerde niveau. (Zie Afb. 2)
4. U kunt de timer aanpassen door op de 'Time +' en 'Tijd -' knoppen. De timer varieert van 1-60 minuten en zal automatisch starten. Om het programma te stoppen, kan de gebruiker op de aan/uit-knop drukken. (Zie Afb. 3)
5. Als u tevreden bent met het programma, kunt u het programma door op de 'fix'-knop te drukken vastleggen en dit blijft hetzelfde totdat de timer afloopt (zie afb. 4) Tijdens het gebruik van het apparaat kunt u op de 'pauze'-knop drukken om de behandeling tijdelijk te stoppen. Door nogmaals op de 'pauze' knop te drukken kunt u doorgaan. Het elektrische pulspatroon verandert automatisch elke minuut en waarschuwt de gebruiker met een pieptoon. Het apparaat piept ook wanneer de timer afloopt.

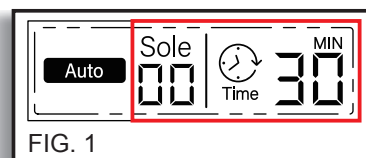


FIG. 1

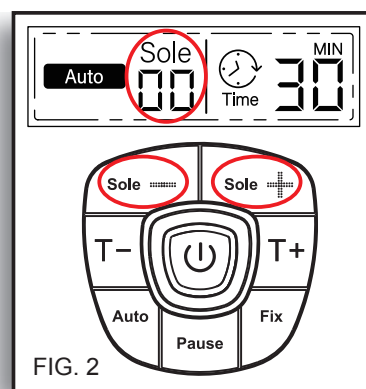


FIG. 2

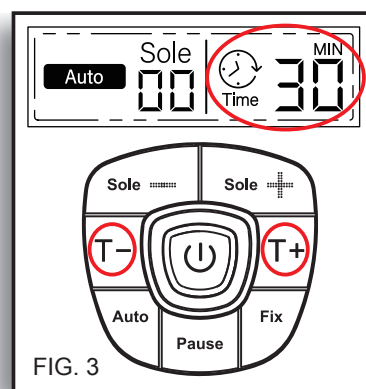


FIG. 3

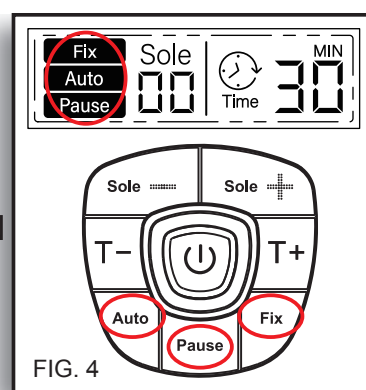


FIG. 4

BELANGRIJKE GEGEVENS

HOE HOGER U HET NIVEAU GEBRUIKT, HOE BETER U DE PULSEN VOELT, DES TE HOGER DE CIRCULATIE ZAL ZIJN. HET DOEL IS DE NIVEAUS TE KUNNEN VERLAGEN EN NOG STEEDS DE ELEKTRISCHE PULSEN TE VOELEN. KIES ALLEEN EEN INTENSITEITSNIVEAU DAT COMFORTABEL IS. DIT NIVEAU KAN VAN DAG TOT DAG VERSCHILLEN DENK ERAAN OM VEEL VLOEISTOFFEN TE DRINKEN, DEHYDRATIE ZAL JE CIRULATIE VERMINDEREN. ALS JE ZEER DROGE VOETEN HEBT, ZAL DIT INVLOED HEBBEN OP DE EFFECTIVITEIT VAN HET APPARAAT. ZORG ERVOOR DAT U UW VOETEN BEVOCHT ZIJN EN GEBRUIK DE INBEGREPEN GELEIDENDE GEL.

Batterij installatie

BATTERIJEN INSTALLEREN VOOR VOETMASSAGER

Wilt u de Circulation Maxx Reflexology met batterijen gebruiken in plaats van de meegeleverde hoofdadapter? Het batterijcompartiment bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Verwijder het batterijklepje en plaats 4 AA-batterijen met de + en - markeringen correct uitgelijnd. Dan kun je genieten van een draadloze bediening.

BATTERIJEN INSTALLEREN VOOR AFSTANDSBEDIENING

Verwijder het batterijdeksel van het apparaat door de schroef met de schroevendraaier te verwijderen. Plaats 2 AAA-batterijen met de + en - correct uitgelijnd.



De zender van de afstandsbediening bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat (Fig. 1). Voor het gebruik van de afstandsbediening vergeet dan niet om de zender op de ontvanger van de voetmassageapparaat (afb. 2) te richten.



😊 Batterij veiligheid:

Combineer geen verschillende soorten batterijen of een oude batterij met een nieuwe. Voorkom het risico van lekkage van explosies, laad de batterijen nooit op, breng nooit warmte aan of neem ze uit elkaar.

Als u het apparaat met de adapter gebruikt, verwijder dan de batterijen om te voorkomen dat batterij leeglopen. Als er vloeistof uit de batterijen lekt, gooi ze dan weg. Maak het batterijvak grondig schoon met een droge doek.

CIRCULATIE MAXX REFLOXOLOGY TENS APPARAAT


MACHINEOVERZICHT EN ONDERDEELNAMEN



- A. Gelpad
- B. Drukknop van de draadkabel
- C. Configuratiescherm
- D. Kabelaansluiting

FUNCTIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

1. ON/HI: Schakelt het apparaat in en verhoogt de uitgangsimpulsintensiteit.
2. OFF/LO: Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de intensiteit met één stap verlaagd tot 10 niveaus en Schakelt het apparaat uit.
3. Modus: Deze knop wordt gebruikt om een van de 6 voorgeprogrammeerde massageprogramma's te selecteren. Het TENS apparaat heeft de 6 programma's om uit te kiezen.
4. Tijd: Om de tijd voor de behandeling in te stellen. Beschikbaar vanaf 5/10/15/20/25/30 minuten.

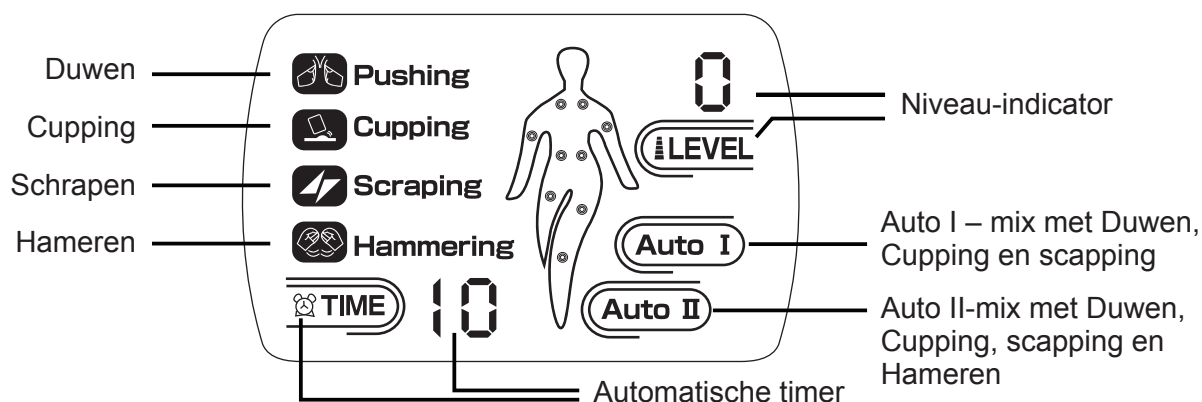

CIRCULATIE MAXX REFLOXOLOGY TENS APPARAAT

HOE TE BEDIENEN

1. Open het batterijklepje door het voorzichtig naar beneden te schuiven (die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt)
2. Plaats de 2 AAA-batterijen in het batterijcompartiment in de juiste positie.
Sluit vervolgens de batterij deur.
3. Sluit de elektrische draad aan op de uitgangsaansluiting van het apparaat.
4. Sluit de elektrische draad aan op het elektrode-gelkussentje met de drukknop.
5. Verwijder de beschermende film van de gelpad en plak de gelpad op het lichaamsgebied waar u behandeling willen hebben (vergeet niet de beschermfolie te bewaren voor het opbergen van de gelpad).
6. Druk op de AAN/HI-knop om het apparaat in te schakelen. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de OFF/LO-knop
7. Druk herhaaldelijk op de "MODE"-knop om de gewenste modus te selecteren. Er zijn 6 verschillende programma te selecteren, dit zijn Duwen, Cupping, Schrapen, Hameren, Auto-I en Auto-II. Zodra u de geschikte modus hebt geselecteerd, wijst een pijl naar de modus die u heeft uit gekozen.
8. Druk op de ON/HI- of OFF/LO-knop om de intensiteit voorzichtig te verhogen of te verlagen. Het LCD-scherm display toont het intensiteitsniveau dat u hebt geselecteerd.
9. U kunt op de tijdknop drukken om de timer in te stellen voor automatisch uitschakelen, die beschikbaar is voor 5/10/15/20/25/30 minuten

Tips:

U kunt de modus en het niveau alleen aanpassen wanneer het apparaat is ingeschakeld en is verbonden met de gelpads en als de elektrode gel pad in aanraking is met de huid

Automatische functies

Als de gelpad tijdens gebruik wordt verwijderd, wordt de intensiteit automatisch teruggezet naar "1". Als de gelpad niet teruggeplaatst wordt op de huid, dan wordt het apparaat na 30 seconden uitgeschakeld. Het apparaat heeft een auto- timer. Als u de massagemodus binnen de vooraf ingestelde minuten wijzigt, telt de timer af uit de oorspronkelijke overgebleven tijd.

Opmerking over batterijen

- Om het risico van lekkage of explosies te voorkomen, mag u de batterijen nooit opladen, verwarmen of nemen ze uit elkaar halen.
- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij om leeglopen of lekkage te voorkomen.
- Als er vloeistof uit de batterijen lekt, gooi ze dan weg. Maak het batterijcompartiment grondig schoon met een droge doek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Problemen oplossen en onderhoud – Voetmassageapparaat

Probleem	Oorzaak	Rectificatie
Apparaat gaat niet aan.	- Batterijen in de verkeerde richting geplaatst.	- Plaats batterijen in de juiste richting of controleer de batterij op volle kracht is..
	- De adapter is niet goed aangesloten op het apparaat.	- controleer of de aansluiting van de adapteraansluiting goed is aangesloten. En ook of de DC-adapter goed is aangesloten op het stopcontact.
De stroom wordt uitgeschakeld tijdens gebruik	- als u de batterijen gebruikt, dan zijn de batterijen zwak/leeg	- Plaats twee nieuwe identieke 1.5V alkalinebatterijen type AA
	- Behandelperiode van 30 minuten is voorbij en stroom wordt automatisch uitgeschakeld	- Start de behandeling opnieuw of schakel de stimulator uit.
Het is moeilijk om simulatie te voelen	- Je zool is te droog en niet vochtig genoeg	- Doe wat waterbasisgel of water op je voet om je zool te bevochtigen
	- Je voet staat niet op het voetpedaal naar behoren	- Zorg ervoor dat uw beide voeten goed op de pedalen geplaatst zijn.

Problemen oplossen en onderhoud – TENS-apparaat

Probleem	Oorzaak	Rectificatie
Geen scherm getoond	- Batterij niet geïnstalleerd	- Batterij installeren
	- Batterij verkeerd geïnstalleerd	- Controleer of de batterij goed geplaatst is
	- Batterij is leeg	- Vervang de batterij
Met display Maar Geen functie	- Geen huidcontact	- Gebruik gel op waterbasis op het geleidende gebied en plaats de pad direct op de huid
	- Unit niet correct op gelpad geklikt	- Controleer of het apparaat stevig is aangesloten op beide connectoren naar de pads
	- Intensiteitsniveau op 0	- Druk op de AAN/HI-knop om de intensiteit te verhogen
	- Microprocessor blijft hangen	- Reset het apparaat door de batterij gedurende 1 minuut te verwijderen, Batterij opnieuw plaatsen
	- Batterij is bijna leeg	- Batterij vervangen
LCD scherm is normaal maar werkt niet	- Intensiteit ingesteld op laag niveau	- Druk meerdere keren op de AAN/HI-knop om de intensiteit te verhogen
	- De pads zijn verkeerd gepositioneerd	- Verplaats pads om uw triggerpoints te vinden
	- Pad is versleten of heeft olieafzettingen	- Pads reinigen of vervangen.
	- Batterij is bijna leeg	- Batterij vervangen
Alle knoppen werken niet goed	- Microprocessor blijft hangen	- Reset het apparaat door de batterij gedurende 1 minuut te verwijderen, Plaats de batterij opnieuw.
	- Batterij is bijna leeg	- Vervang de batterij

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hygiëne

Na gebruik van het product

- Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek maar knijp de doek goed droog en reinig het voetpedaal gebied.
- Bewaar de elektrodengele pads op de transparante beschermfolie.

Opslag

Houd de hele set schoon en bewaar deze op een stofvrije en droge plaats onder de volgende voorwaarden!

Opslagtemperatuur en vochtigheid	-10°C tot 60°C, 10% tot 95% RV
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-5°C tot 50°C, 30% tot 90% RV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productnaam	Circulatie Maxx ReflexologyTM	
Model	BE739	
	Voet massager	TENS-apparaat
Stroomvoorziening	6V DC of 4×1,5V alkalinebatterijen type AA* voor de hoofdeenheid 2×1,5V alkalinebatterijen type AAA* voor de afstandsbediening	2 × 1,5 V alkalinebatterijen type: AAA*
Leverancier van Adapter	Guangdong Keerda Electrics Co. Ltd.	Nvt
Modelnr. van adapter	DZ007AHL060050V	Nvt
Adapter ingang	AC 100-240V~50-60Hz 0.1A	Nvt
Adapteruitgang	DC 6V 500mA 3.0W	Nvt
Batterijduur	>500 minuten	>900 minuten
Frequentie generatie	Ca. 10 Hz tot 55,56 Hz	Ca. 2 Hz tot 33 Hz
Energieverbruik	0,85 W	60 MW
Maximale uitgangsspanning	U <54,8V (tijdens 1 kΩ belasting)	U <112V (tijdens 1 kΩ belasting)
Maximale uitgangsstroom	I < 910 μA (tijdens 1 kΩ belasting)	I < 13,5 A (tijdens 1 kΩ belasting)
Afmetingen hoofdeenheid	338(L) x 324 (B) x 48(H) mm	100(L) x 70 (B) x 25 (H) mm
Gewicht	1263,5 gram	170 gram

*Batterijen zijn niet inbegrepen

CIRCULATION MAXX™

REFLEXOLOGY



© Bioenergiser™ Circulation Maxx Reflexology™ are trademarks of Bioenergiser (UK) Ltd. All rights reserved.

Manufactured for Bioenergiser (UK) Ltd. in the PRC

SKU: BE739



Download the manual
in different languages here
www.YelloWWeb.nl/manuals

ANOTHER GREAT PRODUCT DISTRIBUTED BY:


bioenergiser®
WELL BEING IS OUR BUSINESS

BE739 Edition : 02.07.2022