

LifeWise

Elektrische Eeltverwijderaar

Handleiding



Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Elektrische Eeltverwijderaar van LifeWise!
We waarderen dit enorm en wensen je heel veel plezier toe met je aankoop!

Mocht je vragen hebben over de Eeltverwijderaar, dan kun je altijd contact met ons opnemen via je bol.com verkoopaccount. We beantwoorden uiterlijk binnen 24 uur je vraag.

Ten slotte willen we je erop wijzen om altijd de veiligheidsvoorschriften te volgen zoals in deze gebruiksinstructie opgenomen.

Inhoud verpakking

In de verpakking van het product is aanwezig:

- 1x LifeWise Elektrische Eeltverwijderaar
- 1x Set van 60 Vervangbare Schuurpads
- 1x Netstroom Adapter
- 1x Gebruiksaanwijzing

Mocht één van de bovengenoemde onderdelen niet aanwezig zijn, beschadigd zijn of niet in een correcte staat zijn aangeleverd, neem dan direct contact met ons op zodat wij een passende oplossing kunnen aanbieden.

LifeWise Elektrische Eeltverwijderaar
Model: TL-DS01

LifeWise - Timothy E-Commerce
Eisenhowersingel 56
4587 EW Kloosterzande

Made in China - Designed in The Netherlands

Technische gegevens

Productnaam: LifeWise Elektrische Eeltverwijderaar
EAN: 8719326787169 (Zwart) / 8720844071890 (Roze)
Modelnummer: TL-DS01
Kleur: Variant Zwart / Variant Roze
Afmeting: 10,2 cm (L) x 4,5 cm (B)
Gewicht: 400 Gram
Certificaten: CE, FC, RoHS
Voltage: DC 12V 1.0A
RPM: 1200 RPM
Rotatie: 360° Graden

Voltage: DC 12V 1.0A
RPM: 1200 RPM
Rotatie: 360° Graden



Retour en garantie

De retourtermijn bedraagt 30 dagen. Na aankoop heb je 30 dagen bedenktijd en kun je het product gratis retourneren via bol.com.

Wij verstrekken op al onze producten een garantie van 2 jaar. Mocht er na 30 dagen wat aan de hand zijn met je product, dan kun je contact met ons opnemen zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Veiligheidsvoorschriften

Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat je de LifeWise Elektrische Eeltverwijderaar gebruikt. Correct gebruik voorkomt ongelukken en zorgt voor een langere levensduur van het apparaat.

Algemeen gebruik

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het verwijderen van eelt op de voeten.
- Niet gebruiken op een beschadigde, geïrriteerde of open huid.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon.

Tijdens gebruik

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een netstroomaansluiting met de juiste spanning (zoals aangegeven op het apparaat).
- Gebruik de eeltverwijderaar niet in de buurt van water of met natte handen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel of stekker beschadigd is.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

Na gebruik

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik of voordat je het apparaat schoonmaakt.
- Reinig het apparaat alleen volgens de instructies in deze handleiding.
- Bewaar het apparaat op een droge en veilige plaats, buiten bereik van kinderen.

Accessoires en vervanging

- Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen van LifeWise.
- Vervang versleten schuurpads tijdig om een veilig en hygiënisch gebruik te waarborgen.


Door deze veiligheidsinstructies op te volgen, garandeer je een optimaal en veilig gebruik van je LifeWise Elektrische Eeltverwijderaar.



LifeWise
Elektrische Eeltverwijderaar


Hoe te gebruiken?

1

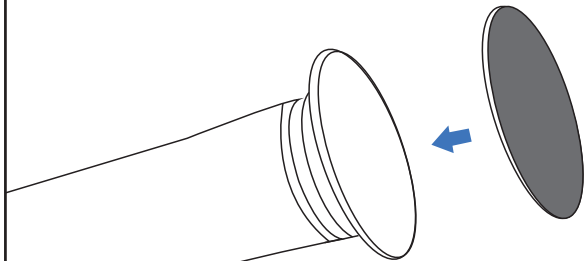


Stap 1: Plaats de schuurpad op de eeltverwijderaar. Zorg dat de schuurpad gelijkmatig bevestigd is en goed aangedrukt is.

2

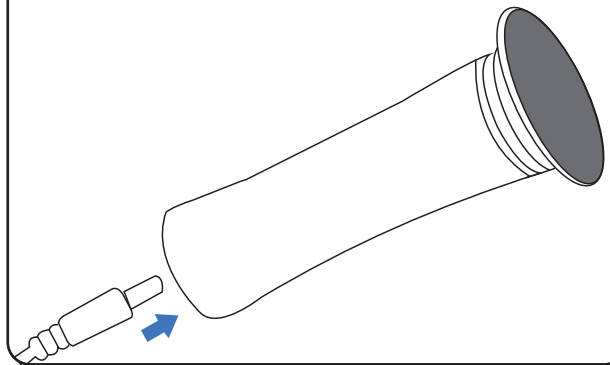


Stap 2: Verbind de kabel met de eeltverwijderaar.

3

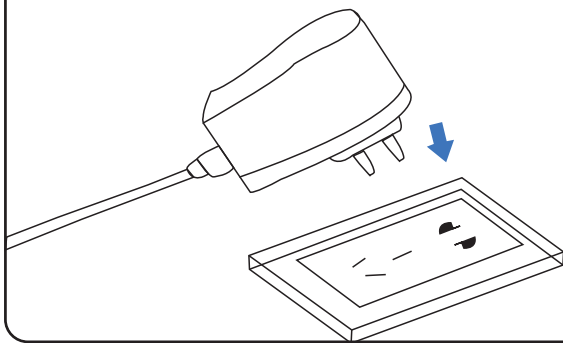

Stap 3: Plaats de adapter in het stopcontact en zet de eeltverwijderaar aan.

4

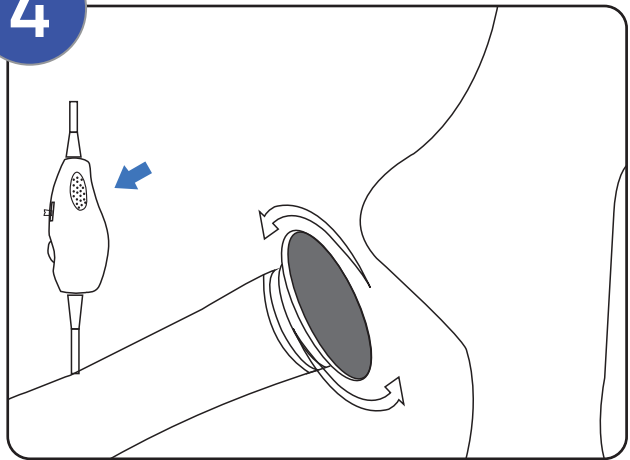

Stap 4: Begin met het verwijderen van eelt. Begin op lage snelheid als je voor het eerst werkt met het apparaat, en verhoog de snelheid indien nodig.

Plaats het roterende oppervlak tegen het eelt. Laat het apparaat het werk doen en oefen druk uit indien nodig. Beweeg over het gebied totdat het eelt verdwenen is.

Vermijd langdurig gebruik op één plek om huidirritatie te voorkomen.

Tips voor optimaal gebruik, afgestemd op jouw type eelt

Iedere voet is anders, en ook eelt komt in verschillende vormen en gradaties.

Gebruik onderstaande tips om jouw behandeling perfect af te stemmen op de soort eelt waar je last van hebt.

Hard eelt (bijvoorbeeld op hielen of bal van de voet)

Kenmerken: Verdikte, harde huid die vaak ontstaat door druk of wrijving.

Aanpak:

- Voorbehandeling: Week je voeten circa 10 minuten in warm water voor zachtere huid en beter resultaat.
- Gebruik: Start op lage tot middelhoge snelheid. Laat het apparaat soepel over het eeltgebied glijden en zet druk indien nodig. Werk met ronde bewegingen zonder te lang op één plek te blijven.
- Frequentie: 1-2 keer per week tot het eelt verdwenen is, daarna onderhoud.
- Nazorg: Breng een intensieve voetcrème aan na de behandeling.

Eeltkloven (barstjes in het eelt op de hiel)

Kenmerken: Diepe, pijnlijke scheuren in verdikte huidlagen.

Aanpak:

Voorzichtigheid geboden! Gebruik alleen bij oppervlakkige kloven; bij diepe of bloedende kloven eerst genezen voordat je behandelt.

- Voorbehandeling: Altijd eerst weken voor meer comfort.
- Gebruik: Gebruik een lage snelheid en werk voorzichtig en geleidelijk. Verwijder alleen dunne laagjes per sessie. Focus op de randen van de eeltkloof om de spanning op de huid te verminderen, maar vermijd direct schuren op de scheur zelf.
- Frequentie: 1-2 keer per week tot het eelt verdwenen is, daarna onderhoud.
- Nazorg: Breng altijd een intensieve voetcrème aan na de behandeling.

Likdoorns (eeltophopping met een harde kern, vaak pijnlijk)

Kenmerken: Kleine, ronde verdikkingen die in de huid drukken, vaak op of tussen tenen.

Aanpak:

- Voorbehandeling: Weken voor gebruik maakt de behandeling comfortabeler en effectiever, zeker bij dieper eelt.
- Gebruik gebied rondom de likdoorn: Werk in kleine, gecontroleerde bewegingen op lagere snelheid en vermijd te veel druk, zodat je de gezonde huid niet irriteert.
- Gebruik gebied boven op de likdoorn: Gebruik een nog lagere snelheid en verwijder alleen het oppervlakkige eeltlaagje op de likdoorn, niet de dieperliggende kern.
- Draairichting: Kies een draairichting die van je huid wegdraait voor meer controle.
- Frequentie: Beperk het gebruik tot 1 keer per week, zodat de huid voldoende tijd heeft om te herstellen.
- Advies: Bij twijfel of diepe likdoorns: raadpleeg een pedicure.
- Nazorg: Breng een intensieve voetcrème aan na de behandeling.

Matig eelt/ gevorderd eelt

Kenmerken: Verdikking van de huid, ruwe oppervlakken die al enige tijd gevormd zijn, gele/lichtbruine verkleuring van de huid.

Aanpak:

- Voorbehandeling: Weken voor gebruik maakt de behandeling comfortabeler en effectiever.
- Gebruik: Start op de lage snelheid en verhoog indien nodig. Werk met ronde bewegingen zonder te lang op één plek te blijven.
- Frequentie: 1-2 keer per week tot het eelt verdwenen is, daarna onderhoud.
- Nazorg: Breng eventueel een voetcrème aan na de behandeling.

Licht eelt/ beginnend eelt

Kenmerken: Dunne, ruwe plekken die zich net beginnen te vormen.

Aanpak:

- Gebruik: Snel en eenvoudig te verwijderen op gewenste snelheid en met een korte behandelingstijd.
- Onderhoudstip: Herhaal wekelijks of tweewekelijks om je voeten in topconditie te houden.

Onderhoud & preventie

Ook als je (bijna) geen zichtbaar eelt hebt, kun je de eeltverwijderaar gebruiken voor preventief onderhoud:

- Gebruik op lage snelheid om nieuwe eeltvorming tegen te gaan.
- Combineer met voetverzorgingsproducten voor langdurig zachte voeten.



LifeWise
Elektrische Eeltverwijderaar

Reiniging & onderhoud

Reiniging en Onderhoud

Een goede reiniging na elk gebruik is belangrijk voor de hygiëne, levensduur en optimale werking van je LifeWise Elektrische Eeltverwijderaar.

Belangrijke waarschuwing vóór het schoonmaken

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint met reinigen.

Dompel het apparaat nooit onder in water en spoel het niet af onder de kraan.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, alcohol of schurende materialen.

Stapsgewijs reinigen na gebruik

1. Verwijder de schuurpad van het draaiplateau:

- a. Trek de gebruikte pad voorzichtig los en gooi deze weg.
- b. Laat de pad eerst volledig afkoelen als deze tijdens gebruik warm is geworden.

2. Reinig het oppervlak van het draaiplateau:

- a. Gebruik een zachte, droge borstel of doek om eeltresten te verwijderen.
- b. Indien nodig, licht vochtig maken met een doek – zorg dat er geen vocht in het apparaat komt.

3. Reinig de behuizing van het apparaat:

- a. Neem het apparaat af met een zachte, droge of licht vochtige doek.
- b. Droog het toestel direct na het schoonmaken met een droge doek.

4. Laat alle onderdelen goed drogen voordat je het apparaat opbergt.

Onderhoudstips

- Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats.
- Controleer regelmatig of het draaiplateau schoon en vrij van resten is.
- Vervang tijdig de schuurpads voor optimale effectiviteit en hygiëne.
- Gebruik alleen originele LifeWise-onderdelen voor de beste prestaties en veiligheid.



Weggoien & recyclen

Geef het apparaat na het einde van zijn levensduur niet mee met het normale huisvuil. Lever het apparaat in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen, zoals de lokale milieustraat. Hiermee kunnen we een bijdragen leveren aan een schonere en gezondere leefomgeving voor iedereen.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud. Specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.



LifeWise
Elektrische Eeltverwijderaar